

Kit Cãnula Pain STP Plus


INDICAÇÕES

O Kit Cãnula Pain STP Plus é um conjunto de instrumentais de uso único que permite a realização de estímulo e bloqueio medicamentoso ou anestésico nos nervos periféricos de forma segura e precisa em procedimentos de coluna, ombro, quadril e joelho. Possui um recobrimento isolante nano-coating em toda extensão, deixando somente o Bisel exposto, garantindo um estímulo preciso na região desejada. Sua ponta ecogênica de alta intensificação permite uma localização precisa em procedimentos orientados por ultrassom. Agulha com marcações a cada 1 cm para que o médico se oriente quanto à profundidade da punção.


n.º ANVISA: 80356130192
Imagens meramente ilustrativas



CÂNULA PAIN STP

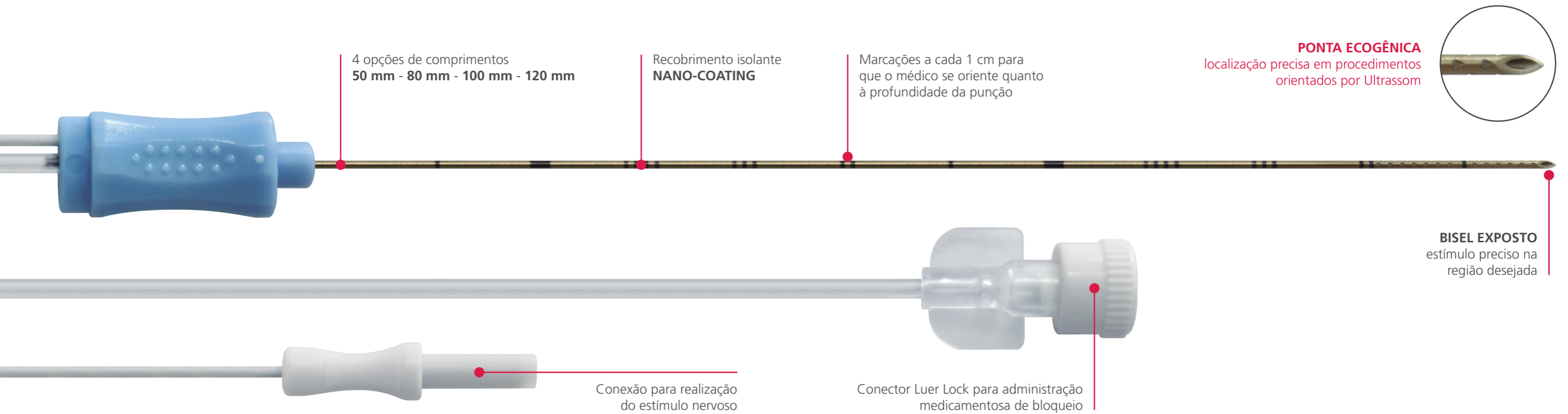

TUBO EXTENSOR

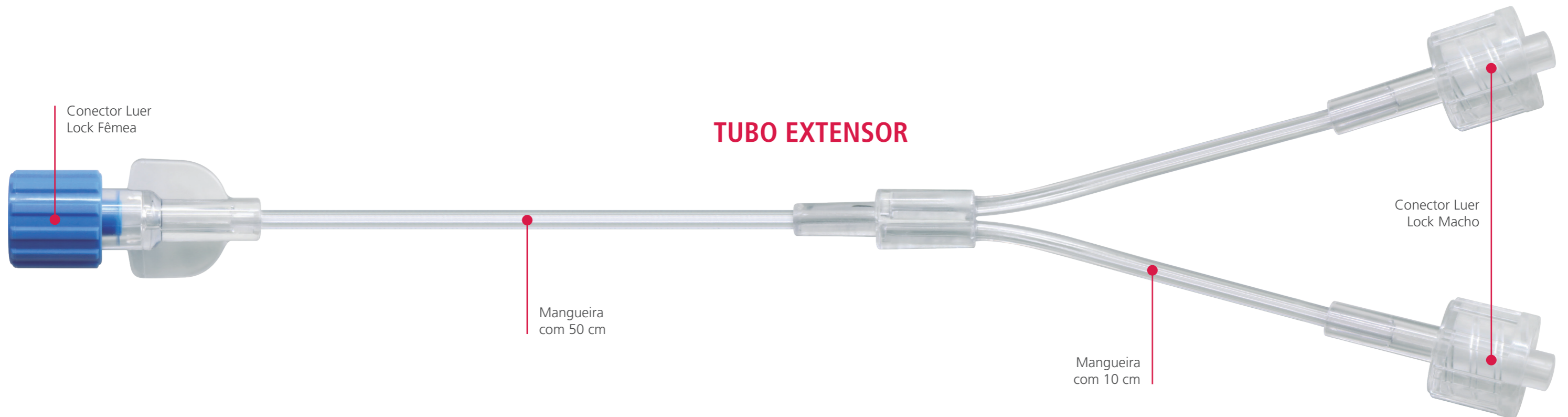

MODELOS

▪ **Kit Cânula Pain STP Plus 50 (Código: 921210100)**

Este kit apresenta 2 unidades de Cânula Pain STP 50 e 1 unidade de Tubo Extensor

▪ **Kit Cânula Pain STP Plus 80 (Código: 921210200)**

Este kit apresenta 2 unidades de Cânula Pain STP 80 e 1 unidade de Tubo Extensor

▪ **Kit Cânula Pain STP Plus 100 (Código: 921210300)**

Este kit apresenta 2 unidades de Cânula Pain STP 100 e 1 unidade de Tubo Extensor

▪ **Kit Cânula Pain STP Plus 120 (Código: 921210400)**

Este kit apresenta 2 unidades de Cânula Pain STP 120 e 1 unidade de Tubo Extensor

Cânula Pain STP



n.º ANVISA: 80356130194
Imagens meramente ilustrativas

MODELOS

▪ Cânula Pain STP 50 (Código: 921200100)

Este modelo apresenta 1 cânula com 50 mm de comprimento



▪ Cânula Pain STP 80 (Código: 921200200)

Este modelo apresenta 1 cânula com 80 mm de comprimento



▪ Cânula Pain STP 100 (Código: 921200300)

Este modelo apresenta 1 cânula com 100 mm de comprimento



▪ Cânula Pain STP 120 (Código: 921200400)

Este modelo apresenta 1 cânula com 120 mm de comprimento

