

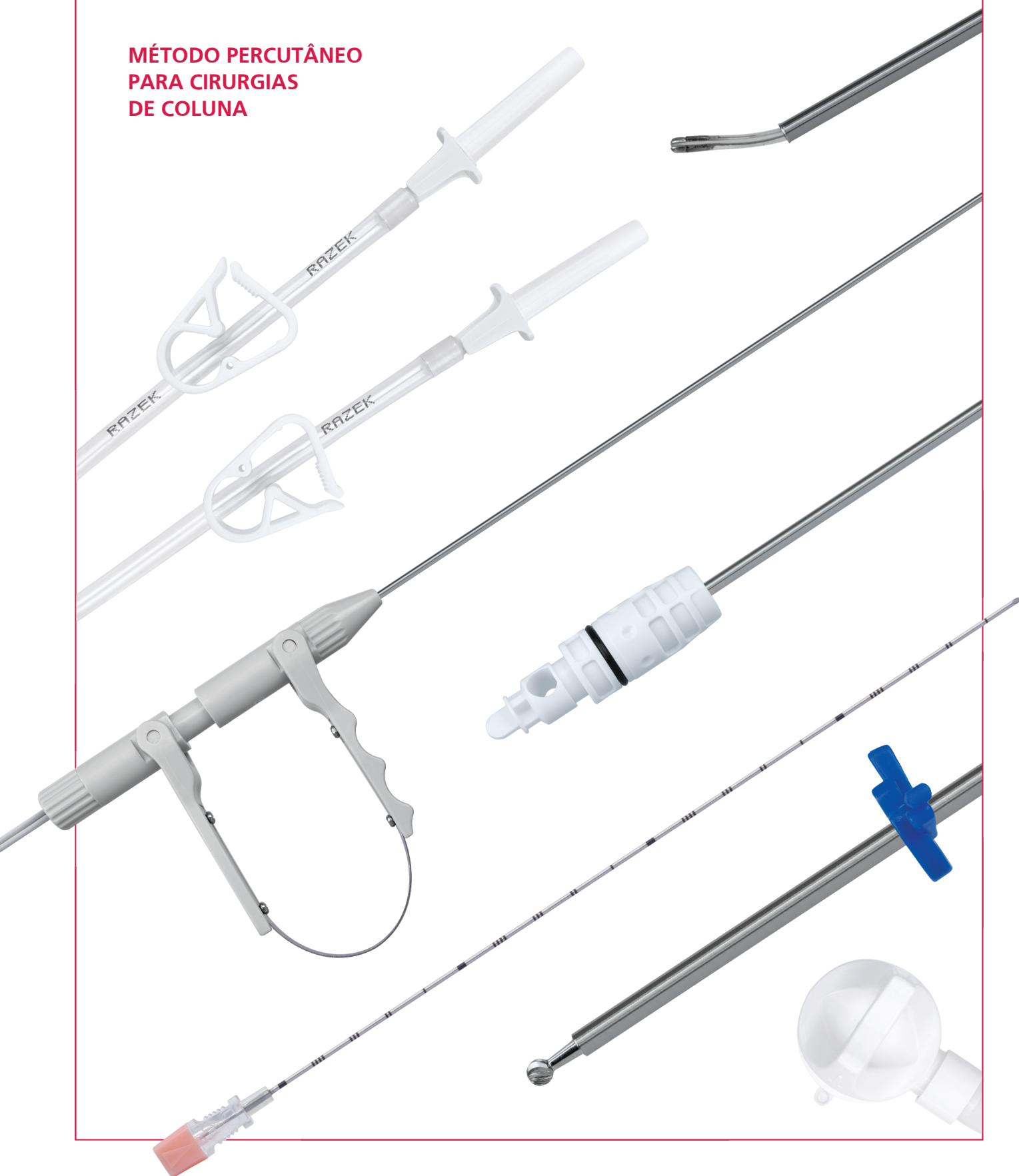
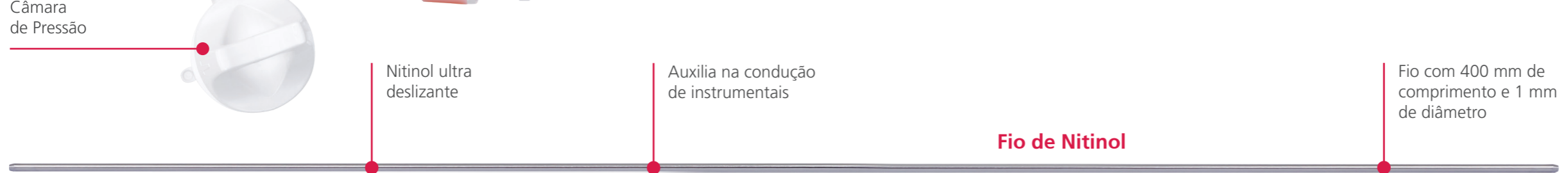


Maxcut

**MÉTODO PERCUTÂNEO
PARA CIRURGIAS
DE COLUNA**

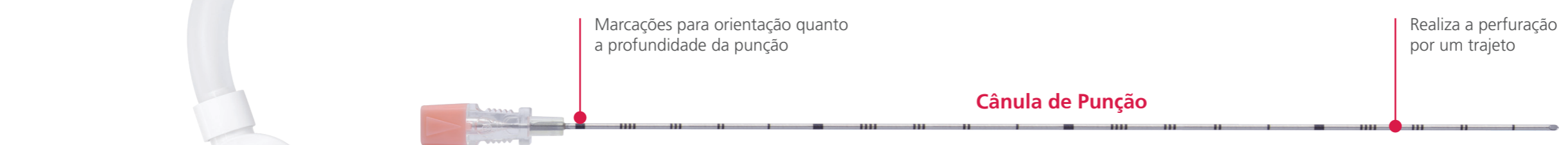

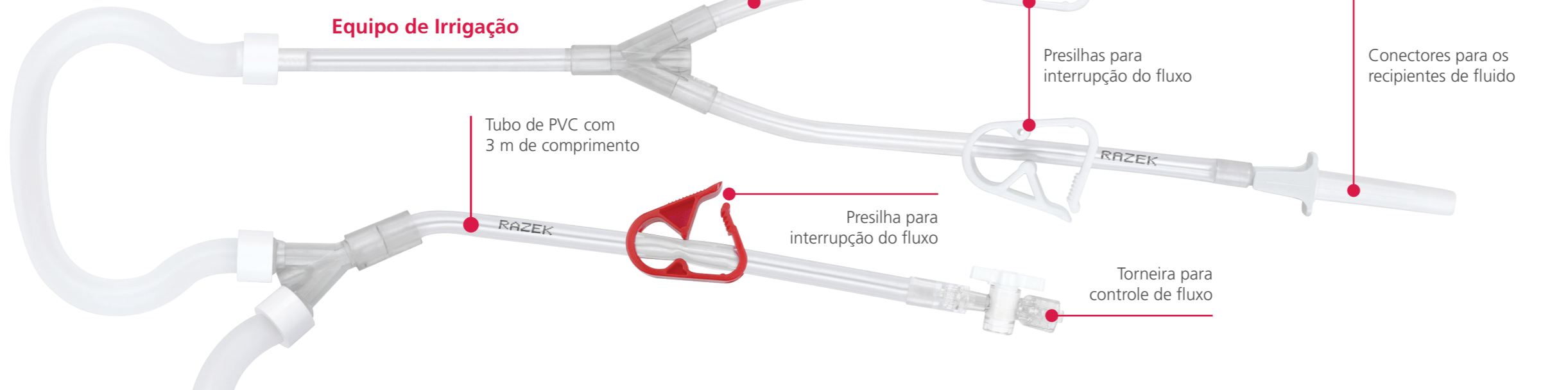

DIFERENTES TIPOS DE PONTAS ATIVAS



INDICAÇÕES

O kit Maxcut fornece todos os descartáveis necessários para realização da descompressão discal. Sua Cânula de Debridação Óssea remove estruturas, viabilizando o acesso ao disco. A Cânula de Punção realiza a perfuração inicial e através dela o Fio de Nitinol é devidamente posicionado para posteriormente conduzir os instrumentos não descartáveis, sempre por um mesmo trajeto. O Eletrodo 330 mm é responsável pela dissecação, hemostasia e fulguração em locais de difícil acesso, graças ao seu sistema de acionamento e de sua ponta flexível que proporcionam maior precisão nos movimentos. O Equipo de Irrigação promove o fluxo contínuo de fluidos, minimizando possíveis danos térmicos aos tecidos adjacentes bem como sangramentos associados.

n.º ANVISA: 80356130186
Imagens meramente ilustrativas

MODELOS

O kit Maxcut é composto pelos seguintes itens:

- 01 unidade de Eletrodo 330 mm
- 01 unidade de Equipo de Irrigação
(Perfurador - Evolution - STK - ATX)
- 01 unidade de Cânula de Punção
- 01 unidade de Fio de Nitinol
- 01 unidade de Cânula de Debridação Óssea
Tipos de pontas ativas: OBC - TBPC - TBC - DBC - RBC - AMCC - INCC
Tipos de encaixes: R - A - F - L - E - M - W - K



www.razek.com.br
+55 16 2107.2345