

FastFit Button Razek

LAÇO DE SUTURA DE COMPRIMENTO FIXO

Implante para reconstrução ligamentar, com fixação cortical e laço de sutura de comprimento fixo. Suas principais aplicações ocorrem em lesões do ligamento cruzado anterior ou posterior (LCA / LCP), bem como na reinserção de tecidos moles a estruturas ósseas. Seu laço de sutura fabricado em *loop* contínuo oferece alta resistência ao deslocamento cíclico e as cargas de tração. Devido a sua grande variedade de comprimentos de laço de sutura de comprimento fixo, possibilita um preenchimento completo de túneis curtos, comuns, por exemplo, na perfuração anatômica de LCA.

n.º ANVISA: 80356130203
Imagens meramente
ilustrativas



DIVERSOS MODELOS DE LAÇOS
DE COMPRIMENTOS FIXOS,
VARIANDO ENTRE 15 E 60 MM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Placa cortical em titânio com design característico *EasyFlip* que elimina a necessidade de sutura extra para realizar o tombo do dispositivo
- Laço de sutura fabricado em *loop* contínuo, oferecendo alta resistência ao deslocamento cíclico e as cargas de tração
- Disponível em 10 modelos de laços de comprimentos fixos, variando entre 15 e 60 mm, o que possibilita a maximização da quantidade de enxerto no túnel, uma solução ideal para acomodar menores túneis femorais que resultam de um posicionamento mais anatômico

▪ **Composição:**

- Placa cortical fabricada em liga de titânio F136
- Sutura do laço fabricada em polietileno de ultra alto peso molecular – UHMWPE **Mazforce® – MZF4**
- Sutura de passagem fabricada em poliéster

MODELOS

S15 (FLF 19-15) - Código: 500120160

Laço de sutura de comprimento fixo de 15 mm

S20 (FLF 19-20) - Código: 500120165

Laço de sutura de comprimento fixo de 20 mm

S25 (FLF 19-25) - Código: 500120170

Laço de sutura de comprimento fixo de 25 mm

S30 (FLF 19-30) - Código: 500120175

Laço de sutura de comprimento fixo de 30 mm

S35 (FLF 19-35) - Código: 500120180

Laço de sutura de comprimento fixo de 35 mm

S40 (FLF 19-40) - Código: 500120185

Laço de sutura de comprimento fixo de 40 mm

S45 (FLF 19-45) - Código: 500120190

Laço de sutura de comprimento fixo de 45 mm

S50 (FLF 19-50) - Código: 500120195


Laço de sutura de comprimento fixo de 50 mm

S55 (FLF 19-55) - Código: 500120200

Laço de sutura de comprimento fixo de 55 mm

S60 (FLF 19-60) - Código: 500120205

Laço de sutura de comprimento fixo de 60 mm

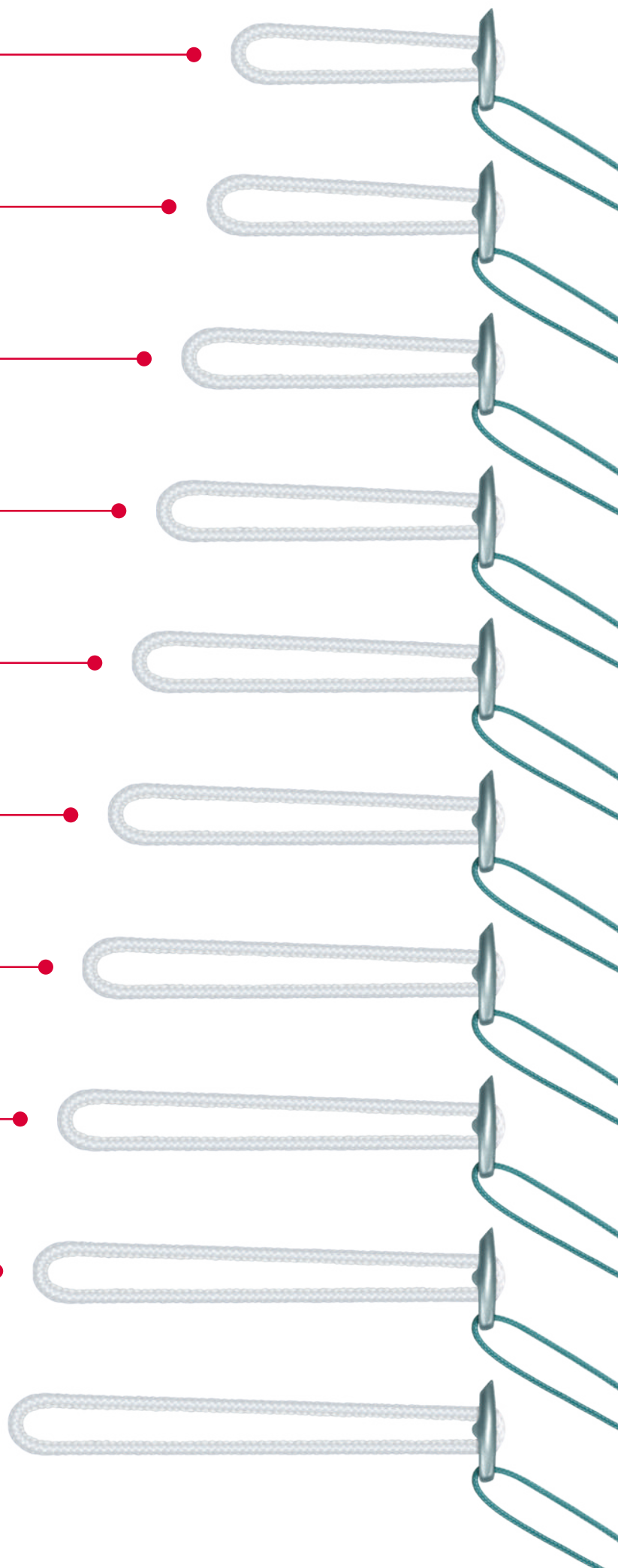



Dando valor ao que realmente importa



www.razek.com.br



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

