


PB Hemo2Way

INDICAÇÕES

O PB Hemo2Way possui a função de realizar a coagulação, dissecação, corte ou fulguração eletrocirúrgica, promovendo simultaneamente a irrigação contínua de fluídos e sucção através da Cânula de Visualização em procedimentos cirúrgicos delicados. A irrigação é realizada por gravidade, porém a vazão pode ser amplificada com o uso do exclusivo Intensificador de Fluxo, bem como controlada facilmente pelo cirurgião através do clamp, para interrupção do fluxo. Sua ponta ativa em material nobre e polida evita a aderência de tecido e proporciona a transferência de calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos adjacentes.

Sua ponta ativa que reproduz o movimento natural de pinçamento das mãos facilita a hemostasia, oferecendo segurança e precisão no ato cirúrgico. A sucção e a irrigação contínua favorecem um campo de visão limpo que resultam em pouco sangramento em regiões altamente vascularizadas. Tais características permitem a preservação das estruturas, evitando possíveis sangramentos e melhorando o pós-operatório.



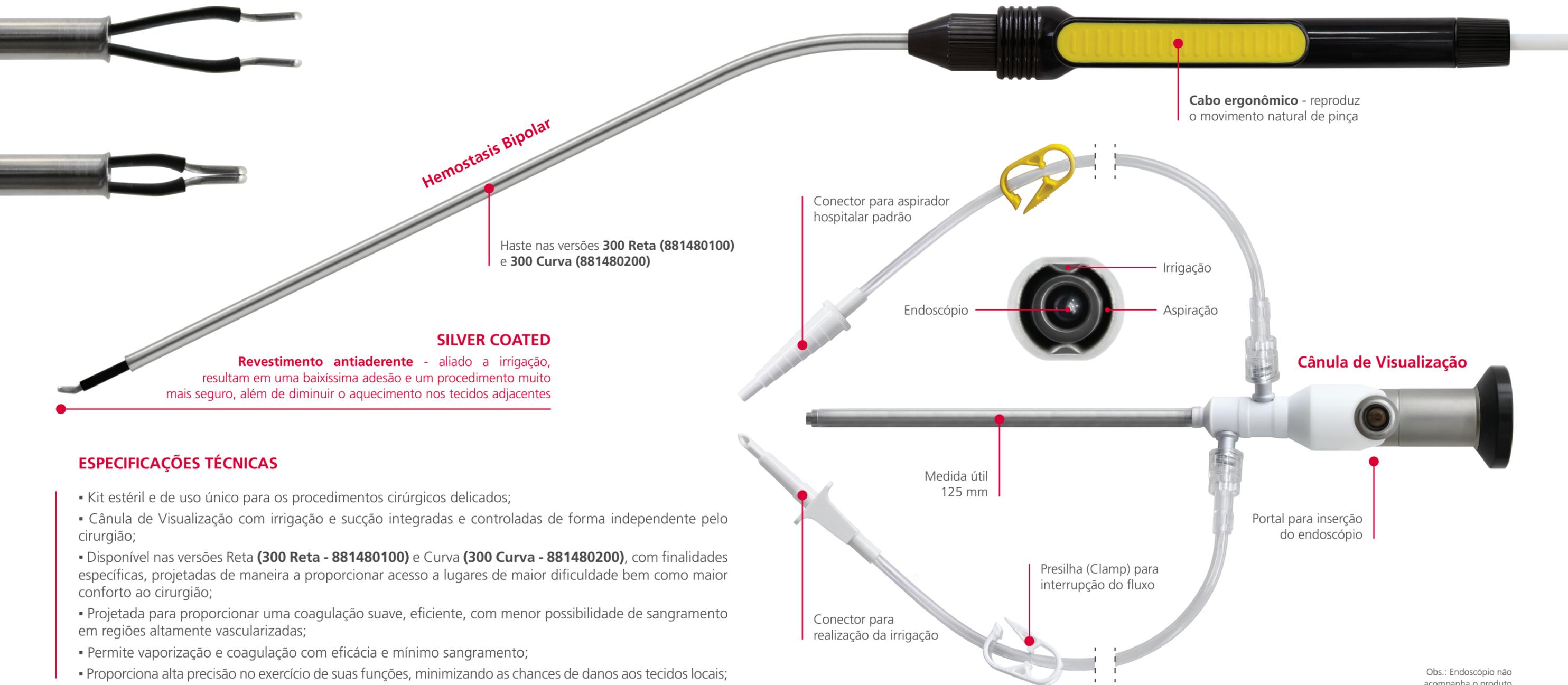

Obs.: Endoscópio não acompanha o produto



ACESSÓRIO



Intensificador de Fluxo: O acessório deve ser utilizado no recipiente de fluido para intensificar o fluxo do fluido de irrigação. Acompanham 2 unidades por produto.





www.razek.com.br
+55 16 2107.2345