



**Cânula para
Microdebridação
Mini ENTP**



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A Cântula para Microdebridação Mini ENTP possui a função de realizar a microdebridação de tecidos em procedimentos de otorrinolaringologia e bucomaxilofacial.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- **Norma/Diretiva:** RDC 185/2001 (ANVISA)
- **Classificação:** Regra 6 - Classe II

ESPECIFICAÇÕES

- **Esterilizado por:** Raio Gama
- **Validade da esterilização:** 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não utilize a Cântula para Microdebridação Mini ENTP em mau estado (torta ou quebrada), pois isso acarretará trepidação ou vibração excessiva;



Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar a Cântula para Microdebridação Mini ENTP;



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;



Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento;



A substituição da Cântula de Microdebridação Mini ENTP deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;




**NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS
O MESMO É DE USO ÚNICO;**



PROIBIDO REPROCESSAR.

CÂNULA PARA MICRODEBRIDAÇÃO MINI ENTP

A Cântula para Microdebridação Mini ENTP é composta por uma cântula de corte e sucção e uma cântula guia. A cântula de corte e sucção está localizada dentro da cântula guia.

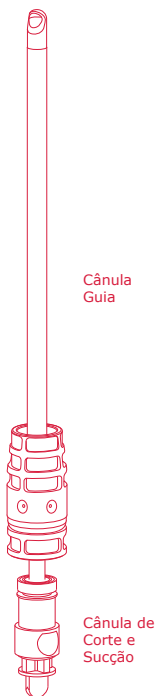


A família da Cânula para Microdebridação Mini ENTP apresenta diferentes tipos de encaixes. A seguir estão indicados os tipos de encaixes, os nomes dos equipamentos compatíveis com cada encaixe e seus respectivos números ANVISA. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a cânula necessária para cada equipamento.

▪ Encaixe R




Equipamento compatível: Shaver Mikro Macht (ANVISA n.º 80030810126) e Osteomax (ANVISA n.º 80356130150).

▪ Encaixe A

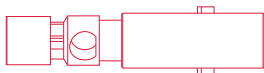

Equipamento compatível: Sistema de Lâmina APS II (ANVISA n.º 80023450074).

▪ Encaixe F

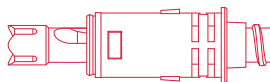


Equipamento compatível: SISTEMA CORE - Equipamento Consolidado para Sala de Operações (ANVISA n.º 80005430099).

▪ Encaixe T



Equipamento compatível: TPS - Total Performance System (ANVISA n.º 80005401173).

▪ Encaixe L

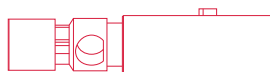


Equipamento compatível: Sistema para Artroscopia Conjunto Cirúrgico Linvatec (ANVISA n.º 10247530044).

▪ Encaixe E




Equipamento compatível: Dyonics Power Shaver (ANVISA n.º 10117830022).

▪ Encaixe P

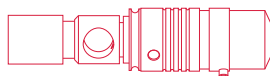


Equipamento compatível: Dyonics Power Shaver (ANVISA n.º 10117830022).

▪ Encaixe S

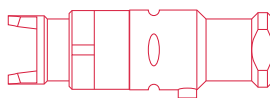


Equipamento compatível: Motor Elétrico Aesculap (ANVISA n.º 80136990492).

▪ Encaixe K

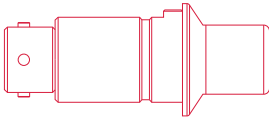


Equipamento compatível: Sistema de Motores Karl Storz (ANVISA n.º 10302860136).

▪ Encaixe W

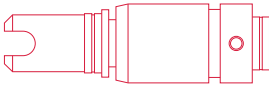

Equipamento compatível: Sistema para Controle de Potência (ANVISA n.º 10317490077).

▪ Encaixe J

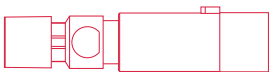

Equipamento compatível: FMS (ANVISA n.º 80145901187).

MODELOS

Os modelos da família da Cânula para Microdebridação Mini ENTP serão diferenciados pelo tipo de ponta ativa, tipo de encaixe e diâmetros interno e externo:

- Tipos de pontas ativas: MCC - MCCA
- MCCA - ACC - ACCAI - ACCAO - ACCS
- ACCSAI - ACCSAO - MCCS - MCCSAI
- MCCSAO - DCM - RB - RBA - OB - OBA
- DOA - TB - PA

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P
- S - K - W - J - B.

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8
- 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5

- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis com os diferentes tipos de ponteira (corte), suas indicações e as suas possíveis combinações.

▪ MCC

As cânulas com corte tipo MCC (Moderado Cortador de Cartilagem) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3.000 rpm.




- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8
- 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P
- S - K - W - J - B

- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ MCCA

As cânulas com corte tipo MCCA (Moderado Cortador de Cartilagem Angulada Interna) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

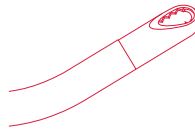

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8
- 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5


- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P
- S - K - W - J - B

- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ MCCA

As cânulas com corte tipo MCCA (Moderado Cortador de Cartilagem Angulada Externa) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

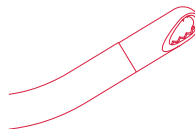

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8
- 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ ACC


As cânulas com corte tipo ACC (Agressivo Cortador Cartilagem) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3.000 rpm.



- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ ACCAI


As cânulas com corte tipo ACCAI (Agressivo Cortador Cartilagem Angulada Interna) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

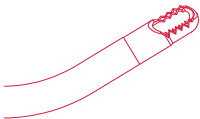

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ ACCAO

As cânulas com corte tipo ACCAO (Agressivo Cortador Cartilagem Angulada Externa) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

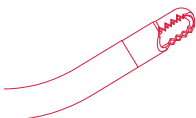

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B

- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ ACCS

As cânulas com corte tipo ACCS (Agressivo Cortador de Cartilagem Small) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso, com duas arestas cortantes. Rotação máxima: 3.000 rpm.




- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B

- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ ACCSAI

As cânulas com corte tipo ACCSAI (Agressivo Cortador de Cartilagem Small Angulada Interna) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

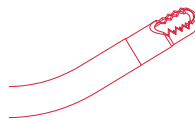

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B


- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ ACCSAO

As cânulas com corte tipo ACCSAO (Agressivo Cortador de Cartilagem Small Angulada Externa) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido

cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

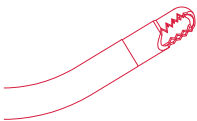

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ **MCCS**


As cânulas com corte tipo MCCS (Moderado Cortador de Cartilagem Small) devem ser utilizadas para remoções precisas de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3.000 rpm.



- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ **MCCSAI**


As cânulas com corte tipo MCCSAI (Moderado Cortador de Cartilagem Small Angulado Interno) devem ser utilizadas para remoções precisas de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

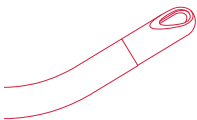

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ **MCCSAO**

As cânulas com corte tipo MCCSAO (Moderado Cortador de Cartilagem Small Angulado Externo) devem ser utilizadas para remoções precisas de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

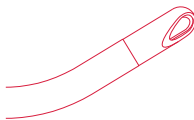

- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ **DCM**

As cânulas com corte tipo DCM (Descolador Cortador Moderado) devem ser utilizadas para deslocar e cortar o tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3.000 rpm.



- Diâmetros internos / externos: 2,2 / 2,8 - 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ **RB**


As cânulas com corte tipo RB (Broca Redonda) devem ser utilizadas para pequenas remoções em tecidos ósseos. Rotação máxima: 5.000 rpm.



- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ **RBA**

As cânulas com corte tipo RBA (Broca Redonda Angulada) devem ser utilizadas para pequenas remoções em tecidos ósseos. Rotação máxima: 1.500 rpm.

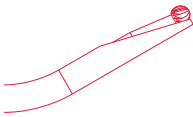

- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ OB


As cânulas com corte tipo OB (Broca Oval) devem ser utilizadas para moderadas remoções de tecido ósseo. Rotação máxima: 5.000 rpm.



- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ OBA


As cânulas com corte tipo OBA (Broca Oval Angulada Interna) devem ser utilizadas para moderadas remoções de tecido ósseo. Rotação máxima: 1.500 rpm.

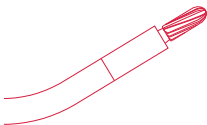

- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ DOA

As cânulas com corte tipo DOA (Debridador Oval Angulado) devem ser utilizadas para debridação. Rotação máxima: 1.500 rpm.

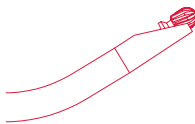

- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

▪ TB


As cânulas com corte tipo TB (Broca Afilada) devem ser utilizadas para grandes remoções de tecido ósseo. Rotação máxima: 5.000 rpm.



- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm

▪ PA

As cânulas com corte tipo PA (Polidor Angulado) devem ser utilizadas para realizar acabamento em tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1.500 rpm.

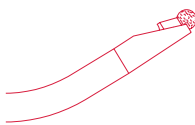

- Diâmetros internos / externos: 2,5 / 3,5 - 3,5 / 4,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B
- Comprimentos disponíveis: 80 mm - 115 mm
- Angulações disponíveis: 15° - 30° - 40°

ACESSÓRIO

Escova



A escova deve ser utilizada para remover tecidos que podem acumular no tubo da cânula interna durante o procedimento cirúrgico e acompanha os modelos com diâmetros 2,5 / 3,5 e 3,5 / 4,5 e ponta ativa MCC - MCCA I - MCCA O - ACC - ACCA I - ACCA O - ACCS - ACCSA I - ACCSA O - MCCS - MCCSA I - MCCSA O - DCM.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Insira a cânula selecionada no motor adequado, até que a mesma se encaixe completamente;



2. Ajuste a rotação adequada no equipamento.

PROCEDIMENTO PÓS-OPERATÓRIOS

1. Retire a cânula do motor.



Após o uso da Cânula para Microdebridação Mini ENTP, a mesma deverá ser descartada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o lote.



Data de validade
do produto.



Proibido reprocessar.



Produto esterilizado
através de radiação.



Fabricado por.



Manter seco.

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

▪ MCC

Código	Modelo
893910000	MCC 2,2 / 2,8 R 80
893910010	MCC 2,2 / 2,8 A 80
893910020	MCC 2,2 / 2,8 F 80
893910030	MCC 2,2 / 2,8 T 80
893910040	MCC 2,2 / 2,8 L 80
893910050	MCC 2,2 / 2,8 E 80
893910060	MCC 2,2 / 2,8 P 80
893910070	MCC 2,2 / 2,8 S 80
893910080	MCC 2,2 / 2,8 K 80
893910090	MCC 2,2 / 2,8 W 80
893910600	MCC 2,2 / 2,8 J 80
893910660	MCC 2,2 / 2,8 B 80
893910100	MCC 2,2 / 2,8 R 115
893910110	MCC 2,2 / 2,8 A 115
893910120	MCC 2,2 / 2,8 F 115
893910130	MCC 2,2 / 2,8 T 115
893910140	MCC 2,2 / 2,8 L 115
893910150	MCC 2,2 / 2,8 E 115
893910160	MCC 2,2 / 2,8 P 115
893910170	MCC 2,2 / 2,8 S 115
893910180	MCC 2,2 / 2,8 K 115
893910190	MCC 2,2 / 2,8 W 115
893910610	MCC 2,2 / 2,8 J 115
893910670	MCC 2,2 / 2,8 B 115
893910200	MCC 2,5 / 3,5 R 80
893910210	MCC 2,5 / 3,5 A 80
893910220	MCC 2,5 / 3,5 F 80
893910230	MCC 2,5 / 3,5 T 80
893910240	MCC 2,5 / 3,5 L 80
893910250	MCC 2,5 / 3,5 E 80
893910260	MCC 2,5 / 3,5 P 80
893910270	MCC 2,5 / 3,5 S 80
893910280	MCC 2,5 / 3,5 K 80
893910290	MCC 2,5 / 3,5 W 80
893910620	MCC 2,5 / 3,5 J 80
893910680	MCC 2,5 / 3,5 B 80

893910300	MCC 2,5 / 3,5 R 115
893910310	MCC 2,5 / 3,5 A 115
893910320	MCC 2,5 / 3,5 F 115
893910330	MCC 2,5 / 3,5 T 115
893910340	MCC 2,5 / 3,5 L 115
893910350	MCC 2,5 / 3,5 E 115
893910360	MCC 2,5 / 3,5 P 115
893910370	MCC 2,5 / 3,5 S 115
893910380	MCC 2,5 / 3,5 K 115
893910390	MCC 2,5 / 3,5 W 115
893910630	MCC 2,5 / 3,5 J 115
893910690	MCC 2,5 / 3,5 B 115
893910400	MCC 3,5 / 4,5 R 80
893910410	MCC 3,5 / 4,5 A 80
893910420	MCC 3,5 / 4,5 F 80
893910430	MCC 3,5 / 4,5 T 80
893910440	MCC 3,5 / 4,5 L 80
893910450	MCC 3,5 / 4,5 E 80
893910460	MCC 3,5 / 4,5 P 80
893910470	MCC 3,5 / 4,5 S 80
893910480	MCC 3,5 / 4,5 K 80
893910490	MCC 3,5 / 4,5 W 80
893910640	MCC 3,5 / 4,5 J 80
893910700	MCC 3,5 / 4,5 B 80
893910500	MCC 3,5 / 4,5 R 115
893910510	MCC 3,5 / 4,5 A 115
893910520	MCC 3,5 / 4,5 F 115
893910530	MCC 3,5 / 4,5 T 115
893910540	MCC 3,5 / 4,5 L 115
893910550	MCC 3,5 / 4,5 E 115
893910560	MCC 3,5 / 4,5 P 115
893910570	MCC 3,5 / 4,5 S 115
893910580	MCC 3,5 / 4,5 K 115
893910590	MCC 3,5 / 4,5 W 115
893910650	MCC 3,5 / 4,5 J 115
893910710	MCC 3,5 / 4,5 B 115

▪ MCCAÍ

Código	Modelo
893920000	MCCAÍ 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
893920010	MCCAÍ 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
893920020	MCCAÍ 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
893920030	MCCAÍ 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
893920040	MCCAÍ 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
893920050	MCCAÍ 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
893920060	MCCAÍ 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
893920070	MCCAÍ 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
893920080	MCCAÍ 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
893920090	MCCAÍ 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
893921210	MCCAÍ 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
893921990	MCCAÍ 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
893920100	MCCAÍ 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
893920110	MCCAÍ 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
893920120	MCCAÍ 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
893920130	MCCAÍ 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
893920140	MCCAÍ 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
893920150	MCCAÍ 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
893920160	MCCAÍ 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
893920170	MCCAÍ 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
893920180	MCCAÍ 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
893920190	MCCAÍ 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
893921220	MCCAÍ 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
893922000	MCCAÍ 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
893920200	MCCAÍ 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
893920210	MCCAÍ 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
893920220	MCCAÍ 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
893920230	MCCAÍ 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
893920240	MCCAÍ 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
893920250	MCCAÍ 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
893920260	MCCAÍ 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
893920270	MCCAÍ 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
893920280	MCCAÍ 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
893920290	MCCAÍ 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
893921230	MCCAÍ 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
893922010	MCCAÍ 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
893920300	MCCAÍ 2,5 / 3,5 R 115 / 15°

893920310	MCCAÍ 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
893920320	MCCAÍ 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
893920330	MCCAÍ 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
893920340	MCCAÍ 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
893920350	MCCAÍ 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
893920360	MCCAÍ 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
893920370	MCCAÍ 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
893920380	MCCAÍ 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
893920390	MCCAÍ 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
893921240	MCCAÍ 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
893922020	MCCAÍ 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
893920400	MCCAÍ 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
893920410	MCCAÍ 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
893920420	MCCAÍ 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
893920430	MCCAÍ 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
893920440	MCCAÍ 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
893920450	MCCAÍ 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
893920460	MCCAÍ 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
893920470	MCCAÍ 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
893920480	MCCAÍ 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
893920490	MCCAÍ 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
893921250	MCCAÍ 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
893922030	MCCAÍ 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
893920500	MCCAÍ 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
893920510	MCCAÍ 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
893920520	MCCAÍ 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
893920530	MCCAÍ 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
893920540	MCCAÍ 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
893920550	MCCAÍ 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
893920560	MCCAÍ 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
893920570	MCCAÍ 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
893920580	MCCAÍ 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
893920590	MCCAÍ 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
893921260	MCCAÍ 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
893922040	MCCAÍ 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
893920600	MCCAÍ 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
893920610	MCCAÍ 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
893920620	MCCAÍ 2,2 / 2,8 F 80 / 30°

893920630	MCCAI 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
893920640	MCCAI 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
893920650	MCCAI 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
893920660	MCCAI 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
893920670	MCCAI 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
893920680	MCCAI 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
893920690	MCCAI 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
893921270	MCCAI 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
893922050	MCCAI 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
893920700	MCCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
893920710	MCCAI 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
893920720	MCCAI 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
893920730	MCCAI 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
893920740	MCCAI 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
893920750	MCCAI 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
893920760	MCCAI 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
893920770	MCCAI 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
893920780	MCCAI 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
893920790	MCCAI 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
893921280	MCCAI 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
893922060	MCCAI 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
893920800	MCCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
893920810	MCCAI 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
893920820	MCCAI 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
893920830	MCCAI 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
893920840	MCCAI 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
893920850	MCCAI 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
893920860	MCCAI 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
893920870	MCCAI 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
893920880	MCCAI 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
893920890	MCCAI 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
893921290	MCCAI 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
893922070	MCCAI 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
893920900	MCCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
893920910	MCCAI 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
893920920	MCCAI 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
893920930	MCCAI 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
893920940	MCCAI 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
893920950	MCCAI 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
893920960	MCCAI 2,5 / 3,5 P 115 / 30°

893920970	MCCAI 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
893920980	MCCAI 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
893920990	MCCAI 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
893921300	MCCAI 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
893922080	MCCAI 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
893921010	MCCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
893921020	MCCAI 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
893921030	MCCAI 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
893921040	MCCAI 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
893921050	MCCAI 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
893921060	MCCAI 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
893921070	MCCAI 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
893921080	MCCAI 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
893921090	MCCAI 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
893921100	MCCAI 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
893921310	MCCAI 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
893922090	MCCAI 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
893921110	MCCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
893921120	MCCAI 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
893921130	MCCAI 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
893921140	MCCAI 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
893921150	MCCAI 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
893921160	MCCAI 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
893921170	MCCAI 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
893921180	MCCAI 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
893921190	MCCAI 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
893921200	MCCAI 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
893921320	MCCAI 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
893922100	MCCAI 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
893921330	MCCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
893921340	MCCAI 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
893921350	MCCAI 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
893921360	MCCAI 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
893921370	MCCAI 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
893921380	MCCAI 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
893921390	MCCAI 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
893921400	MCCAI 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
893921410	MCCAI 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
893921420	MCCAI 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
893921430	MCCAI 2,2 / 2,8 J 80 / 40°

893922110	MCCAI 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
893921440	MCCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
893921450	MCCAI 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
893921460	MCCAI 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
893921470	MCCAI 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
893921480	MCCAI 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
893921490	MCCAI 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
893921500	MCCAI 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
893921510	MCCAI 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
893921520	MCCAI 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
893921530	MCCAI 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
893921540	MCCAI 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
893922120	MCCAI 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
893921550	MCCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
893921560	MCCAI 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
893921570	MCCAI 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
893921580	MCCAI 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
893921590	MCCAI 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
893921600	MCCAI 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
893921610	MCCAI 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
893921620	MCCAI 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
893921630	MCCAI 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
893921640	MCCAI 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
893921650	MCCAI 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
893922130	MCCAI 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
893921660	MCCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
893921670	MCCAI 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
893921680	MCCAI 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
893921690	MCCAI 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
893921700	MCCAI 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
893921710	MCCAI 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
893921720	MCCAI 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
893921730	MCCAI 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
893921740	MCCAI 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
893921750	MCCAI 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
893921760	MCCAI 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
893922140	MCCAI 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
893921770	MCCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
893921780	MCCAI 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
893921790	MCCAI 3,5 / 4,5 F 80 / 40°

893921800	MCCAI 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
893921810	MCCAI 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
893921820	MCCAI 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
893921830	MCCAI 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
893921840	MCCAI 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
893921850	MCCAI 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
893921860	MCCAI 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
893921870	MCCAI 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
893922150	MCCAI 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
893921880	MCCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
893921890	MCCAI 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
893921900	MCCAI 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
893921910	MCCAI 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
893921920	MCCAI 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
893921930	MCCAI 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
893921940	MCCAI 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
893921950	MCCAI 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
893921960	MCCAI 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
893921970	MCCAI 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
893921980	MCCAI 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
893922160	MCCAI 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ MCCA0

Código	Modelo
893930000	MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
893930010	MCCA0 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
893930020	MCCA0 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
893930030	MCCA0 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
893930040	MCCA0 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
893930050	MCCA0 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
893930060	MCCA0 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
893930070	MCCA0 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
893930080	MCCA0 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
893930090	MCCA0 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
893931210	MCCA0 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
893931990	MCCA0 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
893930100	MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
893930110	MCCA0 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
893930120	MCCA0 2,2 / 2,8 F 115 / 15°

893930130	MCCAO 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
893930140	MCCAO 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
893930150	MCCAO 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
893930160	MCCAO 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
893930170	MCCAO 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
893930180	MCCAO 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
893930190	MCCAO 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
893931220	MCCAO 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
893932000	MCCAO 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
893930200	MCCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
893930210	MCCAO 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
893930220	MCCAO 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
893930230	MCCAO 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
893930240	MCCAO 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
893930250	MCCAO 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
893930260	MCCAO 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
893930270	MCCAO 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
893930280	MCCAO 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
893930290	MCCAO 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
893931230	MCCAO 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
893932010	MCCAO 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
893930300	MCCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
893930310	MCCAO 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
893930320	MCCAO 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
893930330	MCCAO 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
893930340	MCCAO 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
893930350	MCCAO 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
893930360	MCCAO 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
893930370	MCCAO 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
893930380	MCCAO 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
893930390	MCCAO 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
893931240	MCCAO 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
893932020	MCCAO 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
893930400	MCCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
893930410	MCCAO 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
893930420	MCCAO 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
893930430	MCCAO 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
893930440	MCCAO 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
893930450	MCCAO 3,5 / 4,5 E 80 / 15°

893930460	MCCAO 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
893930470	MCCAO 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
893930480	MCCAO 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
893930490	MCCAO 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
893931250	MCCAO 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
893932030	MCCAO 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
893930500	MCCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
893930510	MCCAO 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
893930520	MCCAO 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
893930530	MCCAO 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
893930540	MCCAO 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
893930550	MCCAO 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
893930560	MCCAO 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
893930570	MCCAO 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
893930580	MCCAO 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
893930590	MCCAO 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
893931260	MCCAO 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
893932040	MCCAO 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
893930600	MCCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
893930610	MCCAO 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
893930620	MCCAO 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
893930630	MCCAO 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
893930640	MCCAO 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
893930650	MCCAO 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
893930660	MCCAO 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
893930670	MCCAO 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
893930680	MCCAO 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
893930690	MCCAO 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
893931270	MCCAO 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
893932050	MCCAO 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
893930700	MCCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
893930710	MCCAO 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
893930720	MCCAO 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
893930730	MCCAO 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
893930740	MCCAO 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
893930750	MCCAO 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
893930760	MCCAO 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
893930770	MCCAO 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
893930780	MCCAO 2,2 / 2,8 K 115 / 30°

893930790	MCCAO 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
893931280	MCCAO 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
893932060	MCCAO 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
893930800	MCCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
893930810	MCCAO 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
893930820	MCCAO 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
893930830	MCCAO 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
893930840	MCCAO 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
893930850	MCCAO 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
893930860	MCCAO 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
893930870	MCCAO 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
893930880	MCCAO 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
893930890	MCCAO 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
893931290	MCCAO 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
893932070	MCCAO 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
893930900	MCCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
893930910	MCCAO 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
893930920	MCCAO 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
893930930	MCCAO 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
893930940	MCCAO 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
893930950	MCCAO 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
893930960	MCCAO 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
893930970	MCCAO 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
893930980	MCCAO 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
893930990	MCCAO 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
893931300	MCCAO 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
893932080	MCCAO 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
893931010	MCCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
893931020	MCCAO 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
893931030	MCCAO 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
893931040	MCCAO 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
893931050	MCCAO 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
893931060	MCCAO 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
893931070	MCCAO 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
893931080	MCCAO 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
893931090	MCCAO 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
893931100	MCCAO 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
893931310	MCCAO 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
893932090	MCCAO 3,5 / 4,5 B 80 / 30°

893931110	MCCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
893931120	MCCAO 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
893931130	MCCAO 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
893931140	MCCAO 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
893931150	MCCAO 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
893931160	MCCAO 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
893931170	MCCAO 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
893931180	MCCAO 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
893931190	MCCAO 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
893931200	MCCAO 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
893931320	MCCAO 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
893932100	MCCAO 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
893931330	MCCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
893931340	MCCAO 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
893931350	MCCAO 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
893931360	MCCAO 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
893931370	MCCAO 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
893931380	MCCAO 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
893931390	MCCAO 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
893931400	MCCAO 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
893931410	MCCAO 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
893931420	MCCAO 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
893931430	MCCAO 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
893932110	MCCAO 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
893931440	MCCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
893931450	MCCAO 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
893931460	MCCAO 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
893931470	MCCAO 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
893931480	MCCAO 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
893931490	MCCAO 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
893931500	MCCAO 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
893931510	MCCAO 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
893931520	MCCAO 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
893931530	MCCAO 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
893931540	MCCAO 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
893932120	MCCAO 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
893931550	MCCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
893931560	MCCAO 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
893931570	MCCAO 2,5 / 3,5 F 80 / 40°

893931580	MCCAO 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
893931590	MCCAO 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
893931600	MCCAO 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
893931610	MCCAO 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
893931620	MCCAO 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
893931630	MCCAO 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
893931640	MCCAO 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
893931650	MCCAO 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
893932130	MCCAO 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
893931660	MCCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
893931670	MCCAO 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
893931680	MCCAO 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
893931690	MCCAO 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
893931700	MCCAO 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
893931710	MCCAO 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
893931720	MCCAO 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
893931730	MCCAO 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
893931740	MCCAO 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
893931750	MCCAO 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
893931760	MCCAO 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
893932140	MCCAO 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
893931770	MCCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
893931780	MCCAO 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
893931790	MCCAO 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
893931800	MCCAO 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
893931810	MCCAO 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
893931820	MCCAO 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
893931830	MCCAO 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
893931840	MCCAO 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
893931850	MCCAO 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
893931860	MCCAO 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
893931870	MCCAO 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
893932150	MCCAO 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
893931880	MCCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
893931890	MCCAO 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
893931900	MCCAO 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
893931910	MCCAO 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
893931920	MCCAO 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
893931930	MCCAO 3,5 / 4,5 E 115 / 40°

893931940	MCCAO 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
893931950	MCCAO 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
893931960	MCCAO 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
893931970	MCCAO 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
893931980	MCCAO 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
893932160	MCCAO 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

■ ACC

Código	Modelo
893940000	ACC 2,2 / 2,8 R 80
893940010	ACC 2,2 / 2,8 A 80
893940020	ACC 2,2 / 2,8 F 80
893940030	ACC 2,2 / 2,8 T 80
893940040	ACC 2,2 / 2,8 L 80
893940050	ACC 2,2 / 2,8 E 80
893940060	ACC 2,2 / 2,8 P 80
893940070	ACC 2,2 / 2,8 S 80
893940080	ACC 2,2 / 2,8 K 80
893940090	ACC 2,2 / 2,8 W 80
893940600	ACC 2,2 / 2,8 J 80
893940660	ACC 2,2 / 2,8 B 80
893940100	ACC 2,2 / 2,8 R 115
893940110	ACC 2,2 / 2,8 A 115
893940120	ACC 2,2 / 2,8 F 115
893940130	ACC 2,2 / 2,8 T 115
893940140	ACC 2,2 / 2,8 L 115
893940150	ACC 2,2 / 2,8 E 115
893940160	ACC 2,2 / 2,8 P 115
893940170	ACC 2,2 / 2,8 S 115
893940180	ACC 2,2 / 2,8 K 115
893940190	ACC 2,2 / 2,8 W 115
893940610	ACC 2,2 / 2,8 J 115
893940670	ACC 2,2 / 2,8 B 115
893940200	ACC 2,5 / 3,5 R 80
893940210	ACC 2,5 / 3,5 A 80
893940220	ACC 2,5 / 3,5 F 80
893940230	ACC 2,5 / 3,5 T 80
893940240	ACC 2,5 / 3,5 L 80
893940250	ACC 2,5 / 3,5 E 80

893940260	ACC 2,5 / 3,5 P 80
893940270	ACC 2,5 / 3,5 S 80
893940280	ACC 2,5 / 3,5 K 80
893940290	ACC 2,5 / 3,5 W 80
893940620	ACC 2,5 / 3,5 J 80
893940680	ACC 2,5 / 3,5 B 80
893940300	ACC 2,5 / 3,5 R 115
893940310	ACC 2,5 / 3,5 A 115
893940320	ACC 2,5 / 3,5 F 115
893940330	ACC 2,5 / 3,5 T 115
893940340	ACC 2,5 / 3,5 L 115
893940350	ACC 2,5 / 3,5 E 115
893940360	ACC 2,5 / 3,5 P 115
893940370	ACC 2,5 / 3,5 S 115
893940380	ACC 2,5 / 3,5 K 115
893940390	ACC 2,5 / 3,5 W 115
893940630	ACC 2,5 / 3,5 J 115
893940690	ACC 2,5 / 3,5 B 115
893940400	ACC 3,5 / 4,5 R 80
893940410	ACC 3,5 / 4,5 A 80
893940420	ACC 3,5 / 4,5 F 80
893940430	ACC 3,5 / 4,5 T 80
893940440	ACC 3,5 / 4,5 L 80
893940450	ACC 3,5 / 4,5 E 80
893940460	ACC 3,5 / 4,5 P 80
893940470	ACC 3,5 / 4,5 S 80
893940480	ACC 3,5 / 4,5 K 80
893940490	ACC 3,5 / 4,5 W 80
893940640	ACC 3,5 / 4,5 J 80
893940700	ACC 3,5 / 4,5 B 80
893940500	ACC 3,5 / 4,5 R 115
893940510	ACC 3,5 / 4,5 A 115
893940520	ACC 3,5 / 4,5 F 115
893940530	ACC 3,5 / 4,5 T 115
893940540	ACC 3,5 / 4,5 L 115
893940550	ACC 3,5 / 4,5 E 115
893940560	ACC 3,5 / 4,5 P 115
893940570	ACC 3,5 / 4,5 S 115
893940580	ACC 3,5 / 4,5 K 115

893940590	ACC 3,5 / 4,5 W 115
893940650	ACC 3,5 / 4,5 J 115
893940710	ACC 3,5 / 4,5 B 115

▪ ACCAI

Código	Modelo
893950000	ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
893950010	ACCAI 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
893950020	ACCAI 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
893950030	ACCAI 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
893950040	ACCAI 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
893950050	ACCAI 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
893950060	ACCAI 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
893950070	ACCAI 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
893950080	ACCAI 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
893950090	ACCAI 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
893951210	ACCAI 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
893951990	ACCAI 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
893950100	ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
893950110	ACCAI 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
893950120	ACCAI 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
893950130	ACCAI 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
893950140	ACCAI 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
893950150	ACCAI 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
893950160	ACCAI 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
893950170	ACCAI 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
893950180	ACCAI 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
893950190	ACCAI 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
893951220	ACCAI 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
893952000	ACCAI 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
893950200	ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
893950210	ACCAI 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
893950220	ACCAI 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
893950230	ACCAI 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
893950240	ACCAI 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
893950250	ACCAI 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
893950260	ACCAI 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
893950270	ACCAI 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
893950280	ACCAI 2,5 / 3,5 K 80 / 15°

893950290	ACCAI 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
893951230	ACCAI 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
893952010	ACCAI 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
893950300	ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
893950310	ACCAI 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
893950320	ACCAI 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
893950330	ACCAI 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
893950340	ACCAI 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
893950350	ACCAI 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
893950360	ACCAI 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
893950370	ACCAI 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
893950380	ACCAI 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
893950390	ACCAI 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
893951240	ACCAI 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
893952020	ACCAI 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
893950400	ACCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
893950410	ACCAI 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
893950420	ACCAI 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
893950430	ACCAI 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
893950440	ACCAI 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
893950450	ACCAI 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
893950460	ACCAI 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
893950470	ACCAI 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
893950480	ACCAI 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
893950490	ACCAI 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
893951250	ACCAI 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
893952030	ACCAI 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
893950500	ACCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
893950510	ACCAI 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
893950520	ACCAI 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
893950530	ACCAI 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
893950540	ACCAI 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
893950550	ACCAI 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
893950560	ACCAI 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
893950570	ACCAI 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
893950580	ACCAI 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
893950590	ACCAI 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
893951260	ACCAI 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
893952040	ACCAI 3,5 / 4,5 B 115 / 15°

893950600	ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
893950610	ACCAI 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
893950620	ACCAI 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
893950630	ACCAI 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
893950640	ACCAI 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
893950650	ACCAI 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
893950660	ACCAI 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
893950670	ACCAI 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
893950680	ACCAI 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
893950690	ACCAI 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
893951270	ACCAI 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
893952050	ACCAI 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
893950700	ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
893950710	ACCAI 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
893950720	ACCAI 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
893950730	ACCAI 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
893950740	ACCAI 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
893950750	ACCAI 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
893950760	ACCAI 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
893950770	ACCAI 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
893950780	ACCAI 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
893950790	ACCAI 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
893951280	ACCAI 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
893952060	ACCAI 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
893950800	ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
893950810	ACCAI 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
893950820	ACCAI 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
893950830	ACCAI 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
893950840	ACCAI 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
893950850	ACCAI 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
893950860	ACCAI 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
893950870	ACCAI 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
893950880	ACCAI 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
893950890	ACCAI 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
893951290	ACCAI 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
893952070	ACCAI 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
893950900	ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
893950910	ACCAI 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
893950920	ACCAI 2,5 / 3,5 F 115 / 30°

893950930	ACCAI 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
893950940	ACCAI 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
893950950	ACCAI 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
893950960	ACCAI 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
893950970	ACCAI 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
893950980	ACCAI 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
893950990	ACCAI 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
893951300	ACCAI 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
893952080	ACCAI 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
893951010	ACCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
893951020	ACCAI 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
893951030	ACCAI 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
893951040	ACCAI 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
893951050	ACCAI 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
893951060	ACCAI 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
893951070	ACCAI 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
893951080	ACCAI 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
893951090	ACCAI 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
893951100	ACCAI 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
893951310	ACCAI 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
893952090	ACCAI 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
893951110	ACCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
893951120	ACCAI 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
893951130	ACCAI 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
893951140	ACCAI 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
893951150	ACCAI 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
893951160	ACCAI 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
893951170	ACCAI 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
893951180	ACCAI 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
893951190	ACCAI 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
893951200	ACCAI 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
893951320	ACCAI 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
893952100	ACCAI 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
893951330	ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
893951340	ACCAI 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
893951350	ACCAI 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
893951360	ACCAI 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
893951370	ACCAI 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
893951380	ACCAI 2,2 / 2,8 E 80 / 40°

893951390	ACCAI 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
893951400	ACCAI 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
893951410	ACCAI 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
893951420	ACCAI 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
893951430	ACCAI 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
893952110	ACCAI 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
893951440	ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
893951450	ACCAI 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
893951460	ACCAI 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
893951470	ACCAI 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
893951480	ACCAI 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
893951490	ACCAI 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
893951500	ACCAI 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
893951510	ACCAI 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
893951520	ACCAI 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
893951530	ACCAI 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
893951540	ACCAI 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
893952120	ACCAI 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
893951550	ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
893951560	ACCAI 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
893951570	ACCAI 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
893951580	ACCAI 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
893951590	ACCAI 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
893951600	ACCAI 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
893951610	ACCAI 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
893951620	ACCAI 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
893951630	ACCAI 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
893951640	ACCAI 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
893951650	ACCAI 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
893952130	ACCAI 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
893951660	ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
893951670	ACCAI 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
893951680	ACCAI 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
893951690	ACCAI 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
893951700	ACCAI 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
893951710	ACCAI 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
893951720	ACCAI 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
893951730	ACCAI 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
893951740	ACCAI 2,5 / 3,5 K 115 / 40°

893951750	ACCAI 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
893951760	ACCAI 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
893952140	ACCAI 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
893951770	ACCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
893951780	ACCAI 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
893951790	ACCAI 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
893951800	ACCAI 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
893951810	ACCAI 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
893951820	ACCAI 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
893951830	ACCAI 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
893951840	ACCAI 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
893951850	ACCAI 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
893951860	ACCAI 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
893951870	ACCAI 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
893952150	ACCAI 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
893951880	ACCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
893951890	ACCAI 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
893951900	ACCAI 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
893951910	ACCAI 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
893951920	ACCAI 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
893951930	ACCAI 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
893951940	ACCAI 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
893951950	ACCAI 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
893951960	ACCAI 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
893951970	ACCAI 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
893951980	ACCAI 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
893952160	ACCAI 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ ACCAO

Código	Modelo
893960000	ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
893960010	ACCAO 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
893960020	ACCAO 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
893960030	ACCAO 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
893960040	ACCAO 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
893960050	ACCAO 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
893960060	ACCAO 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
893960070	ACCAO 2,2 / 2,8 S 80 / 15°

893960080	ACCAO 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
893960090	ACCAO 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
893961210	ACCAO 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
893961990	ACCAO 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
893960100	ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
893960110	ACCAO 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
893960120	ACCAO 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
893960130	ACCAO 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
893960140	ACCAO 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
893960150	ACCAO 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
893960160	ACCAO 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
893960170	ACCAO 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
893960180	ACCAO 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
893960190	ACCAO 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
893961220	ACCAO 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
893962000	ACCAO 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
893960200	ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
893960210	ACCAO 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
893960220	ACCAO 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
893960230	ACCAO 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
893960240	ACCAO 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
893960250	ACCAO 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
893960260	ACCAO 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
893960270	ACCAO 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
893960280	ACCAO 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
893960290	ACCAO 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
893961230	ACCAO 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
893962010	ACCAO 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
893960300	ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
893960310	ACCAO 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
893960320	ACCAO 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
893960330	ACCAO 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
893960340	ACCAO 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
893960350	ACCAO 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
893960360	ACCAO 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
893960370	ACCAO 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
893960380	ACCAO 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
893960390	ACCAO 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
893961240	ACCAO 2,5 / 3,5 J 115 / 15°

893962020	ACCAO 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
893960400	ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
893960410	ACCAO 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
893960420	ACCAO 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
893960430	ACCAO 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
893960440	ACCAO 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
893960450	ACCAO 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
893960460	ACCAO 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
893960470	ACCAO 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
893960480	ACCAO 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
893960490	ACCAO 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
893961250	ACCAO 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
893962030	ACCAO 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
893960500	ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
893960510	ACCAO 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
893960520	ACCAO 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
893960530	ACCAO 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
893960540	ACCAO 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
893960550	ACCAO 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
893960560	ACCAO 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
893960570	ACCAO 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
893960580	ACCAO 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
893960590	ACCAO 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
893961260	ACCAO 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
893962040	ACCAO 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
893960600	ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
893960610	ACCAO 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
893960620	ACCAO 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
893960630	ACCAO 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
893960640	ACCAO 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
893960650	ACCAO 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
893960660	ACCAO 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
893960670	ACCAO 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
893960680	ACCAO 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
893960690	ACCAO 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
893961270	ACCAO 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
893962050	ACCAO 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
893960700	ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
893960710	ACCAO 2,2 / 2,8 A 115 / 30°

893960720	ACCAO 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
893960730	ACCAO 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
893960740	ACCAO 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
893960750	ACCAO 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
893960760	ACCAO 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
893960770	ACCAO 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
893960780	ACCAO 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
893960790	ACCAO 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
893961280	ACCAO 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
893962060	ACCAO 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
893960800	ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
893960810	ACCAO 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
893960820	ACCAO 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
893960830	ACCAO 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
893960840	ACCAO 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
893960850	ACCAO 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
893960860	ACCAO 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
893960870	ACCAO 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
893960880	ACCAO 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
893960890	ACCAO 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
893961290	ACCAO 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
893962070	ACCAO 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
893960900	ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
893960910	ACCAO 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
893960920	ACCAO 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
893960930	ACCAO 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
893960940	ACCAO 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
893960950	ACCAO 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
893960960	ACCAO 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
893960970	ACCAO 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
893960980	ACCAO 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
893960990	ACCAO 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
893961300	ACCAO 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
893962080	ACCAO 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
893961010	ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
893961020	ACCAO 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
893961030	ACCAO 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
893961040	ACCAO 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
893961050	ACCAO 3,5 / 4,5 L 80 / 30°

893961060	ACCAO 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
893961070	ACCAO 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
893961080	ACCAO 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
893961090	ACCAO 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
893961100	ACCAO 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
893961310	ACCAO 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
893962090	ACCAO 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
893961110	ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
893961120	ACCAO 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
893961130	ACCAO 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
893961140	ACCAO 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
893961150	ACCAO 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
893961160	ACCAO 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
893961170	ACCAO 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
893961180	ACCAO 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
893961190	ACCAO 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
893961200	ACCAO 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
893961320	ACCAO 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
893962100	ACCAO 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
893961330	ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
893961340	ACCAO 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
893961350	ACCAO 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
893961360	ACCAO 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
893961370	ACCAO 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
893961380	ACCAO 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
893961390	ACCAO 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
893961400	ACCAO 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
893961410	ACCAO 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
893961420	ACCAO 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
893961430	ACCAO 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
893962110	ACCAO 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
893961440	ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
893961450	ACCAO 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
893961460	ACCAO 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
893961470	ACCAO 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
893961480	ACCAO 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
893961490	ACCAO 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
893961500	ACCAO 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
893961510	ACCAO 2,2 / 2,8 S 115 / 40°

893961520	ACCAO 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
893961530	ACCAO 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
893961540	ACCAO 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
893962120	ACCAO 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
893961550	ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
893961560	ACCAO 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
893961570	ACCAO 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
893961580	ACCAO 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
893961590	ACCAO 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
893961600	ACCAO 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
893961610	ACCAO 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
893961620	ACCAO 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
893961630	ACCAO 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
893961640	ACCAO 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
893961650	ACCAO 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
893962130	ACCAO 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
893961660	ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
893961670	ACCAO 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
893961680	ACCAO 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
893961690	ACCAO 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
893961700	ACCAO 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
893961710	ACCAO 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
893961720	ACCAO 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
893961730	ACCAO 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
893961740	ACCAO 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
893961750	ACCAO 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
893961760	ACCAO 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
893962140	ACCAO 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
893961770	ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
893961780	ACCAO 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
893961790	ACCAO 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
893961800	ACCAO 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
893961810	ACCAO 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
893961820	ACCAO 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
893961830	ACCAO 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
893961840	ACCAO 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
893961850	ACCAO 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
893961860	ACCAO 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
893961870	ACCAO 3,5 / 4,5 J 80 / 40°

893962150	ACCAO 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
893961880	ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
893961890	ACCAO 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
893961900	ACCAO 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
893961910	ACCAO 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
893961920	ACCAO 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
893961930	ACCAO 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
893961940	ACCAO 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
893961950	ACCAO 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
893961960	ACCAO 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
893961970	ACCAO 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
893961980	ACCAO 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
893962160	ACCAO 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ ACCS

Código	Modelo
893970000	ACCS 2,2 / 2,8 R 80
893970010	ACCS 2,2 / 2,8 A 80
893970020	ACCS 2,2 / 2,8 F 80
893970030	ACCS 2,2 / 2,8 T 80
893970040	ACCS 2,2 / 2,8 L 80
893970050	ACCS 2,2 / 2,8 E 80
893970060	ACCS 2,2 / 2,8 P 80
893970070	ACCS 2,2 / 2,8 S 80
893970080	ACCS 2,2 / 2,8 K 80
893970090	ACCS 2,2 / 2,8 W 80
893970600	ACCS 2,2 / 2,8 J 80
893970660	ACCS 2,2 / 2,8 B 80
893970100	ACCS 2,2 / 2,8 R 115
893970110	ACCS 2,2 / 2,8 A 115
893970120	ACCS 2,2 / 2,8 F 115
893970130	ACCS 2,2 / 2,8 T 115
893970140	ACCS 2,2 / 2,8 L 115
893970150	ACCS 2,2 / 2,8 E 115
893970160	ACCS 2,2 / 2,8 P 115
893970170	ACCS 2,2 / 2,8 S 115
893970180	ACCS 2,2 / 2,8 K 115
893970190	ACCS 2,2 / 2,8 W 115
893970610	ACCS 2,2 / 2,8 J 115

893970670	ACCS 2,2 / 2,8 B 115
893970200	ACCS 2,5 / 3,5 R 80
893970210	ACCS 2,5 / 3,5 A 80
893970220	ACCS 2,5 / 3,5 F 80
893970230	ACCS 2,5 / 3,5 T 80
893970240	ACCS 2,5 / 3,5 L 80
893970250	ACCS 2,5 / 3,5 E 80
893970260	ACCS 2,5 / 3,5 P 80
893970270	ACCS 2,5 / 3,5 S 80
893970280	ACCS 2,5 / 3,5 K 80
893970290	ACCS 2,5 / 3,5 W 80
893970620	ACCS 2,5 / 3,5 J 80
893970680	ACCS 2,5 / 3,5 B 80
893970300	ACCS 2,5 / 3,5 R 115
893970310	ACCS 2,5 / 3,5 A 115
893970320	ACCS 2,5 / 3,5 F 115
893970330	ACCS 2,5 / 3,5 T 115
893970340	ACCS 2,5 / 3,5 L 115
893970350	ACCS 2,5 / 3,5 E 115
893970360	ACCS 2,5 / 3,5 P 115
893970370	ACCS 2,5 / 3,5 S 115
893970380	ACCS 2,5 / 3,5 K 115
893970390	ACCS 2,5 / 3,5 W 115
893970630	ACCS 2,5 / 3,5 J 115
893970690	ACCS 2,5 / 3,5 B 115
893970400	ACCS 3,5 / 4,5 R 80
893970410	ACCS 3,5 / 4,5 A 80
893970420	ACCS 3,5 / 4,5 F 80
893970430	ACCS 3,5 / 4,5 T 80
893970440	ACCS 3,5 / 4,5 L 80
893970450	ACCS 3,5 / 4,5 E 80
893970460	ACCS 3,5 / 4,5 P 80
893970470	ACCS 3,5 / 4,5 S 80
893970480	ACCS 3,5 / 4,5 K 80
893970490	ACCS 3,5 / 4,5 W 80
893970640	ACCS 3,5 / 4,5 J 80
893970700	ACCS 3,5 / 4,5 B 80
893970500	ACCS 3,5 / 4,5 R 115
893970510	ACCS 3,5 / 4,5 A 115

893970520	ACCS 3,5 / 4,5 F 115
893970530	ACCS 3,5 / 4,5 T 115
893970540	ACCS 3,5 / 4,5 L 115
893970550	ACCS 3,5 / 4,5 E 115
893970560	ACCS 3,5 / 4,5 P 115
893970570	ACCS 3,5 / 4,5 S 115
893970580	ACCS 3,5 / 4,5 K 115
893970590	ACCS 3,5 / 4,5 W 115
893970650	ACCS 3,5 / 4,5 J 115
893970710	ACCS 3,5 / 4,5 B 115

▪ ACCSAI

Código	Modelo
893980000	ACCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
893980010	ACCSAI 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
893980020	ACCSAI 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
893980030	ACCSAI 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
893980040	ACCSAI 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
893980050	ACCSAI 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
893980060	ACCSAI 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
893980070	ACCSAI 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
893980080	ACCSAI 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
893980090	ACCSAI 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
893981210	ACCSAI 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
893981980	ACCSAI 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
893980100	ACCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
893980110	ACCSAI 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
893980120	ACCSAI 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
893980130	ACCSAI 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
893980140	ACCSAI 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
893980150	ACCSAI 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
893980160	ACCSAI 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
893980170	ACCSAI 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
893980180	ACCSAI 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
893980190	ACCSAI 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
893981220	ACCSAI 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
893981990	ACCSAI 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
893980200	ACCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
893980210	ACCSAI 2,5 / 3,5 A 80 / 15°

893980220	ACCSAI 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
893980230	ACCSAI 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
893980240	ACCSAI 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
893980250	ACCSAI 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
893980260	ACCSAI 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
893980270	ACCSAI 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
893980280	ACCSAI 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
893980290	ACCSAI 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
893981230	ACCSAI 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
893982010	ACCSAI 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
893980300	ACCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
893980310	ACCSAI 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
893980320	ACCSAI 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
893980330	ACCSAI 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
893980340	ACCSAI 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
893980350	ACCSAI 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
893980360	ACCSAI 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
893980370	ACCSAI 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
893980380	ACCSAI 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
893980390	ACCSAI 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
893981240	ACCSAI 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
893982020	ACCSAI 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
893980400	ACCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
893980410	ACCSAI 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
893980420	ACCSAI 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
893980430	ACCSAI 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
893980440	ACCSAI 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
893980450	ACCSAI 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
893980460	ACCSAI 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
893980470	ACCSAI 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
893980480	ACCSAI 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
893980490	ACCSAI 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
893981250	ACCSAI 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
893982030	ACCSAI 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
893980500	ACCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
893980510	ACCSAI 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
893980520	ACCSAI 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
893980530	ACCSAI 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
893980540	ACCSAI 3,5 / 4,5 L 115 / 15°

893980550	ACCSAI 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
893980560	ACCSAI 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
893980570	ACCSAI 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
893980580	ACCSAI 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
893980590	ACCSAI 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
893981260	ACCSAI 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
893982040	ACCSAI 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
893980600	ACCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
893980610	ACCSAI 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
893980620	ACCSAI 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
893980630	ACCSAI 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
893980640	ACCSAI 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
893980650	ACCSAI 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
893980660	ACCSAI 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
893980670	ACCSAI 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
893980680	ACCSAI 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
893980690	ACCSAI 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
893981270	ACCSAI 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
893982050	ACCSAI 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
893980700	ACCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
893980710	ACCSAI 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
893980720	ACCSAI 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
893980730	ACCSAI 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
893980740	ACCSAI 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
893980750	ACCSAI 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
893980760	ACCSAI 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
893980770	ACCSAI 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
893980780	ACCSAI 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
893980790	ACCSAI 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
893981280	ACCSAI 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
893982060	ACCSAI 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
893980800	ACCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
893980810	ACCSAI 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
893980820	ACCSAI 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
893980830	ACCSAI 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
893980840	ACCSAI 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
893980850	ACCSAI 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
893980860	ACCSAI 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
893980870	ACCSAI 2,5 / 3,5 S 80 / 30°

893980880	ACCSAI 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
893980890	ACCSAI 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
893981290	ACCSAI 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
893982070	ACCSAI 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
893980900	ACCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
893980910	ACCSAI 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
893980920	ACCSAI 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
893980930	ACCSAI 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
893980940	ACCSAI 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
893980950	ACCSAI 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
893980960	ACCSAI 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
893980970	ACCSAI 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
893980980	ACCSAI 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
893980990	ACCSAI 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
893981300	ACCSAI 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
893982080	ACCSAI 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
893981010	ACCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
893981020	ACCSAI 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
893981030	ACCSAI 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
893981040	ACCSAI 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
893981050	ACCSAI 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
893981060	ACCSAI 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
893981070	ACCSAI 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
893981080	ACCSAI 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
893981090	ACCSAI 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
893981100	ACCSAI 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
893981310	ACCSAI 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
893982090	ACCSAI 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
893981110	ACCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
893981120	ACCSAI 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
893981130	ACCSAI 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
893981140	ACCSAI 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
893981150	ACCSAI 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
893981160	ACCSAI 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
893981170	ACCSAI 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
893981180	ACCSAI 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
893981190	ACCSAI 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
893981200	ACCSAI 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
893981320	ACCSAI 3,5 / 4,5 J 115 / 30°

893982100	ACCSAI 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
893981330	ACCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
893981340	ACCSAI 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
893981350	ACCSAI 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
893981360	ACCSAI 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
893981370	ACCSAI 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
893981380	ACCSAI 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
893981390	ACCSAI 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
893981400	ACCSAI 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
893981410	ACCSAI 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
893981420	ACCSAI 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
893981430	ACCSAI 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
893982110	ACCSAI 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
893981440	ACCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
893981450	ACCSAI 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
893981460	ACCSAI 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
893981470	ACCSAI 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
893981480	ACCSAI 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
893981490	ACCSAI 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
893981500	ACCSAI 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
893981510	ACCSAI 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
893981520	ACCSAI 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
893981530	ACCSAI 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
893981540	ACCSAI 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
893982120	ACCSAI 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
893981550	ACCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
893981560	ACCSAI 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
893981570	ACCSAI 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
893981580	ACCSAI 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
893981590	ACCSAI 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
893981600	ACCSAI 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
893981610	ACCSAI 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
893981620	ACCSAI 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
893981630	ACCSAI 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
893981640	ACCSAI 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
893981650	ACCSAI 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
893982130	ACCSAI 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
893981660	ACCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
893981670	ACCSAI 2,5 / 3,5 A 115 / 40°

893981680	ACCSAI 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
893981690	ACCSAI 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
893981700	ACCSAI 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
893981710	ACCSAI 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
893981720	ACCSAI 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
893981730	ACCSAI 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
893981740	ACCSAI 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
893981750	ACCSAI 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
893981760	ACCSAI 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
893982140	ACCSAI 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
893981770	ACCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
893981780	ACCSAI 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
893981790	ACCSAI 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
893981800	ACCSAI 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
893981810	ACCSAI 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
893981820	ACCSAI 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
893981830	ACCSAI 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
893981840	ACCSAI 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
893981850	ACCSAI 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
893981860	ACCSAI 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
893981870	ACCSAI 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
893982150	ACCSAI 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
893981880	ACCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
893981890	ACCSAI 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
893981900	ACCSAI 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
893981910	ACCSAI 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
893981920	ACCSAI 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
893981930	ACCSAI 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
893981940	ACCSAI 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
893981950	ACCSAI 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
893981960	ACCSAI 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
893981970	ACCSAI 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
893981980	ACCSAI 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
893982160	ACCSAI 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

■ ACCSAO

Código	Modelo
893990000	ACCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
893990010	ACCSAO 2,2 / 2,8 A 80 / 15°

893990020	ACCSAO 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
893990030	ACCSAO 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
893990040	ACCSAO 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
893990050	ACCSAO 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
893990060	ACCSAO 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
893990070	ACCSAO 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
893990080	ACCSAO 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
893990090	ACCSAO 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
893991210	ACCSAO 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
893991990	ACCSAO 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
893990100	ACCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
893990110	ACCSAO 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
893990120	ACCSAO 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
893990130	ACCSAO 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
893990140	ACCSAO 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
893990150	ACCSAO 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
893990160	ACCSAO 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
893990170	ACCSAO 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
893990180	ACCSAO 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
893990190	ACCSAO 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
893991220	ACCSAO 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
893992000	ACCSAO 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
893990200	ACCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
893990210	ACCSAO 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
893990220	ACCSAO 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
893990230	ACCSAO 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
893990240	ACCSAO 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
893990250	ACCSAO 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
893990260	ACCSAO 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
893990270	ACCSAO 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
893990280	ACCSAO 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
893990290	ACCSAO 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
893991230	ACCSAO 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
893992010	ACCSAO 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
893990300	ACCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
893990310	ACCSAO 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
893990320	ACCSAO 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
893990330	ACCSAO 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
893990340	ACCSAO 2,5 / 3,5 L 115 / 15°

893990350	ACCSAO 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
893990360	ACCSAO 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
893990370	ACCSAO 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
893990380	ACCSAO 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
893990390	ACCSAO 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
893991240	ACCSAO 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
893992020	ACCSAO 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
893990400	ACCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
893990410	ACCSAO 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
893990420	ACCSAO 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
893990430	ACCSAO 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
893990440	ACCSAO 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
893990450	ACCSAO 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
893990460	ACCSAO 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
893990470	ACCSAO 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
893990480	ACCSAO 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
893990490	ACCSAO 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
893991250	ACCSAO 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
893992030	ACCSAO 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
893990500	ACCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
893990510	ACCSAO 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
893990520	ACCSAO 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
893990530	ACCSAO 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
893990540	ACCSAO 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
893990550	ACCSAO 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
893990560	ACCSAO 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
893990570	ACCSAO 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
893990580	ACCSAO 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
893990590	ACCSAO 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
893991260	ACCSAO 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
893992040	ACCSAO 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
893990600	ACCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
893990610	ACCSAO 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
893990620	ACCSAO 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
893990630	ACCSAO 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
893990640	ACCSAO 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
893990650	ACCSAO 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
893990660	ACCSAO 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
893990670	ACCSAO 2,2 / 2,8 S 80 / 30°

893990680	ACCSAO 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
893990690	ACCSAO 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
893991270	ACCSAO 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
893992050	ACCSAO 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
893990700	ACCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
893990710	ACCSAO 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
893990720	ACCSAO 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
893990730	ACCSAO 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
893990740	ACCSAO 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
893990750	ACCSAO 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
893990760	ACCSAO 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
893990770	ACCSAO 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
893990780	ACCSAO 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
893990790	ACCSAO 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
893991280	ACCSAO 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
893992060	ACCSAO 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
893990800	ACCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
893990810	ACCSAO 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
893990820	ACCSAO 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
893990830	ACCSAO 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
893990840	ACCSAO 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
893990850	ACCSAO 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
893990860	ACCSAO 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
893990870	ACCSAO 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
893990880	ACCSAO 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
893990890	ACCSAO 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
893991290	ACCSAO 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
893992070	ACCSAO 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
893990900	ACCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
893990910	ACCSAO 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
893990920	ACCSAO 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
893990930	ACCSAO 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
893990940	ACCSAO 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
893990950	ACCSAO 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
893990960	ACCSAO 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
893990970	ACCSAO 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
893990980	ACCSAO 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
893990990	ACCSAO 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
893991300	ACCSAO 2,5 / 3,5 J 115 / 30°

893992080	ACCSAO 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
893991010	ACCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
893991020	ACCSAO 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
893991030	ACCSAO 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
893991040	ACCSAO 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
893991050	ACCSAO 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
893991060	ACCSAO 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
893991070	ACCSAO 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
893991080	ACCSAO 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
893991090	ACCSAO 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
893991100	ACCSAO 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
893991310	ACCSAO 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
893992090	ACCSAO 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
893991110	ACCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
893991120	ACCSAO 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
893991130	ACCSAO 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
893991140	ACCSAO 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
893991150	ACCSAO 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
893991160	ACCSAO 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
893991170	ACCSAO 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
893991180	ACCSAO 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
893991190	ACCSAO 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
893991200	ACCSAO 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
893991320	ACCSAO 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
893992100	ACCSAO 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
893991330	ACCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
893991340	ACCSAO 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
893991350	ACCSAO 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
893991360	ACCSAO 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
893991370	ACCSAO 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
893991380	ACCSAO 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
893991390	ACCSAO 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
893991400	ACCSAO 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
893991410	ACCSAO 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
893991420	ACCSAO 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
893991430	ACCSAO 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
893992110	ACCSAO 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
893991440	ACCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
893991450	ACCSAO 2,2 / 2,8 A 115 / 40°

893991460	ACCSAO 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
893991470	ACCSAO 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
893991480	ACCSAO 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
893991490	ACCSAO 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
893991500	ACCSAO 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
893991510	ACCSAO 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
893991520	ACCSAO 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
893991530	ACCSAO 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
893991540	ACCSAO 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
893992120	ACCSAO 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
893991550	ACCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
893991560	ACCSAO 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
893991570	ACCSAO 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
893991580	ACCSAO 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
893991590	ACCSAO 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
893991600	ACCSAO 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
893991610	ACCSAO 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
893991620	ACCSAO 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
893991630	ACCSAO 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
893991640	ACCSAO 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
893991650	ACCSAO 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
893992130	ACCSAO 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
893991660	ACCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
893991670	ACCSAO 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
893991680	ACCSAO 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
893991690	ACCSAO 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
893991700	ACCSAO 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
893991710	ACCSAO 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
893991720	ACCSAO 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
893991730	ACCSAO 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
893991740	ACCSAO 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
893991750	ACCSAO 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
893991760	ACCSAO 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
893992140	ACCSAO 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
893991770	ACCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
893991780	ACCSAO 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
893991790	ACCSAO 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
893991800	ACCSAO 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
893991810	ACCSAO 3,5 / 4,5 L 80 / 40°

893991820	ACCSAO 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
893991830	ACCSAO 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
893991840	ACCSAO 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
893991850	ACCSAO 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
893991860	ACCSAO 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
893991870	ACCSAO 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
893992150	ACCSAO 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
893991880	ACCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
893991890	ACCSAO 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
893991900	ACCSAO 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
893991910	ACCSAO 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
893991920	ACCSAO 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
893991930	ACCSAO 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
893991940	ACCSAO 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
893991950	ACCSAO 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
893991960	ACCSAO 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
893991970	ACCSAO 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
893991980	ACCSAO 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
893992160	ACCSAO 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ MCCS

Código	Modelo
894000000	MCCS 2,2 / 2,8 R 80
894000010	MCCS 2,2 / 2,8 A 80
894000020	MCCS 2,2 / 2,8 F 80
894000030	MCCS 2,2 / 2,8 T 80
894000040	MCCS 2,2 / 2,8 L 80
894000050	MCCS 2,2 / 2,8 E 80
894000060	MCCS 2,2 / 2,8 P 80
894000070	MCCS 2,2 / 2,8 S 80
894000080	MCCS 2,2 / 2,8 K 80
894000090	MCCS 2,2 / 2,8 W 80
894000600	MCCS 2,2 / 2,8 J 80
894000610	MCCS 2,2 / 2,8 B 80
894000100	MCCS 2,2 / 2,8 R 115
894000110	MCCS 2,2 / 2,8 A 115
894000120	MCCS 2,2 / 2,8 F 115
894000130	MCCS 2,2 / 2,8 T 115
894000140	MCCS 2,2 / 2,8 L 115

894000150	MCCS 2,2 / 2,8 E 115
894000160	MCCS 2,2 / 2,8 P 115
894000170	MCCS 2,2 / 2,8 S 115
894000180	MCCS 2,2 / 2,8 K 115
894000190	MCCS 2,2 / 2,8 W 115
894000610	MCCS 2,2 / 2,8 J 115
894000620	MCCS 2,2 / 2,8 B 115
894000200	MCCS 2,5 / 3,5 R 80
894000210	MCCS 2,5 / 3,5 A 80
894000220	MCCS 2,5 / 3,5 F 80
894000230	MCCS 2,5 / 3,5 T 80
894000240	MCCS 2,5 / 3,5 L 80
894000250	MCCS 2,5 / 3,5 E 80
894000260	MCCS 2,5 / 3,5 P 80
894000270	MCCS 2,5 / 3,5 S 80
894000280	MCCS 2,5 / 3,5 K 80
894000290	MCCS 2,5 / 3,5 W 80
894000620	MCCS 2,5 / 3,5 J 80
894000630	MCCS 2,5 / 3,5 B 80
894000300	MCCS 2,5 / 3,5 R 115
894000310	MCCS 2,5 / 3,5 A 115
894000320	MCCS 2,5 / 3,5 F 115
894000330	MCCS 2,5 / 3,5 T 115
894000340	MCCS 2,5 / 3,5 L 115
894000350	MCCS 2,5 / 3,5 E 115
894000360	MCCS 2,5 / 3,5 P 115
894000370	MCCS 2,5 / 3,5 S 115
894000380	MCCS 2,5 / 3,5 K 115
894000390	MCCS 2,5 / 3,5W 115
894000630	MCCS 2,5 / 3,5 J 115
894000640	MCCS 2,5 / 3,5 B 115
894000400	MCCS 3,5 / 4,5 R 80
894000410	MCCS 3,5 / 4,5 A 80
894000420	MCCS 3,5 / 4,5 F 80
894000430	MCCS 3,5 / 4,5 T 80
894000440	MCCS 3,5 / 4,5 L 80
894000450	MCCS 3,5 / 4,5 E 80
894000460	MCCS 3,5 / 4,5 P 80
894000470	MCCS 3,5 / 4,5 S 80

894000480	MCCS 3,5 / 4,5 K 80
894000490	MCCS 3,5 / 4,5 W 80
894000640	MCCS 3,5 / 4,5 J 80
894000650	MCCS 3,5 / 4,5 B 80
894000500	MCCS 3,5 / 4,5 R 115
894000510	MCCS 3,5 / 4,5 A 115
894000520	MCCS 3,5 / 4,5 F 115
894000530	MCCS 3,5 / 4,5 T 115
894000540	MCCS 3,5 / 4,5 L 115
894000550	MCCS 3,5 / 4,5 E 115
894000560	MCCS 3,5 / 4,5 P 115
894000570	MCCS 3,5 / 4,5 S 115
894000580	MCCS 3,5 / 4,5 K 115
894000590	MCCS 3,5 / 4,5 W 115
894000650	MCCS 3,5 / 4,5 J 115
894000660	MCCS 3,5 / 4,5 B 115

▪ MCCSAI

Código	Modelo
894010000	MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
894010010	MCCSAI 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
894010020	MCCSAI 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
894010030	MCCSAI 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
894010040	MCCSAI 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
894010050	MCCSAI 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
894010060	MCCSAI 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
894010070	MCCSAI 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
894010080	MCCSAI 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
894010090	MCCSAI 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
894011210	MCCSAI 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
894011990	MCCSAI 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
894010100	MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
894010110	MCCSAI 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
894010120	MCCSAI 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
894010130	MCCSAI 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
894010140	MCCSAI 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
894010150	MCCSAI 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
894010160	MCCSAI 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
894010170	MCCSAI 2,2 / 2,8 S 115 / 15°

894010180	MCCSAI 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
894010190	MCCSAI 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
894011220	MCCSAI 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
894012000	MCCSAI 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
894010200	MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894010210	MCCSAI 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
894010220	MCCSAI 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
894010230	MCCSAI 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
894010240	MCCSAI 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
894010250	MCCSAI 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
894010260	MCCSAI 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
894010270	MCCSAI 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894010280	MCCSAI 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
894010290	MCCSAI 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
894011230	MCCSAI 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
894012010	MCCSAI 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
894010300	MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
894010310	MCCSAI 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
894010320	MCCSAI 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
894010330	MCCSAI 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
894010340	MCCSAI 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
894010350	MCCSAI 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
894010360	MCCSAI 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
894010370	MCCSAI 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
894010380	MCCSAI 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
894010390	MCCSAI 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
894011240	MCCSAI 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
894012020	MCCSAI 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
894010400	MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
894010410	MCCSAI 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
894010420	MCCSAI 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
894010430	MCCSAI 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
894010440	MCCSAI 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
894010450	MCCSAI 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
894010460	MCCSAI 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
894010470	MCCSAI 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
894010480	MCCSAI 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
894010490	MCCSAI 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
894011250	MCCSAI 3,5 / 4,5 J 80 / 15°

894012030	MCCSAI 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
894010500	MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
894010510	MCCSAI 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
894010520	MCCSAI 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
894010530	MCCSAI 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
894010540	MCCSAI 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
894010550	MCCSAI 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
894010560	MCCSAI 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
894010570	MCCSAI 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
894010580	MCCSAI 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
894010590	MCCSAI 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
894011260	MCCSAI 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
894012040	MCCSAI 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
894010600	MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
894010610	MCCSAI 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
894010620	MCCSAI 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
894010630	MCCSAI 2,2 / 2,8 T 80 / 30°
894010640	MCCSAI 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
894010650	MCCSAI 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
894010660	MCCSAI 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
894010670	MCCSAI 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
894010680	MCCSAI 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
894010690	MCCSAI 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
894011270	MCCSAI 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
894012050	MCCSAI 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
894010700	MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
894010710	MCCSAI 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
894010720	MCCSAI 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
894010730	MCCSAI 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
894010740	MCCSAI 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
894010750	MCCSAI 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
894010760	MCCSAI 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
894010770	MCCSAI 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
894010780	MCCSAI 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
894010790	MCCSAI 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
894011280	MCCSAI 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
894012060	MCCSAI 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
894010800	MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
894010810	MCCSAI 2,5 / 3,5 A 80 / 30°

894010820	MCCSAI 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
894010830	MCCSAI 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
894010840	MCCSAI 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
894010850	MCCSAI 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
894010860	MCCSAI 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
894010870	MCCSAI 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
894010880	MCCSAI 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
894010890	MCCSAI 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
894011290	MCCSAI 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
894012070	MCCSAI 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
894010900	MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
894010910	MCCSAI 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
894010920	MCCSAI 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
894010930	MCCSAI 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
894010940	MCCSAI 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
894010950	MCCSAI 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
894010960	MCCSAI 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
894010970	MCCSAI 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
894010980	MCCSAI 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
894010990	MCCSAI 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
894011300	MCCSAI 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
894012080	MCCSAI 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
894011010	MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
894011020	MCCSAI 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
894011030	MCCSAI 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
894011040	MCCSAI 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
894011050	MCCSAI 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
894011060	MCCSAI 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
894011070	MCCSAI 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
894011080	MCCSAI 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
894011090	MCCSAI 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
894011100	MCCSAI 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
894011310	MCCSAI 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
894012090	MCCSAI 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
894011110	MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
894011120	MCCSAI 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
894011130	MCCSAI 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
894011140	MCCSAI 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
894011150	MCCSAI 3,5 / 4,5 L 115 / 30°

894011160	MCCSAI 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
894011170	MCCSAI 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
894011180	MCCSAI 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
894011190	MCCSAI 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
894011200	MCCSAI 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
894011320	MCCSAI 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
894012100	MCCSAI 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
894011330	MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
894011340	MCCSAI 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
894011350	MCCSAI 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
894011360	MCCSAI 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
894011370	MCCSAI 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
894011380	MCCSAI 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
894011390	MCCSAI 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
894011400	MCCSAI 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
894011410	MCCSAI 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
894011420	MCCSAI 2,2 / 2,8 W 80 / 40°
894011430	MCCSAI 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
894012110	MCCSAI 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
894011440	MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
894011450	MCCSAI 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
894011460	MCCSAI 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
894011470	MCCSAI 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
894011480	MCCSAI 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
894011490	MCCSAI 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
894011500	MCCSAI 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
894011510	MCCSAI 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
894011520	MCCSAI 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
894011530	MCCSAI 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
894011540	MCCSAI 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
894012120	MCCSAI 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
894011550	MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
894011560	MCCSAI 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
894011570	MCCSAI 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
894011580	MCCSAI 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
894011590	MCCSAI 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
894011600	MCCSAI 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
894011610	MCCSAI 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
894011620	MCCSAI 2,5 / 3,5 S 80 / 40°

894011630	MCCSAI 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
894011640	MCCSAI 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
894011650	MCCSAI 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
894012130	MCCSAI 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
894011660	MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
894011670	MCCSAI 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
894011680	MCCSAI 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
894011690	MCCSAI 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
894011700	MCCSAI 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
894011710	MCCSAI 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
894011720	MCCSAI 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
894011730	MCCSAI 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
894011740	MCCSAI 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
894011750	MCCSAI 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
894011760	MCCSAI 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
894012140	MCCSAI 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
894011770	MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
894011780	MCCSAI 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
894011790	MCCSAI 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
894011800	MCCSAI 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
894011810	MCCSAI 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
894011820	MCCSAI 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
894011830	MCCSAI 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
894011840	MCCSAI 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
894011850	MCCSAI 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
894011860	MCCSAI 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
894011870	MCCSAI 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
894012150	MCCSAI 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
894011880	MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
894011890	MCCSAI 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
894011900	MCCSAI 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
894011910	MCCSAI 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
894011920	MCCSAI 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
894011930	MCCSAI 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
894011940	MCCSAI 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
894011950	MCCSAI 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
894011960	MCCSAI 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
894011970	MCCSAI 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
894011980	MCCSAI 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
894012160	MCCSAI 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ MCCSAO

Código	Modelo
894020000	MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15°
894020010	MCCSAO 2,2 / 2,8 A 80 / 15°
894020020	MCCSAO 2,2 / 2,8 F 80 / 15°
894020030	MCCSAO 2,2 / 2,8 T 80 / 15°
894020040	MCCSAO 2,2 / 2,8 L 80 / 15°
894020050	MCCSAO 2,2 / 2,8 E 80 / 15°
894020060	MCCSAO 2,2 / 2,8 P 80 / 15°
894020070	MCCSAO 2,2 / 2,8 S 80 / 15°
894020080	MCCSAO 2,2 / 2,8 K 80 / 15°
894020090	MCCSAO 2,2 / 2,8 W 80 / 15°
894021210	MCCSAO 2,2 / 2,8 J 80 / 15°
894021990	MCCSAO 2,2 / 2,8 B 80 / 15°
894020100	MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15°
894020110	MCCSAO 2,2 / 2,8 A 115 / 15°
894020120	MCCSAO 2,2 / 2,8 F 115 / 15°
894020130	MCCSAO 2,2 / 2,8 T 115 / 15°
894020140	MCCSAO 2,2 / 2,8 L 115 / 15°
894020150	MCCSAO 2,2 / 2,8 E 115 / 15°
894020160	MCCSAO 2,2 / 2,8 P 115 / 15°
894020170	MCCSAO 2,2 / 2,8 S 115 / 15°
894020180	MCCSAO 2,2 / 2,8 K 115 / 15°
894020190	MCCSAO 2,2 / 2,8 W 115 / 15°
894021220	MCCSAO 2,2 / 2,8 J 115 / 15°
894022000	MCCSAO 2,2 / 2,8 B 115 / 15°
894020200	MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894020210	MCCSAO 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
894020220	MCCSAO 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
894020230	MCCSAO 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
894020240	MCCSAO 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
894020250	MCCSAO 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
894020260	MCCSAO 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
894020270	MCCSAO 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894020280	MCCSAO 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
894020290	MCCSAO 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
894021230	MCCSAO 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
894022010	MCCSAO 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
894020300	MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15°

894020310	MCCSAO 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
894020320	MCCSAO 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
894020330	MCCSAO 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
894020340	MCCSAO 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
894020350	MCCSAO 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
894020360	MCCSAO 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
894020370	MCCSAO 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
894020380	MCCSAO 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
894020390	MCCSAO 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
894021240	MCCSAO 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
894022020	MCCSAO 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
894020400	MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
894020410	MCCSAO 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
894020420	MCCSAO 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
894020430	MCCSAO 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
894020440	MCCSAO 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
894020450	MCCSAO 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
894020460	MCCSAO 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
894020470	MCCSAO 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
894020480	MCCSAO 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
894020490	MCCSAO 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
894021250	MCCSAO 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
894022030	MCCSAO 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
894020500	MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
894020510	MCCSAO 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
894020520	MCCSAO 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
894020530	MCCSAO 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
894020540	MCCSAO 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
894020550	MCCSAO 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
894020560	MCCSAO 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
894020570	MCCSAO 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
894020580	MCCSAO 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
894020590	MCCSAO 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
894021260	MCCSAO 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
894022040	MCCSAO 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
894020600	MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30°
894020610	MCCSAO 2,2 / 2,8 A 80 / 30°
894020620	MCCSAO 2,2 / 2,8 F 80 / 30°
894020630	MCCSAO 2,2 / 2,8 T 80 / 30°

894020640	MCCSAO 2,2 / 2,8 L 80 / 30°
894020650	MCCSAO 2,2 / 2,8 E 80 / 30°
894020660	MCCSAO 2,2 / 2,8 P 80 / 30°
894020670	MCCSAO 2,2 / 2,8 S 80 / 30°
894020680	MCCSAO 2,2 / 2,8 K 80 / 30°
894020690	MCCSAO 2,2 / 2,8 W 80 / 30°
894021270	MCCSAO 2,2 / 2,8 J 80 / 30°
894022050	MCCSAO 2,2 / 2,8 B 80 / 30°
894020700	MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30°
894020710	MCCSAO 2,2 / 2,8 A 115 / 30°
894020720	MCCSAO 2,2 / 2,8 F 115 / 30°
894020730	MCCSAO 2,2 / 2,8 T 115 / 30°
894020740	MCCSAO 2,2 / 2,8 L 115 / 30°
894020750	MCCSAO 2,2 / 2,8 E 115 / 30°
894020760	MCCSAO 2,2 / 2,8 P 115 / 30°
894020770	MCCSAO 2,2 / 2,8 S 115 / 30°
894020780	MCCSAO 2,2 / 2,8 K 115 / 30°
894020790	MCCSAO 2,2 / 2,8 W 115 / 30°
894021280	MCCSAO 2,2 / 2,8 J 115 / 30°
894022060	MCCSAO 2,2 / 2,8 B 115 / 30°
894020800	MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
894020810	MCCSAO 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
894020820	MCCSAO 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
894020830	MCCSAO 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
894020840	MCCSAO 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
894020850	MCCSAO 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
894020860	MCCSAO 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
894020870	MCCSAO 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
894020880	MCCSAO 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
894020890	MCCSAO 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
894021290	MCCSAO 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
894022070	MCCSAO 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
894020900	MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
894020910	MCCSAO 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
894020920	MCCSAO 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
894020930	MCCSAO 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
894020940	MCCSAO 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
894020950	MCCSAO 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
894020960	MCCSAO 2,5 / 3,5 P 115 / 30°

894020970	MCCSAO 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
894020980	MCCSAO 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
894020990	MCCSAO 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
894021300	MCCSAO 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
894022080	MCCSAO 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
894021010	MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
894021020	MCCSAO 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
894021030	MCCSAO 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
894021040	MCCSAO 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
894021050	MCCSAO 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
894021060	MCCSAO 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
894021070	MCCSAO 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
894021080	MCCSAO 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
894021090	MCCSAO 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
894021100	MCCSAO 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
894021310	MCCSAO 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
894022090	MCCSAO 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
894021110	MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
894021120	MCCSAO 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
894021130	MCCSAO 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
894021140	MCCSAO 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
894021150	MCCSAO 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
894021160	MCCSAO 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
894021170	MCCSAO 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
894021180	MCCSAO 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
894021190	MCCSAO 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
894021200	MCCSAO 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
894021320	MCCSAO 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
894022100	MCCSAO 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
894021330	MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40°
894021340	MCCSAO 2,2 / 2,8 A 80 / 40°
894021350	MCCSAO 2,2 / 2,8 F 80 / 40°
894021360	MCCSAO 2,2 / 2,8 T 80 / 40°
894021370	MCCSAO 2,2 / 2,8 L 80 / 40°
894021380	MCCSAO 2,2 / 2,8 E 80 / 40°
894021390	MCCSAO 2,2 / 2,8 P 80 / 40°
894021400	MCCSAO 2,2 / 2,8 S 80 / 40°
894021410	MCCSAO 2,2 / 2,8 K 80 / 40°
894021420	MCCSAO 2,2 / 2,8 W 80 / 40°

894021430	MCCSAO 2,2 / 2,8 J 80 / 40°
894022110	MCCSAO 2,2 / 2,8 B 80 / 40°
894021440	MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40°
894021450	MCCSAO 2,2 / 2,8 A 115 / 40°
894021460	MCCSAO 2,2 / 2,8 F 115 / 40°
894021470	MCCSAO 2,2 / 2,8 T 115 / 40°
894021480	MCCSAO 2,2 / 2,8 L 115 / 40°
894021490	MCCSAO 2,2 / 2,8 E 115 / 40°
894021500	MCCSAO 2,2 / 2,8 P 115 / 40°
894021510	MCCSAO 2,2 / 2,8 S 115 / 40°
894021520	MCCSAO 2,2 / 2,8 K 115 / 40°
894021530	MCCSAO 2,2 / 2,8 W 115 / 40°
894021540	MCCSAO 2,2 / 2,8 J 115 / 40°
894022120	MCCSAO 2,2 / 2,8 B 115 / 40°
894021550	MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
894021560	MCCSAO 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
894021570	MCCSAO 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
894021580	MCCSAO 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
894021590	MCCSAO 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
894021600	MCCSAO 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
894021610	MCCSAO 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
894021620	MCCSAO 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
894021630	MCCSAO 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
894021640	MCCSAO 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
894021650	MCCSAO 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
894022130	MCCSAO 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
894021660	MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
894021670	MCCSAO 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
894021680	MCCSAO 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
894021690	MCCSAO 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
894021700	MCCSAO 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
894021710	MCCSAO 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
894021720	MCCSAO 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
894021730	MCCSAO 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
894021740	MCCSAO 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
894021750	MCCSAO 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
894021760	MCCSAO 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
894022140	MCCSAO 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
894021770	MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40°

894021780	MCCSAO 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
894021790	MCCSAO 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
894021800	MCCSAO 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
894021810	MCCSAO 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
894021820	MCCSAO 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
894021830	MCCSAO 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
894021840	MCCSAO 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
894021850	MCCSAO 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
894021860	MCCSAO 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
894021870	MCCSAO 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
894022150	MCCSAO 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
894021880	MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
894021890	MCCSAO 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
894021900	MCCSAO 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
894021910	MCCSAO 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
894021920	MCCSAO 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
894021930	MCCSAO 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
894021940	MCCSAO 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
894021950	MCCSAO 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
894021960	MCCSAO 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
894021970	MCCSAO 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
894021980	MCCSAO 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
894022160	MCCSAO 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

- DCM

Código	Modelo
894040000	DCM 2,2 / 2,8 R 80
894040010	DCM 2,2 / 2,8 A 80
894040020	DCM 2,2 / 2,8 F 80
894040030	DCM 2,2 / 2,8 T 80
894040040	DCM 2,2 / 2,8 L 80
894040050	DCM 2,2 / 2,8 E 80
894040060	DCM 2,2 / 2,8 P 80
894040070	DCM 2,2 / 2,8 S 80
894040080	DCM 2,2 / 2,8 K 80
894040090	DCM 2,2 / 2,8 W 80
894040600	DCM 2,2 / 2,8 J 80
894040610	DCM 2,2 / 2,8 B 80
894040100	DCM 2,2 / 2,8 R 115

894040110	DCM 2,2 / 2,8 A 115
894040120	DCM 2,2 / 2,8 F 115
894040130	DCM 2,2 / 2,8 T 115
894040140	DCM 2,2 / 2,8 L 115
894040150	DCM 2,2 / 2,8 E 115
894040160	DCM 2,2 / 2,8 P 115
894040170	DCM 2,2 / 2,8 S 115
894040180	DCM 2,2 / 2,8 K 115
894040190	DCM 2,2 / 2,8 W 115
894040610	DCM 2,2 / 2,8 J 115
894040620	DCM 2,2 / 2,8 B 115
894040200	DCM 2,5 / 3,5 R 80
894040210	DCM 2,5 / 3,5 A 80
894040220	DCM 2,5 / 3,5 F 80
894040230	DCM 2,5 / 3,5 T 80
894040240	DCM 2,5 / 3,5 L 80
894040250	DCM 2,5 / 3,5 E 80
894040260	DCM 2,5 / 3,5 P 80
894040270	DCM 2,5 / 3,5 S 80
894040280	DCM 2,5 / 3,5 K 80
894040290	DCM 2,5 / 3,5 W 80
894040620	DCM 2,5 / 3,5 J 80
894040630	DCM 2,5 / 3,5 B 80
894040300	DCM 2,5 / 3,5 R 115
894040310	DCM 2,5 / 3,5 A 115
894040320	DCM 2,5 / 3,5 F 115
894040330	DCM 2,5 / 3,5 T 115
894040340	DCM 2,5 / 3,5 L 115
894040350	DCM 2,5 / 3,5 E 115
894040360	DCM 2,5 / 3,5 P 115
894040370	DCM 2,5 / 3,5 S 115
894040380	DCM 2,5 / 3,5 K 115
894040390	DCM 2,5 / 3,5 W 115
894040630	DCM 2,5 / 3,5 J 115
894040640	DCM 2,5 / 3,5 B 115
894040400	DCM 3,5 / 4,5 R 80
894040410	DCM 3,5 / 4,5 A 80
894040420	DCM 3,5 / 4,5 F 80
894040430	DCM 3,5 / 4,5 T 80
894040440	DCM 3,5 / 4,5 L 80

894040450	DCM 3,5 / 4,5 E 80
894040460	DCM 3,5 / 4,5 P 80
894040470	DCM 3,5 / 4,5 S 80
894040480	DCM 3,5 / 4,5 K 80
894040490	DCM 3,5 / 4,5 W 80
894040640	DCM 3,5 / 4,5 J 80
894040650	DCM 3,5 / 4,5 B 80
894040500	DCM 3,5 / 4,5 R 115
894040510	DCM 3,5 / 4,5 A 115
894040520	DCM 3,5 / 4,5 F 115
894040530	DCM 3,5 / 4,5 T 115
894040540	DCM 3,5 / 4,5 L 115
894040550	DCM 3,5 / 4,5 E 115
894040560	DCM 3,5 / 4,5 P 115
894040570	DCM 3,5 / 4,5S 115
894040580	DCM 3,5 / 4,5 K 115
894040590	DCM 3,5 / 4,5 W 115
894040650	DCM 3,5 / 4,5 J 115
894040660	DCM 3,5 / 4,5 B 115

▪ RB

Código	Modelo
894060000	RB 2,5 / 3,5 R 80
894060010	RB 2,5 / 3,5 A 80
894060020	RB 2,5 / 3,5 F 80
894060030	RB 2,5 / 3,5 T 80
894060040	RB 2,5 / 3,5 L 80
894060050	RB 2,5 / 3,5 E 80
894060060	RB 2,5 / 3,5 P 80
894060070	RB 2,5 / 3,5 S 80
894060080	RB 2,5 / 3,5 K 80
894060090	RB 2,5 / 3,5 W 80
894060400	RB 2,5 / 3,5 J 80
894060440	RB 2,5 / 3,5 B 80
894060100	RB 2,5 / 3,5 R 115
894060110	RB 2,5 / 3,5 A 115
894060120	RB 2,5 / 3,5 F 115
894060130	RB 2,5 / 3,5 T 115
894060140	RB 2,5 / 3,5 L 115

894060150	RB 2,5 / 3,5 E 115
894060160	RB 2,5 / 3,5 P 115
894060170	RB 2,5 / 3,5 S 115
894060180	RB 2,5 / 3,5 K 115
894060190	RB 2,5 / 3,5 W 115
894060410	RB 2,5 / 3,5 J 115
894060450	RB 2,5 / 3,5 B 115
894060200	RB 3,5 / 4,5 R 80
894060210	RB 3,5 / 4,5 A 80
894060220	RB 3,5 / 4,5 F 80
894060230	RB 3,5 / 4,5 T 80
894060240	RB 3,5 / 4,5 L 80
894060250	RB 3,5 / 4,5 E 80
894060260	RB 3,5 / 4,5 P 80
894060270	RB 3,5 / 4,5 S 80
894060280	RB 3,5 / 4,5 K 80
894060290	RB 3,5 / 4,5 W 80
894060420	RB 3,5 / 4,5 J 80
894060460	RB 3,5 / 4,5 B 80
894060300	RB 3,5 / 4,5 R 115
894060310	RB 3,5 / 4,5 A 115
894060320	RB 3,5 / 4,5 F 115
894060330	RB 3,5 / 4,5 T 115
894060340	RB 3,5 / 4,5 L 115
894060350	RB 3,5 / 4,5 E 115
894060360	RB 3,5 / 4,5 P 115
894060370	RB 3,5 / 4,5 S 115
894060380	RB 3,5 / 4,5 K 115
894060390	RB 3,5 / 4,5 W 115
894060430	RB 3,5 / 4,5 J 115
894060470	RB 3,5 / 4,5 B 115

▪ RBA

Código	Modelo
894070000	RBA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894070010	RBA 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
894070020	RBA 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
894070030	RBA 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
894070040	RBA 2,5 / 3,5 L 80 / 15°

894070050	RBA 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
894070060	RBA 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
894070070	RBA 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894070080	RBA 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
894070090	RBA 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
894070800	RBA 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
894071330	RBA 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
894070100	RBA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
894070110	RBA 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
894070120	RBA 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
894070130	RBA 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
894070140	RBA 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
894070150	RBA 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
894070160	RBA 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
894070170	RBA 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
894070180	RBA 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
894070190	RBA 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
894070810	RBA 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
894071340	RBA 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
894070200	RBA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
894070210	RBA 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
894070220	RBA 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
894070230	RBA 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
894070240	RBA 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
894070250	RBA 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
894070260	RBA 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
894070270	RBA 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
894070280	RBA 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
894070290	RBA 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
894070820	RBA 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
894071350	RBA 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
894070300	RBA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
894070310	RBA 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
894070320	RBA 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
894070330	RBA 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
894070340	RBA 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
894070350	RBA 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
894070360	RBA 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
894070370	RBA 3,5 / 4,5 S 115 / 15°

894070380	RBA 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
894070390	RBA 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
894070830	RBA 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
894071360	RBA 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
894070400	RBA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
894070410	RBA 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
894070420	RBA 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
894070430	RBA 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
894070440	RBA 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
894070450	RBA 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
894070460	RBA 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
894070470	RBA 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
894070480	RBA 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
894070490	RBA 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
894070840	RBA 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
894071370	RBA 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
894070500	RBA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
894070510	RBA 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
894070520	RBA 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
894070530	RBA 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
894070540	RBA 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
894070550	RBA 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
894070560	RBA 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
894070570	RBA 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
894070580	RBA 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
894070590	RBA 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
894070850	RBA 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
894071380	RBA 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
894070600	RBA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
894070610	RBA 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
894070620	RBA 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
894070630	RBA 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
894070640	RBA 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
894070650	RBA 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
894070660	RBA 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
894070670	RBA 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
894070680	RBA 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
894070690	RBA 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
894070860	RBA 3,5 / 4,5 J 80 / 30°

894071390	RBA 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
894070700	RBA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
894070710	RBA 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
894070720	RBA 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
894070730	RBA 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
894070740	RBA 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
894070750	RBA 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
894070760	RBA 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
894070770	RBA 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
894070780	RBA 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
894070790	RBA 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
894070870	RBA 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
894071400	RBA 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
894070880	RBA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
894070890	RBA 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
894070900	RBA 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
894070910	RBA 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
894070920	RBA 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
894070930	RBA 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
894070940	RBA 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
894070950	RBA 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
894070960	RBA 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
894070970	RBA 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
894070980	RBA 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
894071410	RBA 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
894070990	RBA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
894071010	RBA 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
894071020	RBA 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
894071030	RBA 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
894071040	RBA 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
894071050	RBA 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
894071060	RBA 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
894071070	RBA 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
894071080	RBA 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
894071090	RBA 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
894071100	RBA 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
894071420	RBA 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
894071110	RBA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
894071120	RBA 3,5 / 4,5 A 80 / 40°

894071130	RBA 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
894071140	RBA 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
894071150	RBA 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
894071160	RBA 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
894071170	RBA 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
894071180	RBA 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
894071190	RBA 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
894071200	RBA 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
894071210	RBA 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
894071430	RBA 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
894071220	RBA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
894071230	RBA 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
894071240	RBA 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
894071250	RBA 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
894071260	RBA 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
894071270	RBA 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
894071280	RBA 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
894071290	RBA 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
894071300	RBA 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
894071310	RBA 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
894071320	RBA 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
894071440	RBA 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

• OB

Código	Modelo
894080000	OB 2,5 / 3,5 R 80
894080010	OB 2,5 / 3,5 A 80
894080020	OB 2,5 / 3,5 F 80
894080030	OB 2,5 / 3,5 T 80
894080040	OB 2,5 / 3,5 L 80
894080050	OB 2,5 / 3,5 E 80
894080060	OB 2,5 / 3,5 P 80
894080070	OB 2,5 / 3,5 S 80
894080080	OB 2,5 / 3,5 K 80
894080090	OB 2,5 / 3,5 W 80
894080400	OB 2,5 / 3,5 J 80
894080440	OB 2,5 / 3,5 B 80
894080100	OB 2,5 / 3,5 R 115
894080110	OB 2,5 / 3,5 A 115

894080120	OB 2,5 / 3,5 F 115
894080130	OB 2,5 / 3,5 T 115
894080140	OB 2,5 / 3,5 L 115
894080150	OB 2,5 / 3,5 E 115
894080160	OB 2,5 / 3,5 P 115
894080170	OB 2,5 / 3,5 S 115
894080180	OB 2,5 / 3,5 K 115
894080190	OB 2,5 / 3,5 W 115
894080410	OB 2,5 / 3,5 J 115
894080450	OB 2,5 / 3,5 B 115
894080200	OB 3,5 / 4,5 R 80
894080210	OB 3,5 / 4,5 A 80
894080220	OB 3,5 / 4,5 F 80
894080230	OB 3,5 / 4,5 T 80
894080240	OB 3,5 / 4,5 L 80
894080250	OB 3,5 / 4,5 E 80
894080260	OB 3,5 / 4,5 P 80
894080270	OB 3,5 / 4,5 S 80
894080280	OB 3,5 / 4,5 K 80
894080290	OB 3,5 / 4,5 W 80
894080420	OB 3,5 / 4,5 J 80
894080460	OB 3,5 / 4,5 B 80
894080300	OB 3,5 / 4,5 R 115
894080310	OB 3,5 / 4,5 A 115
894080320	OB 3,5 / 4,5 F 115
894080330	OB 3,5 / 4,5 T 115
894080340	OB 3,5 / 4,5 L 115
894080350	OB 3,5 / 4,5 E 115
894080360	OB 3,5 / 4,5 P 115
894080370	OB 3,5 / 4,5 S 115
894080380	OB 3,5 / 4,5 K 115
894080390	OB 3,5 / 4,5 W 115
894080430	OB 3,5 / 4,5 J 115
894080470	OB 3,5 / 4,5 B 115

▪ **OBA**

Código	Modelo
894090000	OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894090010	OBA 2,5 / 3,5 A 80 / 15°

894090020	OBA 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
894090030	OBA 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
894090040	OBA 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
894090050	OBA 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
894090060	OBA 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
894090070	OBA 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894090080	OBA 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
894090090	OBA 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
894090800	OBA 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
894091330	OBA 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
894090100	OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
894090110	OBA 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
894090120	OBA 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
894090130	OBA 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
894090140	OBA 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
894090150	OBA 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
894090160	OBA 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
894090170	OBA 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
894090180	OBA 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
894090190	OBA 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
894090810	OBA 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
894091340	OBA 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
894090200	OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894090210	OBA 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
894090220	OBA 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
894090230	OBA 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
894090240	OBA 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
894090250	OBA 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
894090260	OBA 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
894090270	OBA 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
894090280	OBA 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
894090290	OBA 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
894090820	OBA 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
894091350	OBA 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
894090300	OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
894090310	OBA 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
894090320	OBA 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
894090330	OBA 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
894090340	OBA 3,5 / 4,5 L 115 / 15°

894090350	OBA 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
894090360	OBA 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
894090370	OBA 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
894090380	OBA 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
894090390	OBA 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
894090830	OBA 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
894091360	OBA 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
894090400	OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
894090410	OBA 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
894090420	OBA 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
894090430	OBA 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
894090440	OBA 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
894090450	OBA 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
894090460	OBA 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
894090470	OBA 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894090480	OBA 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
894090490	OBA 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
894090840	OBA 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
894091370	OBA 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
894090500	OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
894090510	OBA 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
894090520	OBA 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
894090530	OBA 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
894090540	OBA 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
894090550	OBA 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
894090560	OBA 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
894090570	OBA 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
894090580	OBA 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
894090590	OBA 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
894090850	OBA 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
894091380	OBA 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
894090600	OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
894090610	OBA 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
894090620	OBA 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
894090630	OBA 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
894090640	OBA 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
894090650	OBA 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
894090660	OBA 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
894090670	OBA 3,5 / 4,5 S 80 / 30°

894090680	OBA 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
894090690	OBA 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
894090860	OBA 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
894091390	OBA 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
894090700	OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
894090710	OBA 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
894090720	OBA 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
894090730	OBA 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
894090740	OBA 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
894090750	OBA 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
894090760	OBA 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
894090770	OBA 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
894090780	OBA 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
894090790	OBA 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
894090870	OBA 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
894091400	OBA 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
894090880	OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
894090890	OBA 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
894090900	OBA 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
894090910	OBA 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
894090920	OBA 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
894090930	OBA 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
894090940	OBA 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
894090950	OBA 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894090960	OBA 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
894090970	OBA 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
894090980	OBA 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
894091410	OBA 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
894090990	OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
894091010	OBA 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
894091020	OBA 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
894091030	OBA 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
894091040	OBA 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
894091050	OBA 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
894091060	OBA 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
894091070	OBA 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
894091080	OBA 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
894091090	OBA 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
894091100	OBA 2,5 / 3,5 J 115 / 40°

894091420	OBA 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
894091110	OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
894091120	OBA 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
894091130	OBA 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
894091140	OBA 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
894091150	OBA 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
894091160	OBA 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
894091170	OBA 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
894091180	OBA 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
894091190	OBA 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
894091200	OBA 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
894091210	OBA 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
894091430	OBA 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
894091220	OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
894091230	OBA 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
894091240	OBA 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
894091250	OBA 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
894091260	OBA 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
894091270	OBA 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
894091280	OBA 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
894091290	OBA 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
894091300	OBA 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
894091310	OBA 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
894091320	OBA 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
894091440	OBA 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ DOA

Código	Modelo
894100000	DOA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894100010	DOA 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
894100020	DOA 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
894100030	DOA 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
894100040	DOA 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
894100050	DOA 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
894100060	DOA 2,5 / 3,5 P 80 / 15°
894100070	DOA 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894100080	DOA 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
894100090	DOA 2,5 / 3,5 W 80 / 15°

894100800	DOA 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
894101330	DOA 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
894100100	DOA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
894100110	DOA 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
894100120	DOA 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
894100130	DOA 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
894100140	DOA 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
894100150	DOA 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
894100160	DOA 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
894100170	DOA 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
894100180	DOA 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
894100190	DOA 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
894100810	DOA 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
894101340	DOA 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
894100400	DOA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
894100410	DOA 3,5 / 4,5 A 80 / 15
894100420	DOA 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
894100430	DOA 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
894100440	DOA 3,5 / 4,5 L 80 / 15°
894100450	DOA 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
894100460	DOA 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
894100470	DOA 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
894100480	DOA 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
894100490	DOA 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
894100840	DOA 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
894101350	DOA 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
894100500	DOA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
894100510	DOA 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
894100520	DOA 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
894100530	DOA 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
894100540	DOA 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
894100550	DOA 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
894100560	DOA 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
894100570	DOA 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
894100580	DOA 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
894100590	DOA 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
894100850	DOA 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
894101360	DOA 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
894100200	DOA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°

894100210	DOA 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
894100220	DOA 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
894100230	DOA 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
894100240	DOA 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
894100250	DOA 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
894100260	DOA 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
894100270	DOA 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
894100280	DOA 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
894100290	DOA 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
894100820	DOA 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
894101370	DOA 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
894100300	DOA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
894100310	DOA 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
894100320	DOA 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
894100330	DOA 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
894100340	DOA 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
894100350	DOA 2,5 / 3,5 E 115 / 30°
894100360	DOA 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
894100370	DOA 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
894100380	DOA 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
894100390	DOA 2,5 / 3,5 W 115 / 30°
894100830	DOA 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
894101380	DOA 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
894100600	DOA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
894100610	DOA 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
894100620	DOA 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
894100630	DOA 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
894100640	DOA 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
894100650	DOA 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
894100660	DOA 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
894100670	DOA 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
894100680	DOA 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
894100690	DOA 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
894100860	DOA 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
894101390	DOA 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
894100700	DOA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
894100710	DOA 3,5 / 4,5 A 115 / 30°
894100720	DOA 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
894100730	DOA 3,5 / 4,5 T 115 / 30°

894100740	DOA 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
894100750	DOA 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
894100760	DOA 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
894100770	DOA 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
894100780	DOA 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
894100790	DOA 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
894100870	DOA 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
894101400	DOA 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
894100880	DOA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
894100890	DOA 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
894100900	DOA 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
894100910	DOA 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
894100920	DOA 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
894100930	DOA 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
894100940	DOA 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
894100950	DOA 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
894100960	DOA 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
894100970	DOA 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
894100980	DOA 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
894101410	DOA 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
894100990	DOA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
894101010	DOA 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
894101020	DOA 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
894101030	DOA 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
894101040	DOA 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
894101050	DOA 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
894101060	DOA 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
894101070	DOA 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
894101080	DOA 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
894101090	DOA 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
894101100	DOA 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
894101420	DOA 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
894101110	DOA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
894101120	DOA 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
894101130	DOA 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
894101140	DOA 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
894101150	DOA 3,5 / 4,5 L 80 / 40°
894101160	DOA 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
894101170	DOA 3,5 / 4,5 P 80 / 40°

894101180	DOA 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
894101190	DOA 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
894101200	DOA 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
894101210	DOA 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
894101430	DOA 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
894101220	DOA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
894101230	DOA 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
894101240	DOA 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
894101250	DOA 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
894101260	DOA 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
894101270	DOA 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
894101280	DOA 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
894101290	DOA 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
894101300	DOA 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
894101310	DOA 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
894101320	DOA 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
894101440	DOA 3,5 / 4,5 B 115 / 40°

▪ TB

Código	Modelo
894110000	TB 2,5 / 3,5 R 80
894110010	TB 2,5 / 3,5 A 80
894110020	TB 2,5 / 3,5 F 80
894110030	TB 2,5 / 3,5 T 80
894110040	TB 2,5 / 3,5 L 80
894110050	TB 2,5 / 3,5 E 80
894110060	TB 2,5 / 3,5 P 80
894110070	TB 2,5 / 3,5 S 80
894110080	TB 2,5 / 3,5 K 80
894110090	TB 2,5 / 3,5 W 80
894110400	TB 2,5 / 3,5 J 80
894110440	TB 2,5 / 3,5 B 80
894110100	TB 2,5 / 3,5 R 115
894110110	TB 2,5 / 3,5 A 115
894110120	TB 2,5 / 3,5 F 115
894110130	TB 2,5 / 3,5 T 115
894110140	TB 2,5 / 3,5 L 115
894110150	TB 2,5 / 3,5 E 115
894110160	TB 2,5 / 3,5 P 115

894110170	TB 2,5 / 3,5 S 115
894110180	TB 2,5 / 3,5 K 115
894110190	TB 2,5 / 3,5 W 115
894110410	TB 2,5 / 3,5 J 115
894110450	TB 2,5 / 3,5 B 115
894110200	TB 3,5 / 4,5 R 80
894110210	TB 3,5 / 4,5 A 80
894110220	TB 3,5 / 4,5 F 80
894110230	TB 3,5 / 4,5 T 80
894110240	TB 3,5 / 4,5 L 80
894110250	TB 3,5 / 4,5 E 80
894110260	TB 3,5 / 4,5 P 80
894110270	TB 3,5 / 4,5 S 80
894110280	TB 3,5 / 4,5 K 80
894110290	TB 3,5 / 4,5 W 80
894110420	TB 3,5 / 4,5 J 80
894110460	TB 3,5 / 4,5 B 80
894110300	TB 3,5 / 4,5 R 115
894110310	TB 3,5 / 4,5 A 115
894110320	TB 3,5 / 4,5 F 115
894110330	TB 3,5 / 4,5 T 115
894110340	TB 3,5 / 4,5 L 115
894110350	TB 3,5 / 4,5 E 115
894110360	TB 3,5 / 4,5 P 115
894110370	TB 3,5 / 4,5 S 115
894110380	TB 3,5 / 4,5 K 115
894110390	TB 3,5 / 4,5 W 115
894110430	TB 3,5 / 4,5 J 115
894110470	TB 3,5 / 4,5 B 115

▪ PA

Código	Modelo
894120000	PA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°
894120010	PA 2,5 / 3,5 A 80 / 15°
894120020	PA 2,5 / 3,5 F 80 / 15°
894120030	PA 2,5 / 3,5 T 80 / 15°
894120040	PA 2,5 / 3,5 L 80 / 15°
894120050	PA 2,5 / 3,5 E 80 / 15°
894120060	PA 2,5 / 3,5 P 80 / 15°

894120070	PA 2,5 / 3,5 S 80 / 15°
894120080	PA 2,5 / 3,5 K 80 / 15°
894120090	PA 2,5 / 3,5 W 80 / 15°
894120800	PA 2,5 / 3,5 J 80 / 15°
894121330	PA 2,5 / 3,5 B 80 / 15°
894120100	PA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°
894120110	PA 2,5 / 3,5 A 115 / 15°
894120120	PA 2,5 / 3,5 F 115 / 15°
894120130	PA 2,5 / 3,5 T 115 / 15°
894120140	PA 2,5 / 3,5 L 115 / 15°
894120150	PA 2,5 / 3,5 E 115 / 15°
894120160	PA 2,5 / 3,5 P 115 / 15°
894120170	PA 2,5 / 3,5 S 115 / 15°
894120180	PA 2,5 / 3,5 K 115 / 15°
894120190	PA 2,5 / 3,5 W 115 / 15°
894120810	PA 2,5 / 3,5 J 115 / 15°
894121340	PA 2,5 / 3,5 B 115 / 15°
894120200	PA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°
894120210	PA 2,5 / 3,5 A 80 / 30°
894120220	PA 2,5 / 3,5 F 80 / 30°
894120230	PA 2,5 / 3,5 T 80 / 30°
894120240	PA 2,5 / 3,5 L 80 / 30°
894120250	PA 2,5 / 3,5 E 80 / 30°
894120260	PA 2,5 / 3,5 P 80 / 30°
894120270	PA 2,5 / 3,5 S 80 / 30°
894120280	PA 2,5 / 3,5 K 80 / 30°
894120290	PA 2,5 / 3,5 W 80 / 30°
894120820	PA 2,5 / 3,5 J 80 / 30°
894121350	PA 2,5 / 3,5 B 80 / 30°
894120300	PA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°
894120310	PA 2,5 / 3,5 A 115 / 30°
894120320	PA 2,5 / 3,5 F 115 / 30°
894120330	PA 2,5 / 3,5 T 115 / 30°
894120340	PA 2,5 / 3,5 L 115 / 30°
894120350	PA 2,5 / 3,5E 115 / 30°
894120360	PA 2,5 / 3,5 P 115 / 30°
894120370	PA 2,5 / 3,5 S 115 / 30°
894120380	PA 2,5 / 3,5 K 115 / 30°
894120390	PA 2,5 / 3,5 W 115 / 30°

894120830	PA 2,5 / 3,5 J 115 / 30°
894121360	PA 2,5 / 3,5 B 115 / 30°
894120400	PA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°
894120410	PA 3,5 / 4,5 A 80 / 15°
894120420	PA 3,5 / 4,5 F 80 / 15°
894120430	PA 3,5 / 4,5 T 80 / 15°
894120450	PA 3,5 / 4,5 E 80 / 15°
894120460	PA 3,5 / 4,5 P 80 / 15°
894120470	PA 3,5 / 4,5 S 80 / 15°
894120480	PA 3,5 / 4,5 K 80 / 15°
894120490	PA 3,5 / 4,5 W 80 / 15°
894120840	PA 3,5 / 4,5 J 80 / 15°
894121370	PA 3,5 / 4,5 B 80 / 15°
894120500	PA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°
894120510	PA 3,5 / 4,5 A 115 / 15°
894120520	PA 3,5 / 4,5 F 115 / 15°
894120530	PA 3,5 / 4,5 T 115 / 15°
894120540	PA 3,5 / 4,5 L 115 / 15°
894120550	PA 3,5 / 4,5 E 115 / 15°
894120560	PA 3,5 / 4,5 P 115 / 15°
894120570	PA 3,5 / 4,5 S 115 / 15°
894120580	PA 3,5 / 4,5 K 115 / 15°
894120590	PA 3,5 / 4,5 W 115 / 15°
894120850	PA 3,5 / 4,5 J 115 / 15°
894121380	PA 3,5 / 4,5 B 115 / 15°
894120600	PA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°
894120610	PA 3,5 / 4,5 A 80 / 30°
894120620	PA 3,5 / 4,5 F 80 / 30°
894120630	PA 3,5 / 4,5 T 80 / 30°
894120640	PA 3,5 / 4,5 L 80 / 30°
894120650	PA 3,5 / 4,5 E 80 / 30°
894120660	PA 3,5 / 4,5 P 80 / 30°
894120670	PA 3,5 / 4,5 S 80 / 30°
894120680	PA 3,5 / 4,5 K 80 / 30°
894120690	PA 3,5 / 4,5 W 80 / 30°
894120860	PA 3,5 / 4,5 J 80 / 30°
894121390	PA 3,5 / 4,5 B 80 / 30°
894120700	PA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°
894120710	PA 3,5 / 4,5 A 115 / 30°

894120720	PA 3,5 / 4,5 F 115 / 30°
894120730	PA 3,5 / 4,5 T 115 / 30°
894120740	PA 3,5 / 4,5 L 115 / 30°
894120750	PA 3,5 / 4,5 E 115 / 30°
894120760	PA 3,5 / 4,5 P 115 / 30°
894120770	PA 3,5 / 4,5 S 115 / 30°
894120780	PA 3,5 / 4,5 K 115 / 30°
894120790	PA 3,5 / 4,5 W 115 / 30°
894120870	PA 3,5 / 4,5 J 115 / 30°
894121400	PA 3,5 / 4,5 B 115 / 30°
894120880	PA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°
894120890	PA 2,5 / 3,5 A 80 / 40°
894120900	PA 2,5 / 3,5 F 80 / 40°
894120910	PA 2,5 / 3,5 T 80 / 40°
894120920	PA 2,5 / 3,5 L 80 / 40°
894120930	PA 2,5 / 3,5 E 80 / 40°
894120940	PA 2,5 / 3,5 P 80 / 40°
894120950	PA 2,5 / 3,5 S 80 / 40°
894120960	PA 2,5 / 3,5 K 80 / 40°
894120970	PA 2,5 / 3,5 W 80 / 40°
894120980	PA 2,5 / 3,5 J 80 / 40°
894121410	PA 2,5 / 3,5 B 80 / 40°
894120990	PA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°
894121010	PA 2,5 / 3,5 A 115 / 40°
894121020	PA 2,5 / 3,5 F 115 / 40°
894121030	PA 2,5 / 3,5 T 115 / 40°
894121040	PA 2,5 / 3,5 L 115 / 40°
894121050	PA 2,5 / 3,5 E 115 / 40°
894121060	PA 2,5 / 3,5 P 115 / 40°
894121070	PA 2,5 / 3,5 S 115 / 40°
894121080	PA 2,5 / 3,5 K 115 / 40°
894121090	PA 2,5 / 3,5 W 115 / 40°
894121100	PA 2,5 / 3,5 J 115 / 40°
894121420	PA 2,5 / 3,5 B 115 / 40°
894121110	PA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°
894121120	PA 3,5 / 4,5 A 80 / 40°
894121130	PA 3,5 / 4,5 F 80 / 40°
894121140	PA 3,5 / 4,5 T 80 / 40°
894121150	PA 3,5 / 4,5 L 80 / 40°

894121160	PA 3,5 / 4,5 E 80 / 40°
894121170	PA 3,5 / 4,5 P 80 / 40°
894121180	PA 3,5 / 4,5 S 80 / 40°
894121190	PA 3,5 / 4,5 K 80 / 40°
894121200	PA 3,5 / 4,5 W 80 / 40°
894121210	PA 3,5 / 4,5 J 80 / 40°
894121430	PA 3,5 / 4,5 B 80 / 40°
894121220	PA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°
894121230	PA 3,5 / 4,5 A 115 / 40°
894121240	PA 3,5 / 4,5 F 115 / 40°
894121250	PA 3,5 / 4,5 T 115 / 40°
894121260	PA 3,5 / 4,5 L 115 / 40°
894121270	PA 3,5 / 4,5 E 115 / 40°
894121280	PA 3,5 / 4,5 P 115 / 40°
894121290	PA 3,5 / 4,5 S 115 / 40°
894121300	PA 3,5 / 4,5 K 115 / 40°
894121310	PA 3,5 / 4,5 W 115 / 40°
894121320	PA 3,5 / 4,5 J 115 / 40°
894121440	PA 3,5 / 4,5 B 115 / 40°



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior, 437 - Jardim São Paulo
São Carlos/SP - CEP 13570-460 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

n.º ANVISA: 80356130082 - Nome Técnico: Cânulas

Metálicas - Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-99R Rev.: 02