



**Cânula de
Microdebridação
Mini - ENTM**

Manual do Usuário



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico **www.razek.com.br**, no Menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu nº do registro ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o Nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail **posvenda1@razek.com.br**.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A Cânula de Microdebridação Mini ENTM possui a função de realizar a microdebridação de tecidos em procedimentos de otorrinolaringologia e bucomaxilofacial.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- **Norma/Diretiva:** RDC 185/2001 (ANVISA)
- **Classificação:** Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

- **Esterilizado por:** Raio Gama
- **Validade da esterilização:** 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não utilize a Cânula de Microdebridação Mini ENTM em mau estado (tortas ou quebradas), pois acarretará trepidação ou vibração excessiva;



Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar a Cânula de Microdebridação Mini ENTM;



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;



Nunca utilize um dispositivo que

apresente superaquecimento;



A substituição da Cânula de Microdebridação Mini ENTM deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;




NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



PROIBIDO REPROCESSAR.


CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃO MINI ENTM

A Cânula de Microdebridação Mini ENTM é composta por uma **cânula de corte e sucção** e uma **cânula guia**. A cânula de corte e sucção está localizada dentro da cânula guia.

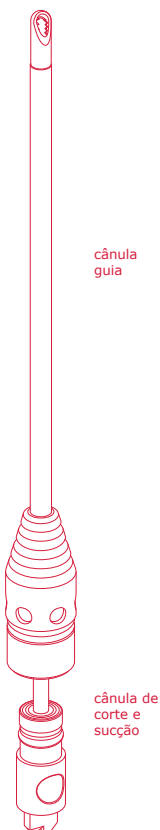


A família da Cânula para Microdebridação Mini ENTM apresenta diferentes tipos de encaixe. A seguir estão indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a cânula necessária para cada equipamento.


• Encaixe R

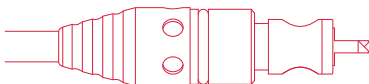


• Encaixe SZ

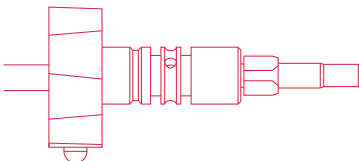

• Encaixe ST

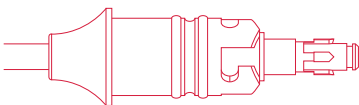

• Encaixe X

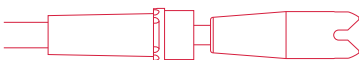

MODELOS

Os modelos da família da Cânula de Microdebridação Mini ENTM serão diferenciados pelo tipo de ponta ativa, tipo de encaixe e diâmetros internos e externos:

• **Tipos de Ponta Ativa:** MCC - MCCAII - MCCAIO - ACC - ACCAII - ACCAIO - ACCS - ACCSAII - ACCSAIO - MCCS - MCCSAII - MCCSAIO - DCM - RB - RBA - DOA - BA - BAA - PA - OB - OBA

• **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X

• **Diâmetros Internos/Externos:** 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5

• **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

• **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°

• **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis com os diferentes tipos de ponteira (corte), suas indicações e as suas possíveis combinações.

• MCC

As cânulas com corte tipo MCC (Moderado Cortador de Cartilagem) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3000 rpm.



Modelos:

• **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X


• **Diâmetros Internos/Externos:** 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5

• **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

• **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• MCCAII

As cânulas com corte tipo MCCAII (Moderado Cortador de Cartilagem Angulada Interna) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

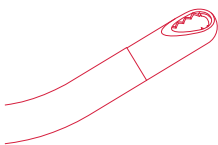


Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• MCCAIO

As cânulas com corte tipo MCCAIO (Moderado Cortador de Cartilagem Angulada Externa) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

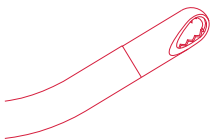

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• ACC

As cânulas com corte tipo ACC (Agressivo Cortador Cartilagem) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3000 rpm.




Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Guia de Soro:** Com guia de soro -

Sem guia de soro

• ACCAI

As cânulas com corte tipo ACCAI (Agressivo Cortador Cartilagem Angulada Interna) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

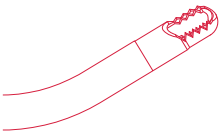


Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• ACCAO

As cânulas com corte tipo ACCAO (Agressivo Cortador Cartilagem Angulada Externa) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

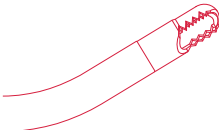

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• ACCS

As cânulas com corte tipo ACCS (Agressivo Cortador de Cartilagem Small) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso, com duas arestas cortantes. Rotação máxima: 3000 rpm.



Modelos:


- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5

- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

▪ **ACCSAI**

As cânulas com corte tipo ACCSAI (Agressivo Cortador de Cartilagem Small Angulada Interna) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

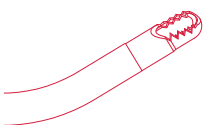

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X

- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5


- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°

- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

▪ **ACCSAO**

As cânulas com corte tipo ACCSAO (Agressivo Cortador de Cartilagem Small Angulada Externa) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

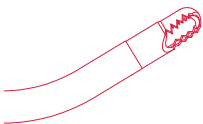

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X

- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5

- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°

- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

▪ **MCCS**

As cânulas com corte tipo MCCS (Moderado Cortador de Cartilagem Small) devem ser utilizadas para remoções precisas de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3000 rpm.



Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X


- **Diâmetros Internos/Externos:** 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5

- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

- **Guia de Soro:** Com guia de soro
- Sem guia de soro

- **MCCSAI**

As cânulas com corte tipo MCCSAI (Moderado Cortador de Cartilagem Small Angulado Interno) devem ser utilizadas para remoções precisas de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

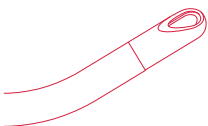

- **Modelos:**

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X

- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5


- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°

- **Guia de Soro:** Com guia de soro
- Sem guia de soro

- **MCCSAO**

As cânulas com corte tipo MCCSAO (Moderado Cortador de Cartilagem Small Angulado Externo) devem ser utilizadas para remoções precisas de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

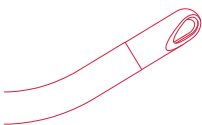

- **Modelos:**

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X

- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5

- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm

- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°

- **Guia de Soro:** Com guia de soro
- Sem guia de soro

- **DCM**

As cânulas com corte tipo DCM (Descolador Cortador Moderado) devem ser utilizadas para deslocar e cortar o tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3000 rpm.



Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 1,7/2,2 - 2,2/2,8 - 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Guia de Soro:** Com guia de soro
- Sem guia de soro
- **RB**


As cânulas com corte tipo RB (Broca Redonda) devem ser utilizadas para pequenas remoções em tecidos ósseos. Rotação máxima: 5000 rpm.



Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Guia de Soro:** Com guia de soro
- Sem guia de soro
- **RBA**


As cânulas com corte tipo RBA (Broca Redonda Angulada) devem ser utilizadas para pequenas remoções em tecidos ósseos. Rotação máxima: 1500 rpm.

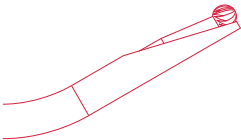

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro
- Sem guia de soro
- **DOA**

As cânulas com corte tipo DOA (Debridador Oval Angulado) devem ser utilizadas para debridação. Rotação máxima: 1500 rpm.

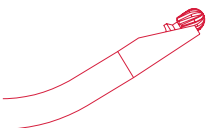

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

▪ BA

As cânulas com corte tipo BA (Broca Afilada) devem ser utilizadas para debridação. Rotação máxima: 5000 rpm.




Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/ 4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

▪ BAA

As cânulas com corte tipo BAA (Broca Afilada Angulada Interna) devem ser utilizadas para debridação. Rotação máxima: 1500 rpm.

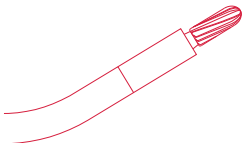


Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

▪ PA

As cânulas com corte tipo PA (Polidor Angulado) devem ser utilizadas para realizar acabamento em tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 1500 rpm.

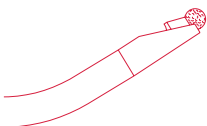

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• OB

As cânulas com corte tipo OB (Broca Oval) devem ser utilizadas para moderadas remoções de tecido ósseo. Rotação máxima: 5000 rpm.




Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

• OBA

As cânulas com corte tipo OBA (Broca Oval Angulada Interna) devem ser utilizadas para moderadas remoções de tecido ósseo. Rotação máxima: 1500 rpm.

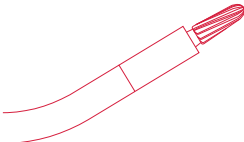

Modelos:

- **Tipos de Encaixe:** R - SZ - ST - X
- **Diâmetros Internos/Externos:** 2,5/3,5 - 3,5/4,5
- **Comprimentos Disponíveis:** 80 mm - 115 mm
- **Angulações Disponíveis:** 15° - 30° - 40°
- **Guia de Soro:** Com guia de soro - Sem guia de soro

ACESSÓRIO



A escova deve ser utilizada para remover tecidos que podem acumular no tubo da cânula interna durante o procedimento cirúrgico e acompanha os modelos com diâmetros 2,5 / 3,5 e 3,5 / 4,5 e ponta ativa MCC - MCCAII - MCCAIO - ACC -

ACCAI - ACCAO - ACCS - ACCSAI - ACCSAO - MCCS - MCCSAI - MCCSAO - DCM.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1 | Inserir a cânula selecionada no motor adequado, até que a mesma se encaixe completamente;



2 | Ajustar a rotação adequada no equipamento.

PROCEDIMENTO PÓS-OPERATÓRIOS

1 | Retirar a cânula do motor.



Após o uso da Cânula de Microdebridação Mini ENTM, a mesma deverá ser descartada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme

determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o lote.



Data de validade do produto.



Proibido Reprocessar.



Produto esterilizado através de radiação.



Fabricado por.



Manter seco.



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,

437 | Jardim São Paulo

São Carlos/SP | CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Téc. Renaldo Massini Jr.

CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130086

Nome Técnico: Lâmina descartável

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946



- MCC

Modelo	Código
MCC 1,7 / 2,2 R 80	893670200
MCC 1,7 / 2,2 R 115	893670300
MCC 2,2 / 2,8 R 80	893670400
MCC 2,2 / 2,8 R 115	893670500
MCC 2,5 / 3,5 R 80	893670600
MCC 2,5 / 3,5 R 115	893670700
MCC 3,5 / 4,5 R 80	893670800
MCC 3,5 / 4,5 R 115	893670900
MCC 1,7 / 2,2 SZ 80	893672000
MCC 1,7 / 2,2 SZ 115	893672100
MCC 2,2 / 2,8 SZ 80	893672200
MCC 2,2 / 2,8 SZ 115	893672300
MCC 2,5 / 3,5 SZ 80	893672400
MCC 2,5 / 3,5 SZ 115	893672500
MCC 3,5 / 4,5 SZ 80	893672600
MCC 3,5 / 4,5 SZ 115	893672700
MCC 1,7 / 2,2 ST 80	893672800
MCC 1,7 / 2,2 ST 115	893672900
MCC 2,2 / 2,8 ST 80	893673000
MCC 2,2 / 2,8 ST 115	893673100
MCC 2,5 / 3,5 ST 80	893673200
MCC 2,5 / 3,5 ST 115	893673300
MCC 3,5 / 4,5 ST 80	893673400
MCC 3,5 / 4,5 ST 115	893673500
MCC 1,7 / 2,2 X 80	893673600
MCC 1,7 / 2,2 X 115	893673700
MCC 2,2 / 2,8 X 80	893673800
MCC 2,2 / 2,8 X 115	893673900
MCC 2,5 / 3,5 X 80	893674000
MCC 2,5 / 3,5 X 115	893674100
MCC 3,5 / 4,5 X 80	893674200
MCC 3,5 / 4,5 X 115	893674300
MCC 1,7 / 2,2 R 80 com guia de soró	893671200
MCC 1,7 / 2,2 R 115 com guia de soró	893671300
MCC 2,2 / 2,8 R 80 com guia de soró	893671400
MCC 2,2 / 2,8 R 115 com guia de soró	893671500
MCC 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soró	893671600
MCC 2,5 / 3,5 R 115 com guia de soró	893671700
MCC 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soró	893671800
MCC 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soró	893671900
MCC 1,7 / 2,2 SZ 80 com guia de soró	893674400
MCC 1,7 / 2,2 SZ 115 com guia de soró	893674500
MCC 2,2 / 2,8 SZ 80 com guia de soró	893674600
MCC 2,2 / 2,8 SZ 115 com guia de soró	893674700
MCC 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soró	893674800
MCC 2,5 / 3,5 SZ 115 com guia de soró	893674900
MCC 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soró	893675000
MCC 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soró	893675100
MCC 1,7 / 2,2 ST 80 com guia de soró	893675200
MCC 1,7 / 2,2 ST 115 com guia de soró	893675300
MCC 2,2 / 2,8 ST 80 com guia de soró	893675400
MCC 2,2 / 2,8 ST 115 com guia de soró	893675500
MCC 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soró	893675600
MCC 2,5 / 3,5 ST 115 com guia de soró	893675700
MCC 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soró	893675800
MCC 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soró	893675900
MCC 1,7 / 2,2 X 80 com guia de soró	893676000
MCC 1,7 / 2,2 X 115 com guia de soró	893676100
MCC 2,2 / 2,8 X 80 com guia de soró	893676200
MCC 2,2 / 2,8 X 115 com guia de soró	893676200
MCC 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soró	893676400
MCC 2,5 / 3,5 X 150 com guia de soró	893676500
MCC 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soró	893676600
MCC 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soró	893676700

- MCCA

Modelo	Código
MCCA 2,2 / 2,8 R 80 / 15°	893680000
MCCA 2,2 / 2,8 R 80 / 30°	893680200
MCCA 2,2 / 2,8 R 80 / 40°	893682400
MCCA 2,2 / 2,8 R 115 / 15°	893680100
MCCA 2,2 / 2,8 R 115 / 30°	893680300
MCCA 2,2 / 2,8 R 115 / 40°	893682500
MCCA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893680400
MCCA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893680600
MCCA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893682600
MCCA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893680500
MCCA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893680700
MCCA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893682700
MCCA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893680800
MCCA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893681000
MCCA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893682800
MCCA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893680900
MCCA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893681100
MCCA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893682900
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15°	893683000
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30°	893683100
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40°	893683200
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15°	893673300
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30°	893683400
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40°	893683500
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893683600
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893683700

MCCA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893683800
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893683900
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893684000
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893684100
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893684200
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893684300
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893684400
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893684500
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893684600
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893684700
MCCA 2,2 / 2,8 ST 80 / 15°	893684800
MCCA 2,2 / 2,8 ST 80 / 30°	893684900
MCCA 2,2 / 2,8 ST 80 / 40°	893685000
MCCA 2,2 / 2,8 ST 115 / 15°	893685100
MCCA 2,2 / 2,8 ST 115 / 30°	893685200
MCCA 2,2 / 2,8 ST 115 / 40°	893685300
MCCA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893685400
MCCA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893685500
MCCA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893685600
MCCA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893685700
MCCA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893685800
MCCA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893685900
MCCA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893686000
MCCA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893686100
MCCA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893686200
MCCA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893686300
MCCA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893686400
MCCA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893686500
MCCA 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893686600
MCCA 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893686700
MCCA 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893686800
MCCA 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893686900
MCCA 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893687000
MCCA 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893687100
MCCA 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893687200
MCCA 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893687300
MCCA 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893687400
MCCA 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893687500
MCCA 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893687600
MCCA 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893687700
MCCA 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893687800
MCCA 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893687900
MCCA 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893688000
MCCA 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893688100
MCCA 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893688200
MCCA 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893688300
MCCA 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soró	893681600
MCCA 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soró	893681800
MCCA 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soró	893688600
MCCA 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soró	893681700
MCCA 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soró	893681900
MCCA 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soró	893687000
MCCA 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soró	893682000
MCCA 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soró	893682200
MCCA 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soró	893688800
MCCA 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soró	893682100
MCCA 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soró	893682300
MCCA 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soró	893688900
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15° com guia de soró	893689000
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30° com guia de soró	893689100
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40° com guia de soró	893689200
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15° com guia de soró	893689300
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30° com guia de soró	893689400
MCCA 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40° com guia de soró	893689500
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soró	893689600
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soró	893689700
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soró	893689800
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soró	893689900
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soró	893681010
MCCA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soró	893681020
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soró	893681030
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soró	893681040
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soró	893681050
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soró	893681060
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soró	893681070
MCCA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soró	893681080
MCCA 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soró	893681090
MCCA 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soró	893681110
MCCA 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soró	893681120
MCCA 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soró	893681130
MCCA 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soró	893681140
MCCA 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soró	893681150
MCCA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soró	893681160
MCCA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soró	893681170
MCCA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soró	893681180
MCCA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soró	893681190
MCCA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soró	893681210
MCCA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soró	893681220
MCCA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soró	893681230
MCCA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soró	893681240
MCCA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soró	893681250
MCCA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soró	893681260
MCCA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soró	893681270
MCCA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soró	893681280
MCCA 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soró	893681290
MCCA 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soró	893681310
MCCA 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soró	893681320
MCCA 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soró	893681330

MCCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soro	893681340
MCCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soro	893681350
MCCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893681360
MCCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893681370
MCCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893681380
MCCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893681390
MCCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893681410
MCCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893681420
MCCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893681430
MCCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893681440
MCCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893681450
MCCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893681460
MCCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893681470
MCCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893681480

- MCCA0

Modelo	Código
MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 15°	893690000
MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 30°	893690200
MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 40°	893692400
MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 15°	893690100
MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 30°	893690300
MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 40°	893692500
MCCA0 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893690400
MCCA0 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893690600
MCCA0 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893692600
MCCA0 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893690500
MCCA0 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893690700
MCCA0 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893692700
MCCA0 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893690800
MCCA0 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893691000
MCCA0 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893692800
MCCA0 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893690900
MCCA0 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893691100
MCCA0 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893692900
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15°	893693000
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30°	893693100
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40°	893693200
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15°	893693300
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30°	893693400
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40°	893693500
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893693600
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893693700
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893693800
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893693900
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893694000
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893694100
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893694200
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893694300
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893694400
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893694500
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893694600
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893694700
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 80 / 15°	893694800
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 80 / 30°	893694900
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 80 / 40°	893695000
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 115 / 15°	893695100
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 115 / 30°	893695200
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 115 / 40°	893695300
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893695400
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893695500
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893695600
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893695700
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893695800
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893695900
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893696000
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893696100
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893696200
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893696300
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893696400
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893696500
MCCA0 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893696600
MCCA0 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893696700
MCCA0 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893696800
MCCA0 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893696900
MCCA0 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893697000
MCCA0 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893697100
MCCA0 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893697200
MCCA0 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893697300
MCCA0 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893697400
MCCA0 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893697500
MCCA0 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893697600
MCCA0 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893697700
MCCA0 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893697800
MCCA0 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893697900
MCCA0 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893698000
MCCA0 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893698100
MCCA0 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893698200
MCCA0 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893698300
MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 15° com guia de soro	893691200
MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 30° com guia de soro	893691400
MCCA0 2,2 / 2,8 R 80 / 40° com guia de soro	893698400
MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 15° com guia de soro	893691300
MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 30° com guia de soro	893691500
MCCA0 2,2 / 2,8 R 115 / 40° com guia de soro	893698500

MCCA0 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893691600
MCCA0 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893691800
MCCA0 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893698600
MCCA0 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893691700
MCCA0 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893691900
MCCA0 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893698700
MCCA0 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893692000
MCCA0 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893692200
MCCA0 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893698800
MCCA0 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893692100
MCCA0 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893692300
MCCA0 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893698900
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15° com guia de soro	893699000
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30° com guia de soro	893699100
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40° com guia de soro	893685200
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15° com guia de soro	893699300
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30° com guia de soro	893699400
MCCA0 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40° com guia de soro	893699500
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893699600
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893699700
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893699800
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893699900
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893691010
MCCA0 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893691020
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893691030
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893691040
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893691050
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893691070
MCCA0 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893691080
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soro	893691090
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soro	893691110
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soro	893691120
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soro	893691130
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soro	893691140
MCCA0 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soro	893691150
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893691160
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893691170
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893691180
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893691190
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893691210
MCCA0 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893691220
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893691230
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893691240
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893691250
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893691260
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893691270
MCCA0 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893691280
MCCA0 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soro	893691290
MCCA0 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soro	893691310
MCCA0 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soro	893691320
MCCA0 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soro	893691330
MCCA0 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soro	893691340
MCCA0 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soro	893691350
MCCA0 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893691360
MCCA0 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893691370
MCCA0 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893691380
MCCA0 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893691390
MCCA0 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893691410
MCCA0 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893691420
MCCA0 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893691430
MCCA0 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893691440
MCCA0 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893691450
MCCA0 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893691460
MCCA0 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893691470
MCCA0 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893691480

- ACC

Modelo	Código
ACC 1,7 / 2,2 R 80	893700200
ACC 1,7 / 2,2 R 115	893700300
ACC 2,2 / 2,8 R 80	893700400
ACC 2,2 / 2,8 R 115	893700500
ACC 2,5 / 3,5 R 80	893700600
ACC 2,5 / 3,5 R 115	893700700
ACC 3,5 / 4,5 R 80	893700800
ACC 3,5 / 4,5 R 115	893700900
ACC 1,7 / 2,2 SZ 80	893702000
ACC 1,7 / 2,2 SZ 115	893702100
ACC 2,2 / 2,8 SZ 80	893702200
ACC 2,2 / 2,8 SZ 115	893702300
ACC 2,5 / 3,5 SZ 80	893702400
ACC 2,5 / 3,5 SZ 115	893702500
ACC 3,5 / 4,5 SZ 80	893702600
ACC 3,5 / 4,5 SZ 115	893702700
ACC 1,7 / 2,2 ST 80	893702800
ACC 1,7 / 2,2 ST 115	893702900
ACC 2,2 / 2,8 ST 80	893703000
ACC 2,2 / 2,8 ST 115	893703100
ACC 2,5 / 3,5 ST 80	893703200
ACC 2,5 / 3,5 ST 115	893703300
ACC 3,5 / 4,5 ST 80	893703400
ACC 3,5 / 4,5 ST 115	893703500
ACC 1,7 / 2,2 X 80	893703600
ACC 1,7 / 2,2 X 115	893703700
ACC 2,2 / 2,8 X 80	893703800

ACC 2,2 / 2,8 X 115	893703900
ACC 2,5 / 3,5 X 80	893704000
ACC 2,5 / 3,5 X 115	893704100
ACC 3,5 / 4,5 X 80	893704200
ACC 3,5 / 4,5 X 115	893704300
ACC 1,7 / 2,2 R 80 com guia de soró	893701200
ACC 1,7 / 2,2 R 115 com guia de soró	893701300
ACC 2,2 / 2,8 R 80 com guia de soró	893701400
ACC 2,2 / 2,8 R 115 com guia de soró	893701500
ACC 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soró	893701600
ACC 2,5 / 3,5 R 150 com guia de soró	893701700
ACC 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soró	893701800
ACC 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soró	893701900
ACC 1,7 / 2,2 SZ 80 com guia de soró	893704400
ACC 1,7 / 2,2 SZ 115 com guia de soró	893704500
ACC 2,2 / 2,8 SZ 80 com guia de soró	893704600
ACC 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soró	893704800
ACC 2,5 / 3,5 SZ 150 com guia de soró	893704900
ACC 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soró	893705000
ACC 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soró	893705100
ACC 1,7 / 2,2 ST 80 com guia de soró	893705200
ACC 1,7 / 2,2 ST 115 com guia de soró	893705300
ACC 2,2 / 2,8 ST 80 com guia de soró	893705400
ACC 2,2 / 2,8 ST 115 com guia de soró	893705500
ACC 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soró	893705600
ACC 2,5 / 3,5 ST 150 com guia de soró	893705700
ACC 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soró	893705800
ACC 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soró	893705900
ACC 1,7 / 2,2 X 80 com guia de soró	893706000
ACC 1,7 / 2,2 X 115 com guia de soró	893706100
ACC 2,2 / 2,8 X 80 com guia de soró	893706200
ACC 2,2 / 2,8 X 115 com guia de soró	893706300
ACC 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soró	893706400
ACC 2,5 / 3,5 X 150 com guia de soró	893706500
ACC 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soró	893706600
ACC 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soró	893706700

- ACCAI

Modelo	Código
ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15°	893710000
ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30°	893710200
ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40°	893712400
ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15°	893710100
ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30°	893710300
ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40°	893712500
ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893710400
ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893710600
ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893712600
ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893710500
ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893710700
ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893712700
ACCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893710800
ACCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893711000
ACCAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893712800
ACCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893710900
ACCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893711100
ACCAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893712900
ACCAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15°	893713000
ACCAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30°	893713100
ACCAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40°	893713200
ACCAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15°	893713300
ACCAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30°	893713400
ACCAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40°	893713500
ACCAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893713600
ACCAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893713700
ACCAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893713800
ACCAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893713900
ACCAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893714000
ACCAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893714100
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893714200
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893714300
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893714400
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893714500
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893714600
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893714700
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 15°	893714800
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 30°	893714900
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 40°	893715000
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 15°	893715100
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 30°	893715200
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 40°	893715300
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893715400
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893715500
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893715600
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893715700
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893715800
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893715900
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893716000
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893716100
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893716200
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893716300
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893716500
ACCAI 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893716600
ACCAI 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893716700
ACCAI 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893716800

ACCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893716900
ACCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893717000
ACCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893717100
ACCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893717200
ACCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893717300
ACCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893717400
ACCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893717500
ACCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893717600
ACCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893717700
ACCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893717800
ACCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893717900
ACCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893718000
ACCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893718100
ACCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893718200
ACCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893718300
ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15° com guia de soró	893711200
ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30° com guia de soró	893711400
ACCAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40° com guia de soró	893718400
ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15° com guia de soró	893711300
ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30° com guia de soró	893711500
ACCAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40° com guia de soró	893718500
ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soró	893711600
ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soró	893711800
ACCAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soró	893718600
ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soró	893711700
ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soró	893711900
ACCAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soró	893718700
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soró	893711030
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soró	893711040
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soró	893711050
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soró	893711060
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soró	893711070
ACCAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soró	893711080
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soró	893711090
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soró	893711110
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soró	893711120
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soró	893711130
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soró	893711140
ACCAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soró	893711150
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soró	893711160
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soró	893711170
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soró	893711180
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soró	893711190
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soró	893711210
ACCAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soró	893711220
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soró	893711230
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soró	893711240
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soró	893711250
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soró	893711260
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soró	893711270
ACCAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soró	893711280
ACCAI 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soró	893711290
ACCAI 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soró	893711310
ACCAI 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soró	893711320
ACCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soró	893711330
ACCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soró	893711340
ACCAI 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soró	893711350
ACCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soró	893711360
ACCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soró	893711370
ACCAI 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soró	893711380
ACCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soró	893711390
ACCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soró	893711410
ACCAI 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soró	893711420
ACCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soró	893711430
ACCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soró	893711440
ACCAI 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soró	893711450
ACCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soró	893711460
ACCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soró	893711470
ACCAI 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soró	893711480

- ACCAO

Modelo	Código
ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15°	893720000
ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30°	893720200
ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40°	893722400
ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15°	893720100
ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30°	893720300
ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40°	893722500
ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893720400
ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893720600
ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893722600
ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893720500
ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893720700
ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893722700
ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893720800
ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893721000
ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893722800
ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893720900
ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893721100
ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893722900
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15°	893723000
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30°	893723100
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40°	893723200
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15°	893723300
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30°	893723400

ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40°	893723500
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893723600
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893723700
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893723800
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893723900
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893724000
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893724100
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893724200
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893724300
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893724400
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893724500
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893724600
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893724700
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 15°	893724800
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 30°	893724900
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 40°	893725000
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 15°	893725100
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 30°	893725200
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 40°	893725300
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893725400
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893725500
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893725600
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893725700
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893725800
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893725900
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893726000
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893726100
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893726200
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893726300
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893726400
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893726500
ACCAO 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893726600
ACCAO 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893726700
ACCAO 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893726800
ACCAO 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893726900
ACCAO 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893727000
ACCAO 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893727100
ACCAO 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893727200
ACCAO 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893727300
ACCAO 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893727400
ACCAO 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893727500
ACCAO 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893727600
ACCAO 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893727700
ACCAO 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893727800
ACCAO 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893727900
ACCAO 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893728000
ACCAO 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893728100
ACCAO 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893728200
ACCAO 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893728300
ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15° com guia de soro	893721200
ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30° com guia de soro	893721400
ACCAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40° com guia de soro	893728400
ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15° com guia de soro	893721300
ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30° com guia de soro	893721500
ACCAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40° com guia de soro	893728500
ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893721600
ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893721800
ACCAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893728600
ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893721700
ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893721900
ACCAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893728700
ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893722000
ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893722200
ACCAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893728800
ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893722100
ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893722300
ACCAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893728900
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30° com guia de soro	893729100
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40° com guia de soro	893729200
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15° com guia de soro	893729300
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30° com guia de soro	893729400
ACCAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40° com guia de soro	893729500
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893729600
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893729700
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893729800
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893729900
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893721010
ACCAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893721020
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893721030
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893721040
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893721050
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893721060
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893721070
ACCAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893721080
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soro	893721090
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soro	893721110
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soro	893721120
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soro	893721130
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soro	893721140
ACCAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soro	893721150
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893721160
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893721170
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893721180
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893721190
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893721210
ACCAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893721220
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893721230
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893721240

ACCAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893721250
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893721260
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893721270
ACCAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893721280
ACCAO 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soro	893721290
ACCAO 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soro	893721310
ACCAO 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soro	893721320
ACCAO 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soro	893721330
ACCAO 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soro	893721340
ACCAO 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soro	893721350
ACCAO 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893721360
ACCAO 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893721370
ACCAO 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893721380
ACCAO 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893721390
ACCAO 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893721410
ACCAO 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893721420
ACCAO 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893721430
ACCAO 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893721440
ACCAO 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893721450
ACCAO 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893721460
ACCAO 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893721470
ACCAO 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893721480

• ACCS

Modelo	Código
ACCS 1,7 / 2,2 R 80	893730200
ACCS 1,7 / 2,2 R 115	893730300
ACCS 2,2 / 2,8 R 80	893730400
ACCS 2,2 / 2,8 R 115	893730500
ACCS 2,5 / 3,5 R 80	893730600
ACCS 2,5 / 3,5 R 150	893730700
ACCS 3,5 / 4,5 R 80	893730800
ACCS 3,5 / 4,5 R 115	893730900
ACCS 1,7 / 2,2 SZ 80	893732000
ACCS 1,7 / 2,2 SZ 115	893732100
ACCS 2,2 / 2,8 SZ 80	893732200
ACCS 2,2 / 2,8 SZ 115	893732300
ACCS 2,5 / 3,5 SZ 80	893732400
ACCS 2,5 / 3,5 SZ 115	893732500
ACCS 3,5 / 4,5 SZ 80	893732600
ACCS 3,5 / 4,5 SZ 115	893732700
ACCS 1,7 / 2,2 ST 80	893732800
ACCS 1,7 / 2,2 ST 115	893732900
ACCS 2,2 / 2,8 ST 80	893733000
ACCS 2,2 / 2,8 ST 115	893733100
ACCS 2,5 / 3,5 ST 80	893733200
ACCS 2,5 / 3,5 ST 115	893733300
ACCS 3,5 / 4,5 ST 80	893733400
ACCS 3,5 / 4,5 ST 115	893733500
ACCS 1,7 / 2,2 X 80	893733600
ACCS 1,7 / 2,2 X 115	893733700
ACCS 2,2 / 2,8 X 80	893733800
ACCS 2,2 / 2,8 X 115	893733900
ACCS 2,5 / 3,5 X 80	893734000
ACCS 2,5 / 3,5 X 150	893734100
ACCS 3,5 / 4,5 X 80	893734200
ACCS 3,5 / 4,5 X 115	893734300
ACCS 1,7 / 2,2 R 80 com guia de soro	893731200
ACCS 1,7 / 2,2 R 115 com guia de soro	893731300
ACCS 2,2 / 2,8 R 80 com guia de soro	893731400
ACCS 2,2 / 2,8 R 115 com guia de soro	893731500
ACCS 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soro	893731600
ACCS 2,5 / 3,5 R 150 com guia de soro	893731700
ACCS 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soro	893731800
ACCS 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soro	893731900
ACCS 1,7 / 2,2 SZ 80 com guia de soro	893734400
ACCS 1,7 / 2,2 SZ 115 com guia de soro	893734500
ACCS 2,2 / 2,8 SZ 80 com guia de soro	893734600
ACCS 2,2 / 2,8 SZ 115 com guia de soro	893734700
ACCS 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soro	893734800
ACCS 2,5 / 3,5 SZ 150 com guia de soro	893734900
ACCS 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soro	893735000
ACCS 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soro	893735100
ACCS 1,7 / 2,2 ST 80 com guia de soro	893735200
ACCS 1,7 / 2,2 ST 115 com guia de soro	893735300
ACCS 2,2 / 2,8 ST 80 com guia de soro	893735400
ACCS 2,2 / 2,8 ST 115 com guia de soro	893735500
ACCS 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soro	893735600
ACCS 2,5 / 3,5 ST 150 com guia de soro	893735700
ACCS 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soro	893735800
ACCS 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soro	893735900
ACCS 1,7 / 2,2 X 80 com guia de soro	893736000
ACCS 1,7 / 2,2 X 115 com guia de soro	893736100
ACCS 2,2 / 2,8 X 80 com guia de soro	893736200
ACCS 2,2 / 2,8 X 115 com guia de soro	893736300
ACCS 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soro	893736400
ACCS 2,5 / 3,5 X 115 com guia de soro	893736500
ACCS 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soro	893736600
ACCS 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soro	893736700

- MCCS

ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893755700
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893755800
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893755900
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893756000
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893756100
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893756200
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893756300
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893756400
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893756500
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893756600
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893756700
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893756800
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893756900
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893757000
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893757100
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893757200
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893757300
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893757400
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893757500
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893757600
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893757700
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893757800
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893757900
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893758000
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893758100
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893758200
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893758300
ACCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15° com guia de soro	893751200
ACCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30° com guia de soro	893751400
ACCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40° com guia de soro	893758400
ACCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15° com guia de soro	893751300
ACCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30° com guia de soro	893751500
ACCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40° com guia de soro	893758500
ACCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893751600
ACCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893751800
ACCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893758600
ACCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893751700
ACCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893751900
ACCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893758700
ACCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893752000
ACCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893752100
ACCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893758800
ACCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893752200
ACCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893752300
ACCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893758900
ACCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15° com guia de soro	893759000
ACCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30° com guia de soro	893759100
ACCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40° com guia de soro	893759200
ACCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15° com guia de soro	893759300
ACCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30° com guia de soro	893759400
ACCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40° com guia de soro	893759500
ACCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893759600
ACCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893759700
ACCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893759800
ACCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893759900
ACCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893751010
ACCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893751020
ACCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893751030
ACCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893751040
ACCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893751050
ACCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893751060
ACCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893751070
ACCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893751080
ACCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soro	893751090
ACCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soro	893751110
ACCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soro	893751120
ACCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soro	893751130
ACCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soro	893751140
ACCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soro	893751150
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893751160
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893751170
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893751180
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893751190
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893751210
ACCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893751220
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893751230
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893751240
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893751250
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893751260
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893751270
ACCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893751280
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soro	893751290
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soro	893751310
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soro	893751320
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soro	893751330
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soro	893751340
ACCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soro	893751350
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893751360
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893751370
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893751380
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893751390
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893751410
ACCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893751420
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893751430
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893751440
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893751450
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893751470
ACCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893751480

Modelo	Código
MCCS 1,7 / 2,2 R 80	893760200
MCCS 1,7 / 2,2 R 115	893760300
MCCS 2,2 / 2,8 R 80	893760400
MCCS 2,2 / 2,8 R 115	893760500
MCCS 2,5 / 3,5 R 80	893760600
MCCS 2,5 / 3,5 R 115	893760700
MCCS 3,5 / 4,5 R 80	893760800
MCCS 3,5 / 4,5 R 115	893760900
MCCS 1,7 / 2,2 SZ 80	893762000
MCCS 1,7 / 2,2 SZ 115	893762100
MCCS 2,2 / 2,8 SZ 80	893762200
MCCS 2,2 / 2,8 SZ 115	893762300
MCCS 2,5 / 3,5 SZ 80	893762400
MCCS 2,5 / 3,5 SZ 115	893762500
MCCS 3,5 / 4,5 SZ 80	893762600
MCCS 3,5 / 4,5 SZ 115	893762700
MCCS 1,7 / 2,2 ST 80	893762800
MCCS 1,7 / 2,2 ST 115	893762900
MCCS 2,2 / 2,8 ST 80	893763000
MCCS 2,2 / 2,8 ST 115	893763100
MCCS 2,5 / 3,5 ST 80	893763200
MCCS 2,5 / 3,5 ST 115	893763300
MCCS 3,5 / 4,5 ST 80	893763400
MCCS 3,5 / 4,5 ST 115	893763500
MCCS 1,7 / 2,2 X 80	893763600
MCCS 1,7 / 2,2 X 115	893763700
MCCS 2,2 / 2,8 X 80	893763800
MCCS 2,2 / 2,8 X 115	893763900
MCCS 2,5 / 3,5 X 80	893764000
MCCS 2,5 / 3,5 X 115	893764100
MCCS 3,5 / 4,5 X 80	893764200
MCCS 3,5 / 4,5 X 115	893764300
MCCS 1,7 / 2,2 R 80 com guia de soro	893761200
MCCS 1,7 / 2,2 R 115 com guia de soro	893761300
MCCS 2,2 / 2,8 R 80 com guia de soro	893761400
MCCS 2,2 / 2,8 R 115 com guia de soro	893761500
MCCS 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soro	893761600
MCCS 2,5 / 3,5 R 150 com guia de soro	893761700
MCCS 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soro	893761800
MCCS 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soro	893761900
MCCS 1,7 / 2,2 SZ 80 com guia de soro	893764400
MCCS 1,7 / 2,2 SZ 115 com guia de soro	893764500
MCCS 2,2 / 2,8 SZ 80 com guia de soro	893764600
MCCS 2,2 / 2,8 SZ 115 com guia de soro	893764700
MCCS 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soro	893764800
MCCS 2,5 / 3,5 SZ 150 com guia de soro	893764900
MCCS 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soro	893765000
MCCS 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soro	893765100
MCCS 1,7 / 2,2 ST 80 com guia de soro	893765200
MCCS 1,7 / 2,2 ST 115 com guia de soro	893765300
MCCS 2,2 / 2,8 ST 80 com guia de soro	893765400
MCCS 2,2 / 2,8 ST 115 com guia de soro	893765500
MCCS 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soro	893765600
MCCS 2,5 / 3,5 ST 150 com guia de soro	893765700
MCCS 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soro	893765800
MCCS 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soro	893765900
MCCS 1,7 / 2,2 X 80 com guia de soro	893766000
MCCS 1,7 / 2,2 X 115 com guia de soro	893766100
MCCS 2,2 / 2,8 X 80 com guia de soro	893766200
MCCS 2,2 / 2,8 X 115 com guia de soro	893766300
MCCS 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soro	893766400
MCCS 2,5 / 3,5 X 115 com guia de soro	893766500
MCCS 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soro	893766600
MCCS 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soro	893766700

- MCCSAI

Modelo	Código
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15°	893770000
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30°	893770200
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40°	893772400
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15°	893770100
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30°	893770300
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40°	893772500
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893770400
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893770600
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893772600
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893770500
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893770700
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893772700
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893770800
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893771000
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893772800
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893770900
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893771100
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893772900
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15°	893773000
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30°	893773100
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40°	893773200
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15°	893773300
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30°	893773400
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40°	893773500
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893773600
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893773700

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893773800
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893773900
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893774000
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893774100
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893774200
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893774300
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893774400
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893774500
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893774600
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893774700
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 15°	893774800
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 30°	893774900
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 40°	893775000
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 15°	893775100
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 30°	893775200
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 40°	893775300
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893775400
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893775500
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893775600
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893775700
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893775800
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893775900
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893776000
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893776100
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893776200
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893776300
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893776400
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893776500
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893776600
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893776700
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893776800
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893776900
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893777000
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893777100
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893777200
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893777300
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893777400
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893777500
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893777600
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893777700
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893777800
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893777900
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893778000
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893778100
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893778200
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893778300
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 15° com guia de soro	893771200
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 30° com guia de soro	893771400
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 80 / 40° com guia de soro	893778400
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 15° com guia de soro	893771300
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 30° com guia de soro	893771500
MCCSAI 2,2 / 2,8 R 115 / 40° com guia de soro	893778500
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893771600
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893771800
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893778600
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893771700
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893771900
MCCSAI 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893778700
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893772000
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893772200
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893778800
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893772100
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893772300
MCCSAI 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893778900
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15° com guia de soro	893779000
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30° com guia de soro	893779100
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40° com guia de soro	893779200
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15° com guia de soro	893779300
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30° com guia de soro	893779400
MCCSAI 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40° com guia de soro	893779500
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893779600
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893779700
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893779800
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893779900
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893771010
MCCSAI 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893771020
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893771030
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893771040
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893771050
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893771060
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893771070
MCCSAI 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893771080
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soro	893771090
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soro	893771110
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soro	893771120
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soro	893771130
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soro	893771140
MCCSAI 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soro	893771150
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893771160
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893771170
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893771180
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893771190
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893771210
MCCSAI 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893771220
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893771230
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893771240
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893771250
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893771260

MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893771270
MCCSAI 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893771280
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soro	893771290
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soro	893771310
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soro	893771320
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soro	893771330
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soro	893771340
MCCSAI 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soro	893771350
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893771360
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893771370
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893771380
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893771390
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893771410
MCCSAI 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893771420
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893771430
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893771440
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893771450
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893771460
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893771470
MCCSAI 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893771480

- MCCSAO

Modelo	Código
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15°	893780000
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30°	893780200
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40°	893782400
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15°	893780100
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30°	893780300
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40°	893782500
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893780400
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893780600
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893782600
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893780500
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893780700
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893782700
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893780800
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893781000
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893782800
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893780900
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893781100
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893782900
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15°	893783000
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30°	893783100
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40°	893783200
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15°	893783300
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30°	893783400
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40°	893783500
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893783600
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893783700
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893783800
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893783900
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893784000
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893784100
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893784200
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893784300
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893784400
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893784500
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893784600
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893784700
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 15°	893784800
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 30°	893784900
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 40°	893785000
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 15°	893785100
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 30°	893785200
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 40°	893785300
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893785400
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893785500
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893785600
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893785700
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893785800
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893785900
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893786000
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893786100
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893786200
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893786300
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893786400
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893786500
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 15°	893786600
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 30°	893786700
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 40°	893786800
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 15°	893786900
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 30°	893787000
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 40°	893787100
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893787200
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893787300
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893787400
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893787500
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893787600
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893787700
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893787800
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893787900
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893788000
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893788100
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893788200
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893788300

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 15° com guia de soro	893781200
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 30° com guia de soro	893781400
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 80 / 40° com guia de soro	893788400
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 15° com guia de soro	893781300
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 30° com guia de soro	893781500
MCCSAO 2,2 / 2,8 R 115 / 40° com guia de soro	893788500
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893781600
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893781800
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893788600
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893781700
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893781900
MCCSAO 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893788700
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893782000
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893782200
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893788800
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893782100
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893782300
MCCSAO 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893788900
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 15° com guia de soro	893789000
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 30° com guia de soro	893789100
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 80 / 40° com guia de soro	893789200
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 15° com guia de soro	893789300
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 30° com guia de soro	893789400
MCCSAO 2,2 / 2,8 SZ 115 / 40° com guia de soro	893789500
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893789600
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893789700
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893789800
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893789900
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893781010
MCCSAO 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893781020
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893781030
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893781040
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893781050
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893781060
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893781070
MCCSAO 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893781080
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 15° com guia de soro	893781090
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 30° com guia de soro	893781110
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 80 / 40° com guia de soro	893781120
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 15° com guia de soro	893781130
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 30° com guia de soro	893781140
MCCSAO 2,2 / 2,8 ST 115 / 40° com guia de soro	893781150
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893781160
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893781170
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893781180
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893781190
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893781210
MCCSAO 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893781220
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893781230
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893781240
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893781250
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893781260
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893781270
MCCSAO 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893781280
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 15° com guia de soro	893781290
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 30° com guia de soro	893781310
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 80 / 40° com guia de soro	893781320
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 15° com guia de soro	893781330
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 30° com guia de soro	893781340
MCCSAO 2,2 / 2,8 X 115 / 40° com guia de soro	893781350
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893781360
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893781370
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893781380
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893781390
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893781410
MCCSAO 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893781420
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893781430
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893781440
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893781450
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893781460
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893781470
MCCSAO 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893781480

- DCM

Modelo	Código
DCM 1,7 / 2,2 R 80	893800200
DCM 1,7 / 2,2 R 115	893800300
DCM 2,2 / 2,8 R 80	893800400
DCM 2,2 / 2,8 R 115	893800500
DCM 2,5 / 3,5 R 80	893800600
DCM 2,5 / 3,5 R 150	893800700
DCM 3,5 / 4,5 R 80	893800800
DCM 3,5 / 4,5 R 115	893800900
DCM 1,7 / 2,2 SZ 80	893802000
DCM 1,7 / 2,2 SZ 115	893802100
DCM 2,2 / 2,8 SZ 80	893802200
DCM 2,2 / 2,8 SZ 115	893802300
DCM 2,5 / 3,5 SZ 80	893802400
DCM 2,5 / 3,5 SZ 115	893802500
DCM 3,5 / 4,5 SZ 80	893802600
DCM 3,5 / 4,5 SZ 115	893802700
DCM 1,7 / 2,2 ST 80	893802800
DCM 1,7 / 2,2 ST 115	893802900
DCM 2,2 / 2,8 ST 80	893803000
DCM 2,2 / 2,8 ST 115	893803100

DCM 2,5 / 3,5 ST 80	893803200
DCM 2,5 / 3,5 ST 115	893803300
DCM 3,5 / 4,5 ST 80	893803400
DCM 3,5 / 4,5 ST 115	893803500
DCM 1,7 / 2,2 X 80	893803600
DCM 1,7 / 2,2 X 115	893803700
DCM 2,2 / 2,8 X 80	893803800
DCM 2,2 / 2,8 X 115	893803900
DCM 2,5 / 3,5 X 80	893804000
DCM 2,5 / 3,5 X 150	893804100
DCM 3,5 / 4,5 X 80	893804200
DCM 3,5 / 4,5 X 115	893804300
DCM 1,7 / 2,2 R 80 com guia de soro	893801200
DCM 1,7 / 2,2 R 115 com guia de soro	893801300
DCM 2,2 / 2,8 R 80 com guia de soro	893801400
DCM 2,2 / 2,8 R 115 com guia de soro	893801500
DCM 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soro	893801600
DCM 2,5 / 3,5 R 115 com guia de soro	893801700
DCM 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soro	893801800
DCM 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soro	893801900
DCM 1,7 / 2,2 SZ 80 com guia de soro	893804400
DCM 1,7 / 2,2 SZ 115 com guia de soro	893804500
DCM 2,2 / 2,8 SZ 80 com guia de soro	893804600
DCM 2,2 / 2,8 SZ 115 com guia de soro	893804700
DCM 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soro	893804800
DCM 2,5 / 3,5 SZ 115 com guia de soro	893804900
DCM 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soro	893805000
DCM 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soro	893805100
DCM 1,7 / 2,2 ST 80 com guia de soro	893805200
DCM 1,7 / 2,2 ST 115 com guia de soro	893805300
DCM 2,2 / 2,8 ST 80 com guia de soro	893805400
DCM 2,2 / 2,8 ST 115 com guia de soro	893805500
DCM 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soro	893805600
DCM 2,5 / 3,5 ST 115 com guia de soro	893805700
DCM 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soro	893805800
DCM 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soro	893805900
DCM 1,7 / 2,2 X 80 com guia de soro	893806000
DCM 1,7 / 2,2 X 115 com guia de soro	893806100
DCM 2,2 / 2,8 X 80 com guia de soro	893806200
DCM 2,2 / 2,8 X 115 com guia de soro	893806300
DCM 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soro	893806400
DCM 2,5 / 3,5 X 115 com guia de soro	893806500
DCM 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soro	893806600
DCM 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soro	893806700

- RB

Modelo	Código
RB 2,5 / 3,5 R 80	893820000
RB 2,5 / 3,5 R 115	893820100
RB 3,5 / 4,5 R 80	893820200
RB 3,5 / 4,5 R 115	893820300
RB 2,5 / 3,5 SZ 80	893820800
RB 2,5 / 3,5 SZ 115	893820900
RB 3,5 / 4,5 SZ 80	893821000
RB 3,5 / 4,5 SZ 115	893821100
RB 2,5 / 3,5 ST 80	893821200
RB 2,5 / 3,5 ST 115	893821300
RB 3,5 / 4,5 ST 80	893821400
RB 3,5 / 4,5 ST 115	893821500
RB 2,5 / 3,5 X 80	893821600
RB 2,5 / 3,5 X 115	893821700
RB 3,5 / 4,5 X 80	893821800
RB 3,5 / 4,5 X 115	893821900
RB 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soro	893820400
RB 2,5 / 3,5 R 115 com guia de soro	893820500
RB 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soro	893820600
RB 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soro	893820700
RB 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soro	893822000
RB 2,5 / 3,5 SZ 115 com guia de soro	893822100
RB 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soro	893822200
RB 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soro	893822300
RB 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soro	893822400
RB 2,5 / 3,5 ST 115 com guia de soro	893822500
RB 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soro	893822600
RB 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soro	893822700
RB 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soro	893822800
RB 2,5 / 3,5 X 115 com guia de soro	893822900
RB 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soro	893823000
RB 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soro	893823100

- RBA

Modelo	Código
RBA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893830000
RBA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893830200
RBA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893831600
RBA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893830100
RBA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893830300
RBA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893831700
RBA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893830400
RBA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893830600
RBA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893831800
RBA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893830500

- BA

Modelo	Código
BA 2,5 / 3,5 R 80	893850000
BA 2,5 / 3,5 R 150	893850100
BA 3,5 / 4,5 R 80	893850200
BA 3,5 / 4,5 R 115	893850300
BA 2,5 / 3,5 SZ 80	893850800
BA 2,5 / 3,5 SZ 115	893850900
BA 3,5 / 4,5 SZ 80	893851000
BA 3,5 / 4,5 SZ 115	893851100
BA 2,5 / 3,5 ST 80	893851200
BA 2,5 / 3,5 ST 115	893851300
BA 3,5 / 4,5 ST 80	893851400
BA 3,5 / 4,5 ST 115	893851500
BA 2,5 / 3,5 X 80	893851600
BA 2,5 / 3,5 X 115	893851700
BA 3,5 / 4,5 X 80	893851800
BA 3,5 / 4,5 X 115	893851900
BA 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soro	893850400
BA 2,5 / 3,5 R 115 com guia de soro	893850500
BA 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soro	893850600
BA 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soro	893850700
BA 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soro	893852000
BA 2,5 / 3,5 SZ 115 com guia de soro	893852100
BA 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soro	893852200
BA 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soro	893852300
BA 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soro	893852400
BA 2,5 / 3,5 ST 115 com guia de soro	893852500
BA 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soro	893852600
BA 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soro	893852700
BA 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soro	893852800
BA 2,5 / 3,5 X 115 com guia de soro	893852900
BA 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soro	893853000
BA 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soro	893853100

- BAA

Modelo	Código
BAA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893860000
BAA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893860200
BAA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893861600
BAA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893860100
BAA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893860300
BAA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893861700
BAA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893860400
BAA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893860600
BAA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893861800
BAA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893860500
BAA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893860700
BAA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893861900
BAA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893862000
BAA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893862100
BAA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893862200
BAA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893862300
BAA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893862400
BAA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893862500
BAA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893862600
BAA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893862700
BAA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893862800
BAA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893862900
BAA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893863000
BAA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893863100
BAA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893863200
BAA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893863300
BAA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893863400
BAA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893863500
BAA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893863600
BAA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893863700
BAA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893863800
BAA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893863900
BAA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893864000
BAA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893864100
BAA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893864200
BAA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893864300
BAA 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893864400
BAA 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893864500
BAA 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893864600
BAA 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893864700
BAA 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893864800
BAA 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893864900
BAA 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893865000
BAA 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893865100
BAA 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893865200
BAA 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893865300
BAA 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893865400
BAA A 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893865500
BAA 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893860800
BAA 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893861000
BAA 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893865600
BAA 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893860900
BAA 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893861100
BAA 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893865700
BAA 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893861200
BAA 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893861400
BAA 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893865800
BAA 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893861300

BAA 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893861500
BAA 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893865900
BAA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893866000
BAA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893866100
BAA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893866200
BAA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893866300
BAA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893866400
BAA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893866500
BAA A 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893866600
BAA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893866700
BAA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893866800
BAA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893866900
BAA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893867000
BAA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893867100
BAA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893867200
BAA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893867300
BAA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893867400
BAA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893867500
BAA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893867600
BAA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893867700
BAA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893867800
BAA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893867900
BAA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893868000
BAA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893868100
BAA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893868200
BAA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893868300
BAA 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893868400
BAA 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893868500
BAA 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893868600
BAA 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893868700
BAA 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893868800
BAA 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893868900
BAA 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893869000
BAA 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893869100
BAA 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893869200
BAA 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893869300
BAA 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893869400
BAA 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893869500

- PA

Modelo	Código
PA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893880000
PA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893880200
PA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893880100
PA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893880300
PA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893881700
PA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893880400
PA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893880600
PA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893881800
PA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893880500
PA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893880700
PA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893881900
PA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893882000
PA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893882100
PA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893882200
PA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893882300
PA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893882400
PA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40°	893882500
PA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893882600
PA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893882700
PA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893882800
PA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893882900
PA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893883000
PA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893883100
PA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893883200
PA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893883300
PA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893883400
PA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893883500
PA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893883600
PA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893883700
PA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893883800
PA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893883900
PA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893884000
PA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893884100
PA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893884200
PA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893884300
PA 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893884400
PA 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893884500
PA 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893884600
PA 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893884700
PA 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893884800
PA 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893884900
PA 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893885000
PA 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893885100
PA 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893885200
PA 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893885300
PA 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893885400
PA 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893885500
PA 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893880800
PA 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893881000
PA 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893885600
PA 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893880900
PA 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893881100
PA 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893885700
PA 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893881200

MODELOS COMERCIAIS E CÓDIGOS

PA 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893881400
PA 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893885800
PA 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893881300
PA 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893881500
PA 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893885900
PA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893886000
PA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893886100
PA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893886200
PA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893886300
PA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893886400
PA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893886500
PA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893886600
PA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893886700
PA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893886800
PA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893886900
PA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893887000
PA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893887100
PA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893887200
PA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893887300
PA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893887400
PA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893887500
PA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893887600
PA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893887700
PA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893887800
PA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893887900
PA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893888000
PA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893888100
PA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893888200
PA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893888300
PA 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893888400
PA 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893888500
PA 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893888600
PA 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893888700
PA 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893888800
PA 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893888900
PA 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893889000
PA 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893889100
PA 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893889200
PA 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893889300
PA 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893889400
PA 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893889500

- OB

Modelo	Código
OB 2,5 / 3,5 R 80	893890000
OB 2,5 / 3,5 R 115	893890100
OB 3,5 / 4,5 R 80	893890200
OB 3,5 / 4,5 R 115	893890300
OB 2,5 / 3,5 SZ 80	893890800
OB 2,5 / 3,5 SZ 150	893890900
OB 3,5 / 4,5 SZ 80	893891000
OB 3,5 / 4,5 SZ 115	893891100
OB 2,5 / 3,5 ST 80	893891200
OB 2,5 / 3,5 ST 115	893891300
OB 3,5 / 4,5 ST 80	893891400
OB 3,5 / 4,5 ST 115	893891500
OB 2,5 / 3,5 X 80	893891600
OB 2,5 / 3,5 X 115	893891700
OB 3,5 / 4,5 X 80	893891800
OB 3,5 / 4,5 X 115	893891900
OB 2,5 / 3,5 R 80 com guia de soro	893890400
OB 2,5 / 3,5 R 115 com guia de soro	893890500
OB 3,5 / 4,5 R 80 com guia de soro	893890600
OB 3,5 / 4,5 R 115 com guia de soro	893890700
OB 2,5 / 3,5 SZ 80 com guia de soro	893892000
OB 2,5 / 3,5 SZ 150 com guia de soro	893892100
OB 3,5 / 4,5 SZ 80 com guia de soro	893892200
OB 3,5 / 4,5 SZ 115 com guia de soro	893892300
OB 2,5 / 3,5 ST 80 com guia de soro	893892400
OB 2,5 / 3,5 ST 150 com guia de soro	893892500
OB 3,5 / 4,5 ST 80 com guia de soro	893892600
OB 3,5 / 4,5 ST 115 com guia de soro	893892700
OB 2,5 / 3,5 X 80 com guia de soro	893892800
OB 2,5 / 3,5 X 150 com guia de soro	893892900
OB 3,5 / 4,5 X 80 com guia de soro	893893000
OB 3,5 / 4,5 X 115 com guia de soro	893893100

- OBA

Modelo	Código
OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 15°	893900000
OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 30°	893900200
OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 40°	893901600
OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 15°	893900100
OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 30°	893900300
OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 40°	893901700
OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 15°	893900400
OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 30°	893900600
OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 40°	893901800
OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 15°	893900500
OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 30°	893900700
OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 40°	893901900
OBA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15°	893902000

OBA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30°	893902100
OBA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40°	893902200
OBA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15°	893902300
OBA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30°	893902400
OBA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15°	893902600
OBA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30°	893902700
OBA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40°	893902800
OBA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 15°	893902900
OBA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30°	893903000
OBA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40°	893903100
OBA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15°	893903200
OBA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30°	893903300
OBA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40°	893903400
OBA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15°	893903500
OBA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30°	893903600
OBA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40°	893903700
OBA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15°	893903800
OBA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30°	893903900
OBA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40°	893904000
OBA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15°	893904100
OBA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30°	893904200
OBA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40°	893904300
OBA 2,5 / 3,5 X 80 / 15°	893904400
OBA 2,5 / 3,5 X 80 / 30°	893904500
OBA 2,5 / 3,5 X 80 / 40°	893904600
OBA 2,5 / 3,5 X 115 / 15°	893904700
OBA 2,5 / 3,5 X 115 / 30°	893904800
OBA 2,5 / 3,5 X 115 / 40°	893904900
OBA 3,5 / 4,5 X 80 / 15°	893905000
OBA 3,5 / 4,5 X 80 / 30°	893905100
OBA 3,5 / 4,5 X 80 / 40°	893905200
OBA 3,5 / 4,5 X 115 / 15°	893905300
OBA 3,5 / 4,5 X 115 / 30°	893905400
OBA 3,5 / 4,5 X 115 / 40°	893905500
OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 15° com guia de soro	893900800
OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 30° com guia de soro	893901000
OBA 2,5 / 3,5 R 80 / 40° com guia de soro	893905600
OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 15° com guia de soro	893900900
OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 30° com guia de soro	893901100
OBA 2,5 / 3,5 R 115 / 40° com guia de soro	893905700
OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 15° com guia de soro	893901200
OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 30° com guia de soro	893901400
OBA 3,5 / 4,5 R 80 / 40° com guia de soro	893905800
OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 15° com guia de soro	893901300
OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 30° com guia de soro	893901500
OBA 3,5 / 4,5 R 115 / 40° com guia de soro	893905900
OBA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893906000
OBA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893906100
OBA 2,5 / 3,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893906200
OBA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 15° com guia de soro	893906300
OBA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893906400
OBA 2,5 / 3,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893906500
OBA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 15° com guia de soro	893906600
OBA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 30° com guia de soro	893906700
OBA 3,5 / 4,5 SZ 80 / 40° com guia de soro	893906800
OBA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 30° com guia de soro	893907000
OBA 3,5 / 4,5 SZ 115 / 40° com guia de soro	893907100
OBA 2,5 / 3,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893907200
OBA 2,5 / 3,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893907300
OBA 2,5 / 3,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893907400
OBA 2,5 / 3,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893907500
OBA 2,5 / 3,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893907600
OBA 2,5 / 3,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893907700
OBA 3,5 / 4,5 ST 80 / 15° com guia de soro	893907800
OBA 3,5 / 4,5 ST 80 / 30° com guia de soro	893907900
OBA 3,5 / 4,5 ST 80 / 40° com guia de soro	893908000
OBA 3,5 / 4,5 ST 115 / 15° com guia de soro	893908100
OBA 3,5 / 4,5 ST 115 / 30° com guia de soro	893908200
OBA 3,5 / 4,5 ST 115 / 40° com guia de soro	893908300
OBA 2,5 / 3,5 X 80 / 15° com guia de soro	893908400
OBA 2,5 / 3,5 X 80 / 30° com guia de soro	893908500
OBA 2,5 / 3,5 X 80 / 40° com guia de soro	893908600
OBA 2,5 / 3,5 X 115 / 15° com guia de soro	893908700
OBA 2,5 / 3,5 X 115 / 30° com guia de soro	893908800
OBA 2,5 / 3,5 X 115 / 40° com guia de soro	893908900
OBA 3,5 / 4,5 X 80 / 15° com guia de soro	893909000
OBA 3,5 / 4,5 X 80 / 30° com guia de soro	893909100
OBA 3,5 / 4,5 X 80 / 40° com guia de soro	893909200
OBA 3,5 / 4,5 X 115 / 15° com guia de soro	893909300
OBA 3,5 / 4,5 X 115 / 30° com guia de soro	893909400
OBA 3,5 / 4,5 X 115 / 40° com guia de soro	893909500