



Serratus Long

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Serratus Long fornece um método para a realização da morcelação da próstata em procedimentos urológicos de enucleação endoscópica da próstata, sendo indicado para o tratamento cirúrgico da hiperplasia benigna da próstata, pela via de acesso uretral.

A Cânula de Morcelação MPU em conjunto com o Tubo para Aspiração, presentes no Serratus Long, possibilitam a realização da morcelação de maneira automatizada após a enucleação, pela via de acesso uretral sem a necessidade de incisões, reduzindo, desta forma, o tempo de recuperação do paciente.



MORCELADOR
AUTOMATIZADO PARA
PROCEDIMENTOS **UROLÓGICOS**

SERRATUS LONG

- Possui dimensões compatíveis com diferentes nefroscópios presentes no mercado


CÂNULA DE MORCELAÇÃO MPU

Indicação: A Cânula de Morcelação possui a função de realizar a morcelação da próstata após a enucleação.

Tipo de Encaixe: R



390 mm

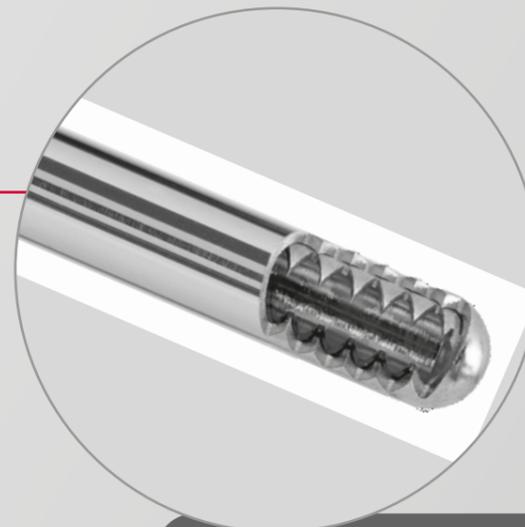

Geometria da ponta cortante otimizada para uma morcelação eficiente e segura.



TUBO PARA ASPIRAÇÃO

Indicação: Possibilita a aspiração do tecido morcelado pela Cânula de Morcelação.

Comprimento: 3m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Esterilizado por: Óxido de Etileno
Validade da esterilização: 2 anos

SACA TECIDO

O Saca Tecido pode ser utilizado para desentupir a Cânula de Morcelação MPU fazendo com que o tecido siga para o Tubo de Aspiração.

 Razek®




www.razek.com.br



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

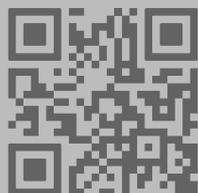

ESCANEIE O
QR CODE PARA
SABER MAIS.