




Spine EasyFlow

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Spine EasyFlow, possui a função de fornecer instrumentos para descompressão da hérnia de disco intervertebral e/ou tratamento de protusões discais com rompimento parcial das fibras anulares através de um método endoscópico e/ou minimamente invasivo (discectomia percutânea).


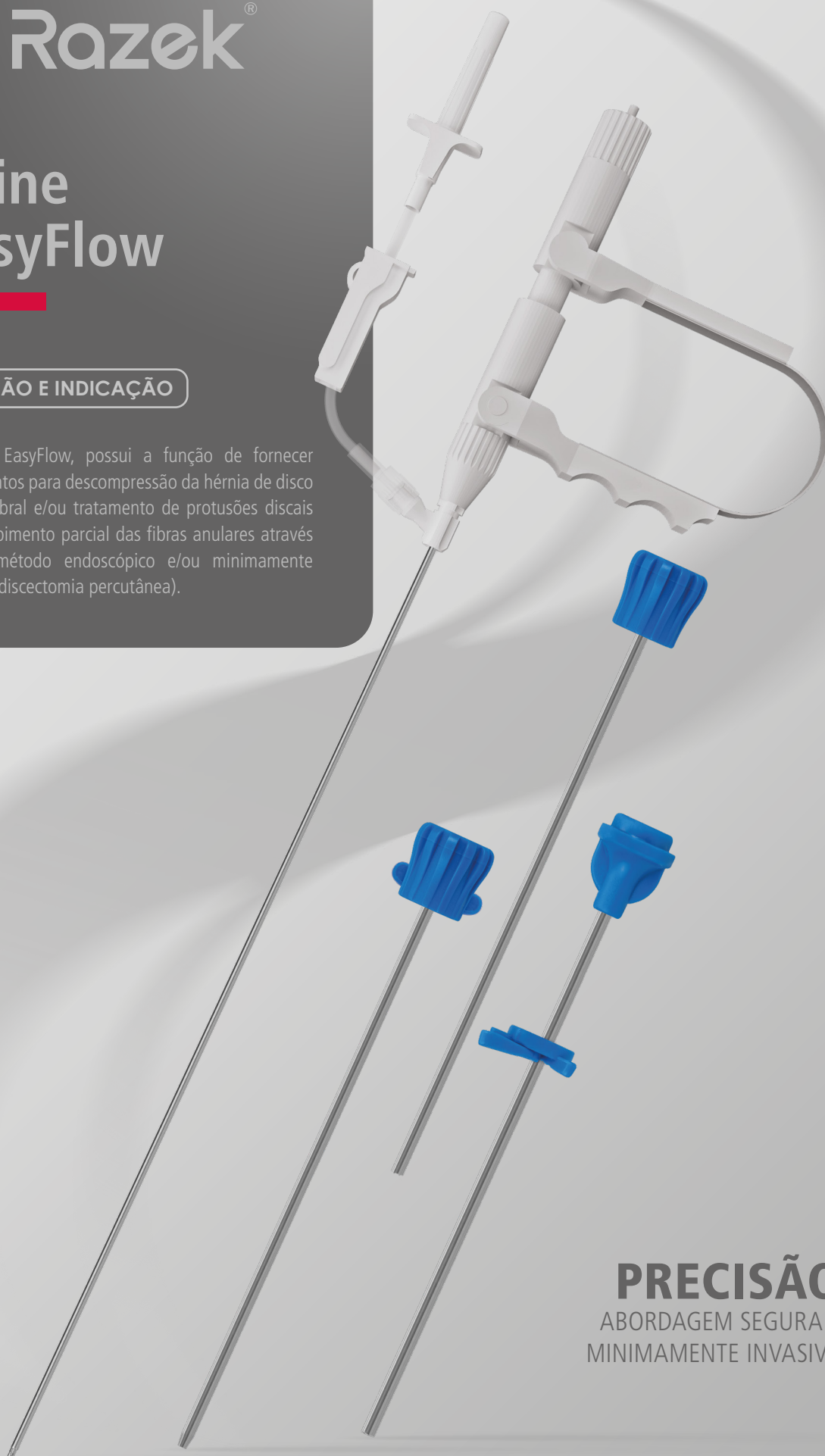


PRECISÃO
ABORDAGEM SEGURA E
MINIMAMENTE INVASIVA

PONTEIRA ATIVA ECOGÊNICA

Possibilita sua orientação por ultrassom, minimizando a exposição do paciente à fluoroscopia.

Via para Irrigação

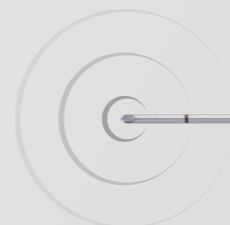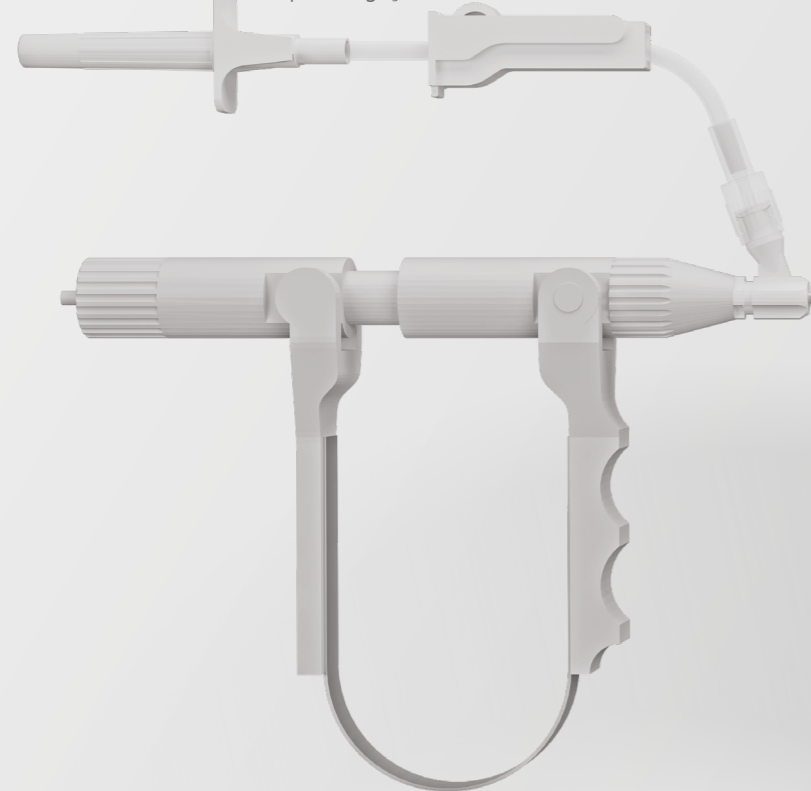

Cânula de Punção Sonovisível


Cânula Ressectora Bipolar com Refrigeração

Fio Guia

Obturador

Trefina

Trocater

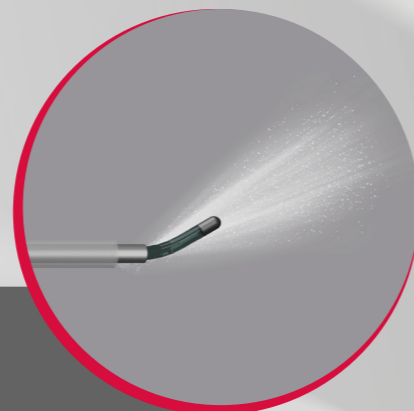

A Cânula Ressectora Bipolar presente no Spine EasyFlow possui uma via para irrigação de soro, o que garante a refrigeração da ponta ativa e circulação de fluídos, minimizando possíveis danos térmicos aos tecidos adjacentes.

O Spine EasyFlow é composto pelos seguintes itens:

- 01 unidade de Cânula de Punção Sonovisível
- 01 unidade de Cânula Ressectora Bipolar com Refrigeração
- 01 unidade de Fio Guia
- 01 unidade de Obturador
- 01 unidade de Trefina
- 01 unidade de Trocater



OBTURADOR

TREFINA

TROCATER

Possui instrumentos para realizar a nucleotomia automatizada, nucleoplastia, anulotomia e anuloplastia, além de conjunto completo de acesso ao núcleo discal.




www.razek.com.br



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

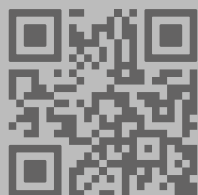

ESCANEIE O
QR CODE PARA
SABER MAIS.