

Fresas Cirúrgicas Razek



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek, em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família de Fresas Cirúrgicas Razek tem por finalidade realizar perfuração, cortes, acabamento, desbastes e raspagem óssea em procedimentos cirúrgicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificação: Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



A utilização de uma força excessiva no momento da inserção das Fresas Cirúrgicas Razek poderá fazer com que a fresa dobre ou quebre, causando lesões no operador;



Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar as Fresas Cirúrgicas Razek;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



Nunca utilize um produto que apresente superaquecimento;



A substituição das fresas deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;



O operador deverá manipular as Fresas Cirúrgicas Razek com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. Todas as vezes que for necessário manipular as Fresas Cirúrgicas Razek, use sua haste, que está fixada na peça de mão;



**NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O
MESMO É DE USO ÚNICO;**



PROIBIDO REPROCESSAR;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado.

FRESAS CIRÚRGICAS RAZEK

A família das Fresas Cirúrgicas Razek apresenta diferentes tipos de encaixe. A seguir estão indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a fresa necessária para cada equipamento.

▪ Encaixe R



▪ Encaixe H



▪ Encaixe J



▪ Encaixe T




▪ Encaixe O



▪ Encaixe S



▪ Encaixe X

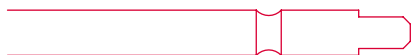

▪ Encaixe A



▪ Encaixe D



▪ Encaixe L



▪ Encaixe U



▪ Encaixe Q



▪ Encaixe E



▪ Encaixe B




▪ Encaixe K




▪ Encaixe Y



▪ Encaixe W

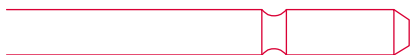

▪ Encaixe C

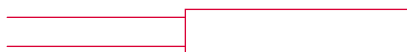

▪ Encaixe M



▪ Encaixe P



▪ Encaixe SM



▪ Encaixe SU



▪ Encaixe SS



▪ Encaixe NS



▪ Encaixe N



MODELOS

Os modelos da família das fresas serão diferenciados pelo tipo de ponta ativa, comprimento, tipo de encaixe e diâmetro.

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis de ponta ativa, com os diferentes comprimentos, tipos de encaixe, diâmetros e suas indicações.

▪ BRD

Os modelos BRD são brocas redondas destinadas a cortes ósseos e acabamentos moderados.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 / 55 / 70 / 85* / 95 / 115 / 125 / 145** / 150 / 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 (mm)

*Comprimento disponível apenas para os encaixes B e Q.

**Comprimento disponível apenas para o encaixe Q.

▪ BCR

Os modelos BCR são compostos de brocas redondas de corte rápido, para remoções ósseas em grande quantidade.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 115 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 1,0 - 1,4 - 1,8 - 2,3 - 2,7 - 3,1 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 - 7,0 (mm)

▪ FRL

Os modelos FRL são fresas laminadas para acabamento ósseo.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O -

S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 5,0 - 7,0 (mm)

▪ FAD

Os modelos FAD são fresas de alto desbaste ósseo.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 5,0 - 7,0 (mm)

▪ BCL

Os modelos BCL são brocas de corte ósseo lateral.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 2,1 (mm)

▪ ENT

Os modelos ENT são compostos de brocas de cabeça cônica para acabamento de orifícios.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 4,0 - 4,5 - 6,0 (mm)

▪ RAZ

Os modelos RAZ são brocas de corte ósseo lateral.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 65 - 70 - 95 - 115 - 125 - 150 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 1,2 * - 1,5 - 1,6* - 1,8 - 2,1 - 2,5 (mm)

*Diâmetros disponíveis apenas para os comprimentos 44,5, 55 e 65.

▪ BP

Os modelos BP são brocas destinadas a perfurações ósseas para posterior inserção de placas e parafusos.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 - 55 - 70 - 95 - 110 - 115 - 120 - 125 - 150 - 155 - 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R - H - J - T - O - S - X - A - D - L - U - Q - E - B - K - Y - W

▪ **Diâmetros disponíveis:** 0,9 - 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,5 - 1,6 - 1,7 - 1,8 - 1,9 - 2,0 - 2,1 - 2,2 - 2,3 - 2,7 - 3,2 - 3,5 (mm)

▪ BCC

Os modelos BCC são compostos de brocas destinadas à craniotomia de cortes ósseos laterais.



▪ **Comprimentos disponíveis:** 77 - 80 - 85 (mm)

▪ Encaixes disponíveis: M - P - C

▪ **Diâmetros disponíveis:** 5,0 (mm)

▪ BCCR

Os modelos BCCR são compostos de brocas retas destinadas à craniotomia de cortes ósseos laterais.



▪ **BCCR44R (2,3)**

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:** 44 (mm) / R / 2,3 (mm)

▪ BCCS

Os modelos BCCS são compostos de brocas espiraladas destinadas à craniotomia, de cortes ósseos laterais.



▪ BCCS44R (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
44 (mm) / R / 2,3 (mm)

▪ BCCS67NS (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
67 (mm) / NS / 2,3 (mm)

▪ BCCS84Q (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
84 (mm) / Q / 3,1 (mm)

▪ BCCS85A (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
85 (mm) / A / 3,1 (mm)

▪ BCCS89L (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
89 (mm) / L / 2,3 (mm)

▪ BCCS65SU (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
65 (mm) / SU / 2,3 (mm)

▪ BCCS102SU (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
102 (mm) / SU / 2,3 (mm)

▪ BCCS112SU (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
112 (mm) / SU / 2,3 (mm)

▪ BCCS90SM (2,8)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
90 (mm) / SM / 2,8 (mm)

▪ BCCS94SM (2,8)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
94 (mm) / SM / 2,8 (mm)

▪ BCCS103SM (2,8)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
103 (mm) / SM / 2,8 (mm)

▪ BCCS65S (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
65 (mm) / S / 2,3 (mm)

▪ BCCS74S (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
74 (mm) / S / 2,3 (mm)

▪ BCCS85S (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
85 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ BCCS95S (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
95 (mm) / S / 2,3 (mm)

▪ BCCS77S (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
77 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ BCCS80S (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
80 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ BCCS85S (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
85 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ BCCS101S (3,1)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
101 (mm) / S / 3,1 (mm)

▪ BCCS95X (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
95 (mm) / X / 2,3 (mm)

▪ BCCS85Y (2,3)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
85 (mm) / Y / 2,3 (mm)

▪ BCCS67Y (1,5)

▪ **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
67 (mm) / Y / 1,5 (mm)

- **BCCS61S (2,6)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
61 (mm) / S / 2,6 (mm)

- **BCCS64SU (2,3)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
64 (mm) / SU / 2,3 (mm)

- **BCCS67Y (1,1)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
67 (mm) / Y / 1,1 (mm)

- **BCCS67Y (1,2)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
67 (mm) / Y / 1,2 (mm)

- **BCCC**

Os modelos BCCC são compostos de brocas cônicas destinadas à craniotomia, de cortes ósseos laterais.



- **BCCC82Y (1,9)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
82 (mm) / Y / 1,9 (mm)

- **BCCC85Y (2,2)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
85 (mm) / Y / 2,2 (mm)

- **BCCC96Y (2,9)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
96 (mm) / Y / 2,9 (mm)

- **BCCC51E (2,3)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
51 (mm) / E / 2,3 (mm)

- **BCCC96S (2,9)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
96 (mm) / S / 2,9 (mm)

- **BCCC108L (2,2)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
108 (mm) / L / 2,2 (mm)

- **BCCC89L (2,2)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
89 (mm) / L / 2,2 (mm)

- **BCCC84L (1,9)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
84 (mm) / L / 1,9 (mm)

- **BCCC65S (2,2)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
65 (mm) / S / 2,2 (mm)

- **BCCC101S (2,7)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
101 (mm) / S / 2,7 (mm)

- **BCCC94SM (2,7)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
94 (mm) / SM / 2,7 (mm)

- **BCCC112SU (2,7)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
112 (mm) / SU / 2,7 (mm)

- **BCCC94SS (2,2)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
94 (mm) / SS / 2,2 (mm)

- **BCCC84Q (3,1)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
84 (mm) / Q / 3,1 (mm)

- **BCCC102S (3,1)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
102 (mm) / S / 3,1 (mm)

- **BCCQ**

Os modelos BCCQ são compostos de brocas retas com quebra cavaco destinadas à craniotomia, de cortes ósseos laterais.



- **BCCQ67H (2,3)**

- **Comprimento / Encaixe / Diâmetro:**
67 (mm) / H / 2,3 (mm)

▪ BAB

Os modelos BAB são brocas auto bloqueantes, destinadas à perfuração e trepanação.



- Encaixes disponíveis: N
- Diâmetros disponíveis: 11 - 14 (mm)

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Insira a fresa seguindo as instruções fornecidas no manual da peça de mão selecionada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do método e do procedimento cirúrgico e, dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha final do método e materiais a serem empregados.



Consulte o Manual do Usuário da peça de mão selecionada.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

Retirar a fresa da peça de mão.



**Após o uso do produto, o mesmo
deverá ser descartado.**

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade
do produto



Produto esterilizado
através de radiação



Fabricado por



Manter seco

MODELOS COMERCIAIS

▪ BRD

Código	Modelo
730010000	BRD44,5R (0,6)
730010001	BRD44,5R (0,7)
730010002	BRD44,5R (0,8)
730010003	BRD44,5R (1,0)
730010004	BRD44,5R (1,4)
730010005	BRD44,5R (1,8)
730010006	BRD44,5R (2,3)
730010007	BRD44,5R (2,7)
730010008	BRD44,5R (3,1)
730010009	BRD44,5R (3,5)
730010010	BRD44,5R (4,0)
730010011	BRD44,5R (4,5)
730010012	BRD44,5R (5,0)
730010013	BRD44,5R (6,0)
730010014	BRD44,5R (7,0)
730060000	BRD44,5H (0,6)
730060001	BRD44,5H (0,7)
730060002	BRD44,5H (0,8)
730060003	BRD44,5H (1,0)
730060004	BRD44,5H (1,4)
730060005	BRD44,5H (1,8)
730060006	BRD44,5H (2,3)
730060007	BRD44,5H (2,7)
730060008	BRD44,5H (3,1)
730060009	BRD44,5H (3,5)
730060010	BRD44,5H (4,0)
730060011	BRD44,5H (4,5)
730060012	BRD44,5H (5,0)
730060013	BRD44,5H (6,0)
730060014	BRD44,5H (7,0)
730110000	BRD44,5J (0,6)
730110001	BRD44,5J (0,7)
730110002	BRD44,5J (0,8)
730110003	BRD44,5J (1,0)
730110004	BRD44,5J (1,4)
730110005	BRD44,5J (1,8)
730110006	BRD44,5J (2,3)

730110007	BRD44,5J (2,7)
730110008	BRD44,5J (3,1)
730110009	BRD44,5J (3,5)
730110010	BRD44,5J (4,0)
730110011	BRD44,5J (4,5)
730110012	BRD44,5J (5,0)
730110013	BRD44,5J (6,0)
730110014	BRD44,5J (7,0)
730160000	BRD44,5T (0,6)
730160001	BRD44,5T (0,7)
730160002	BRD44,5T (0,8)
730160003	BRD44,5T (1,0)
730160004	BRD44,5T (1,4)
730160005	BRD44,5T (1,8)
730160006	BRD44,5T (2,3)
730160007	BRD44,5T (2,7)
730160008	BRD44,5T (3,1)
730160009	BRD44,5T (3,5)
730160010	BRD44,5T (4,0)
730160011	BRD44,5T (4,5)
730160012	BRD44,5T (5,0)
730160013	BRD44,5T (6,0)
730160014	BRD44,5T (7,0)
730210000	BRD44,5O (0,6)
730210001	BRD44,5O (0,7)
730210002	BRD44,5O (0,8)
730210003	BRD44,5O (1,0)
730210004	BRD44,5O (1,4)
730210005	BRD44,5O (1,8)
730210006	BRD44,5O (2,3)
730210007	BRD44,5O (2,7)
730210008	BRD44,5O (3,1)
730210009	BRD44,5O (3,5)
730210010	BRD44,5O (4,0)
730210011	BRD44,5O (4,5)
730210012	BRD44,5O (5,0)
730210013	BRD44,5O (6,0)
730210014	BRD44,5O (7,0)
730260000	BRD44,5S (0,6)
730260001	BRD44,5S (0,7)

730260002	BRD44,5S (0,8)
730260003	BRD44,5S (1,0)
730260004	BRD44,5S (1,4)
730260005	BRD44,5S (1,8)
730260006	BRD44,5S (2,3)
730260007	BRD44,5S (2,7)
730260008	BRD44,5S (3,1)
730260009	BRD44,5S (3,5)
730260010	BRD44,5S (4,0)
730260011	BRD44,5S (4,5)
730260012	BRD44,5S (5,0)
730260013	BRD44,5S (6,0)
730260014	BRD44,5S (7,0)
732860000	BRD44,5X (0,6)
732860100	BRD44,5X (0,7)
732860200	BRD44,5X (0,8)
732860300	BRD44,5X (1,0)
732860400	BRD44,5X (1,4)
732860500	BRD44,5X (1,8)
732860600	BRD44,5X (2,3)
732860700	BRD44,5X (2,7)
732860800	BRD44,5X (3,1)
732860900	BRD44,5X (3,5)
732861000	BRD44,5X (4,0)
732861100	BRD44,5X (4,5)
732861200	BRD44,5X (5,0)
732861300	BRD44,5X (6,0)
732861400	BRD44,5X (7,0)
732930000	BRD44,5A (0,6)
732930100	BRD44,5A (0,7)
732930200	BRD44,5A (0,8)
732930300	BRD44,5A (1,0)
732930400	BRD44,5A (1,4)
732930500	BRD44,5A (1,8)
732930600	BRD44,5A (2,3)
732930700	BRD44,5A (2,7)
732930800	BRD44,5A (3,1)
732930900	BRD44,5A (3,5)
732931000	BRD44,5A (4,0)
732931100	BRD44,5A (4,5)

732931200	BRD44,5A (5,0)
732931300	BRD44,5A (6,0)
732931400	BRD44,5A (7,0)
733000000	BRD44,5D (0,6)
733000100	BRD44,5D (0,7)
733000200	BRD44,5D (0,8)
733000300	BRD44,5D (1,0)
733000400	BRD44,5D (1,4)
733000500	BRD44,5D (1,8)
733000600	BRD44,5D (2,3)
733000700	BRD44,5D (2,7)
733000800	BRD44,5D (3,1)
733000900	BRD44,5D (3,5)
733001000	BRD44,5D (4,0)
733001100	BRD44,5D (4,5)
733001200	BRD44,5D (5,0)
733001300	BRD44,5D (6,0)
733001400	BRD44,5D (7,0)
733070000	BRD44,5L (0,6)
733070100	BRD44,5L (0,7)
733070200	BRD44,5L (0,8)
733070300	BRD44,5L (1,0)
733070400	BRD44,5L (1,4)
733070500	BRD44,5L (1,8)
733070600	BRD44,5L (2,3)
733070700	BRD44,5L (2,7)
733070800	BRD44,5L (3,1)
733070900	BRD44,5L (3,5)
733071000	BRD44,5L (4,0)
733071100	BRD44,5L (4,5)
733071200	BRD44,5L (5,0)
733071300	BRD44,5L (6,0)
733071400	BRD44,5L (7,0)
733140000	BRD44,5U (0,6)
733140100	BRD44,5U (0,7)
733140200	BRD44,5U (0,8)
733140300	BRD44,5U (1,0)
733140400	BRD44,5U (1,4)
733140500	BRD44,5U (1,8)
733140600	BRD44,5U (2,3)

733140700	BRD44,5U (2,7)
733140800	BRD44,5U (3,1)
733140900	BRD44,5U (3,5)
733141000	BRD44,5U (4,0)
733141100	BRD44,5U (4,5)
733141200	BRD44,5U (5,0)
733141300	BRD44,5U (6,0)
733141400	BRD44,5U (7,0)
738350000	BRD44,5Q (0,6)
738350010	BRD44,5Q (0,7)
738350020	BRD44,5Q (0,8)
738350030	BRD44,5Q (1,0)
738350040	BRD44,5Q (1,4)
738350050	BRD44,5Q (1,8)
738350060	BRD44,5Q (2,3)
738350070	BRD44,5Q (2,7)
738350080	BRD44,5Q (3,1)
738350090	BRD44,5Q (3,5)
738350100	BRD44,5Q (4,0)
738350110	BRD44,5Q (4,5)
738350120	BRD44,5Q (5,0)
738350130	BRD44,5Q (6,0)
738350140	BRD44,5Q (7,0)
738360000	BRD44,5E (0,6)
738360010	BRD44,5E (0,7)
738360020	BRD44,5E (0,8)
738360030	BRD44,5E (1,0)
738360040	BRD44,5E (1,4)
738360050	BRD44,5E (1,8)
738360060	BRD44,5E (2,3)
738360070	BRD44,5E (2,7)
738360080	BRD44,5E (3,1)
738360090	BRD44,5E (3,5)
738360100	BRD44,5E (4,0)
738360110	BRD44,5E (4,5)
738360120	BRD44,5E (5,0)
738360130	BRD44,5E (6,0)
738360140	BRD44,5E (7,0)
738370000	BRD44,5B (0,6)
738370010	BRD44,5B (0,7)

738370020	BRD44,5B (0,8)
738370030	BRD44,5B (1,0)
738370040	BRD44,5B (1,4)
738370050	BRD44,5B (1,8)
738370060	BRD44,5B (2,3)
738370070	BRD44,5B (2,7)
738370080	BRD44,5B (3,1)
738370090	BRD44,5B (3,5)
738370100	BRD44,5B (4,0)
738370110	BRD44,5B (4,5)
738370120	BRD44,5B (5,0)
738370130	BRD44,5B (6,0)
738370140	BRD44,5B (7,0)
738380000	BRD44,5K (0,6)
738380010	BRD44,5K (0,7)
738380020	BRD44,5K (0,8)
738380030	BRD44,5K (1,0)
738380040	BRD44,5K (1,4)
738380050	BRD44,5K (1,8)
738380060	BRD44,5K (2,3)
738380070	BRD44,5K (2,7)
738380080	BRD44,5K (3,1)
738380090	BRD44,5K (3,5)
738380100	BRD44,5K (4,0)
738380110	BRD44,5K (4,5)
738380120	BRD44,5K (5,0)
738380130	BRD44,5K (6,0)
738380140	BRD44,5K (7,0)
738390000	BRD44,5Y (0,6)
738390010	BRD44,5Y (0,7)
738390020	BRD44,5Y (0,8)
738390030	BRD44,5Y (1,0)
738390040	BRD44,5Y (1,4)
738390050	BRD44,5Y (1,8)
738390060	BRD44,5Y (2,3)
738390070	BRD44,5Y (2,7)
738390080	BRD44,5Y (3,1)
738390090	BRD44,5Y (3,5)
738390100	BRD44,5Y (4,0)
738390110	BRD44,5Y (4,5)

738390120	BRD44,5Y (5,0)
738390130	BRD44,5Y (6,0)
738390140	BRD44,5Y (7,0)
738870000	BRD44,5W (0,6)
738870010	BRD44,5W (0,7)
738870020	BRD44,5W (0,8)
738870030	BRD44,5W (1,0)
738870040	BRD44,5W (1,4)
738870050	BRD44,5W (1,8)
738870060	BRD44,5W (2,3)
738870070	BRD44,5W (2,7)
738870080	BRD44,5W (3,1)
738870090	BRD44,5W (3,5)
738870100	BRD44,5W (4,0)
738870110	BRD44,5W (4,5)
738870120	BRD44,5W (5,0)
738870130	BRD44,5W (6,0)
738870140	BRD44,5W (7,0)
730020000	BRD55R (0,6)
730020001	BRD55R (0,7)
730020002	BRD55R (0,8)
730020003	BRD55R (1,0)
730020004	BRD55R (1,4)
730020005	BRD55R (1,8)
730020006	BRD55R (2,3)
730020007	BRD55R (2,7)
730020008	BRD55R (3,1)
730020009	BRD55R (3,5)
730020010	BRD55R (4,0)
730020011	BRD55R (4,5)
730020012	BRD55R (5,0)
730020013	BRD55R (6,0)
730020014	BRD55R (7,0)
730070000	BRD55H (0,6)
730070001	BRD55H (0,7)
730070002	BRD55H (0,8)
730070003	BRD55H (1,0)
730070004	BRD55H (1,4)
730070005	BRD55H (1,8)
730070006	BRD55H (2,3)

730070007	BRD55H (2,7)
730070008	BRD55H (3,1)
730070009	BRD55H (3,5)
730070010	BRD55H (4,0)
730070011	BRD55H (4,5)
730070012	BRD55H (5,0)
730070013	BRD55H (6,0)
730070014	BRD55H (7,0)
730120000	BRD55J (0,6)
730120001	BRD55J (0,7)
730120002	BRD55J (0,8)
730120003	BRD55J (1,0)
730120004	BRD55J (1,4)
730120005	BRD55J (1,8)
730120006	BRD55J (2,3)
730120007	BRD55J (2,7)
730120008	BRD55J (3,1)
730120009	BRD55J (3,5)
730120010	BRD55J (4,0)
730120011	BRD55J (4,5)
730120012	BRD55J (5,0)
730120013	BRD55J (6,0)
730120014	BRD55J (7,0)
730170000	BRD55T (0,6)
730170001	BRD55T (0,7)
730170002	BRD55T (0,8)
730170003	BRD55T (1,0)
730170004	BRD55T (1,4)
730170005	BRD55T (1,8)
730170006	BRD55T (2,3)
730170007	BRD55T (2,7)
730170008	BRD55T (3,1)
730170009	BRD55T (3,5)
730170010	BRD55T (4,0)
730170011	BRD55T (4,5)
730170012	BRD55T (5,0)
730170013	BRD55T (6,0)
730170014	BRD55T (7,0)
730220000	BRD55O (0,6)
730220001	BRD55O (0,7)

730220002	BRD55O (0,8)
730220003	BRD55O (1,0)
730220004	BRD55O (1,4)
730220005	BRD55O (1,8)
730220006	BRD55O (2,3)
730220007	BRD55O (2,7)
730220008	BRD55O (3,1)
730220009	BRD55O (3,5)
730220010	BRD55O (4,0)
730220011	BRD55O (4,5)
730220012	BRD55O (5,0)
730220013	BRD55O (6,0)
730220014	BRD55O (7,0)
730270000	BRD55S (0,6)
730270001	BRD55S (0,7)
730270002	BRD55S (0,8)
730270003	BRD55S (1,0)
730270004	BRD55S (1,4)
730270005	BRD55S (1,8)
730270006	BRD55S (2,3)
730270007	BRD55S (2,7)
730270008	BRD55S (3,1)
730270009	BRD55S (3,5)
730270010	BRD55S (4,0)
730270011	BRD55S (4,5)
730270012	BRD55S (5,0)
730270013	BRD55S (6,0)
730270014	BRD55S (7,0)
732870000	BRD55X (0,6)
732870100	BRD55X (0,7)
732870200	BRD55X (0,8)
732870300	BRD55X (1,0)
732870400	BRD55X (1,4)
732870500	BRD55X (1,8)
732870600	BRD55X (2,3)
732870700	BRD55X (2,7)
732870800	BRD55X (3,1)
732870900	BRD55X (3,5)
732871000	BRD55X (4,0)
732871100	BRD55X (4,5)

732871200	BRD55X (5,0)
732871300	BRD55X (6,0)
732871400	BRD55X (7,0)
732940000	BRD55A (0,6)
732940100	BRD55A (0,7)
732940200	BRD55A (0,8)
732940300	BRD55A (1,0)
732940400	BRD55A (1,4)
732940500	BRD55A (1,8)
732940600	BRD55A (2,3)
732940700	BRD55A (2,7)
732940800	BRD55A (3,1)
732940900	BRD55A (3,5)
732941000	BRD55A (4,0)
732941100	BRD55A (4,5)
732941200	BRD55A (5,0)
732941300	BRD55A (6,0)
732941400	BRD55A (7,0)
733010000	BRD55D (0,6)
733010100	BRD55D (0,7)
733010200	BRD55D (0,8)
733010300	BRD55D (1,0)
733010400	BRD55D (1,4)
733010500	BRD55D (1,8)
733010600	BRD55D (2,3)
733010700	BRD55D (2,7)
733010800	BRD55D (3,1)
733010900	BRD55D (3,5)
733011000	BRD55D (4,0)
733011100	BRD55D (4,5)
733011200	BRD55D (5,0)
733011300	BRD55D (6,0)
733011400	BRD55D (7,0)
733080000	BRD55L (0,6)
733080100	BRD55L (0,7)
733080200	BRD55L (0,8)
733080300	BRD55L (1,0)
733080400	BRD55L (1,4)
733080500	BRD55L (1,8)
733080600	BRD55L (2,3)

733080700	BRD55L (2,7)
733080800	BRD55L (3,1)
733080900	BRD55L (3,5)
733081000	BRD55L (4,0)
733081100	BRD55L (4,5)
733081200	BRD55L (5,0)
733081300	BRD55L (6,0)
733081400	BRD55L (7,0)
733150000	BRD55U (0,6)
733150100	BRD55U (0,7)
733150200	BRD55U (0,8)
733150300	BRD55U (1,0)
733150400	BRD55U (1,4)
733150500	BRD55U (1,8)
733150600	BRD55U (2,3)
733150700	BRD55U (2,7)
733150800	BRD55U (3,1)
733150900	BRD55U (3,5)
733151000	BRD55U (4,0)
733151100	BRD55U (4,5)
733151200	BRD55U (5,0)
733151300	BRD55U (6,0)
733151400	BRD55U (7,0)
738350150	BRD55Q (0,6)
738350160	BRD55Q (0,7)
738350170	BRD55Q (0,8)
738350180	BRD55Q (1,0)
738350190	BRD55Q (1,4)
738350200	BRD55Q (1,8)
738350210	BRD55Q (2,3)
738350220	BRD55Q (2,7)
738350230	BRD55Q (3,1)
738350240	BRD55Q (3,5)
738350250	BRD55Q (4,0)
738350260	BRD55Q (4,5)
738350270	BRD55Q (5,0)
738350280	BRD55Q (6,0)
738350290	BRD55Q (7,0)
738360150	BRD55E (0,6)
738360160	BRD55E (0,7)

738360170	BRD55E (0,8)
738360180	BRD55E (1,0)
738360190	BRD55E (1,4)
738360200	BRD55E (1,8)
738360210	BRD55E (2,3)
738360220	BRD55E (2,7)
738360230	BRD55E (3,1)
738360240	BRD55E (3,5)
738360250	BRD55E (4,0)
738360260	BRD55E (4,5)
738360270	BRD55E (5,0)
738360280	BRD55E (6,0)
738360290	BRD55E (7,0)
738370150	BRD55B (0,6)
738370160	BRD55B (0,7)
738370170	BRD55B (0,8)
738370180	BRD55B (1,0)
738370190	BRD55B (1,4)
738370200	BRD55B (1,8)
738370210	BRD55B (2,3)
738370220	BRD55B (2,7)
738370230	BRD55B (3,1)
738370240	BRD55B (3,5)
738370250	BRD55B (4,0)
738370260	BRD55B (4,5)
738370270	BRD55B (5,0)
738370280	BRD55B (6,0)
738370290	BRD55B (7,0)
738380150	BRD55K (0,6)
738380160	BRD55K (0,7)
738380170	BRD55K (0,8)
738380180	BRD55K (1,0)
738380190	BRD55K (1,4)
738380200	BRD55K (1,8)
738380210	BRD55K (2,3)
738380220	BRD55K (2,7)
738380230	BRD55K (3,1)
738380240	BRD55K (3,5)
738380250	BRD55K (4,0)
738380260	BRD55K (4,5)

738380270	BRD55K (5,0)
738380280	BRD55K (6,0)
738380290	BRD55K (7,0)
738390150	BRD55Y (0,6)
738390160	BRD55Y (0,7)
738390170	BRD55Y (0,8)
738390180	BRD55Y (1,0)
738390190	BRD55Y (1,4)
738390200	BRD55Y (1,8)
738390210	BRD55Y (2,3)
738390220	BRD55Y (2,7)
738390230	BRD55Y (3,1)
738390240	BRD55Y (3,5)
738390250	BRD55Y (4,0)
738390260	BRD55Y (4,5)
738390270	BRD55Y (5,0)
738390280	BRD55Y (6,0)
738390290	BRD55Y (7,0)
738870150	BRD55W (0,6)
738870160	BRD55W (0,7)
738870170	BRD55W (0,8)
738870180	BRD55W (1,0)
738870190	BRD55W (1,4)
738870200	BRD55W (1,8)
738870210	BRD55W (2,3)
738870220	BRD55W (2,7)
738870230	BRD55W (3,1)
738870240	BRD55W (3,5)
738870250	BRD55W (4,0)
738870260	BRD55W (4,5)
738870270	BRD55W (5,0)
738870280	BRD55W (6,0)
738870290	BRD55W (7,0)
730030000	BRD70R (0,6)
730030001	BRD70R (0,7)
730030002	BRD70R (0,8)
730030003	BRD70R (1,0)
730030004	BRD70R (1,4)
730030005	BRD70R (1,8)
730030006	BRD70R (2,3)

730030007	BRD70R (2,7)
730030008	BRD70R (3,1)
730030009	BRD70R (3,5)
730030010	BRD70R (4,0)
730030011	BRD70R (4,5)
730030012	BRD70R (5,0)
730030013	BRD70R (6,0)
730030014	BRD70R (7,0)
730080000	BRD70H (0,6)
730080001	BRD70H (0,7)
730080002	BRD70H (0,8)
730080003	BRD70H (1,0)
730080004	BRD70H (1,4)
730080005	BRD70H (1,8)
730080006	BRD70H (2,3)
730080007	BRD70H (2,7)
730080008	BRD70H (3,1)
730080009	BRD70H (3,5)
730080010	BRD70H (4,0)
730080011	BRD70H (4,5)
730080012	BRD70H (5,0)
730080013	BRD70H (6,0)
730080014	BRD70H (7,0)
730130000	BRD70J (0,6)
730130001	BRD70J (0,7)
730130002	BRD70J (0,8)
730130003	BRD70J (1,0)
730130004	BRD70J (1,4)
730130005	BRD70J (1,8)
730130006	BRD70J (2,3)
730130007	BRD70J (2,7)
730130008	BRD70J (3,1)
730130009	BRD70J (3,5)
730130010	BRD70J (4,0)
730130011	BRD70J (4,5)
730130012	BRD70J (5,0)
730130013	BRD70J (6,0)
730130014	BRD70J (7,0)
730180000	BRD70T (0,6)
730180001	BRD70T (0,7)

730180002	BRD70T (0,8)
730180003	BRD70T (1,0)
730180004	BRD70T (1,4)
730180005	BRD70T (1,8)
730180006	BRD70T (2,3)
730180007	BRD70T (2,7)
730180008	BRD70T (3,1)
730180009	BRD70T (3,5)
730180010	BRD70T (4,0)
730180011	BRD70T (4,5)
730180012	BRD70T (5,0)
730180013	BRD70T (6,0)
730180014	BRD70T (7,0)
730230000	BRD70O (0,6)
730230001	BRD70O (0,7)
730230002	BRD70O (0,8)
730230003	BRD70O (1,0)
730230004	BRD70O (1,4)
730230005	BRD70O (1,8)
730230006	BRD70O (2,3)
730230007	BRD70O (2,7)
730230008	BRD70O (3,1)
730230009	BRD70O (3,5)
730230010	BRD70O (4,0)
730230011	BRD70O (4,5)
730230012	BRD70O (5,0)
730230013	BRD70O (6,0)
730230014	BRD70O (7,0)
730280000	BRD70S (0,6)
730280001	BRD70S (0,7)
730280002	BRD70S (0,8)
730280003	BRD70S (1,0)
730280004	BRD70S (1,4)
730280005	BRD70S (1,8)
730280006	BRD70S (2,3)
730280007	BRD70S (2,7)
730280008	BRD70S (3,1)
730280009	BRD70S (3,5)
730280010	BRD70S (4,0)
730280011	BRD70S (4,5)

730280012	BRD70S (5,0)
730280013	BRD70S (6,0)
730280014	BRD70S (7,0)
732880000	BRD70X (0,6)
732880100	BRD70X (0,7)
732880200	BRD70X (0,8)
732880300	BRD70X (1,0)
732880400	BRD70X (1,4)
732880500	BRD70X (1,8)
732880600	BRD70X (2,3)
732880700	BRD70X (2,7)
732880800	BRD70X (3,1)
732880900	BRD70X (3,5)
732881000	BRD70X (4,0)
732881100	BRD70X (4,5)
732881200	BRD70X (5,0)
732881300	BRD70X (6,0)
732881400	BRD70X (7,0)
732950000	BRD70A (0,6)
732950100	BRD70A (0,7)
732950200	BRD70A (0,8)
732950300	BRD70A (1,0)
732950400	BRD70A (1,4)
732950500	BRD70A (1,8)
732950600	BRD70A (2,3)
732950700	BRD70A (2,7)
732950800	BRD70A (3,1)
732950900	BRD70A (3,5)
732951000	BRD70A (4,0)
732951100	BRD70A (4,5)
732951200	BRD70A (5,0)
732951300	BRD70A (6,0)
732951400	BRD70A (7,0)
733020000	BRD70D (0,6)
733020100	BRD70D (0,7)
733020200	BRD70D (0,8)
733020300	BRD70D (1,0)
733020400	BRD70D (1,4)
733020500	BRD70D (1,8)
733020600	BRD70D (2,3)

733020700	BRD70D (2,7)
733020800	BRD70D (3,1)
733020900	BRD70D (3,5)
733021000	BRD70D (4,0)
733021100	BRD70D (4,5)
733021200	BRD70D (5,0)
733021300	BRD70D (6,0)
733021400	BRD70D (7,0)
733090000	BRD70L (0,6)
733090100	BRD70L (0,7)
733090200	BRD70L (0,8)
733090300	BRD70L (1,0)
733090400	BRD70L (1,4)
733090500	BRD70L (1,8)
733090600	BRD70L (2,3)
733090700	BRD70L (2,7)
733090800	BRD70L (3,1)
733090900	BRD70L (3,5)
733091000	BRD70L (4,0)
733091100	BRD70L (4,5)
733091200	BRD70L (5,0)
733091300	BRD70L (6,0)
733091400	BRD70L (7,0)
733160000	BRD70U (0,6)
733160100	BRD70U (0,7)
733160200	BRD70U (0,8)
733160300	BRD70U (1,0)
733160400	BRD70U (1,4)
733160500	BRD70U (1,8)
733160600	BRD70U (2,3)
733160700	BRD70U (2,7)
733160800	BRD70U (3,1)
733160900	BRD70U (3,5)
733161000	BRD70U (4,0)
733161100	BRD70U (4,5)
733161200	BRD70U (5,0)
733161300	BRD70U (6,0)
733161400	BRD70U (7,0)
738350300	BRD70Q (0,6)
738350310	BRD70Q (0,7)

738350320	BRD70Q (0,8)
738350330	BRD70Q (1,0)
738350340	BRD70Q (1,4)
738350350	BRD70Q (1,8)
738350360	BRD70Q (2,3)
738350370	BRD70Q (2,7)
738350380	BRD70Q (3,1)
738350390	BRD70Q (3,5)
738350400	BRD70Q (4,0)
738350410	BRD70Q (4,5)
738350420	BRD70Q (5,0)
738350430	BRD70Q (6,0)
738350440	BRD70Q (7,0)
738360300	BRD70E (0,6)
738360310	BRD70E (0,7)
738360320	BRD70E (0,8)
738360330	BRD70E (1,0)
738360340	BRD70E (1,4)
738360350	BRD70E (1,8)
738360360	BRD70E (2,3)
738360370	BRD70E (2,7)
738360380	BRD70E (3,1)
738360390	BRD70E (3,5)
738360400	BRD70E (4,0)
738360410	BRD70E (4,5)
738360420	BRD70E (5,0)
738360430	BRD70E (6,0)
738360440	BRD70E (7,0)
738370300	BRD70B (0,6)
738370310	BRD70B (0,7)
738370320	BRD70B (0,8)
738370330	BRD70B (1,0)
738370340	BRD70B (1,4)
738370350	BRD70B (1,8)
738370360	BRD70B (2,3)
738370370	BRD70B (2,7)
738370380	BRD70B (3,1)
738370390	BRD70B (3,5)
738370400	BRD70B (4,0)
738370410	BRD70B (4,5)

738370420	BRD70B (5,0)
738370430	BRD70B (6,0)
738370440	BRD70B (7,0)
738380300	BRD70K (0,6)
738380310	BRD70K (0,7)
738380320	BRD70K (0,8)
738380330	BRD70K (1,0)
738380340	BRD70K (1,4)
738380350	BRD70K (1,8)
738380360	BRD70K (2,3)
738380370	BRD70K (2,7)
738380380	BRD70K (3,1)
738380390	BRD70K (3,5)
738380400	BRD70K (4,0)
738380410	BRD70K (4,5)
738380420	BRD70K (5,0)
738380430	BRD70K (6,0)
738380440	BRD70K (7,0)
738390300	BRD70Y (0,6)
738390310	BRD70Y (0,7)
738390320	BRD70Y (0,8)
738390330	BRD70Y (1,0)
738390340	BRD70Y (1,4)
738390350	BRD70Y (1,8)
738390360	BRD70Y (2,3)
738390370	BRD70Y (2,7)
738390380	BRD70Y (3,1)
738390390	BRD70Y (3,5)
738390400	BRD70Y (4,0)
738390410	BRD70Y (4,5)
738390420	BRD70Y (5,0)
738390430	BRD70Y (6,0)
738390440	BRD70Y (7,0)
738870300	BRD70W (0,6)
738870310	BRD70W (0,7)
738870320	BRD70W (0,8)
738870330	BRD70W (1,0)
738870340	BRD70W (1,4)
738870350	BRD70W (1,8)
738870360	BRD70W (2,3)

738870370	BRD70W (2,7)
738870380	BRD70W (3,1)
738870390	BRD70W (3,5)
738870400	BRD70W (4,0)
738870410	BRD70W (4,5)
738870420	BRD70W (5,0)
738870430	BRD70W (6,0)
738870440	BRD70W (7,0)
738351200	BRD85Q (0,6)
738351210	BRD85Q (0,7)
738351220	BRD85Q (0,8)
738351230	BRD85Q (1,0)
738351240	BRD85Q (1,4)
738351250	BRD85Q (1,8)
738351260	BRD85Q (2,3)
738351270	BRD85Q (2,7)
738351280	BRD85Q (3,1)
738351290	BRD85Q (3,5)
738351300	BRD85Q (4,0)
738351310	BRD85Q (4,5)
738351320	BRD85Q (5,0)
738351330	BRD85Q (6,0)
738351340	BRD85Q (7,0)
730040000	BRD95R (0,6)
730040001	BRD95R (0,7)
730040002	BRD95R (0,8)
730040003	BRD95R (1,0)
730040004	BRD95R (1,4)
730040005	BRD95R (1,8)
730040006	BRD95R (2,3)
730040007	BRD95R (2,7)
730040008	BRD95R (3,1)
730040009	BRD95R (3,5)
730040010	BRD95R (4,0)
730040011	BRD95R (4,5)
730040012	BRD95R (5,0)
730040013	BRD95R (6,0)
730040014	BRD95R (7,0)
730090000	BRD95H (0,6)
730090001	BRD95H (0,7)

730090002	BRD95H (0,8)
730090003	BRD95H (1,0)
730090004	BRD95H (1,4)
730090005	BRD95H (1,8)
730090006	BRD95H (2,3)
730090007	BRD95H (2,7)
730090008	BRD95H (3,1)
730090009	BRD95H (3,5)
730090010	BRD95H (4,0)
730090011	BRD95H (4,5)
730090012	BRD95H (5,0)
730090013	BRD95H (6,0)
730090014	BRD95H (7,0)
730140000	BRD95J (0,6)
730140001	BRD95J (0,7)
730140002	BRD95J (0,8)
730140003	BRD95J (1,0)
730140004	BRD95J (1,4)
730140005	BRD95J (1,8)
730140006	BRD95J (2,3)
730140007	BRD95J (2,7)
730140008	BRD95J (3,1)
730140009	BRD95J (3,5)
730140010	BRD95J (4,0)
730140011	BRD95J (4,5)
730140012	BRD95J (5,0)
730140013	BRD95J (6,0)
730140014	BRD95J (7,0)
730190000	BRD95T (0,6)
730190001	BRD95T (0,7)
730190002	BRD95T (0,8)
730190003	BRD95T (1,0)
730190004	BRD95T (1,4)
730190005	BRD95T (1,8)
730190006	BRD95T (2,3)
730190007	BRD95T (2,7)
730190008	BRD95T (3,1)
730190009	BRD95T (3,5)
730190010	BRD95T (4,0)
730190011	BRD95T (4,5)

730190012	BRD95T (5,0)
730190013	BRD95T (6,0)
730190014	BRD95T (7,0)
730240000	BRD95O (0,6)
730240001	BRD95O (0,7)
730240002	BRD95O (0,8)
730240003	BRD95O (1,0)
730240004	BRD95O (1,4)
730240005	BRD95O (1,8)
730240006	BRD95O (2,3)
730240007	BRD95O (2,7)
730240008	BRD95O (3,1)
730240009	BRD95O (3,5)
730240010	BRD95O (4,0)
730240011	BRD95O (4,5)
730240012	BRD95O (5,0)
730240013	BRD95O (6,0)
730240014	BRD95O (7,0)
730290000	BRD95S (0,6)
730290001	BRD95S (0,7)
730290002	BRD95S (0,8)
730290003	BRD95S (1,0)
730290004	BRD95S (1,4)
730290005	BRD95S (1,8)
730290006	BRD95S (2,3)
730290007	BRD95S (2,7)
730290008	BRD95S (3,1)
730290009	BRD95S (3,5)
730290010	BRD95S (4,0)
730290011	BRD95S (4,5)
730290012	BRD95S (5,0)
730290013	BRD95S (6,0)
730290014	BRD95S (7,0)
732890000	BRD95X (0,6)
732890100	BRD95X (0,7)
732890200	BRD95X (0,8)
732890300	BRD95X (1,0)
732890400	BRD95X (1,4)
732890500	BRD95X (1,8)
732890600	BRD95X (2,3)

732890700	BRD95X (2,7)
732890800	BRD95X (3,1)
732890900	BRD95X (3,5)
732891000	BRD95X (4,0)
732891100	BRD95X (4,5)
732891200	BRD95X (5,0)
732891300	BRD95X (6,0)
732891400	BRD95X (7,0)
732960000	BRD95A (0,6)
732960100	BRD95A (0,7)
732960200	BRD95A (0,8)
732960300	BRD95A (1,0)
732960400	BRD95A (1,4)
732960500	BRD95A (1,8)
732960600	BRD95A (2,3)
732960700	BRD95A (2,7)
732960800	BRD95A (3,1)
732960900	BRD95A (3,5)
732961000	BRD95A (4,0)
732961100	BRD95A (4,5)
732961200	BRD95A (5,0)
732961300	BRD95A (6,0)
732961400	BRD95A (7,0)
733030000	BRD95D (0,6)
733030100	BRD95D (0,7)
733030200	BRD95D (0,8)
733030300	BRD95D (1,0)
733030400	BRD95D (1,4)
733030500	BRD95D (1,8)
733030600	BRD95D (2,3)
733030700	BRD95D (2,7)
733030800	BRD95D (3,1)
733030900	BRD95D (3,5)
733031000	BRD95D (4,0)
733031100	BRD95D (4,5)
733031200	BRD95D (5,0)
733031300	BRD95D (6,0)
733031400	BRD95D (7,0)
733100000	BRD95L (0,6)
733100100	BRD95L (0,7)

733100200	BRD95L (0,8)
733100300	BRD95L (1,0)
733100400	BRD95L (1,4)
733100500	BRD95L (1,8)
733100600	BRD95L (2,3)
733100700	BRD95L (2,7)
733100800	BRD95L (3,1)
733100900	BRD95L (3,5)
733101000	BRD95L (4,0)
733101100	BRD95L (4,5)
733101200	BRD95L (5,0)
733101300	BRD95L (6,0)
733101400	BRD95L (7,0)
733170000	BRD95U (0,6)
733170100	BRD95U (0,7)
733170200	BRD95U (0,8)
733170300	BRD95U (1,0)
733170400	BRD95U (1,4)
733170500	BRD95U (1,8)
733170600	BRD95U (2,3)
733170700	BRD95U (2,7)
733170800	BRD95U (3,1)
733170900	BRD95U (3,5)
733171000	BRD95U (4,0)
733171100	BRD95U (4,5)
733171200	BRD95U (5,0)
733171300	BRD95U (6,0)
733171400	BRD95U (7,0)
738350450	BRD95Q (0,6)
738350460	BRD95Q (0,7)
738350470	BRD95Q (0,8)
738350480	BRD95Q (1,0)
738350490	BRD95Q (1,4)
738350500	BRD95Q (1,8)
738350510	BRD95Q (2,3)
738350520	BRD95Q (2,7)
738350530	BRD95Q (3,1)
738350540	BRD95Q (3,5)
738350550	BRD95Q (4,0)
738350560	BRD95Q (4,5)

738350570	BRD95Q (5,0)
738350580	BRD95Q (6,0)
738350590	BRD95Q (7,0)
738360450	BRD95E (0,6)
738360460	BRD95E (0,7)
738360470	BRD95E (0,8)
738360480	BRD95E (1,0)
738360490	BRD95E (1,4)
738360500	BRD95E (1,8)
738360510	BRD95E (2,3)
738360520	BRD95E (2,7)
738360530	BRD95E (3,1)
738360540	BRD95E (3,5)
738360550	BRD95E (4,0)
738360560	BRD95E (4,5)
738360570	BRD95E (5,0)
738360580	BRD95E (6,0)
738360590	BRD95E (7,0)
738370450	BRD95B (0,6)
738370460	BRD95B (0,7)
738370470	BRD95B (0,8)
738370480	BRD95B (1,0)
738370490	BRD95B (1,4)
738370500	BRD95B (1,8)
738370510	BRD95B (2,3)
738370520	BRD95B (2,7)
738370530	BRD95B (3,1)
738370540	BRD95B (3,5)
738370550	BRD95B (4,0)
738370560	BRD95B (4,5)
738370570	BRD95B (5,0)
738370580	BRD95B (6,0)
738370590	BRD95B (7,0)
738380450	BRD95K (0,6)
738380460	BRD95K (0,7)
738380470	BRD95K (0,8)
738380480	BRD95K (1,0)
738380490	BRD95K (1,4)
738380500	BRD95K (1,8)
738380510	BRD95K (2,3)

738380520	BRD95K (2,7)
738380530	BRD95K (3,1)
738380540	BRD95K (3,5)
738380550	BRD95K (4,0)
738380560	BRD95K (4,5)
738380570	BRD95K (5,0)
738380580	BRD95K (6,0)
738380590	BRD95K (7,0)
738390450	BRD95Y (0,6)
738390460	BRD95Y (0,7)
738390470	BRD95Y (0,8)
738390480	BRD95Y (1,0)
738390490	BRD95Y (1,4)
738390500	BRD95Y (1,8)
738390510	BRD95Y (2,3)
738390520	BRD95Y (2,7)
738390530	BRD95Y (3,1)
738390540	BRD95Y (3,5)
738390550	BRD95Y (4,0)
738390560	BRD95Y (4,5)
738390570	BRD95Y (5,0)
738390580	BRD95Y (6,0)
738390590	BRD95Y (7,0)
738870450	BRD95W (0,6)
738870460	BRD95W (0,7)
738870470	BRD95W (0,8)
738870480	BRD95W (1,0)
738870490	BRD95W (1,4)
738870500	BRD95W (1,8)
738870510	BRD95W (2,3)
738870520	BRD95W (2,7)
738870530	BRD95W (3,1)
738870540	BRD95W (3,5)
738870550	BRD95W (4,0)
738870560	BRD95W (4,5)
738870570	BRD95W (5,0)
738870580	BRD95W (6,0)
738870590	BRD95W (7,0)
732741500	BRD115R (0,6)
732741600	BRD115R (0,7)

732741700	BRD115R (0,8)
732741800	BRD115R (1,0)
732741900	BRD115R (1,4)
732742000	BRD115R (1,8)
732742100	BRD115R (2,3)
732742200	BRD115R (2,7)
732742300	BRD115R (3,1)
732742400	BRD115R (3,5)
732742500	BRD115R (4,0)
732742600	BRD115R (4,5)
732742700	BRD115R (5,0)
732742800	BRD115R (6,0)
732742900	BRD115R (7,0)
732761500	BRD115H (0,6)
732761600	BRD115H (0,7)
732761700	BRD115H (0,8)
732761800	BRD115H (1,0)
732761900	BRD115H (1,4)
732762000	BRD115H (1,8)
732762100	BRD115H (2,3)
732762200	BRD115H (2,7)
732762300	BRD115H (3,1)
732762400	BRD115H (3,5)
732762500	BRD115H (4,0)
732762600	BRD115H (4,5)
732762700	BRD115H (5,0)
732762800	BRD115H (6,0)
732762900	BRD115H (7,0)
732781500	BRD115J (0,6)
732781600	BRD115J (0,7)
732781700	BRD115J (0,8)
732781800	BRD115J (1,0)
732781900	BRD115J (1,4)
732782000	BRD115J (1,8)
732782100	BRD115J (2,3)
732782200	BRD115J (2,7)
732782300	BRD115J (3,1)
732782400	BRD115J (3,5)
732782500	BRD115J (4,0)
732782600	BRD115J (4,5)

732782700	BRD115J (5,0)
732782800	BRD115J (6,0)
732782900	BRD115J (7,0)
732801500	BRD115T (0,6)
732801600	BRD115T (0,7)
732801700	BRD115T (0,8)
732801800	BRD115T (1,0)
732801900	BRD115T (1,4)
732802000	BRD115T (1,8)
732802100	BRD115T (2,3)
732802200	BRD115T (2,7)
732802300	BRD115T (3,1)
732802400	BRD115T (3,5)
732802500	BRD115T (4,0)
732802600	BRD115T (4,5)
732802700	BRD115T (5,0)
732802800	BRD115T (6,0)
732802900	BRD115T (7,0)
732821500	BRD115O (0,6)
732821600	BRD115O (0,7)
732821700	BRD115O (0,8)
732821800	BRD115O (1,0)
732821900	BRD115O (1,4)
732822000	BRD115O (1,8)
732822100	BRD115O (2,3)
732822200	BRD115O (2,7)
732822300	BRD115O (3,1)
732822400	BRD115O (3,5)
732822500	BRD115O (4,0)
732822600	BRD115O (4,5)
732822700	BRD115O (5,0)
732822800	BRD115O (6,0)
732822900	BRD115O (7,0)
732841500	BRD115S (0,6)
732841600	BRD115S (0,7)
732841700	BRD115S (0,8)
732841800	BRD115S (1,0)
732841900	BRD115S (1,4)
732842000	BRD115S (1,8)
732842100	BRD115S (2,3)

732842200	BRD115S (2,7)
732842300	BRD115S (3,1)
732842400	BRD115S (3,5)
732842500	BRD115S (4,0)
732842600	BRD115S (4,5)
732842700	BRD115S (5,0)
732842800	BRD115S (6,0)
732842900	BRD115S (7,0)
732911500	BRD115X (0,6)
732911600	BRD115X (0,7)
732911700	BRD115X (0,8)
732911800	BRD115X (1,0)
732911900	BRD115X (1,4)
732912000	BRD115X (1,8)
732912100	BRD115X (2,3)
732912200	BRD115X (2,7)
732912300	BRD115X (3,1)
732912400	BRD115X (3,5)
732912500	BRD115X (4,0)
732912600	BRD115X (4,5)
732912700	BRD115X (5,0)
732912800	BRD115X (6,0)
732912900	BRD115X (7,0)
732981500	BRD115A (0,6)
732981600	BRD115A (0,7)
732981700	BRD115A (0,8)
732981800	BRD115A (1,0)
732981900	BRD115A (1,4)
732982000	BRD115A (1,8)
732982100	BRD115A (2,3)
732982200	BRD115A (2,7)
732982300	BRD115A (3,1)
732982400	BRD115A (3,5)
732982500	BRD115A (4,0)
732982600	BRD115A (4,5)
732982700	BRD115A (5,0)
732982800	BRD115A (6,0)
732982900	BRD115A (7,0)
733051500	BRD115D (0,6)
733051600	BRD115D (0,7)

733051700	BRD115D (0,8)
733051800	BRD115D (1,0)
733051900	BRD115D (1,4)
733052000	BRD115D (1,8)
733052100	BRD115D (2,3)
733052200	BRD115D (2,7)
733052300	BRD115D (3,1)
733052400	BRD115D (3,5)
733052500	BRD115D (4,0)
733052600	BRD115D (4,5)
733052700	BRD115D (5,0)
733052800	BRD115D (6,0)
733052900	BRD115D (7,0)
733121500	BRD115L (0,6)
733121600	BRD115L (0,7)
733121700	BRD115L (0,8)
733121800	BRD115L (1,0)
733121900	BRD115L (1,4)
733122000	BRD115L (1,8)
733122100	BRD115L (2,3)
733122200	BRD115L (2,7)
733122300	BRD115L (3,1)
733122400	BRD115L (3,5)
733122500	BRD115L (4,0)
733122600	BRD115L (4,5)
733122700	BRD115L (5,0)
733122800	BRD115L (6,0)
733122900	BRD115L (7,0)
733191500	BRD115U (0,6)
733191600	BRD115U (0,7)
733191700	BRD115U (0,8)
733191800	BRD115U (1,0)
733191900	BRD115U (1,4)
733192000	BRD115U (1,8)
733192100	BRD115U (2,3)
733192200	BRD115U (2,7)
733192300	BRD115U (3,1)
733192400	BRD115U (3,5)
733192500	BRD115U (4,0)
733192600	BRD115U (4,5)

733192700	BRD115U (5,0)
733192800	BRD115U (6,0)
733192900	BRD115U (7,0)
738351050	BRD115Q (0,6)
738351060	BRD115Q (0,7)
738351070	BRD115Q (0,8)
738351080	BRD115Q (1,0)
738351090	BRD115Q (1,4)
738351100	BRD115Q (1,8)
738351110	BRD115Q (2,3)
738351120	BRD115Q (2,7)
738351130	BRD115Q (3,1)
738351140	BRD115Q (3,5)
738351150	BRD115Q (4,0)
738351160	BRD115Q (4,5)
738351170	BRD115Q (5,0)
738351180	BRD115Q (6,0)
738351190	BRD115Q (7,0)
738361050	BRD115E (0,6)
738361060	BRD115E (0,7)
738361070	BRD115E (0,8)
738361080	BRD115E (1,0)
738361090	BRD115E (1,4)
738361100	BRD115E (1,8)
738361110	BRD115E (2,3)
738361120	BRD115E (2,7)
738361130	BRD115E (3,1)
738361140	BRD115E (3,5)
738361150	BRD115E (4,0)
738361160	BRD115E (4,5)
738361170	BRD115E (5,0)
738361180	BRD115E (6,0)
738361190	BRD115E (7,0)
738371050	BRD115B (0,6)
738371060	BRD115B (0,7)
738371070	BRD115B (0,8)
738371080	BRD115B (1,0)
738371090	BRD115B (1,4)
738371100	BRD115B (1,8)
738371110	BRD115B (2,3)

738371120	BRD115B (2,7)
738371130	BRD115B (3,1)
738371140	BRD115B (3,5)
738371150	BRD115B (4,0)
738371160	BRD115B (4,5)
738371170	BRD115B (5,0)
738371180	BRD115B (6,0)
738371190	BRD115B (7,0)
738381050	BRD115K (0,6)
738381060	BRD115K (0,7)
738381070	BRD115K (0,8)
738381080	BRD115K (1,0)
738381090	BRD115K (1,4)
738381100	BRD115K (1,8)
738381110	BRD115K (2,3)
738381120	BRD115K (2,7)
738381130	BRD115K (3,1)
738381140	BRD115K (3,5)
738381150	BRD115K (4,0)
738381160	BRD115K (4,5)
738381170	BRD115K (5,0)
738381180	BRD115K (6,0)
738381190	BRD115K (7,0)
738391050	BRD115Y (0,6)
738391060	BRD115Y (0,7)
738391070	BRD115Y (0,8)
738391080	BRD115Y (1,0)
738391090	BRD115Y (1,4)
738391100	BRD115Y (1,8)
738391110	BRD115Y (2,3)
738391120	BRD115Y (2,7)
738391130	BRD115Y (3,1)
738391140	BRD115Y (3,5)
738391150	BRD115Y (4,0)
738391160	BRD115Y (4,5)
738391170	BRD115Y (5,0)
738391180	BRD115Y (6,0)
738391190	BRD115Y (7,0)
738870600	BRD115W (0,6)
738870610	BRD115W (0,7)

738870620	BRD115W (0,8)
738870630	BRD115W (1,0)
738870640	BRD115W (1,4)
738870650	BRD115W (1,8)
738870660	BRD115W (2,3)
738870670	BRD115W (2,7)
738870680	BRD115W (3,1)
738870690	BRD115W (3,5)
738870700	BRD115W (4,0)
738870710	BRD115W (4,5)
738870720	BRD115W (5,0)
738870730	BRD115W (6,0)
738870740	BRD115W (7,0)
730050000	BRD125R (0,6)
730050001	BRD125R (0,7)
730050002	BRD125R (0,8)
730050003	BRD125R (1,0)
730050004	BRD125R (1,4)
730050005	BRD125R (1,8)
730050006	BRD125R (2,3)
730050007	BRD125R (2,7)
730050008	BRD125R (3,1)
730050009	BRD125R (3,5)
730050010	BRD125R (4,0)
730050011	BRD125R (4,5)
730050012	BRD125R (5,0)
730050013	BRD125R (6,0)
730050014	BRD125R (7,0)
730100000	BRD125H (0,6)
730100001	BRD125H (0,7)
730100002	BRD125H (0,8)
730100003	BRD125H (1,0)
730100004	BRD125H (1,4)
730100005	BRD125H (1,8)
730100006	BRD125H (2,3)
730100007	BRD125H (2,7)
730100008	BRD125H (3,1)
730100009	BRD125H (3,5)
730100010	BRD125H (4,0)
730100011	BRD125H (4,5)

730100012	BRD125H (5,0)
730100013	BRD125H (6,0)
730100014	BRD125H (7,0)
730150000	BRD125J (0,6)
730150001	BRD125J (0,7)
730150002	BRD125J (0,8)
730150003	BRD125J (1,0)
730150004	BRD125J (1,4)
730150005	BRD125J (1,8)
730150006	BRD125J (2,3)
730150007	BRD125J (2,7)
730150008	BRD125J (3,1)
730150009	BRD125J (3,5)
730150010	BRD125J (4,0)
730150011	BRD125J (4,5)
730150012	BRD125J (5,0)
730150013	BRD125J (6,0)
730150014	BRD125J (7,0)
730200000	BRD125T (0,6)
730200001	BRD125T (0,7)
730200002	BRD125T (0,8)
730200003	BRD125T (1,0)
730200004	BRD125T (1,4)
730200005	BRD125T (1,8)
730200006	BRD125T (2,3)
730200007	BRD125T (2,7)
730200008	BRD125T (3,1)
730200009	BRD125T (3,5)
730200010	BRD125T (4,0)
730200011	BRD125T (4,5)
730200012	BRD125T (5,0)
730200013	BRD125T (6,0)
730200014	BRD125T (7,0)
730250000	BRD125O (0,6)
730250001	BRD125O (0,7)
730250002	BRD125O (0,8)
730250003	BRD125O (1,0)
730250004	BRD125O (1,4)
730250005	BRD125O (1,8)
730250006	BRD125O (2,3)

730250007	BRD125O (2,7)
730250008	BRD125O (3,1)
730250009	BRD125O (3,5)
730250010	BRD125O (4,0)
730250011	BRD125O (4,5)
730250012	BRD125O (5,0)
730250013	BRD125O (6,0)
730250014	BRD125O (7,0)
730300000	BRD125S (0,6)
730300001	BRD125S (0,7)
730300002	BRD125S (0,8)
730300003	BRD125S (1,0)
730300004	BRD125S (1,4)
730300005	BRD125S (1,8)
730300006	BRD125S (2,3)
730300007	BRD125S (2,7)
730300008	BRD125S (3,1)
730300009	BRD125S (3,5)
730300010	BRD125S (4,0)
730300011	BRD125S (4,5)
730300012	BRD125S (5,0)
730300013	BRD125S (6,0)
730300014	BRD125S (7,0)
732900000	BRD125X (0,6)
732900100	BRD125X (0,7)
732900200	BRD125X (0,8)
732900300	BRD125X (1,0)
732900400	BRD125X (1,4)
732900500	BRD125X (1,8)
732900600	BRD125X (2,3)
732900700	BRD125X (2,7)
732900800	BRD125X (3,1)
732900900	BRD125X (3,5)
732901000	BRD125X (4,0)
732901100	BRD125X (4,5)
732901200	BRD125X (5,0)
732901300	BRD125X (6,0)
732901400	BRD125X (7,0)
732970000	BRD125A (0,6)
732970100	BRD125A (0,7)

732970200	BRD125A (0,8)
732970300	BRD125A (1,0)
732970400	BRD125A (1,4)
732970500	BRD125A (1,8)
732970600	BRD125A (2,3)
732970700	BRD125A (2,7)
732970800	BRD125A (3,1)
732970900	BRD125A (3,5)
732971000	BRD125A (4,0)
732971100	BRD125A (4,5)
732971200	BRD125A (5,0)
732971300	BRD125A (6,0)
732971400	BRD125A (7,0)
733040000	BRD125D (0,6)
733040100	BRD125D (0,7)
733040200	BRD125D (0,8)
733040300	BRD125D (1,0)
733040400	BRD125D (1,4)
733040500	BRD125D (1,8)
733040600	BRD125D (2,3)
733040700	BRD125D (2,7)
733040800	BRD125D (3,1)
733040900	BRD125D (3,5)
733041000	BRD125D (4,0)
733041100	BRD125D (4,5)
733041200	BRD125D (5,0)
733041300	BRD125D (6,0)
733041400	BRD125D (7,0)
733110000	BRD125L (0,6)
733110100	BRD125L (0,7)
733110200	BRD125L (0,8)
733110300	BRD125L (1,0)
733110400	BRD125L (1,4)
733110500	BRD125L (1,8)
733110600	BRD125L (2,3)
733110700	BRD125L (2,7)
733110800	BRD125L (3,1)
733110900	BRD125L (3,5)
733111000	BRD125L (4,0)
733111100	BRD125L (4,5)

733111200	BRD125L (5,0)
733111300	BRD125L (6,0)
733111400	BRD125L (7,0)
733180000	BRD125U (0,6)
733180100	BRD125U (0,7)
733180200	BRD125U (0,8)
733180300	BRD125U (1,0)
733180400	BRD125U (1,4)
733180500	BRD125U (1,8)
733180600	BRD125U (2,3)
733180700	BRD125U (2,7)
733180800	BRD125U (3,1)
733180900	BRD125U (3,5)
733181000	BRD125U (4,0)
733181100	BRD125U (4,5)
733181200	BRD125U (5,0)
733181300	BRD125U (6,0)
733181400	BRD125U (7,0)
738350600	BRD125Q (0,6)
738350610	BRD125Q (0,7)
738350620	BRD125Q (0,8)
738350630	BRD125Q (1,0)
738350640	BRD125Q (1,4)
738350650	BRD125Q (1,8)
738350660	BRD125Q (2,3)
738350670	BRD125Q (2,7)
738350680	BRD125Q (3,1)
738350690	BRD125Q (3,5)
738350700	BRD125Q (4,0)
738350710	BRD125Q (4,5)
738350720	BRD125Q (5,0)
738350730	BRD125Q (6,0)
738350740	BRD125Q (7,0)
738360600	BRD125E (0,6)
738360610	BRD125E (0,7)
738360620	BRD125E (0,8)
738360630	BRD125E (1,0)
738360640	BRD125E (1,4)
738360650	BRD125E (1,8)
738360660	BRD125E (2,3)

738360670	BRD125E (2,7)
738360680	BRD125E (3,1)
738360690	BRD125E (3,5)
738360700	BRD125E (4,0)
738360710	BRD125E (4,5)
738360720	BRD125E (5,0)
738360730	BRD125E (6,0)
738360740	BRD125E (7,0)
738370600	BRD125B (0,6)
738370610	BRD125B (0,7)
738370620	BRD125B (0,8)
738370630	BRD125B (1,0)
738370640	BRD125B (1,4)
738370650	BRD125B (1,8)
738370660	BRD125B (2,3)
738370670	BRD125B (2,7)
738370680	BRD125B (3,1)
738370690	BRD125B (3,5)
738370700	BRD125B (4,0)
738370710	BRD125B (4,5)
738370720	BRD125B (5,0)
738370730	BRD125B (6,0)
738370740	BRD125B (7,0)
738380600	BRD125K (0,6)
738380610	BRD125K (0,7)
738380620	BRD125K (0,8)
738380630	BRD125K (1,0)
738380640	BRD125K (1,4)
738380650	BRD125K (1,8)
738380660	BRD125K (2,3)
738380670	BRD125K (2,7)
738380680	BRD125K (3,1)
738380690	BRD125K (3,5)
738380700	BRD125K (4,0)
738380710	BRD125K (4,5)
738380720	BRD125K (5,0)
738380730	BRD125K (6,0)
738380740	BRD125K (7,0)
738390600	BRD125Y (0,6)
738390610	BRD125Y (0,7)

738390620	BRD125Y (0,8)
738390630	BRD125Y (1,0)
738390640	BRD125Y (1,4)
738390650	BRD125Y (1,8)
738390660	BRD125Y (2,3)
738390670	BRD125Y (2,7)
738390680	BRD125Y (3,1)
738390690	BRD125Y (3,5)
738390700	BRD125Y (4,0)
738390710	BRD125Y (4,5)
738390720	BRD125Y (5,0)
738390730	BRD125Y (6,0)
738390740	BRD125Y (7,0)
738870750	BRD125W (0,6)
738870760	BRD125W (0,7)
738870770	BRD125W (0,8)
738870780	BRD125W (1,0)
738870790	BRD125W (1,4)
738870800	BRD125W (1,8)
738870810	BRD125W (2,3)
738870820	BRD125W (2,7)
738870830	BRD125W (3,1)
738870840	BRD125W (3,5)
738870850	BRD125W (4,0)
738870860	BRD125W (4,5)
738870870	BRD125W (5,0)
738870880	BRD125W (6,0)
738870890	BRD125W (7,0)
738351350	BRD145Q (0,6)
738351360	BRD145Q (0,7)
738351370	BRD145Q (0,8)
738351380	BRD145Q (1,0)
738351390	BRD145Q (1,4)
738351400	BRD145Q (1,8)
738351410	BRD145Q (2,3)
738351420	BRD145Q (2,7)
738351430	BRD145Q (3,1)
738351440	BRD145Q (3,5)
738351450	BRD145Q (4,0)
738351460	BRD145Q (4,5)

738351470	BRD145Q (5,0)
738351480	BRD145Q (6,0)
738351490	BRD145Q (7,0)
732740000	BRD150R (0,6)
732740100	BRD150R (0,7)
732740200	BRD150R (0,8)
732740300	BRD150R (1,0)
732740400	BRD150R (1,4)
732740500	BRD150R (1,8)
732740600	BRD150R (2,3)
732740700	BRD150R (2,7)
732740800	BRD150R (3,1)
732740900	BRD150R (3,5)
732741000	BRD150R (4,0)
732741100	BRD150R (4,5)
732741200	BRD150R (5,0)
732741300	BRD150R (6,0)
732741400	BRD150R (7,0)
732760000	BRD150H (0,6)
732760100	BRD150H (0,7)
732760200	BRD150H (0,8)
732760300	BRD150H (1,0)
732760400	BRD150H (1,4)
732760500	BRD150H (1,8)
732760600	BRD150H (2,3)
732760700	BRD150H (2,7)
732760800	BRD150H (3,1)
732760900	BRD150H (3,5)
732761000	BRD150H (4,0)
732761100	BRD150H (4,5)
732761200	BRD150H (5,0)
732761300	BRD150H (6,0)
732761400	BRD150H (7,0)
732780000	BRD150J (0,6)
732780100	BRD150J (0,7)
732780200	BRD150J (0,8)
732780300	BRD150J (1,0)
732780400	BRD150J (1,4)
732780500	BRD150J (1,8)
732780600	BRD150J (2,3)

732780700	BRD150J (2,7)
732780800	BRD150J (3,1)
732780900	BRD150J (3,5)
732781000	BRD150J (4,0)
732781100	BRD150J (4,5)
732781200	BRD150J (5,0)
732781300	BRD150J (6,0)
732781400	BRD150J (7,0)
732800000	BRD150T (0,6)
732800100	BRD150T (0,7)
732800200	BRD150T (0,8)
732800300	BRD150T (1,0)
732800400	BRD150T (1,4)
732800500	BRD150T (1,8)
732800600	BRD150T (2,3)
732800700	BRD150T (2,7)
732800800	BRD150T (3,1)
732800900	BRD150T (3,5)
732801000	BRD150T (4,0)
732801100	BRD150T (4,5)
732801200	BRD150T (5,0)
732801300	BRD150T (6,0)
732801400	BRD150T (7,0)
732820000	BRD150O (0,6)
732820100	BRD150O (0,7)
732820200	BRD150O (0,8)
732820300	BRD150O (1,0)
732820400	BRD150O (1,4)
732820500	BRD150O (1,8)
732820600	BRD150O (2,3)
732820700	BRD150O (2,7)
732820800	BRD150O (3,1)
732820900	BRD150O (3,5)
732821000	BRD150O (4,0)
732821100	BRD150O (4,5)
732821200	BRD150O (5,0)
732821300	BRD150O (6,0)
732821400	BRD150O (7,0)
732840000	BRD150S (0,6)
732840100	BRD150S (0,7)

732840200	BRD150S (0,8)
732840300	BRD150S (1,0)
732840400	BRD150S (1,4)
732840500	BRD150S (1,8)
732840600	BRD150S (2,3)
732840700	BRD150S (2,7)
732840800	BRD150S (3,1)
732840900	BRD150S (3,5)
732841000	BRD150S (4,0)
732841100	BRD150S (4,5)
732841200	BRD150S (5,0)
732841300	BRD150S (6,0)
732841400	BRD150S (7,0)
732910000	BRD150X (0,6)
732910100	BRD150X (0,7)
732910200	BRD150X (0,8)
732910300	BRD150X (1,0)
732910400	BRD150X (1,4)
732910500	BRD150X (1,8)
732910600	BRD150X (2,3)
732910700	BRD150X (2,7)
732910800	BRD150X (3,1)
732910900	BRD150X (3,5)
732911000	BRD150X (4,0)
732911100	BRD150X (4,5)
732911200	BRD150X (5,0)
732911300	BRD150X (6,0)
732911400	BRD150X (7,0)
732980000	BRD150A (0,6)
732980100	BRD150A (0,7)
732980200	BRD150A (0,8)
732980300	BRD150A (1,0)
732980400	BRD150A (1,4)
732980500	BRD150A (1,8)
732980600	BRD150A (2,3)
732980700	BRD150A (2,7)
732980800	BRD150A (3,1)
732980900	BRD150A (3,5)
732981000	BRD150A (4,0)
732981100	BRD150A (4,5)

732981200	BRD150A (5,0)
732981300	BRD150A (6,0)
732981400	BRD150A (7,0)
733050000	BRD150D (0,6)
733050100	BRD150D (0,7)
733050200	BRD150D (0,8)
733050300	BRD150D (1,0)
733050400	BRD150D (1,4)
733050500	BRD150D (1,8)
733050600	BRD150D (2,3)
733050700	BRD150D (2,7)
733050800	BRD150D (3,1)
733050900	BRD150D (3,5)
733051000	BRD150D (4,0)
733051100	BRD150D (4,5)
733051200	BRD150D (5,0)
733051300	BRD150D (6,0)
733051400	BRD150D (7,0)
733120000	BRD150L (0,6)
733120100	BRD150L (0,7)
733120200	BRD150L (0,8)
733120300	BRD150L (1,0)
733120400	BRD150L (1,4)
733120500	BRD150L (1,8)
733120600	BRD150L (2,3)
733120700	BRD150L (2,7)
733120800	BRD150L (3,1)
733120900	BRD150L (3,5)
733121000	BRD150L (4,0)
733121100	BRD150L (4,5)
733121200	BRD150L (5,0)
733121300	BRD150L (6,0)
733121400	BRD150L (7,0)
733190000	BRD150U (0,6)
733190100	BRD150U (0,7)
733190200	BRD150U (0,8)
733190300	BRD150U (1,0)
733190400	BRD150U (1,4)
733190500	BRD150U (1,8)
733190600	BRD150U (2,3)

733190700	BRD150U (2,7)
733190800	BRD150U (3,1)
733190900	BRD150U (3,5)
733191000	BRD150U (4,0)
733191100	BRD150U (4,5)
733191200	BRD150U (5,0)
733191300	BRD150U (6,0)
733191400	BRD150U (7,0)
738350750	BRD150Q (0,6)
738350760	BRD150Q (0,7)
738350770	BRD150Q (0,8)
738350780	BRD150Q (1,0)
738350790	BRD150Q (1,4)
738350800	BRD150Q (1,8)
738350810	BRD150Q (2,3)
738350820	BRD150Q (2,7)
738350830	BRD150Q (3,1)
738350840	BRD150Q (3,5)
738350850	BRD150Q (4,0)
738350860	BRD150Q (4,5)
738350870	BRD150Q (5,0)
738350880	BRD150Q (6,0)
738350890	BRD150Q (7,0)
738360750	BRD150E (0,6)
738360760	BRD150E (0,7)
738360770	BRD150E (0,8)
738360780	BRD150E (1,0)
738360790	BRD150E (1,4)
738360800	BRD150E (1,8)
738360810	BRD150E (2,3)
738360820	BRD150E (2,7)
738360830	BRD150E (3,1)
738360840	BRD150E (3,5)
738360850	BRD150E (4,0)
738360860	BRD150E (4,5)
738360870	BRD150E (5,0)
738360880	BRD150E (6,0)
738360890	BRD150E (7,0)
738370750	BRD150B (0,6)
738370760	BRD150B (0,7)

738370770	BRD150B (0,8)
738370780	BRD150B (1,0)
738370790	BRD150B (1,4)
738370800	BRD150B (1,8)
738370810	BRD150B (2,3)
738370820	BRD150B (2,7)
738370830	BRD150B (3,1)
738370840	BRD150B (3,5)
738370850	BRD150B (4,0)
738370860	BRD150B (4,5)
738370870	BRD150B (5,0)
738370880	BRD150B (6,0)
738370890	BRD150B (7,0)
738380750	BRD150K (0,6)
738380760	BRD150K (0,7)
738380770	BRD150K (0,8)
738380780	BRD150K (1,0)
738380790	BRD150K (1,4)
738380800	BRD150K (1,8)
738380810	BRD150K (2,3)
738380820	BRD150K (2,7)
738380830	BRD150K (3,1)
738380840	BRD150K (3,5)
738380850	BRD150K (4,0)
738380860	BRD150K (4,5)
738380870	BRD150K (5,0)
738380880	BRD150K (6,0)
738380890	BRD150K (7,0)
738390750	BRD150Y (0,6)
738390760	BRD150Y (0,7)
738390770	BRD150Y (0,8)
738390780	BRD150Y (1,0)
738390790	BRD150Y (1,4)
738390800	BRD150Y (1,8)
738390810	BRD150Y (2,3)
738390820	BRD150Y (2,7)
738390830	BRD150Y (3,1)
738390840	BRD150Y (3,5)
738390850	BRD150Y (4,0)
738390860	BRD150Y (4,5)

738390870	BRD150Y (5,0)
738390880	BRD150Y (6,0)
738390890	BRD150Y (7,0)
738870900	BRD150W (0,6)
738870910	BRD150W (0,7)
738870920	BRD150W (0,8)
738870930	BRD150W (1,0)
738870940	BRD150W (1,4)
738870950	BRD150W (1,8)
738870960	BRD150W (2,3)
738870970	BRD150W (2,7)
738870980	BRD150W (3,1)
738870990	BRD150W (3,5)
738871000	BRD150W (4,0)
738871010	BRD150W (4,5)
738871020	BRD150W (5,0)
738871030	BRD150W (6,0)
738871040	BRD150W (7,0)
732750000	BRD180R (0,6)
732750100	BRD180R (0,7)
732750200	BRD180R (0,8)
732750300	BRD180R (1,0)
732750400	BRD180R (1,4)
732750500	BRD180R (1,8)
732750600	BRD180R (2,3)
732750700	BRD180R (2,7)
732750800	BRD180R (3,1)
732750900	BRD180R (3,5)
732751000	BRD180R (4,0)
732751100	BRD180R (4,5)
732751200	BRD180R (5,0)
732751300	BRD180R (6,0)
732751400	BRD180R (7,0)
732770000	BRD180H (0,6)
732770100	BRD180H (0,7)
732770200	BRD180H (0,8)
732770300	BRD180H (1,0)
732770400	BRD180H (1,4)
732770500	BRD180H (1,8)
732770600	BRD180H (2,3)

732770700	BRD180H (2,7)
732770800	BRD180H (3,1)
732770900	BRD180H (3,5)
732771000	BRD180H (4,0)
732771100	BRD180H (4,5)
732771200	BRD180H (5,0)
732771300	BRD180H (6,0)
732771400	BRD180H (7,0)
732790000	BRD180J (0,6)
732790100	BRD180J (0,7)
732790200	BRD180J (0,8)
732790300	BRD180J (1,0)
732790400	BRD180J (1,4)
732790500	BRD180J (1,8)
732790600	BRD180J (2,3)
732790700	BRD180J (2,7)
732790800	BRD180J (3,1)
732790900	BRD180J (3,5)
732791000	BRD180J (4,0)
732791100	BRD180J (4,5)
732791200	BRD180J (5,0)
732791300	BRD180J (6,0)
732791400	BRD180J (7,0)
732810000	BRD180T (0,6)
732810100	BRD180T (0,7)
732810200	BRD180T (0,8)
732810300	BRD180T (1,0)
732810400	BRD180T (1,4)
732810500	BRD180T (1,8)
732810600	BRD180T (2,3)
732810700	BRD180T (2,7)
732810800	BRD180T (3,1)
732810900	BRD180T (3,5)
732811000	BRD180T (4,0)
732811100	BRD180T (4,5)
732811200	BRD180T (5,0)
732811300	BRD180T (6,0)
732811400	BRD180T (7,0)
732830000	BRD180O (0,6)
732830100	BRD180O (0,7)

732830200	BRD180O (0,8)
732830300	BRD180O (1,0)
732830400	BRD180O (1,4)
732830500	BRD180O (1,8)
732830600	BRD180O (2,3)
732830700	BRD180O (2,7)
732830800	BRD180O (3,1)
732830900	BRD180O (3,5)
732831000	BRD180O (4,0)
732831100	BRD180O (4,5)
732831200	BRD180O (5,0)
732831300	BRD180O (6,0)
732831400	BRD180O (7,0)
732850000	BRD180S (0,6)
732850100	BRD180S (0,7)
732850200	BRD180S (0,8)
732850300	BRD180S (1,0)
732850400	BRD180S (1,4)
732850500	BRD180S (1,8)
732850600	BRD180S (2,3)
732850700	BRD180S (2,7)
732850800	BRD180S (3,1)
732850900	BRD180S (3,5)
732851000	BRD180S (4,0)
732851100	BRD180S (4,5)
732851200	BRD180S (5,0)
732851300	BRD180S (6,0)
732851400	BRD180S (7,0)
732920000	BRD180X (0,6)
732920100	BRD180X (0,7)
732920200	BRD180X (0,8)
732920300	BRD180X (1,0)
732920400	BRD180X (1,4)
732920500	BRD180X (1,8)
732920600	BRD180X (2,3)
732920700	BRD180X (2,7)
732920800	BRD180X (3,1)
732920900	BRD180X (3,5)
732921000	BRD180X (4,0)
732921100	BRD180X (4,5)

732921200	BRD180X (5,0)
732921300	BRD180X (6,0)
732921400	BRD180X (7,0)
732990000	BRD180A (0,6)
732990100	BRD180A (0,7)
732990200	BRD180A (0,8)
732990300	BRD180A (1,0)
732990400	BRD180A (1,4)
732990500	BRD180A (1,8)
732990600	BRD180A (2,3)
732990700	BRD180A (2,7)
732990800	BRD180A (3,1)
732990900	BRD180A (3,5)
732991000	BRD180A (4,0)
732991100	BRD180A (4,5)
732991200	BRD180A (5,0)
732991300	BRD180A (6,0)
732991400	BRD180A (7,0)
733060000	BRD180D (0,6)
733060100	BRD180D (0,7)
733060200	BRD180D (0,8)
733060300	BRD180D (1,0)
733060400	BRD180D (1,4)
733060500	BRD180D (1,8)
733060600	BRD180D (2,3)
733060700	BRD180D (2,7)
733060800	BRD180D (3,1)
733060900	BRD180D (3,5)
733061000	BRD180D (4,0)
733061100	BRD180D (4,5)
733061200	BRD180D (5,0)
733061300	BRD180D (6,0)
733061400	BRD180D (7,0)
733130000	BRD180L (0,6)
733130100	BRD180L (0,7)
733130200	BRD180L (0,8)
733130300	BRD180L (1,0)
733130400	BRD180L (2,3)
733130500	BRD180L (1,4)
733130600	BRD180L (1,8)

733130700	BRD180L (2,7)
733130800	BRD180L (3,1)
733130900	BRD180L (3,5)
733131000	BRD180L (4,0)
733131100	BRD180L (4,5)
733131200	BRD180L (5,0)
733131300	BRD180L (6,0)
733131400	BRD180L (7,0)
733200000	BRD180U (0,6)
733200100	BRD180U (0,7)
733200200	BRD180U (0,8)
733200300	BRD180U (1,0)
733200400	BRD180U (1,4)
733200500	BRD180U (1,8)
733200600	BRD180U (2,3)
733200700	BRD180U (2,7)
733200800	BRD180U (3,1)
733200900	BRD180U (3,5)
733201000	BRD180U (4,0)
733201100	BRD180U (4,5)
733201200	BRD180U (5,0)
733201300	BRD180U (6,0)
733201400	BRD180U (7,0)
738350900	BRD180Q (0,6)
738350910	BRD180Q (0,7)
738350920	BRD180Q (0,8)
738350930	BRD180Q (1,0)
738350940	BRD180Q (1,4)
738350950	BRD180Q (1,8)
738350960	BRD180Q (2,3)
738350970	BRD180Q (2,7)
738350980	BRD180Q (3,1)
738350990	BRD180Q (3,5)
738351000	BRD180Q (4,0)
738351010	BRD180Q (4,5)
738351020	BRD180Q (5,0)
738351030	BRD180Q (6,0)
738351040	BRD180Q (7,0)
738360900	BRD180E (0,6)
738360910	BRD180E (0,7)

738360920	BRD180E (0,8)
738360930	BRD180E (1,0)
738360940	BRD180E (1,4)
738360950	BRD180E (1,8)
738360960	BRD180E (2,3)
738360970	BRD180E (2,7)
738360980	BRD180E (3,1)
738360990	BRD180E (3,5)
738361000	BRD180E (4,0)
738361010	BRD180E (4,5)
738361020	BRD180E (5,0)
738361030	BRD180E (6,0)
738361040	BRD180E (7,0)
738370900	BRD180B (0,6)
738370910	BRD180B (0,7)
738370920	BRD180B (0,8)
738370930	BRD180B (1,0)
738370940	BRD180B (1,4)
738370950	BRD180B (1,8)
738370960	BRD180B (2,3)
738370970	BRD180B (2,7)
738370980	BRD180B (3,1)
738370990	BRD180B (3,5)
738371000	BRD180B (4,0)
738371010	BRD180B (4,5)
738371020	BRD180B (5,0)
738371030	BRD180B (6,0)
738371040	BRD180B (7,0)
738380900	BRD180K (0,6)
738380910	BRD180K (0,7)
738380920	BRD180K (0,8)
738380930	BRD180K (1,0)
738380940	BRD180K (1,4)
738380950	BRD180K (1,8)
738380960	BRD180K (2,3)
738380970	BRD180K (2,7)
738380980	BRD180K (3,1)
738380990	BRD180K (3,5)
738381000	BRD180K (4,0)
738381010	BRD180K (4,5)

738381020	BRD180K(5,0)
738381030	BRD180K (6,0)
738381040	BRD180K (7,0)
738390900	BRD180Y (0,6)
738390910	BRD180Y (0,7)
738390920	BRD180Y (0,8)
738390930	BRD180Y (1,0)
738390940	BRD180Y (1,4)
738390950	BRD180Y (1,8)
738390960	BRD180Y (2,3)
738390970	BRD180Y (2,7)
738390980	BRD180Y (3,1)
738390990	BRD180Y (3,5)
738391000	BRD180Y (4,0)
738391010	BRD180Y (4,5)
738391020	BRD180Y(5,0)
738391030	BRD180Y (6,0)
738391040	BRD180Y (7,0)
738871050	BRD180W (0,6)
738871060	BRD180W (0,7)
738871070	BRD180W (0,8)
738871080	BRD180W (1,0)
738871090	BRD180W (1,4)
738871100	BRD180W (1,8)
738871110	BRD180W (2,3)
738871120	BRD180W (2,7)
738871130	BRD180W (3,1)
738871140	BRD180W (3,5)
738871150	BRD180W (4,0)
738871160	BRD180W (4,5)
738871170	BRD180W(5,0)
738871180	BRD180W (6,0)
738871190	BRD180W (7,0)

▪ BCR

Código	Modelo
730310000	BCR44,5R (1,0)
736870000	BCR44,5R (1,4)
736870100	BCR44,5R (1,8)
736870200	BCR44,5R (2,3)

736870300	BCR44,5R (2,7)
736870400	BCR44,5R (3,1)
730310005	BCR44,5R (3,5)
730310006	BCR44,5R (4,0)
730310007	BCR44,5R (4,5)
730310008	BCR44,5R (5,0)
730310010	BCR44,5R (6,0)
730310011	BCR44,5R (7,0)
730350000	BCR44,5H (1,0)
736910000	BCR44,5H (1,4)
736910100	BCR44,5H (1,8)
736910200	BCR44,5H (2,3)
736910300	BCR44,5H (2,7)
736910400	BCR44,5H (3,1)
730350005	BCR44,5H (3,5)
730350006	BCR44,5H (4,0)
730350007	BCR44,5H (4,5)
730350008	BCR44,5H (5,0)
730350010	BCR44,5H (6,0)
730350011	BCR44,5H (7,0)
730390000	BCR44,5J (1,0)
736950000	BCR44,5J (1,4)
736950100	BCR44,5J (1,8)
736950200	BCR44,5J (2,3)
736950300	BCR44,5J (2,7)
736950400	BCR44,5J (3,1)
730390005	BCR44,5J (3,5)
730390006	BCR44,5J (4,0)
730390007	BCR44,5J (4,5)
730390008	BCR44,5J (5,0)
730390010	BCR44,5J (6,0)
730390011	BCR44,5J (7,0)
730430000	BCR44,5T (1,0)
736990000	BCR44,5T (1,4)
736990100	BCR44,5T (1,8)
736990200	BCR44,5T (2,3)
736990300	BCR44,5T (2,7)
736990400	BCR44,5T (3,1)
730430005	BCR44,5T (3,5)
730430006	BCR44,5T (4,0)

730430007	BCR44,5T (4,5)
730430008	BCR44,5T (5,0)
730430010	BCR44,5T (6,0)
730430011	BCR44,5T (7,0)
730470000	BCR44,5O (1,0)
737040000	BCR44,5O (1,4)
737040100	BCR44,5O (1,8)
737040200	BCR44,5O (2,3)
737040300	BCR44,5O (2,7)
737040400	BCR44,5O (3,1)
730470005	BCR44,5O (3,5)
730470006	BCR44,5O (4,0)
730470007	BCR44,5O (4,5)
730470008	BCR44,5O (5,0)
730470010	BCR44,5O (6,0)
730470011	BCR44,5O (7,0)
730510000	BCR44,5S (1,0)
737080000	BCR44,5S (1,4)
737080100	BCR44,5S (1,8)
737080200	BCR44,5S (2,3)
737080300	BCR44,5S (2,7)
737080400	BCR44,5S (3,1)
730510005	BCR44,5S (3,5)
730510006	BCR44,5S (4,0)
730510007	BCR44,5S (4,5)
730510008	BCR44,5S (5,0)
730510010	BCR44,5S (6,0)
730510011	BCR44,5S (7,0)
733330000	BCR44,5X (1,0)
733330100	BCR44,5X (1,4)
733330200	BCR44,5X (1,8)
733330300	BCR44,5X (2,3)
733330400	BCR44,5X (2,7)
733330500	BCR44,5X (3,1)
733330600	BCR44,5X (3,5)
733330700	BCR44,5X (4,0)
733330800	BCR44,5X (4,5)
733330900	BCR44,5X (5,0)
733331000	BCR44,5X (6,0)
733331100	BCR44,5X (7,0)

733390000	BCR44,5A (1,0)
733390100	BCR44,5A (1,4)
733390200	BCR44,5A (1,8)
733390300	BCR44,5A (2,3)
733390400	BCR44,5A (2,7)
733390500	BCR44,5A (3,1)
733390600	BCR44,5A (3,5)
733390700	BCR44,5A (4,0)
733390800	BCR44,5A (4,5)
733390900	BCR44,5A (5,0)
733391000	BCR44,5A (6,0)
733391100	BCR44,5A (7,0)
733450000	BCR44,5D (1,0)
733450100	BCR44,5D (1,4)
733450200	BCR44,5D (1,8)
733450300	BCR44,5D (2,3)
733450400	BCR44,5D (2,7)
733450500	BCR44,5D (3,1)
733450600	BCR44,5D (3,5)
733450700	BCR44,5D (4,0)
733450800	BCR44,5D (4,5)
733450900	BCR44,5D (5,0)
733451000	BCR44,5D (6,0)
733451100	BCR44,5D (7,0)
733510000	BCR44,5L (1,0)
733510100	BCR44,5L (1,4)
733510200	BCR44,5L (1,8)
733510300	BCR44,5L (2,3)
733510400	BCR44,5L (2,7)
733510500	BCR44,5L (3,1)
733510600	BCR44,5L (3,5)
733510700	BCR44,5L (4,0)
733510800	BCR44,5L (4,5)
733510900	BCR44,5L (5,0)
733511000	BCR44,5L (6,0)
733511100	BCR44,5L (7,0)
733570000	BCR44,5U (1,0)
733570100	BCR44,5U (1,4)
733570200	BCR44,5U (1,8)
733570300	BCR44,5U (2,3)

733570400	BCR44,5U (2,7)
733570500	BCR44,5U (3,1)
733570600	BCR44,5U (3,5)
733570700	BCR44,5U (4,0)
733570800	BCR44,5U (4,5)
733570900	BCR44,5U (5,0)
733571000	BCR44,5U (6,0)
733571100	BCR44,5U (7,0)
738400000	BCR44,5Q (1,0)
738400010	BCR44,5Q (1,4)
738400020	BCR44,5Q (1,8)
738400030	BCR44,5Q (2,3)
738400040	BCR44,5Q (2,7)
738400050	BCR44,5Q (3,1)
738400060	BCR44,5Q (3,5)
738400070	BCR44,5Q (4,0)
738400080	BCR44,5Q (4,5)
738400090	BCR44,5Q (5,0)
738400100	BCR44,5Q (6,0)
738400110	BCR44,5Q (7,0)
738410000	BCR44,5E (1,0)
738410010	BCR44,5E (1,4)
738410020	BCR44,5E (1,8)
738410030	BCR44,5E (2,3)
738410040	BCR44,5E (2,7)
738410050	BCR44,5E (3,1)
738410060	BCR44,5E (3,5)
738410070	BCR44,5E (4,0)
738410080	BCR44,5E (4,5)
738410090	BCR44,5E (5,0)
738410100	BCR44,5E (6,0)
738410110	BCR44,5E (7,0)
738420000	BCR44,5B (1,0)
738420010	BCR44,5B (1,4)
738420020	BCR44,5B (1,8)
738420030	BCR44,5B (2,3)
738420040	BCR44,5B (2,7)
738420050	BCR44,5B (3,1)
738420060	BCR44,5B (3,5)
738420070	BCR44,5B (4,0)

738420080	BCR44,5B (4,5)
738420090	BCR44,5B (5,0)
738420100	BCR44,5B (6,0)
738420110	BCR44,5B (7,0)
738430000	BCR44,5K (1,0)
738430010	BCR44,5K (1,4)
738430020	BCR44,5K (1,8)
738430030	BCR44,5K (2,3)
738430040	BCR44,5K (2,7)
738430050	BCR44,5K (3,1)
738430060	BCR44,5K (3,5)
738430070	BCR44,5K (4,0)
738430080	BCR44,5K (4,5)
738430090	BCR44,5K (5,0)
738430100	BCR44,5K (6,0)
738430110	BCR44,5K (7,0)
738440000	BCR44,5Y (1,0)
738440010	BCR44,5Y (1,4)
738440020	BCR44,5Y (1,8)
738440030	BCR44,5Y (2,3)
738440040	BCR44,5Y (2,7)
738440050	BCR44,5Y (3,1)
738440060	BCR44,5Y (3,5)
738440070	BCR44,5Y (4,0)
738440080	BCR44,5Y (4,5)
738440090	BCR44,5Y (5,0)
738440100	BCR44,5Y (6,0)
738440110	BCR44,5Y (7,0)
738880000	BCR44,5W (1,0)
738880010	BCR44,5W (1,4)
738880020	BCR44,5W (1,8)
738880030	BCR44,5W (2,3)
738880040	BCR44,5W (2,7)
738880050	BCR44,5W (3,1)
738880060	BCR44,5W (3,5)
738880070	BCR44,5W (4,0)
738880080	BCR44,5W (4,5)
738880090	BCR44,5W (5,0)
738880100	BCR44,5W (6,0)
738880110	BCR44,5W (7,0)

730320000	BCR55R (1,0)
736880000	BCR55R (1,4)
736880100	BCR55R (1,8)
736880200	BCR55R (2,3)
736880300	BCR55R (2,7)
736880400	BCR55R (3,1)
730320005	BCR55R (3,5)
730320006	BCR55R (4,0)
730320007	BCR55R (4,5)
730320008	BCR55R (5,0)
730320010	BCR55R (6,0)
730320011	BCR55R (7,0)
730360000	BCR55H (1,0)
736920000	BCR55H (1,4)
736920100	BCR55H (1,8)
736920200	BCR55H (2,3)
736920300	BCR55H (2,7)
736920400	BCR55H (3,1)
730360005	BCR55H (3,5)
730360006	BCR55H (4,0)
730360007	BCR55H (4,5)
730360008	BCR55H (5,0)
730360010	BCR55H (6,0)
730360011	BCR55H (7,0)
730400000	BCR55J (1,0)
736960000	BCR55J (1,4)
736960100	BCR55J (1,8)
736960200	BCR55J (2,3)
736960300	BCR55J (2,7)
736960400	BCR55J (3,1)
730400005	BCR55J (3,5)
730400006	BCR55J (4,0)
730400007	BCR55J (4,5)
730400008	BCR55J (5,0)
730400010	BCR55J (6,0)
730400011	BCR55J (7,0)
730440000	BCR55T (1,0)
737010000	BCR55T (1,4)
737010100	BCR55T (1,8)
737010200	BCR55T (2,3)

737010300	BCR55T (2,7)
737010400	BCR55T (3,1)
730440005	BCR55T (3,5)
730440006	BCR55T (4,0)
730440007	BCR55T (4,5)
730440008	BCR55T (5,0)
730440010	BCR55T (6,0)
730440011	BCR55T (7,0)
730480000	BCR55O (1,0)
737050000	BCR55O (1,4)
737050100	BCR55O (1,8)
737050200	BCR55O (2,3)
737050300	BCR55O (2,7)
737050400	BCR55O (3,1)
730480005	BCR55O (3,5)
730480006	BCR55O (4,0)
730480007	BCR55O (4,5)
730480008	BCR55O (5,0)
730480010	BCR55O (6,0)
730480011	BCR55O (7,0)
730520000	BCR55S (1,0)
737090000	BCR55S (1,4)
737090100	BCR55S (1,8)
737090200	BCR55S (2,3)
737090300	BCR55S (2,7)
737090400	BCR55S (3,1)
730520005	BCR55S (3,5)
730520006	BCR55S (4,0)
730520007	BCR55S (4,5)
730520008	BCR55S (5,0)
730520010	BCR55S (6,0)
730520011	BCR55S (7,0)
733340000	BCR55X (1,0)
733340100	BCR55X (1,4)
733340200	BCR55X (1,8)
733340300	BCR55X (2,3)
733340400	BCR55X (2,7)
733340500	BCR55X (3,1)
733340600	BCR55X (3,5)
733340700	BCR55X (4,0)

733340800	BCR55X (4,5)
733340900	BCR55X (5,0)
733341000	BCR55X (6,0)
733341100	BCR55X (7,0)
733400000	BCR55A (1,0)
733400100	BCR55A (1,4)
733400200	BCR55A (1,8)
733400300	BCR55A (2,3)
733400400	BCR55A (2,7)
733400500	BCR55A (3,1)
733400600	BCR55A (3,5)
733400700	BCR55A (4,0)
733400800	BCR55A (4,5)
733400900	BCR55A (5,0)
733401000	BCR55A (6,0)
733401100	BCR55A (7,0)
733460000	BCR55D (1,0)
733460100	BCR55D (1,4)
733460200	BCR55D (1,8)
733460300	BCR55D (2,3)
733460400	BCR55D (2,7)
733460500	BCR55D (3,1)
733460600	BCR55D (3,5)
733460700	BCR55D (4,0)
733460800	BCR55D (4,5)
733460900	BCR55D (5,0)
733461000	BCR55D (6,0)
733461100	BCR55D (7,0)
733520000	BCR55L (1,0)
733520100	BCR55L (1,4)
733520200	BCR55L (1,8)
733520300	BCR55L (2,3)
733520400	BCR55L (2,7)
733520500	BCR55L (3,1)
733520600	BCR55L (3,5)
733520700	BCR55L (4,0)
733520800	BCR55L (4,5)
733520900	BCR55L (5,0)
733521000	BCR55L (6,0)
733521100	BCR55L (7,0)

733580000	BCR55U (1,0)
733580100	BCR55U (1,4)
733580200	BCR55U (1,8)
733580300	BCR55U (2,3)
733580400	BCR55U (2,7)
733580500	BCR55U (3,1)
733580600	BCR55U (3,5)
733580700	BCR55U (4,0)
733580800	BCR55U (4,5)
733580900	BCR55U (5,0)
733581000	BCR55U (6,0)
733581100	BCR55U (7,0)
738400120	BCR55Q (1,0)
738400130	BCR55Q (1,4)
738400140	BCR55Q (1,8)
738400150	BCR55Q (2,3)
738400160	BCR55Q (2,7)
738400170	BCR55Q (3,1)
738400180	BCR55Q (3,5)
738400190	BCR55Q (4,0)
738400200	BCR55Q (4,5)
738400210	BCR55Q (5,0)
738400220	BCR55Q (6,0)
738400230	BCR55Q (7,0)
738410120	BCR55E (1,0)
738410130	BCR55E (1,4)
738410140	BCR55E (1,8)
738410150	BCR55E (2,3)
738410160	BCR55E (2,7)
738410170	BCR55E (3,1)
738410180	BCR55E (3,5)
738410190	BCR55E (4,0)
738410200	BCR55E (4,5)
738410210	BCR55E (5,0)
738410220	BCR55E (6,0)
738410230	BCR55E (7,0)
738420120	BCR55B (1,0)
738420130	BCR55B (1,4)
738420140	BCR55B (1,8)
738420150	BCR55B (2,3)

738420160	BCR55B (2,7)
738420170	BCR55B (3,1)
738420180	BCR55B (3,5)
738420190	BCR55B (4,0)
738420200	BCR55B (4,5)
738420210	BCR55B (5,0)
738420220	BCR55B (6,0)
738420230	BCR55B (7,0)
738430120	BCR55K (1,0)
738430130	BCR55K (1,4)
738430140	BCR55K (1,8)
738430150	BCR55K (2,3)
738430160	BCR55K (2,7)
738430170	BCR55K (3,1)
738430180	BCR55K (3,5)
738430190	BCR55K (4,0)
738430200	BCR55K (4,5)
738430210	BCR55K (5,0)
738430220	BCR55K (6,0)
738430230	BCR55K (7,0)
738440120	BCR55Y (1,0)
738440130	BCR55Y (1,4)
738440140	BCR55Y (1,8)
738440150	BCR55Y (2,3)
738440160	BCR55Y (2,7)
738440170	BCR55Y (3,1)
738440180	BCR55Y (3,5)
738440190	BCR55Y (4,0)
738440200	BCR55Y (4,5)
738440210	BCR55Y (5,0)
738440220	BCR55Y (6,0)
738440230	BCR55Y (7,0)
738880120	BCR55W (1,0)
738880130	BCR55W (1,4)
738880140	BCR55W (1,8)
738880150	BCR55W (2,3)
738880160	BCR55W (2,7)
738880170	BCR55W (3,1)
738880180	BCR55W (3,5)
738880190	BCR55W (4,0)

738880200	BCR55W (4,5)
738880210	BCR55W (5,0)
738880220	BCR55W (6,0)
738880230	BCR55W (7,0)
730330000	BCR70R (1,0)
736890000	BCR70R (1,4)
736890100	BCR70R (1,8)
736890200	BCR70R (2,3)
736890300	BCR70R (2,7)
736890400	BCR70R (3,1)
730330005	BCR70R (3,5)
730330006	BCR70R (4,0)
730330007	BCR70R (4,5)
730330008	BCR70R (5,0)
730330010	BCR70R (6,0)
730330011	BCR70R (7,0)
730370000	BCR70H (1,0)
736930000	BCR70H (1,4)
736930100	BCR70H (1,8)
736930200	BCR70H (2,3)
736930300	BCR70H (2,7)
736930400	BCR70H (3,1)
730370005	BCR70H (3,5)
730370006	BCR70H (4,0)
730370007	BCR70H (4,5)
730370008	BCR70H (5,0)
730370010	BCR70H (6,0)
730370011	BCR70H (7,0)
730410000	BCR70J (1,0)
736970000	BCR70J (1,4)
736970100	BCR70J (1,8)
736970200	BCR70J (2,3)
736970300	BCR70J (2,7)
736970400	BCR70J (3,1)
730410005	BCR70J (3,5)
730410006	BCR70J (4,0)
730410007	BCR70J (4,5)
730410008	BCR70J (5,0)
730410010	BCR70J (6,0)
730410011	BCR70J (7,0)

730450000	BCR70T (1,0)
737020000	BCR70T (1,4)
737020100	BCR70T (1,8)
737020200	BCR70T (2,3)
737020300	BCR70T (2,7)
737020400	BCR70T (3,1)
730450005	BCR70T (3,5)
730450006	BCR70T (4,0)
730450007	BCR70T (4,5)
730450008	BCR70T (5,0)
730450010	BCR70T (6,0)
730450011	BCR70T (7,0)
730490000	BCR70O (1,0)
737060000	BCR70O (1,4)
737060100	BCR70O (1,8)
737060200	BCR70O (2,3)
737060300	BCR70O (2,7)
737060400	BCR70O (3,1)
730490005	BCR70O (3,5)
730490006	BCR70O (4,0)
730490007	BCR70O (4,5)
730490008	BCR70O (5,0)
730490010	BCR70O (6,0)
730490011	BCR70O (7,0)
730530000	BCR70S (1,0)
737100000	BCR70S (1,4)
737100100	BCR70S (1,8)
737100200	BCR70S (2,3)
737100300	BCR70S (2,7)
737100400	BCR70S (3,1)
730530005	BCR70S (3,5)
730530006	BCR70S (4,0)
730530007	BCR70S (4,5)
730530008	BCR70S (5,0)
730530010	BCR70S (6,0)
730530011	BCR70S (7,0)
733350000	BCR70X (1,0)
733350100	BCR70X (1,4)
733350200	BCR70X (1,8)
733350300	BCR70X (2,3)

733350400	BCR70X (2,7)
733350500	BCR70X (3,1)
733350600	BCR70X (3,5)
733350700	BCR70X (4,0)
733350800	BCR70X (4,5)
733350900	BCR70X (5,0)
733351000	BCR70X (6,0)
733351100	BCR70X (7,0)
733410000	BCR70A (1,0)
733410100	BCR70A (1,4)
733410200	BCR70A (1,8)
733410300	BCR70A (2,3)
733410400	BCR70A (2,7)
733410500	BCR70A (3,1)
733410600	BCR70A (3,5)
733410700	BCR70A (4,0)
733410800	BCR70A (4,5)
733410900	BCR70A (5,0)
733411000	BCR70A (6,0)
733411100	BCR70A (7,0)
733470000	BCR70D (1,0)
733470100	BCR70D (1,4)
733470200	BCR70D (1,8)
733470300	BCR70D (2,3)
733470400	BCR70D (2,7)
733470500	BCR70D (3,1)
733470600	BCR70D (3,5)
733470700	BCR70D (4,0)
733470800	BCR70D (4,5)
733470900	BCR70D (5,0)
733471000	BCR70D (6,0)
733471100	BCR70D (7,0)
733530000	BCR70L (1,0)
733530100	BCR70L (1,4)
733530200	BCR70L (1,8)
733530300	BCR70L (2,3)
733530400	BCR70L (2,7)
733530500	BCR70L (3,1)
733530600	BCR70L (3,5)
733530700	BCR70L (4,0)

733530800	BCR70L (4,5)
733530900	BCR70L (5,0)
733531000	BCR70L (6,0)
733531100	BCR70L (7,0)
733590000	BCR70U (1,0)
733590100	BCR70U (1,4)
733590200	BCR70U (1,8)
733590300	BCR70U (2,3)
733590400	BCR70U (2,7)
733590500	BCR70U (3,1)
733590600	BCR70U (3,5)
733590700	BCR70U (4,0)
733590800	BCR70U (4,5)
733590900	BCR70U (5,0)
733591000	BCR70U (6,0)
733591100	BCR70U (7,0)
738400240	BCR70Q (1,0)
738400250	BCR70Q (1,4)
738400260	BCR70Q (1,8)
738400270	BCR70Q (2,3)
738400280	BCR70Q (2,7)
738400290	BCR70Q (3,1)
738400300	BCR70Q (3,5)
738400310	BCR70Q (4,0)
738400320	BCR70Q (4,5)
738400330	BCR70Q (5,0)
738400340	BCR70Q (6,0)
738400350	BCR70Q (7,0)
738410240	BCR70E (1,0)
738410250	BCR70E (1,4)
738410260	BCR70E (1,8)
738410270	BCR70E (2,3)
738410280	BCR70E (2,7)
738410290	BCR70E (3,1)
738410300	BCR70E (3,5)
738410310	BCR70E (4,0)
738410320	BCR70E (4,5)
738410330	BCR70E (5,0)
738410340	BCR70E (6,0)
738410350	BCR70E (7,0)

738420240	BCR70B (1,0)
738420250	BCR70B (1,4)
738420260	BCR70B (1,8)
738420270	BCR70B (2,3)
738420280	BCR70B (2,7)
738420290	BCR70B (3,1)
738420300	BCR70B (3,5)
738420310	BCR70B (4,0)
738420320	BCR70B (4,5)
738420330	BCR70B (5,0)
738420340	BCR70B (6,0)
738420350	BCR70B (7,0)
738430240	BCR70K (1,0)
738430250	BCR70K (1,4)
738430260	BCR70K (1,8)
738430270	BCR70K (2,3)
738430280	BCR70K (2,7)
738430290	BCR70K (3,1)
738430300	BCR70K (3,5)
738430310	BCR70K (4,0)
738430320	BCR70K (4,5)
738430330	BCR70K (5,0)
738430340	BCR70K (6,0)
738430350	BCR70K (7,0)
738440240	BCR70Y (1,0)
738440250	BCR70Y (1,4)
738440260	BCR70Y (1,8)
738440270	BCR70Y (2,3)
738440280	BCR70Y (2,7)
738440290	BCR70Y (3,1)
738440300	BCR70Y (3,5)
738440310	BCR70Y (4,0)
738440320	BCR70Y (4,5)
738440330	BCR70Y (5,0)
738440340	BCR70Y (6,0)
738440350	BCR70Y (7,0)
738880240	BCR70W (1,0)
738880250	BCR70W (1,4)
738880260	BCR70W (1,8)
738880270	BCR70W (2,3)

738880280	BCR70W (2,7)
738880290	BCR70W (3,1)
738880300	BCR70W (3,5)
738880310	BCR70W (4,0)
738880320	BCR70W (4,5)
738880330	BCR70W (5,0)
738880340	BCR70W (6,0)
738880350	BCR70W (7,0)
733221200	BCR95R (1,0)
733221300	BCR95R (1,4)
733221400	BCR95R (1,8)
733221500	BCR95R (2,3)
733221600	BCR95R (2,7)
733221700	BCR95R (3,1)
733221800	BCR95R (3,5)
733221900	BCR95R (4,0)
733222000	BCR95R (4,5)
733222100	BCR95R (5,0)
733222200	BCR95R (6,0)
733222300	BCR95R (7,0)
733241200	BCR95H (1,0)
733241300	BCR95H (1,4)
733241400	BCR95H (1,8)
733241500	BCR95H (2,3)
733241600	BCR95H (2,7)
733241700	BCR95H (3,1)
733241800	BCR95H (3,5)
733241900	BCR95H (4,0)
733242000	BCR95H (4,5)
733242100	BCR95H (5,0)
733242200	BCR95H (6,0)
733242300	BCR95H (7,0)
733261200	BCR95J (1,0)
733261300	BCR95J (1,4)
733261400	BCR95J (1,8)
733261500	BCR95J (2,3)
733261600	BCR95J (2,7)
733261700	BCR95J (3,1)
733261800	BCR95J (3,5)
733261900	BCR95J (4,0)

733262000	BCR95J (4,5)
733262100	BCR95J (5,0)
733262200	BCR95J (6,0)
733262300	BCR95J (7,0)
733281200	BCR95T (1,0)
733281300	BCR95T (1,4)
733281400	BCR95T (1,8)
733281500	BCR95T (2,3)
733281600	BCR95T (2,7)
733281700	BCR95T (3,1)
733281800	BCR95T (3,5)
733281900	BCR95T (4,0)
733282000	BCR95T (4,5)
733282100	BCR95T (5,0)
733282200	BCR95T (6,0)
733282300	BCR95T (7,0)
733301200	BCR95O (1,0)
733301300	BCR95O (1,4)
733301400	BCR95O (1,8)
733301500	BCR95O (2,3)
733301600	BCR95O (2,7)
733301700	BCR95O (3,1)
733301800	BCR95O (3,5)
733301900	BCR95O (4,0)
733302000	BCR95O (4,5)
733302100	BCR95O (5,0)
733302200	BCR95O (6,0)
733302300	BCR95O (7,0)
733321200	BCR95S (1,0)
733321300	BCR95S (1,4)
733321400	BCR95S (1,8)
733321500	BCR95S (2,3)
733321600	BCR95S (2,7)
733321700	BCR95S (3,1)
733321800	BCR95S (3,5)
733321900	BCR95S (4,0)
733322000	BCR95S (4,5)
733322100	BCR95S (5,0)
733322200	BCR95S (6,0)
733322300	BCR95S (7,0)

733381200	BCR95X (1,0)
733381300	BCR95X (1,4)
733381400	BCR95X (1,8)
733381500	BCR95X (2,3)
733381600	BCR95X (2,7)
733381700	BCR95X (3,1)
733381800	BCR95X (3,5)
733381900	BCR95X (4,0)
733382000	BCR95X (4,5)
733382100	BCR95X (5,0)
733382200	BCR95X (6,0)
733382300	BCR95X (7,0)
733441200	BCR95A (1,0)
733441300	BCR95A (1,4)
733441400	BCR95A (1,8)
733441500	BCR95A (2,3)
733441600	BCR95A (2,7)
733441700	BCR95A (3,1)
733441800	BCR95A (3,5)
733441900	BCR95A (4,0)
733442000	BCR95A (4,5)
733442100	BCR95A (5,0)
733442200	BCR95A (6,0)
733442300	BCR95A (7,0)
733501200	BCR95D (1,0)
733501300	BCR95D (1,4)
733501400	BCR95D (1,8)
733501500	BCR95D (2,3)
733501600	BCR95D (2,7)
733501700	BCR95D (3,1)
733501800	BCR95D (3,5)
733501900	BCR95D (4,0)
733502000	BCR95D (4,5)
733502100	BCR95D (5,0)
733502200	BCR95D (6,0)
733502300	BCR95D (7,0)
733561200	BCR95L (1,0)
733561300	BCR95L (1,4)
733561400	BCR95L (1,8)
733561500	BCR95L (2,3)

733561600	BCR95L (2,7)
733561700	BCR95L (3,1)
733561800	BCR95L (3,5)
733561900	BCR95L (4,0)
733562000	BCR95L (4,5)
733562100	BCR95L (5,0)
733562200	BCR95L (6,0)
733562300	BCR95L (7,0)
733621200	BCR95U (1,0)
733621300	BCR95U (1,4)
733621400	BCR95U (1,8)
733621500	BCR95U (2,3)
733621600	BCR95U (2,7)
733621700	BCR95U (3,1)
733621800	BCR95U (3,5)
733621900	BCR95U (4,0)
733622000	BCR95U (4,5)
733622100	BCR95U (5,0)
733622200	BCR95U (6,0)
733622300	BCR95U (7,0)
738400720	BCR95Q (1,0)
738400730	BCR95Q (1,4)
738400740	BCR95Q (1,8)
738400750	BCR95Q (2,3)
738400760	BCR95Q (2,7)
738400770	BCR95Q (3,1)
738400780	BCR95Q (3,5)
738400790	BCR95Q (4,0)
738400800	BCR95Q (4,5)
738400810	BCR95Q (5,0)
738400820	BCR95Q (6,0)
738400830	BCR95Q (7,0)
738410720	BCR95E (1,0)
738410730	BCR95E (1,4)
738410740	BCR95E (1,8)
738410750	BCR95E (2,3)
738410760	BCR95E (2,7)
738410770	BCR95E (3,1)
738410780	BCR95E (3,5)
738410790	BCR95E (4,0)

738410800	BCR95E (4,5)
738410810	BCR95E (5,0)
738410820	BCR95E (6,0)
738410830	BCR95E (7,0)
738420720	BCR95B (1,0)
738420730	BCR95B (1,4)
738420740	BCR95B (1,8)
738420750	BCR95B (2,3)
738420760	BCR95B (2,7)
738420770	BCR95B (3,1)
738420780	BCR95B (3,5)
738420790	BCR95B (4,0)
738420800	BCR95B (4,5)
738420810	BCR95B (5,0)
738420820	BCR95B (6,0)
738420830	BCR95B (7,0)
738430720	BCR95K (1,0)
738430730	BCR95K (1,4)
738430740	BCR95K (1,8)
738430750	BCR95K (2,3)
738430760	BCR95K (2,7)
738430770	BCR95K (3,1)
738430780	BCR95K (3,5)
738430790	BCR95K (4,0)
738430800	BCR95K (4,5)
738430810	BCR95K (5,0)
738430820	BCR95K (6,0)
738430830	BCR95K (7,0)
738440720	BCR95Y (1,0)
738440730	BCR95Y (1,4)
738440740	BCR95Y (1,8)
738440750	BCR95Y (2,3)
738440760	BCR95Y (2,7)
738440770	BCR95Y (3,1)
738440780	BCR95Y (3,5)
738440790	BCR95Y (4,0)
738440800	BCR95Y (4,5)
738440810	BCR95Y (5,0)
738440820	BCR95Y (6,0)
738440830	BCR95Y (7,0)

738880360	BCR95W (1,0)
738880370	BCR95W (1,4)
738880380	BCR95W (1,8)
738880390	BCR95W (2,3)
738880400	BCR95W (2,7)
738880410	BCR95W (3,1)
738880420	BCR95W (3,5)
738880430	BCR95W (4,0)
738880440	BCR95W (4,5)
738880450	BCR95W (5,0)
738880460	BCR95W (6,0)
738880470	BCR95W (7,0)
730340000	BCR115R (1,0)
736900000	BCR115R (1,4)
736900100	BCR115R (1,8)
736900200	BCR115R (2,3)
736900300	BCR115R (2,7)
736900400	BCR115R (3,1)
730340005	BCR115R (3,5)
730340006	BCR115R (4,0)
730340007	BCR115R (4,5)
730340008	BCR115R (5,0)
730340010	BCR115R (6,0)
730340011	BCR115R (7,0)
730380000	BCR115H (1,0)
736940000	BCR115H (1,4)
736940100	BCR115H (1,8)
736940200	BCR115H (2,3)
736940300	BCR115H (2,7)
736940400	BCR115H (3,1)
730380005	BCR115H (3,5)
730380006	BCR115H (4,0)
730380007	BCR115H (4,5)
730380008	BCR115H (5,0)
730380010	BCR115H (6,0)
730380011	BCR115H (7,0)
730420000	BCR115J (1,0)
736980000	BCR115J (1,4)
736980100	BCR115J (1,8)
736980200	BCR115J (2,3)

736980300	BCR115J (2,7)
736980400	BCR115J (3,1)
730420005	BCR115J (3,5)
730420006	BCR115J (4,0)
730420007	BCR115J (4,5)
730420008	BCR115J (5,0)
730420010	BCR115J (6,0)
730420011	BCR115J (7,0)
730460000	BCR115T (1,0)
737030000	BCR115T (1,4)
737030100	BCR115T (1,8)
737030200	BCR115T (2,3)
737030300	BCR115T (2,7)
737030400	BCR115T (3,1)
730460005	BCR115T (3,5)
730460006	BCR115T (4,0)
730460007	BCR115T (4,5)
730460008	BCR115T (5,0)
730460010	BCR115T (6,0)
730460011	BCR115T (7,0)
730500000	BCR115O (1,0)
737070000	BCR115O (1,4)
737070100	BCR115O (1,8)
737070200	BCR115O (2,3)
737070300	BCR115O (2,7)
737070400	BCR115O (3,1)
730500005	BCR115O (3,5)
730500006	BCR115O (4,0)
730500007	BCR115O (4,5)
730500008	BCR115O (5,0)
730500010	BCR115O (6,0)
730500011	BCR115O (7,0)
730540000	BCR115S (1,0)
737110000	BCR115S (1,4)
737110100	BCR115S (1,8)
737110200	BCR115S (2,3)
737110300	BCR115S (2,7)
737110400	BCR115S (3,1)
730540005	BCR115S (3,5)
730540006	BCR115S (4,0)

730540007	BCR115S (4,5)
730540008	BCR115S (5,0)
730540010	BCR115S (6,0)
730540011	BCR115S (7,0)
733360000	BCR115X (1,0)
733360100	BCR115X (1,4)
733360200	BCR115X (1,8)
733360300	BCR115X (2,3)
733360400	BCR115X (2,7)
733360500	BCR115X (3,1)
733360600	BCR115X (3,5)
733360700	BCR115X (4,0)
733360800	BCR115X (4,5)
733360900	BCR115X (5,0)
733361000	BCR115X (6,0)
733361100	BCR115X (7,0)
733420000	BCR115A (1,0)
733420100	BCR115A (1,4)
733420200	BCR115A (1,8)
733420300	BCR115A (2,3)
733420400	BCR115A (2,7)
733420500	BCR115A (3,1)
733420600	BCR115A (3,5)
733420700	BCR115A (4,0)
733420800	BCR115A (4,5)
733420900	BCR115A (5,0)
733421000	BCR115A (6,0)
733421100	BCR115A (7,0)
733480000	BCR115D (1,0)
733480100	BCR115D (1,4)
733480200	BCR115D (1,8)
733480300	BCR115D (2,3)
733480400	BCR115D (2,7)
733480500	BCR115D (3,1)
733480600	BCR115D (3,5)
733480700	BCR115D (4,0)
733480800	BCR115D (4,5)
733480900	BCR115D (5,0)
733481000	BCR115D (6,0)
733481100	BCR115D (7,0)

733540000	BCR115L (1,0)
733540100	BCR115L (1,4)
733540200	BCR115L (1,8)
733540300	BCR115L (2,3)
733540400	BCR115L (2,7)
733540500	BCR115L (3,1)
733540600	BCR115L (3,5)
733540700	BCR115L (4,0)
733540800	BCR115L (4,5)
733540900	BCR115L (5,0)
733541000	BCR115L (6,0)
733541100	BCR115L (7,0)
733600000	BCR115U (1,0)
733600100	BCR115U (1,4)
733600200	BCR115U (1,8)
733600300	BCR115U (2,3)
733600400	BCR115U (2,7)
733600500	BCR115U (3,1)
733600600	BCR115U (3,5)
733600700	BCR115U (4,0)
733600800	BCR115U (4,5)
733600900	BCR115U (5,0)
733601000	BCR115U (6,0)
733601100	BCR115U (7,0)
738400360	BCR115Q (1,0)
738400370	BCR115Q (1,4)
738400380	BCR115Q (1,8)
738400390	BCR115Q (2,3)
738400400	BCR115Q (2,7)
738400410	BCR115Q (3,1)
738400420	BCR115Q (3,5)
738400430	BCR115Q (4,0)
738400440	BCR115Q (4,5)
738400450	BCR115Q (5,0)
738400460	BCR115Q (6,0)
738400470	BCR115Q (7,0)
738410360	BCR115E (1,0)
738410370	BCR115E (1,4)
738410380	BCR115E (1,8)
738410390	BCR115E (2,3)

738410400	BCR115E (2,7)
738410410	BCR115E (3,1)
738410420	BCR115E (3,5)
738410430	BCR115E (4,0)
738410440	BCR115E (4,5)
738410450	BCR115E (5,0)
738410460	BCR115E (6,0)
738410470	BCR115E (7,0)
738420360	BCR115B (1,0)
738420370	BCR115B (1,4)
738420380	BCR115B (1,8)
738420390	BCR115B (2,3)
738420400	BCR115B (2,7)
738420410	BCR115B (3,1)
738420420	BCR115B (3,5)
738420430	BCR115B (4,0)
738420440	BCR115B (4,5)
738420450	BCR115B (5,0)
738420460	BCR115B (6,0)
738420470	BCR115B (7,0)
738430360	BCR115K (1,0)
738430370	BCR115K (1,4)
738430380	BCR115K (1,8)
738430390	BCR115K (2,3)
738430400	BCR115K (2,7)
738430410	BCR115K (3,1)
738430420	BCR115K (3,5)
738430430	BCR115K (4,0)
738430440	BCR115K (4,5)
738430450	BCR115K (5,0)
738430460	BCR115K (6,0)
738430470	BCR115K (7,0)
738440360	BCR115Y (1,0)
738440370	BCR115Y (1,4)
738440380	BCR115Y (1,8)
738440390	BCR115Y (2,3)
738440400	BCR115Y (2,7)
738440410	BCR115Y (3,1)
738440420	BCR115Y (3,5)
738440430	BCR115Y (4,0)

738440440	BCR115Y (4,5)
738440450	BCR115Y (5,0)
738440460	BCR115Y (6,0)
738440470	BCR115Y (7,0)
738880480	BCR115W (1,0)
738880490	BCR115W (1,4)
738880500	BCR115W (1,8)
738880510	BCR115W (2,3)
738880520	BCR115W (2,7)
738880530	BCR115W (3,1)
738880540	BCR115W (3,5)
738880550	BCR115W (4,0)
738880560	BCR115W (4,5)
738880570	BCR115W (5,0)
738880580	BCR115W (6,0)
738880590	BCR115W (7,0)
733210000	BCR150R (1,0)
733210100	BCR150R (1,4)
733210200	BCR150R (1,8)
733210300	BCR150R (2,3)
733210400	BCR150R (2,7)
733210500	BCR150R (3,1)
733210600	BCR150R (3,5)
733210700	BCR150R (4,0)
733210800	BCR150R (4,5)
733210900	BCR150R (5,0)
733211000	BCR150R (6,0)
733211100	BCR150R (7,0)
733230000	BCR150H (1,0)
733230100	BCR150H (1,4)
733230200	BCR150H (1,8)
733230300	BCR150H (2,3)
733230400	BCR150H (2,7)
733230500	BCR150H (3,1)
733230600	BCR150H (3,5)
733230700	BCR150H (4,0)
733230800	BCR150H (4,5)
733230900	BCR150H (5,0)
733231000	BCR150H (6,0)
733231100	BCR150H (7,0)

733250000	BCR150J (1,0)
733250100	BCR150J (1,4)
733250200	BCR150J (1,8)
733250300	BCR150J (2,3)
733250400	BCR150J (2,7)
733250500	BCR150J (3,1)
733250600	BCR150J (3,5)
733250700	BCR150J (4,0)
733250800	BCR150J (4,5)
733250900	BCR150J (5,0)
733251000	BCR150J (6,0)
733251100	BCR150J (7,0)
733270000	BCR150T (1,0)
733270100	BCR150T (1,4)
733270200	BCR150T (1,8)
733270300	BCR150T (2,3)
733270400	BCR150T (2,7)
733270500	BCR150T (3,1)
733270600	BCR150T (3,5)
733270700	BCR150T (4,0)
733270800	BCR150T (4,5)
733270900	BCR150T (5,0)
733271000	BCR150T (6,0)
733271100	BCR150T (7,0)
733290000	BCR150O (1,0)
733290100	BCR150O (1,4)
733290200	BCR150O (1,8)
733290300	BCR150O (2,3)
733290400	BCR150O (2,7)
733290500	BCR150O (3,1)
733290600	BCR150O (3,5)
733290700	BCR150O (4,0)
733290800	BCR150O (4,5)
733290900	BCR150O (5,0)
733291000	BCR150O (6,0)
733291100	BCR150O (7,0)
733310000	BCR150S (1,0)
733310100	BCR150S (1,4)
733310200	BCR150S (1,8)
733310300	BCR150S (2,3)

733310400	BCR150S (2,7)
733310500	BCR150S (3,1)
733310600	BCR150S (3,5)
733310700	BCR150S (4,0)
733310800	BCR150S (4,5)
733310900	BCR150S (5,0)
733311000	BCR150S (6,0)
733311100	BCR150S (7,0)
733370000	BCR150X (1,0)
733370100	BCR150X (1,4)
733370200	BCR150X (1,8)
733370300	BCR150X (2,3)
733370400	BCR150X (2,7)
733370500	BCR150X (3,1)
733370600	BCR150X (3,5)
733370700	BCR150X (4,0)
733370800	BCR150X (4,5)
733370900	BCR150X (5,0)
733371000	BCR150X (6,0)
733371100	BCR150X (7,0)
733430000	BCR150A (1,0)
733430100	BCR150A (1,4)
733430200	BCR150A (1,8)
733430300	BCR150A (2,3)
733430400	BCR150A (2,7)
733430500	BCR150A (3,1)
733430600	BCR150A (3,5)
733430700	BCR150A (4,0)
733430800	BCR150A (4,5)
733430900	BCR150A (5,0)
733431000	BCR150A (6,0)
733431100	BCR150A (7,0)
733490000	BCR150D (1,0)
733490100	BCR150D (1,4)
733490200	BCR150D (1,8)
733490300	BCR150D (2,3)
733490400	BCR150D (2,7)
733490500	BCR150D (3,1)
733490600	BCR150D (3,5)
733490700	BCR150D (4,0)

733490800	BCR150D (4,5)
733490900	BCR150D (5,0)
733491000	BCR150D (6,0)
733491100	BCR150D (7,0)
733550000	BCR150L (1,0)
733550100	BCR150L (1,4)
733550200	BCR150L (1,8)
733550300	BCR150L (2,3)
733550400	BCR150L (2,7)
733550500	BCR150L (3,1)
733550600	BCR150L (3,5)
733550700	BCR150L (4,0)
733550800	BCR150L (4,5)
733550900	BCR150L (5,0)
733551000	BCR150L (6,0)
733551100	BCR150L (7,0)
733610000	BCR150U (1,0)
733610100	BCR150U (1,4)
733610200	BCR150U (1,8)
733610300	BCR150U (2,3)
733610400	BCR150U (2,7)
733610500	BCR150U (3,1)
733610600	BCR150U (3,5)
733610700	BCR150U (4,0)
733610800	BCR150U (4,5)
733610900	BCR150U (5,0)
733611000	BCR150U (6,0)
733611100	BCR150U (7,0)
738400480	BCR150Q (1,0)
738400490	BCR150Q (1,4)
738400500	BCR150Q (1,8)
738400510	BCR150Q (2,3)
738400520	BCR150Q (2,7)
738400530	BCR150Q (3,1)
738400540	BCR150Q (3,5)
738400550	BCR150Q (4,0)
738400560	BCR150Q (4,5)
738400570	BCR150Q (5,0)
738400580	BCR150Q (6,0)
738400590	BCR150Q (7,0)

738410480	BCR150E (1,0)
738410490	BCR150E (1,4)
738410500	BCR150E (1,8)
738410510	BCR150E (2,3)
738410520	BCR150E (2,7)
738410530	BCR150E (3,1)
738410540	BCR150E (3,5)
738410550	BCR150E (4,0)
738410560	BCR150E (4,5)
738410570	BCR150E (5,0)
738410580	BCR150E (6,0)
738410590	BCR150E (7,0)
738420480	BCR150B (1,0)
738420490	BCR150B (1,4)
738420500	BCR150B (1,8)
738420510	BCR150B (2,3)
738420520	BCR150B (2,7)
738420530	BCR150B (3,1)
738420540	BCR150B (3,5)
738420550	BCR150B (4,0)
738420560	BCR150B (4,5)
738420570	BCR150B (5,0)
738420580	BCR150B (6,0)
738420590	BCR150B (7,0)
738430480	BCR150K (1,0)
738430490	BCR150K (1,4)
738430500	BCR150K (1,8)
738430510	BCR150K (2,3)
738430520	BCR150K (2,7)
738430530	BCR150K (3,1)
738430540	BCR150K (3,5)
738430550	BCR150K (4,0)
738430560	BCR150K (4,5)
738430570	BCR150K (5,0)
738430580	BCR150K (6,0)
738430590	BCR150K (7,0)
738440480	BCR150Y (1,0)
738440490	BCR150Y (1,4)
738440500	BCR150Y (1,8)
738440510	BCR150Y (2,3)

738440520	BCR150Y (2,7)
738440530	BCR150Y (3,1)
738440540	BCR150Y (3,5)
738440550	BCR150Y (4,0)
738440560	BCR150Y (4,5)
738440570	BCR150Y (5,0)
738440580	BCR150Y (6,0)
738440590	BCR150Y (7,0)
738880600	BCR150W (1,0)
738880610	BCR150W (1,4)
738880620	BCR150W (1,8)
738880630	BCR150W (2,3)
738880640	BCR150W (2,7)
738880650	BCR150W (3,1)
738880660	BCR150W (3,5)
738880670	BCR150W (4,0)
738880680	BCR150W (4,5)
738880690	BCR150W (5,0)
738880700	BCR150W (6,0)
738880710	BCR150W (7,0)
733220000	BCR180R (1,0)
733220100	BCR180R (1,4)
733220200	BCR180R (1,8)
733220300	BCR180R (2,3)
733220400	BCR180R (2,7)
733220500	BCR180R (3,1)
733220600	BCR180R (3,5)
733220700	BCR180R (4,0)
733220800	BCR180R (4,5)
733220900	BCR180R (5,0)
733221000	BCR180R (6,0)
733221100	BCR180R (7,0)
733240000	BCR180H (1,0)
733240100	BCR180H (1,4)
733240200	BCR180H (1,8)
733240300	BCR180H (2,3)
733240400	BCR180H (2,7)
733240500	BCR180H (3,1)
733240600	BCR180H (3,5)
733240700	BCR180H (4,0)

733240800	BCR180H (4,5)
733240900	BCR180H (5,0)
733241000	BCR180H (6,0)
733241100	BCR180H (7,0)
733260000	BCR180J (1,0)
733260100	BCR180J (1,4)
733260200	BCR180J (1,8)
733260300	BCR180J (2,3)
733260400	BCR180J (2,7)
733260500	BCR180J (3,1)
733260600	BCR180J (3,5)
733260700	BCR180J (4,0)
733260800	BCR180J (4,5)
733260900	BCR180J (5,0)
733261000	BCR180J (6,0)
733261100	BCR180J (7,0)
733280000	BCR180T (1,0)
733280100	BCR180T (1,4)
733280200	BCR180T (1,8)
733280300	BCR180T (2,3)
733280400	BCR180T (2,7)
733280500	BCR180T (3,1)
733280600	BCR180T (3,5)
733280700	BCR180T (4,0)
733280800	BCR180T (4,5)
733280900	BCR180T (5,0)
733281000	BCR180T (6,0)
733281100	BCR180T (7,0)
733300000	BCR180O (1,0)
733300100	BCR180O (1,4)
733300200	BCR180O (1,8)
733300300	BCR180O (2,3)
733300400	BCR180O (2,7)
733300500	BCR180O (3,1)
733300600	BCR180O (3,5)
733300700	BCR180O (4,0)
733300800	BCR180O (4,5)
733300900	BCR180O (5,0)
733301000	BCR180O (6,0)
733301100	BCR180O (7,0)

733320000	BCR180S (1,0)
733320100	BCR180S (1,4)
733320200	BCR180S (1,8)
733320300	BCR180S (2,3)
733320400	BCR180S (2,7)
733320500	BCR180S (3,1)
733320600	BCR180S (3,5)
733320700	BCR180S (4,0)
733320800	BCR180S (4,5)
733320900	BCR180S (5,0)
733321000	BCR180S (6,0)
733321100	BCR180S (7,0)
733380000	BCR180X (1,0)
733380100	BCR180X (1,4)
733380200	BCR180X (1,8)
733380300	BCR180X (2,3)
733380400	BCR180X (2,7)
733380500	BCR180X (3,1)
733380600	BCR180X (3,5)
733380700	BCR180X (4,0)
733380800	BCR180X (4,5)
733380900	BCR180X (5,0)
733381000	BCR180X (6,0)
733381100	BCR180X (7,0)
733440000	BCR180A (1,0)
733440100	BCR180A (1,4)
733440200	BCR180A (1,8)
733440300	BCR180A (2,3)
733440400	BCR180A (2,7)
733440500	BCR180A (3,1)
733440600	BCR180A (3,5)
733440700	BCR180A (4,0)
733440800	BCR180A (4,5)
733440900	BCR180A (5,0)
733441000	BCR180A (6,0)
733441100	BCR180A (7,0)
733500000	BCR180D (1,0)
733500100	BCR180D (1,4)
733500200	BCR180D (1,8)
733500300	BCR180D (2,3)

733500400	BCR180D (2,7)
733500500	BCR180D (3,1)
733500600	BCR180D (3,5)
733500700	BCR180D (4,0)
733500800	BCR180D (4,5)
733500900	BCR180D (5,0)
733501000	BCR180D (6,0)
733501100	BCR180D (7,0)
733560000	BCR180L (1,0)
733560100	BCR180L (1,4)
733560200	BCR180L (1,8)
733560300	BCR180L (2,3)
733560400	BCR180L (2,7)
733560500	BCR180L (3,1)
733560600	BCR180L (3,5)
733560700	BCR180L (4,0)
733560800	BCR180L (4,5)
733560900	BCR180L (5,0)
733561000	BCR180L (6,0)
733561100	BCR180L (7,0)
733620000	BCR180U (1,0)
733620100	BCR180U (1,4)
733620200	BCR180U (1,8)
733620300	BCR180U (2,3)
733620400	BCR180U (2,7)
733620500	BCR180U (3,1)
733620600	BCR180U (3,5)
733620700	BCR180U (4,0)
733620800	BCR180U (4,5)
733620900	BCR180U (5,0)
733621000	BCR180U (6,0)
733621100	BCR180U (7,0)
738400600	BCR180Q (1,0)
738400610	BCR180Q (1,4)
738400620	BCR180Q (1,8)
738400630	BCR180Q (2,3)
738400640	BCR180Q (2,7)
738400650	BCR180Q (3,1)
738400660	BCR180Q (3,5)
738400670	BCR180Q (4,0)

738400680	BCR180Q (4,5)
738400690	BCR180Q (5,0)
738400700	BCR180Q (6,0)
738400710	BCR180Q (7,0)
738410600	BCR180E (1,0)
738410610	BCR180E (1,4)
738410620	BCR180E (1,8)
738410630	BCR180E (2,3)
738410640	BCR180E (2,7)
738410650	BCR180E (3,1)
738410660	BCR180E (3,5)
738410670	BCR180E (4,0)
738410680	BCR180E (4,5)
738410690	BCR180E (5,0)
738410700	BCR180E (6,0)
738410710	BCR180E (7,0)
738420600	BCR180B (1,0)
738420610	BCR180B (1,4)
738420620	BCR180B (1,8)
738420630	BCR180B (2,3)
738420640	BCR180B (2,7)
738420650	BCR180B (3,1)
738420660	BCR180B (3,5)
738420670	BCR180B (4,0)
738420680	BCR180B (4,5)
738420690	BCR180B (5,0)
738420700	BCR180B (6,0)
738420710	BCR180B (7,0)
738430600	BCR180K (1,0)
738430610	BCR180K (1,4)
738430620	BCR180K (1,8)
738430630	BCR180K (2,3)
738430640	BCR180K (2,7)
738430650	BCR180K (3,1)
738430660	BCR180K (3,5)
738430670	BCR180K (4,0)
738430680	BCR180K (4,5)
738430690	BCR180K (5,0)
738430700	BCR180K (6,0)
738430710	BCR180K (7,0)

738440600	BCR180Y (1,0)
738440610	BCR180Y (1,4)
738440620	BCR180Y (1,8)
738440630	BCR180Y (2,3)
738440640	BCR180Y (2,7)
738440650	BCR180Y (3,1)
738440660	BCR180Y (3,5)
738440670	BCR180Y (4,0)
738440680	BCR180Y (4,5)
738440690	BCR180Y (5,0)
738440700	BCR180Y (6,0)
738440710	BCR180Y (7,0)
738880720	BCR180W (1,0)
738880730	BCR180W (1,4)
738880740	BCR180W (1,8)
738880750	BCR180W (2,3)
738880760	BCR180W (2,7)
738880770	BCR180W (3,1)
738880780	BCR180W (3,5)
738880790	BCR180W (4,0)
738880800	BCR180W (4,5)
738880810	BCR180W (5,0)
738880820	BCR180W (6,0)
738880830	BCR180W (7,0)

▪ **FRL**

Código	Modelo
730790000	FRL44,5R (5,0)
730790001	FRL44,5R (7,0)
730840000	FRL44,5H (5,0)
730840001	FRL44,5H (7,0)
730890000	FRL44,5J (5,0)
730890001	FRL44,5J (7,0)
730940000	FRL44,5T (5,0)
730940001	FRL44,5T (7,0)
730990000	FRL44,5O (5,0)
730990001	FRL44,5O (7,0)
731050000	FRL44,5S (5,0)
731050001	FRL44,5S (7,0)
738100000	FRL44,5X (7,0)

738100010	FRL44,5X (5,0)
738080000	FRL44,5A (5,0)
738080010	FRL44,5A (7,0)
738070000	FRL44,5D (5,0)
738070010	FRL44,5D (7,0)
738050000	FRL44,5L (5,0)
738050010	FRL44,5L (7,0)
738060000	FRL44,5U (5,0)
738060010	FRL44,5U (7,0)
738450000	FRL44,5Q (5,0)
738450010	FRL44,5Q (7,0)
738460000	FRL44,5E (5,0)
738460010	FRL44,5E (7,0)
738470000	FRL44,5B (5,0)
738470010	FRL44,5B (7,0)
738480000	FRL44,5K (5,0)
738480010	FRL44,5K (7,0)
738490000	FRL44,5Y (5,0)
738490010	FRL44,5Y (7,0)
738890000	FRL44,5W (5,0)
738890010	FRL44,5W (7,0)
730800000	FRL55R (5,0)
730800001	FRL55R (7,0)
730850000	FRL55H (5,0)
730850001	FRL55H (7,0)
730900000	FRL55J (5,0)
730900001	FRL55J (7,0)
730950000	FRL55T (5,0)
730950001	FRL55T (7,0)
731010000	FRL55O (5,0)
731010001	FRL55O (7,0)
731060000	FRL55S (5,0)
731060001	FRL55S (7,0)
738100020	FRL55X (7,0)
738100030	FRL55X (5,0)
738080020	FRL55A (5,0)
738080030	FRL55A (7,0)
738070020	FRL55D (5,0)
738070030	FRL55D (7,0)
738050020	FRL55L (5,0)

738050030	FRL55L (7,0)
738060020	FRL55U (5,0)
738060030	FRL55U (7,0)
738450020	FRL55Q (5,0)
738450030	FRL55Q (7,0)
738460020	FRL55E (5,0)
738460030	FRL55E (7,0)
738470020	FRL55B (5,0)
738470030	FRL55B (7,0)
738480020	FRL55K (5,0)
738480030	FRL55K (7,0)
738490020	FRL55Y (5,0)
738490030	FRL55Y (7,0)
738890020	FRL55W (5,0)
738490030	FRL55W (7,0)
730810000	FRL70R (5,0)
730810001	FRL70R (7,0)
730860000	FRL70H (5,0)
730860001	FRL70H (7,0)
730910000	FRL70J (5,0)
730910001	FRL70J (7,0)
730960000	FRL70T (5,0)
730960001	FRL70T (7,0)
731020000	FRL70O (5,0)
731020001	FRL70O (7,0)
731070000	FRL70S (5,0)
731070001	FRL70S (7,0)
738100040	FRL70X (7,0)
738100050	FRL70X (5,0)
738080040	FRL70A (5,0)
738080050	FRL70A (7,0)
738070040	FRL70D (5,0)
738070050	FRL70D (7,0)
738050040	FRL70L (5,0)
738050050	FRL70L (7,0)
738060040	FRL70U (7,0)
738060050	FRL70U (5,0)
738450040	FRL70Q (7,0)
738450050	FRL70Q (5,0)
738460040	FRL70E (7,0)

738460050	FRL70E (5,0)
738470040	FRL70B (7,0)
738470050	FRL70B (5,0)
738480040	FRL70K (7,0)
738480050	FRL70K (5,0)
738490040	FRL70Y (7,0)
738490050	FRL70Y (5,0)
738490040	FRL70W (7,0)
738490050	FRL70W (5,0)
730820000	FRL95R (5,0)
730820001	FRL95R (7,0)
730870000	FRL95H (5,0)
730870001	FRL95H (7,0)
730920000	FRL95J (5,0)
730920001	FRL95J (7,0)
730970000	FRL95T (5,0)
730970001	FRL95T (7,0)
731030000	FRL95O (5,0)
731030001	FRL95O (7,0)
731080000	FRL95S (5,0)
731080001	FRL95S (7,0)
738100060	FRL95X (7,0)
738100070	FRL95X (5,0)
738080060	FRL95A (5,0)
738080070	FRL95A (7,0)
738070060	FRL95D (5,0)
738070070	FRL95D (7,0)
738050060	FRL95L (5,0)
738050070	FRL95L (7,0)
738060060	FRL95U (5,0)
738060070	FRL95U (7,0)
738450060	FRL95Q (5,0)
738450070	FRL95Q (7,0)
738460060	FRL95E (5,0)
738460070	FRL95E (7,0)
738470060	FRL95B (5,0)
738470070	FRL95B (7,0)
738480060	FRL95K (5,0)
738480070	FRL95K (7,0)
738490060	FRL95Y (5,0)

738490070	FRL95Y (7,0)
738490060	FRL95W (5,0)
738490070	FRL95W (7,0)
730830000	FRL125R (5,0)
730830001	FRL125R (7,0)
730880000	FRL125H (5,0)
730880001	FRL125H (7,0)
730930000	FRL125J (5,0)
730930001	FRL125J (7,0)
730980000	FRL125T (5,0)
730980001	FRL125T (7,0)
731040000	FRL125O (5,0)
731040001	FRL125O (7,0)
731090000	FRL125S (5,0)
731090001	FRL125S (7,0)
738100080	FRL125X (7,0)
738100090	FRL125X (5,0)
738080080	FRL125A (5,0)
738080090	FRL125A (7,0)
738070080	FRL125D (5,0)
738070090	FRL125D (7,0)
738050080	FRL125L (5,0)
738050090	FRL125L (7,0)
738060080	FRL125U (5,0)
738060090	FRL125U (7,0)
738450080	FRL125Q (5,0)
738450090	FRL125Q (7,0)
738460080	FRL125E (5,0)
738460090	FRL125E (7,0)
738470080	FRL125B (5,0)
738470090	FRL125B (7,0)
738480080	FRL125K (5,0)
738480090	FRL125K (7,0)
738490080	FRL125Y (5,0)
738490090	FRL125Y (7,0)
738490080	FRL125W (5,0)
738490090	FRL125W (7,0)
738010000	FRL150R (5,0)
738010010	FRL150R (7,0)
734050000	FRL150H (5,0)

734050100	FRL150H (7,0)
738030000	FRL150J (5,0)
738030010	FRL150J (7,0)
734070000	FRL150T (5,0)
734070100	FRL150T (7,0)
734090000	FRL150O (5,0)
734090100	FRL150O (7,0)
738090000	FRL150S (5,0)
738090010	FRL150S (7,0)
734110000	FRL150X (5,0)
734110100	FRL150X (7,0)
734130000	FRL150A (5,0)
734130100	FRL150A (7,0)
734150000	FRL150D (5,0)
734150100	FRL150D (7,0)
734170000	FRL150L (5,0)
734170100	FRL150L (7,0)
734190000	FRL150U (5,0)
734190100	FRL150U (7,0)
738450100	FRL150Q (5,0)
738450200	FRL150Q (7,0)
738460100	FRL150E (5,0)
738460200	FRL150E (7,0)
738470100	FRL150B (5,0)
738470200	FRL150B (7,0)
738480100	FRL150K (5,0)
738480200	FRL150K (7,0)
738490100	FRL150Y (5,0)
738490200	FRL150Y (7,0)
738490100	FRL150W (5,0)
738490110	FRL150W (7,0)
738020000	FRL180R (5,0)
738020010	FRL180R (7,0)
734060000	FRL180H (5,0)
734060100	FRL180H (7,0)
738040000	FRL180J (5,0)
738040010	FRL180J (7,0)
734080000	FRL180T (5,0)
734080100	FRL180T (7,0)
734100000	FRL180O (5,0)

734100100	FRL180O (7,0)
738090020	FRL180S (5,0)
738090030	FRL180S (7,0)
734120000	FRL180X (5,0)
734120100	FRL180X (7,0)
734140000	FRL180A (5,0)
734140100	FRL180A (7,0)
734160000	FRL180D (5,0)
734160100	FRL180D (7,0)
734180000	FRL180L (5,0)
734180100	FRL180L (7,0)
734200000	FRL180U (5,0)
734200100	FRL180U (7,0)
738450300	FRL180Q (5,0)
738450400	FRL180Q (7,0)
738460300	FRL180E (5,0)
738460400	FRL180E (7,0)
738470300	FRL180B (5,0)
738470400	FRL180B (7,0)
738480300	FRL180K (5,0)
738480400	FRL180K (7,0)
738490300	FRL180Y (5,0)
738490400	FRL180Y (7,0)
738490120	FRL180W (5,0)
738490130	FRL180W (7,0)

▪ **FAD**

Código	Modelo
731100000	FAD44,5R (5,0)
731100001	FAD44,5R (7,0)
731150000	FAD44,5H (5,0)
731150001	FAD44,5H (7,0)
731200000	FAD44,5J (5,0)
731200001	FAD44,5J (7,0)
731250000	FAD44,5T (5,0)
731250001	FAD44,5T (7,0)
731300000	FAD44,5O (5,0)
731300001	FAD44,5O (7,0)
731350000	FAD44,5S (5,0)

731350001	FAD44,5S (7,0)
734330000	FAD44,5X (5,0)
734330100	FAD44,5X (7,0)
734400000	FAD44,5A (5,0)
734400100	FAD44,5A (7,0)
734470000	FAD44,5D (5,0)
734470100	FAD44,5D (7,0)
734540000	FAD44,5L (5,0)
734540100	FAD44,5L (7,0)
734610000	FAD44,5U (5,0)
734610100	FAD44,5U (7,0)
738500000	FAD44,5Q (5,0)
738500010	FAD44,5Q (7,0)
738510000	FAD44,5E (5,0)
738510010	FAD44,5E (7,0)
738520000	FAD44,5B (5,0)
738520010	FAD44,5B (7,0)
738530000	FAD44,5K (5,0)
738530010	FAD44,5K (7,0)
738540000	FAD44,5Y (5,0)
738540010	FAD44,5Y (7,0)
738900000	FAD44,5Y (5,0)
738900010	FAD44,5Y (7,0)
731110000	FAD55R (5,0)
731110001	FAD55R (7,0)
731160000	FAD55H (5,0)
731160001	FAD55H (7,0)
731210000	FAD55J (5,0)
731210001	FAD55J (7,0)
731260000	FAD55T (5,0)
731260001	FAD55T (7,0)
731310000	FAD55O (5,0)
731310001	FAD55O (7,0)
731360000	FAD55S (5,0)
731360001	FAD55S (7,0)
734340000	FAD55X (5,0)
734340100	FAD55X (7,0)
734410000	FAD55A (5,0)
734410100	FAD55A (7,0)
734480000	FAD55D (5,0)

734480100	FAD55D (7,0)
734550000	FAD55L (5,0)
734550100	FAD55L (7,0)
734620000	FAD55U (5,0)
734620100	FAD55U (7,0)
738500020	FAD55Q (5,0)
738500030	FAD55Q (7,0)
738510020	FAD55E (5,0)
738510030	FAD55E (7,0)
738520020	FAD55B (5,0)
738520030	FAD55B (7,0)
738530020	FAD55K (5,0)
738530030	FAD55K (7,0)
738540020	FAD55Y (5,0)
738540030	FAD55Y (7,0)
738900020	FAD55Y (5,0)
738900030	FAD55Y (7,0)
731120000	FAD70R (5,0)
731120001	FAD70R (7,0)
731170000	FAD70H (5,0)
731170001	FAD70H (7,0)
731220000	FAD70J (5,0)
731220001	FAD70J (7,0)
731270000	FAD70T (5,0)
731270001	FAD70T (7,0)
731320000	FAD70O (5,0)
731320001	FAD70O (7,0)
731370000	FAD70S (5,0)
731370001	FAD70S (7,0)
734350000	FAD70X (5,0)
734350100	FAD70X (7,0)
734420000	FAD70A (5,0)
734420100	FAD70A (7,0)
734490000	FAD70D (5,0)
734490100	FAD70D (7,0)
734560000	FAD70L (5,0)
734560100	FAD70L (7,0)
734630000	FAD70U (5,0)
734630100	FAD70U (7,0)
738500040	FAD70Q (5,0)

738500050	FAD70Q (7,0)
738510040	FAD70E (5,0)
738510050	FAD70E (7,0)
738520040	FAD70B (5,0)
738520050	FAD70B (7,0)
738530040	FAD70K (5,0)
738530050	FAD70K (7,0)
738540040	FAD70Y (5,0)
738540050	FAD70Y (7,0)
738900040	FAD70Y (5,0)
738900050	FAD70Y (7,0)
731130000	FAD95R (5,0)
731130001	FAD95R (7,0)
731180000	FAD95H (5,0)
731180001	FAD95H (7,0)
731230000	FAD95J (5,0)
731230001	FAD95J (7,0)
731280000	FAD95T (5,0)
731280001	FAD95T (7,0)
731330000	FAD95O (5,0)
731330001	FAD95O (7,0)
731380000	FAD95S (5,0)
731380001	FAD95S (7,0)
734360000	FAD95X (5,0)
734360100	FAD95X (7,0)
734430000	FAD95A (5,0)
734430100	FAD95A (7,0)
734500000	FAD95D (5,0)
734500100	FAD95D (7,0)
734570000	FAD95L (5,0)
734570100	FAD95L (7,0)
734640000	FAD95U (5,0)
734640100	FAD95U (7,0)
738500060	FAD95Q (5,0)
738500070	FAD95Q (7,0)
738510060	FAD95E (5,0)
738510070	FAD95E (7,0)
738520060	FAD95B (5,0)
738520070	FAD95B (7,0)
738530060	FAD95K (5,0)

738530070	FAD95K (7,0)
738540060	FAD95Y (5,0)
738540070	FAD95Y (7,0)
738900060	FAD95Y (5,0)
738900070	FAD95Y (7,0)
731140000	FAD125R (5,0)
731140001	FAD125R (7,0)
731190000	FAD125H (5,0)
731190001	FAD125H (7,0)
731240000	FAD125J (5,0)
731240001	FAD125J (7,0)
731290000	FAD125T (5,0)
731290001	FAD125T (7,0)
731340000	FAD125O (5,0)
731340001	FAD125O (7,0)
731390000	FAD125S (5,0)
731390001	FAD125S (7,0)
734370000	FAD125X (5,0)
734370100	FAD125X (7,0)
734440000	FAD125A (5,0)
734440100	FAD125A (7,0)
734510000	FAD125D (5,0)
734510100	FAD125D (7,0)
734580000	FAD125L (5,0)
734580100	FAD125L (7,0)
734650000	FAD125U (5,0)
734650100	FAD125U (7,0)
738500080	FAD125Q (5,0)
738500090	FAD125Q (7,0)
738510080	FAD125E (5,0)
738510090	FAD125E (7,0)
738520080	FAD125B (5,0)
738520090	FAD125B (7,0)
738530080	FAD125K (5,0)
738530090	FAD125K (7,0)
738540080	FAD125Y (5,0)
738540090	FAD125Y (7,0)
738900080	FAD125Y (5,0)
738900090	FAD125Y (7,0)
734210000	FAD150R (5,0)

734210100	FAD150R (7,0)
734230000	FAD150H (5,0)
734230100	FAD150H (7,0)
734250000	FAD150J (5,0)
734250100	FAD150J (7,0)
734270000	FAD150T (5,0)
734270100	FAD150T (7,0)
734290000	FAD150O (5,0)
734290100	FAD150O (7,0)
734310000	FAD150S (5,0)
734310100	FAD150S (7,0)
734380000	FAD150X (5,0)
734380100	FAD150X (7,0)
734450000	FAD150A (5,0)
734450100	FAD150A (7,0)
734520000	FAD150D (5,0)
734520100	FAD150D (7,0)
734590000	FAD150L (5,0)
734590100	FAD150L (7,0)
734660000	FAD150U (5,0)
734660100	FAD150U (7,0)
738500100	FAD150Q (5,0)
738500110	FAD150Q (7,0)
738510100	FAD150E (5,0)
738510110	FAD150E (7,0)
738520100	FAD150B (5,0)
738520110	FAD150B (7,0)
738530100	FAD150K (5,0)
738530110	FAD150K (7,0)
738540100	FAD150Y (5,0)
738540110	FAD150Y (7,0)
738900100	FAD150Y (5,0)
738900110	FAD150Y (7,0)
734220000	FAD180R (5,0)
734220100	FAD180R (7,0)
734240000	FAD180H (5,0)
734240100	FAD180H (7,0)
734260000	FAD180J (5,0)
734260100	FAD180J (7,0)
734280000	FAD180T (5,0)

734280100	FAD180T (7,0)
734300000	FAD180O (5,0)
734300100	FAD180O (7,0)
734320000	FAD180S (5,0)
734320100	FAD180S (7,0)
734390000	FAD180X (5,0)
734390100	FAD180X (7,0)
734460000	FAD180A (5,0)
734460100	FAD180A (7,0)
734530000	FAD180D (5,0)
734530100	FAD180D (7,0)
734600000	FAD180L (5,0)
734600100	FAD180L (7,0)
734670000	FAD180U (5,0)
734670100	FAD180U (7,0)
738500120	FAD180Q (5,0)
738500130	FAD180Q (7,0)
738510120	FAD180E (5,0)
738510130	FAD180E (7,0)
738520120	FAD180B (5,0)
738520130	FAD180B (7,0)
738530120	FAD180K (5,0)
738530130	FAD180K (7,0)
738540120	FAD180Y (5,0)
738540130	FAD180Y (7,0)
738900120	FAD180Y (5,0)
738900130	FAD180Y (7,0)

▪ **BCL**

Código	Modelo
731400000	BCL44,5R (2,1)
731450000	BCL44,5H (2,1)
731500000	BCL44,5J (2,1)
731550000	BCL44,5T (2,1)
731600000	BCL44,5O (2,1)
731650000	BCL44,5S (2,1)
734800000	BCL44,5X (2,1)
734870000	BCL44,5A (2,1)
734940000	BCL44,5D (2,1)

735010000	BCL44,5L (2,1)
735080000	BCL44,5U (2,1)
738550000	BCL44,5Q (2,1)
738560000	BCL44,5E (2,1)
738570000	BCL44,5B (2,1)
738580000	BCL44,5K (2,1)
738590000	BCL44,5Y (2,1)
738910000	BCL44,5W (2,1)
731410000	BCL55R (2,1)
731460000	BCL55H (2,1)
731510000	BCL55J (2,1)
731560000	BCL55T (2,1)
731610000	BCL55O (2,1)
731660000	BCL55S (2,1)
734810000	BCL55X (2,1)
734880000	BCL55A (2,1)
734950000	BCL55D (2,1)
735020000	BCL55L (2,1)
735090000	BCL55U (2,1)
738550010	BCL55Q (2,1)
738560010	BCL55E (2,1)
738570010	BCL55B (2,1)
738580010	BCL55K (2,1)
738590010	BCL55Y (2,1)
738910010	BCL55W (2,1)
731420000	BCL70R (2,1)
731470000	BCL70H (2,1)
731520000	BCL70J (2,1)
731570000	BCL70T (2,1)
731620000	BCL70O (2,1)
731670000	BCL70S (2,1)
734820000	BCL70X (2,1)
734890000	BCL70A (2,1)
734960000	BCL70D (2,1)
735030000	BCL70L (2,1)
735100000	BCL70U (2,1)
738550020	BCL70Q (2,1)
738560020	BCL70E (2,1)
738570020	BCL70B (2,1)

738580020	BCL70K (2,1)
738590020	BCL70Y (2,1)
738910020	BCL70W (2,1)
731430000	BCL95R (2,1)
731480000	BCL95H (2,1)
731530000	BCL95J (2,1)
731580000	BCL95T (2,1)
731630000	BCL95O (2,1)
731680000	BCL95S (2,1)
734830000	BCL95X (2,1)
734900000	BCL95A (2,1)
734970000	BCL95D (2,1)
735040000	BCL95L (2,1)
735110000	BCL95U (2,1)
738550030	BCL95Q (2,1)
738560030	BCL95E (2,1)
738570030	BCL95B (2,1)
738580030	BCL95K (2,1)
738590030	BCL95Y (2,1)
738910030	BCL95W (2,1)
731440000	BCL125R (2,1)
731490000	BCL125H (2,1)
731540000	BCL125J (2,1)
731590000	BCL125T (2,1)
731640000	BCL125O (2,1)
731690000	BCL125S (2,1)
734840000	BCL125X (2,1)
734910000	BCL125A (2,1)
734980000	BCL125D (2,1)
735050000	BCL125L (2,1)
735120000	BCL125U (2,1)
738550040	BCL125Q (2,1)
738560040	BCL125E (2,1)
738570040	BCL125B (2,1)
738580040	BCL125K (2,1)
738590040	BCL125Y (2,1)
738910040	BCL125W (2,1)
734680000	BCL150R (2,1)
734700000	BCL150H (2,1)
734720000	BCL150J (2,1)

734740000	BCL150T (2,1)
734760000	BCL150O (2,1)
734780000	BCL150S (2,1)
734850000	BCL150X (2,1)
734920000	BCL150A (2,1)
734990000	BCL150D (2,1)
735060000	BCL150L (2,1)
735130000	BCL150U (2,1)
738550050	BCL150Q (2,1)
738560050	BCL150E (2,1)
738570050	BCL150B (2,1)
738580050	BCL150K (2,1)
738590050	BCL150Y (2,1)
738910050	BCL150W (2,1)
734690000	BCL180R (2,1)
734710000	BCL180H (2,1)
734730000	BCL180J (2,1)
734750000	BCL180T (2,1)
734770000	BCL180O (2,1)
734790000	BCL180S (2,1)
734860000	BCL180X (2,1)
734930000	BCL180A (2,1)
735000000	BCL180D (2,1)
735070000	BCL180L (2,1)
735140000	BCL180U (2,1)
738550060	BCL180Q (2,1)
738560060	BCL180E (2,1)
738570060	BCL180B (2,1)
738580060	BCL180K (2,1)
738590060	BCL180Y (2,1)
738910060	BCL180W (2,1)

▪ ENT

Código	Modelo
731700000	ENT44,5R (4,0)
731700001	ENT44,5R (4,5)
731700002	ENT44,5R (6,0)
731740000	ENT44,5H (4,0)
731740001	ENT44,5H (4,5)

731740002	ENT44,5H (6,0)
731780000	ENT44,5J (4,0)
731780001	ENT44,5J (4,5)
731780002	ENT44,5J (6,0)
731820000	ENT44,5T (4,0)
731820001	ENT44,5T (4,5)
731820002	ENT44,5T (6,0)
731860000	ENT44,5O (4,0)
731860001	ENT44,5O (4,5)
731860002	ENT44,5O (6,0)
731900000	ENT44,5S (4,0)
731900001	ENT44,5S (4,5)
731900002	ENT44,5S (6,0)
735270000	ENT44,5X (4,0)
735270100	ENT44,5X (4,5)
735270200	ENT44,5X (6,0)
735330000	ENT44,5A (4,0)
735330100	ENT44,5A (4,5)
735330200	ENT44,5A (6,0)
735390000	ENT44,5D (4,0)
735390100	ENT44,5D (4,5)
735390200	ENT44,5D (6,0)
735450000	ENT44,5L (4,0)
735450100	ENT44,5L (4,5)
735450200	ENT44,5L (6,0)
735510000	ENT44,5U (4,0)
735510100	ENT44,5U (4,5)
735510200	ENT44,5U (6,0)
738600000	ENT44,5Q (4,0)
738600010	ENT44,5Q (4,5)
738600020	ENT44,5Q (6,0)
738610000	ENT44,5E (4,0)
738610010	ENT44,5E (4,5)
738610020	ENT44,5E (6,0)
738620000	ENT44,5B (4,0)
738620010	ENT44,5B (4,5)
738620020	ENT44,5B (6,0)
738630000	ENT44,5K (4,0)
738630010	ENT44,5K (4,5)

738630020	ENT44,5K (6,0)
738640000	ENT44,5Y (4,0)
738640010	ENT44,5Y (4,5)
738640020	ENT44,5Y (6,0)
738920000	ENT44,5W (4,0)
738920010	ENT44,5W (4,5)
738920020	ENT44,5W (6,0)
731710000	ENT55R (4,0)
731710001	ENT55R (4,5)
731710002	ENT55R (6,0)
731750000	ENT55H (4,0)
731750001	ENT55H (4,5)
731750002	ENT55H (6,0)
731790000	ENT55J (4,0)
731790001	ENT55J (4,5)
731790002	ENT55J (6,0)
731830000	ENT55T (4,0)
731830001	ENT55T (4,5)
731830002	ENT55T (6,0)
731870000	ENT55O (4,0)
731870001	ENT55O (4,5)
731870002	ENT55O (6,0)
731910000	ENT55S (4,0)
731910001	ENT55S (4,5)
731910002	ENT55S (6,0)
735280000	ENT55X (4,0)
735280100	ENT55X (4,5)
735280200	ENT55X (6,0)
735340000	ENT55A (4,0)
735340100	ENT55A (4,5)
735340200	ENT55A (6,0)
735400000	ENT55D (4,0)
735400100	ENT55D (4,5)
735400200	ENT55D (6,0)
735460000	ENT55L (4,0)
735460100	ENT55L (4,5)
735460200	ENT55L (6,0)
735520000	ENT55U (4,0)
735520100	ENT55U (4,5)
735520200	ENT55U (6,0)

738600030	ENT55Q (4,0)
738600040	ENT55Q (4,5)
738600050	ENT55Q (6,0)
738610030	ENT55E (4,0)
738610040	ENT55E (4,5)
738610050	ENT55E (6,0)
738620030	ENT55B (4,0)
738620040	ENT55B (4,5)
738620050	ENT55B (6,0)
738630030	ENT55K (4,0)
738630040	ENT55K (4,5)
738630050	ENT55K (6,0)
738640030	ENT55Y (4,0)
738640040	ENT55Y (4,5)
738640050	ENT55Y (6,0)
738920030	ENT55W (4,0)
738920040	ENT55W (4,5)
738920050	ENT55W (6,0)
731720000	ENT70R (4,0)
731720001	ENT70R (4,5)
731720002	ENT70R (6,0)
731760000	ENT70H (4,0)
731760001	ENT70H (4,5)
731760002	ENT70H (6,0)
731800000	ENT70J (4,0)
731800001	ENT70J (4,5)
731800002	ENT70J (6,0)
731840000	ENT70T (4,0)
731840001	ENT70T (4,5)
731840002	ENT70T (6,0)
731880000	ENT70O (4,0)
731880001	ENT70O (4,5)
731880002	ENT70O (6,0)
731920000	ENT70S (4,0)
731920001	ENT70S (4,5)
731920002	ENT70S (6,0)
735290000	ENT70X (4,0)
735290100	ENT70X (4,5)
735290200	ENT70X (6,0)
735350000	ENT70A (4,0)

735350100	ENT70A (4,5)
735350200	ENT70A (6,0)
735410000	ENT70D (4,0)
735410100	ENT70D (4,5)
735410200	ENT70D (6,0)
735470000	ENT70L (4,0)
735470100	ENT70L (4,5)
735470200	ENT70L (6,0)
735530000	ENT70U (4,0)
735530100	ENT70U (4,5)
735530200	ENT70U (6,0)
738600060	ENT70Q (4,0)
738600070	ENT70Q (4,5)
738600080	ENT70Q (6,0)
738610060	ENT70E (4,0)
738610070	ENT70E (4,5)
738610080	ENT70E (6,0)
738620060	ENT70B (4,0)
738620070	ENT70B (4,5)
738620080	ENT70B (6,0)
738630060	ENT70K (4,0)
738630070	ENT70K (4,5)
738630080	ENT70K (6,0)
738640060	ENT70Y (4,0)
738640070	ENT70Y (4,5)
738640080	ENT70Y (6,0)
738920060	ENT70W (4,0)
738920070	ENT70W (4,5)
738920080	ENT70W (6,0)
731730000	ENT95R (4,0)
731730001	ENT95R (4,5)
731730002	ENT95R (6,0)
731770000	ENT95H (4,0)
731770001	ENT95H (4,5)
731770002	ENT95H (6,0)
731810000	ENT95J (4,0)
731810001	ENT95J (4,5)
731810002	ENT95J (6,0)
731850000	ENT95T (4,0)
731850001	ENT95T (4,5)

731850002	ENT95T (6,0)
731890000	ENT95O (4,0)
731890001	ENT95O (4,5)
731890002	ENT95O (6,0)
731930000	ENT95S (4,0)
731930001	ENT95S (4,5)
731930002	ENT95S (6,0)
735300000	ENT95X (4,0)
735300100	ENT95X (4,5)
735300200	ENT95X (6,0)
735360000	ENT95A (4,0)
735360100	ENT95A (4,5)
735360200	ENT95A (6,0)
735420000	ENT95D (4,0)
735420100	ENT95D (4,5)
735420200	ENT95D (6,0)
735480000	ENT95L (4,0)
735480100	ENT95L (4,5)
735480200	ENT95L (6,0)
735540000	ENT95U (4,0)
735540100	ENT95U (4,5)
735540200	ENT95U (6,0)
738600090	ENT95Q (4,0)
738600100	ENT95Q (4,5)
738600110	ENT95Q (6,0)
738610090	ENT95E (4,0)
738610100	ENT95E (4,5)
738610110	ENT95E (6,0)
738620090	ENT95B (4,0)
738620100	ENT95B (4,5)
738620110	ENT95B (6,0)
738630090	ENT95K (4,0)
738630100	ENT95K (4,5)
738630110	ENT95K (6,0)
738640090	ENT95Y (4,0)
738640100	ENT95Y (4,5)
738640110	ENT95Y (6,0)
738920090	ENT95W (4,0)
738920100	ENT95W (4,5)
738920110	ENT95W (6,0)

735150000	ENT150R (4,0)
735150100	ENT150R (4,5)
735150200	ENT150R (6,0)
735170000	ENT150H (4,0)
735170100	ENT150H (4,5)
735170200	ENT150H (6,0)
735190000	ENT150J (4,0)
735190100	ENT150J (4,5)
735190200	ENT150J (6,0)
735210000	ENT150T (4,0)
735210100	ENT150T (4,5)
735210200	ENT150T (6,0)
735230000	ENT150O (4,0)
735230100	ENT150O (4,5)
735230200	ENT150O (6,0)
735250000	ENT150S (4,0)
735250100	ENT150S (4,5)
735250200	ENT150S (6,0)
735310000	ENT150X (4,0)
735310100	ENT150X (4,5)
735310200	ENT150X (6,0)
735370000	ENT150A (4,0)
735370100	ENT150A (4,5)
735370200	ENT150A (6,0)
735430000	ENT150D (4,0)
735430100	ENT150D (4,5)
735430200	ENT150D (6,0)
735490000	ENT150L (4,0)
735490100	ENT150L (4,5)
735490200	ENT150L (6,0)
735550000	ENT150U (4,0)
735550100	ENT150U (4,5)
735550200	ENT150U (6,0)
738600120	ENT150Q (4,0)
738600130	ENT150Q (4,5)
738600140	ENT150Q (6,0)
738610120	ENT150E (4,0)
738610130	ENT150E (4,5)
738610140	ENT150E (6,0)
738620120	ENT150B (4,0)

738620130	ENT150B (4,5)
738620140	ENT150B (6,0)
738630120	ENT150K (4,0)
738630130	ENT150K (4,5)
738630140	ENT150K (6,0)
738640120	ENT150Y (4,0)
738640130	ENT150Y (4,5)
738640140	ENT150Y (6,0)
738920120	ENT150W (4,0)
738920130	ENT150W (4,5)
738920140	ENT150W (6,0)
735160000	ENT180R (4,0)
735160100	ENT180R (4,5)
735160200	ENT180R (6,0)
735180000	ENT180H (4,0)
735180100	ENT180H (4,5)
735180200	ENT180H (6,0)
735200000	ENT180J (4,0)
735200100	ENT180J (4,5)
735200200	ENT180J (6,0)
735220000	ENT180T (4,0)
735220100	ENT180T (4,5)
735220200	ENT180T (6,0)
735240000	ENT180O (4,0)
735240100	ENT180O (4,5)
735240200	ENT180O (6,0)
735260000	ENT180S (4,0)
735260100	ENT180S (4,5)
735260200	ENT180S (6,0)
735320000	ENT180X (4,0)
735320100	ENT180X (4,5)
735320200	ENT180X (6,0)
735380000	ENT180A (4,0)
735380100	ENT180A (4,5)
735380200	ENT180A (6,0)
735440000	ENT180D (4,0)
735440100	ENT180D (4,5)
735440200	ENT180D (6,0)
735500000	ENT180L (4,0)
735500100	ENT180L (4,5)

735500200	ENT180L (6,0)
735560000	ENT180U (4,0)
735560100	ENT180U (4,5)
735560200	ENT180U (6,0)
738600150	ENT180Q (4,0)
738600160	ENT180Q (4,5)
738600170	ENT180Q (6,0)
738610150	ENT180E (4,0)
738610160	ENT180E (4,5)
738610170	ENT180E (6,0)
738620150	ENT180B (4,0)
738620160	ENT180B (4,5)
738620170	ENT180B (6,0)
738630150	ENT180K (4,0)
738630160	ENT180K (4,5)
738630170	ENT180K (6,0)
738640150	ENT180Y (4,0)
738640160	ENT180Y (4,5)
738640170	ENT180Y (6,0)
738920150	ENT180W (4,0)
738920160	ENT180W (4,5)
738920170	ENT180W (6,0)

▪ **RAZ**

Código	Modelo
738310040	RAZ44,5R (1,2)
731940000	RAZ44,5R (1,5)
738310050	RAZ44,5R (1,6)
731940001	RAZ44,5R (1,8)
731940002	RAZ44,5R (2,1)
731940003	RAZ44,5R (2,5)
738310060	RAZ55R (1,2)
731950000	RAZ55R (1,5)
738310070	RAZ55R (1,6)
731950001	RAZ55R (1,8)
731950002	RAZ55R (2,1)
731950003	RAZ55R (2,5)
738310080	RAZ65R (1,2)
738310090	RAZ65R (1,5)

738310100	RAZ65R (1,6)
738310110	RAZ65R (1,8)
738310120	RAZ65R (2,1)
738310130	RAZ65R (2,5)
731960000	RAZ70R (1,5)
731960001	RAZ70R (1,8)
731960002	RAZ70R (2,1)
731960003	RAZ70R (2,5)
731970000	RAZ95R (1,5)
731970001	RAZ95R (1,8)
731970002	RAZ95R (2,1)
731970003	RAZ95R (2,5)
738310000	RAZ115R (1,5)
738310010	RAZ115R (1,8)
738310020	RAZ115R (2,1)
738310030	RAZ115R (2,5)
731980000	RAZ125R (1,5)
731980001	RAZ125R (1,8)
731980002	RAZ125R (2,1)
731980003	RAZ125R (2,5)
735570000	RAZ150R (1,5)
735570100	RAZ150R (1,8)
735570200	RAZ150R (2,1)
735570300	RAZ150R (2,5)
735580000	RAZ180R (1,5)
735580100	RAZ180R (1,8)
735580200	RAZ180R (2,1)
735580300	RAZ180R (2,5)
738300040	RAZ44,5H (1,2)
731990000	RAZ44,5H (1,5)
738300050	RAZ44,5H (1,6)
731990001	RAZ44,5H (1,8)
731990002	RAZ44,5H (2,1)
731990003	RAZ44,5H (2,5)
738300060	RAZ55H (1,2)
732000000	RAZ55H (1,5)
738300070	RAZ55H (1,6)
732000001	RAZ55H (1,8)
732000002	RAZ55H (2,1)

732000003	RAZ55H (2,5)
738300080	RAZ65H (1,2)
738300090	RAZ65H (1,5)
738300100	RAZ65H (1,6)
738300110	RAZ65H (1,8)
738300120	RAZ65H (2,1)
738300130	RAZ65H (2,5)
732010000	RAZ70H (1,5)
732010001	RAZ70H (1,8)
732010002	RAZ70H (2,1)
732010003	RAZ70H (2,5)
732020000	RAZ95H (1,5)
732020001	RAZ95H (1,8)
732020002	RAZ95H (2,1)
732020003	RAZ95H (2,5)
738300000	RAZ115H (1,5)
738300010	RAZ115H (1,8)
738300020	RAZ115H (2,1)
738300030	RAZ115H (2,5)
732030000	RAZ125H (1,5)
732030001	RAZ125H (1,8)
732030002	RAZ125H (2,1)
732030003	RAZ125H (2,5)
735590000	RAZ150H (1,5)
735590100	RAZ150H (1,8)
735590200	RAZ150H (2,1)
735590300	RAZ150H (2,5)
735600000	RAZ180H (1,5)
735600100	RAZ180H (1,8)
735600200	RAZ180H (2,1)
735600300	RAZ180H (2,5)
738290040	RAZ44,5J (1,2)
732040000	RAZ44,5J (1,5)
738290050	RAZ44,5J (1,6)
732040001	RAZ44,5J (1,8)
732040002	RAZ44,5J (2,1)
732040003	RAZ44,5J (2,5)
738290060	RAZ55J (1,2)
732050000	RAZ55J (1,5)
738290070	RAZ55J (1,6)

732050001	RAZ55J (1,8)
732050002	RAZ55J (2,1)
732050003	RAZ55J (2,5)
738290080	RAZ65J (1,2)
738290090	RAZ65J (1,5)
738290100	RAZ65J (1,6)
738290110	RAZ65J (1,8)
738290120	RAZ65J (2,1)
738290130	RAZ65J (2,5)
732060000	RAZ70J (1,5)
732060001	RAZ70J (1,8)
732060002	RAZ70J (2,1)
732060003	RAZ70J (2,5)
732070000	RAZ95J (1,5)
732070001	RAZ95J (1,8)
732070002	RAZ95J (2,1)
732070003	RAZ95J (2,5)
738290000	RAZ115J (1,5)
738290010	RAZ115J (1,8)
738290020	RAZ115J (2,1)
738290030	RAZ115J (2,5)
732080000	RAZ125J (1,5)
732080001	RAZ125J (1,8)
732080002	RAZ125J (2,1)
732080003	RAZ125J (2,5)
735610000	RAZ150J (1,5)
735610100	RAZ150J (1,8)
735610200	RAZ150J (2,1)
735610300	RAZ150J (2,5)
735620000	RAZ180J (1,5)
735620100	RAZ180J (1,8)
735620200	RAZ180J (2,1)
735620300	RAZ180J (2,5)
738320040	RAZ44,5T (1,2)
732090000	RAZ44,5T (1,5)
738320050	RAZ44,5T (1,6)
732090001	RAZ44,5T (1,8)
732090002	RAZ44,5T (2,1)
732090003	RAZ44,5T (2,5)
738320060	RAZ55T (1,2)

732100000	RAZ55T (1,5)
738320070	RAZ55T (1,6)
732100001	RAZ55T (1,8)
732100002	RAZ55T (2,1)
732100003	RAZ55T (2,5)
738320080	RAZ65T (1,5)
738320090	RAZ65T (1,5)
738320100	RAZ65T (1,5)
738320110	RAZ65T (1,8)
738320120	RAZ65T (2,1)
738320130	RAZ65T (2,5)
732110000	RAZ70T (1,5)
732110001	RAZ70T (1,8)
732110002	RAZ70T (2,1)
732110003	RAZ70T (2,5)
732120000	RAZ95T (1,5)
732120001	RAZ95T (1,8)
732120002	RAZ95T (2,1)
732120003	RAZ95T (2,5)
738320000	RAZ115T (1,5)
738320010	RAZ115T (1,8)
738320020	RAZ115T (2,1)
738320030	RAZ115T (2,5)
732130000	RAZ125T (1,5)
732130001	RAZ125T (1,8)
732130002	RAZ125T (2,1)
732130003	RAZ125T (2,5)
735630000	RAZ150T (1,5)
735630100	RAZ150T (1,8)
735630200	RAZ150T (2,1)
735630300	RAZ150T (2,5)
735640000	RAZ180T (1,5)
735640100	RAZ180T (1,8)
735640200	RAZ180T (2,1)
735640300	RAZ180T (2,5)
738220040	RAZ44,5O (1,2)
732140000	RAZ44,5O (1,5)
738220050	RAZ44,5O (1,6)
732140001	RAZ44,5O (1,8)
732140002	RAZ44,5O (2,1)

732140003	RAZ44,5O (2,5)
738220060	RAZ55O (1,2)
732150000	RAZ55O (1,5)
738220070	RAZ55O (1,6)
732150001	RAZ55O (1,8)
732150002	RAZ55O (2,1)
732150003	RAZ55O (2,5)
738220080	RAZ65O (1,2)
738220090	RAZ65O (1,5)
738220100	RAZ65O (1,6)
738220110	RAZ65O (1,8)
738220120	RAZ65O (2,1)
738220130	RAZ65O (2,5)
732160000	RAZ70O (1,5)
732160001	RAZ70O (1,8)
732160002	RAZ70O (2,1)
732160003	RAZ70O (2,5)
732170000	RAZ95O (1,5)
732170001	RAZ95O (1,8)
732170002	RAZ95O (2,1)
732170003	RAZ95O (2,5)
738220000	RAZ115O (1,5)
738220010	RAZ115O (1,8)
738220020	RAZ115O (2,1)
738220030	RAZ115O (2,5)
732180000	RAZ125O (1,5)
732180001	RAZ125O (1,8)
732180002	RAZ125O (2,1)
732180003	RAZ125O (2,5)
735650000	RAZ150O (1,5)
735650100	RAZ150O (1,8)
735650200	RAZ150O (2,1)
735650300	RAZ150O (2,5)
735660000	RAZ180O (1,5)
735660100	RAZ180O (1,8)
735660200	RAZ180O (2,1)
735660300	RAZ180O (2,5)
738250040	RAZ44,5S (1,2)
732190000	RAZ44,5S (1,5)
738250050	RAZ44,5S (1,6)

732190001	RAZ44,5S (1,8)
732190002	RAZ44,5S (2,1)
732190003	RAZ44,5S (2,5)
738250060	RAZ55S (1,2)
732200000	RAZ55S (1,5)
738250070	RAZ55S (1,6)
732200001	RAZ55S (1,8)
732200002	RAZ55S (2,1)
732200003	RAZ55S (2,5)
738250080	RAZ65S (1,2)
738250090	RAZ65S (1,5)
738250100	RAZ65S (1,6)
738250110	RAZ65S (1,8)
738250120	RAZ65S (2,1)
738250130	RAZ65S (2,5)
732210000	RAZ70S (1,5)
732210001	RAZ70S (1,8)
732210002	RAZ70S (2,1)
732210003	RAZ70S (2,5)
732220000	RAZ95S (1,5)
732220001	RAZ95S (1,8)
732220002	RAZ95S (2,1)
732220003	RAZ95S (2,5)
738250000	RAZ115S (1,5)
738250010	RAZ115S (1,8)
738250020	RAZ115S (2,1)
738250030	RAZ115S (2,5)
732230000	RAZ125S (1,5)
732230001	RAZ125S (1,8)
732230002	RAZ125S (2,1)
732230003	RAZ125S (2,5)
735670000	RAZ150S (1,5)
735670100	RAZ150S (1,8)
735670200	RAZ150S (2,1)
735670300	RAZ150S (2,5)
735680000	RAZ180S (1,5)
735680100	RAZ180S (1,8)
735680200	RAZ180S (2,1)
735680300	RAZ180S (2,5)
738260040	RAZ44,5X (1,2)

735690000	RAZ44,5X (1,5)
738260050	RAZ44,5X (1,6)
735690100	RAZ44,5X (1,8)
735690200	RAZ44,5X (2,1)
735690300	RAZ44,5X (2,5)
738260060	RAZ55X (1,2)
735700000	RAZ55X (1,5)
738260070	RAZ55X (1,6)
735700100	RAZ55X (1,8)
735700200	RAZ55X (2,1)
735700300	RAZ55X (2,5)
738260080	RAZ65X (1,2)
738260090	RAZ65X (1,5)
738260100	RAZ65X (1,6)
738260110	RAZ65X (1,8)
738260120	RAZ65X (2,1)
738260130	RAZ65X (2,5)
735710000	RAZ70X (1,5)
735710100	RAZ70X (1,8)
735710200	RAZ70X (2,1)
735710300	RAZ70X (2,5)
735720000	RAZ95X (1,5)
735720100	RAZ95X (1,8)
735720200	RAZ95X (2,1)
735720300	RAZ95X (2,5)
738260000	RAZ115X (1,5)
738260010	RAZ115X (1,8)
738260020	RAZ115X (2,1)
738260030	RAZ115X (2,5)
735730000	RAZ125X (1,5)
735730100	RAZ125X (1,8)
735730200	RAZ125X (2,1)
735730300	RAZ125X (2,5)
735740000	RAZ150X (1,5)
735740100	RAZ150X (1,8)
735740200	RAZ150X (2,1)
735740300	RAZ150X (2,5)
735750000	RAZ180X (1,5)
735750100	RAZ180X (1,8)
735750200	RAZ180X (2,1)

735750300	RAZ180X (2,5)
738270040	RAZ44,5A (1,2)
735760000	RAZ44,5A (1,5)
738270050	RAZ44,5A (1,6)
735760100	RAZ44,5A (1,8)
735760200	RAZ44,5A (2,1)
735760300	RAZ44,5A (2,5)
738270060	RAZ55A (1,2)
735770000	RAZ55A (1,5)
738270070	RAZ55A (1,6)
735770100	RAZ55A (1,8)
735770200	RAZ55A (2,1)
735770300	RAZ55A (2,5)
738270080	RAZ65A (1,2)
738270090	RAZ65A (1,5)
738270100	RAZ65A (1,6)
738270110	RAZ65A (1,8)
738270120	RAZ65A (2,1)
738270130	RAZ65A (2,5)
735780000	RAZ70A (1,5)
735780100	RAZ70A (1,8)
735780200	RAZ70A (2,1)
735780300	RAZ70A (2,5)
735790000	RAZ95A (1,5)
735790100	RAZ95A (1,8)
735790200	RAZ95A (2,1)
735790300	RAZ95A (2,5)
738270000	RAZ115A (1,5)
738270010	RAZ115A (1,8)
738270020	RAZ115A (2,1)
738270030	RAZ115A (2,5)
735800000	RAZ125A (1,5)
735800100	RAZ125A (1,8)
735800200	RAZ125A (2,1)
735800300	RAZ125A (2,5)
735810000	RAZ150A (1,5)
735810100	RAZ150A (1,8)
735810200	RAZ150A (2,1)
735810300	RAZ150A (2,5)
735820000	RAZ180A (1,5)

735820100	RAZ180A (1,8)
735820200	RAZ180A (2,1)
735820300	RAZ180A (2,5)
738280040	RAZ44,5D (1,2)
735830000	RAZ44,5D (1,5)
738280050	RAZ44,5D (1,6)
735830100	RAZ44,5D (1,8)
735830200	RAZ44,5D (2,1)
735830300	RAZ44,5D (2,5)
738280060	RAZ55D (1,2)
735840000	RAZ55D (1,5)
738280070	RAZ55D (1,8)
735840100	RAZ55D (1,8)
735840200	RAZ55D (2,1)
735840300	RAZ55D (2,5)
738280080	RAZ65D (1,2)
738280090	RAZ65D (1,5)
738280100	RAZ65D (1,8)
738280110	RAZ65D (1,8)
738280120	RAZ65D (2,1)
738280130	RAZ65D (2,5)
735850000	RAZ70D (1,5)
735850100	RAZ70D (1,8)
735850200	RAZ70D (2,1)
735850300	RAZ70D (2,5)
735860000	RAZ95D (1,5)
735860100	RAZ95D (1,8)
735860200	RAZ95D (2,1)
735860300	RAZ95D (2,5)
738280000	RAZ115D (1,5)
738280010	RAZ115D (1,8)
738280020	RAZ115D (2,1)
738280030	RAZ115D (2,5)
735870000	RAZ125D (1,5)
735870100	RAZ125D (1,8)
735870200	RAZ125D (2,1)
735870300	RAZ125D (2,5)
735880000	RAZ150D (1,5)
735880100	RAZ150D (1,8)
735880200	RAZ150D (2,1)

735880300	RAZ150D (2,5)
735890000	RAZ180D (1,5)
735890100	RAZ180D (1,8)
735890200	RAZ180D (2,1)
735890300	RAZ180D (2,5)
738230040	RAZ44,5L (1,2)
735900000	RAZ44,5L (1,5)
738230050	RAZ44,5L (1,6)
735900100	RAZ44,5L (1,8)
735900200	RAZ44,5L (2,1)
735900300	RAZ44,5L (2,5)
738230060	RAZ55L (1,2)
735910000	RAZ55L (1,5)
738230070	RAZ55L (1,6)
735910100	RAZ55L (1,8)
735910200	RAZ55L (2,1)
735910300	RAZ55L (2,5)
738230080	RAZ65L (1,2)
738230090	RAZ65L (1,5)
738230100	RAZ65L (1,6)
738230110	RAZ65L (1,8)
738230120	RAZ65L (2,1)
738230130	RAZ65L (2,5)
735920000	RAZ70L (1,5)
735920100	RAZ70L (1,8)
735920200	RAZ70L (2,1)
735920300	RAZ70L (2,5)
735930000	RAZ95L (1,5)
735930100	RAZ95L (1,8)
735930200	RAZ95L (2,1)
735930300	RAZ95L (2,5)
738230000	RAZ115L (1,5)
738230010	RAZ115L (1,8)
738230020	RAZ115L (2,1)
738230030	RAZ115L (2,5)
735940000	RAZ125L (1,5)
735940100	RAZ125L (1,8)
735940200	RAZ125L (2,1)
735940300	RAZ125L (2,5)
735950000	RAZ150L (1,5)

735950100	RAZ150L (1,8)
735950200	RAZ150L (2,1)
735950300	RAZ150L (2,5)
735960000	RAZ180L (1,5)
735960100	RAZ180L (1,8)
735960200	RAZ180L (2,1)
735960300	RAZ180L (2,5)
738240040	RAZ44,5U (1,2)
735970000	RAZ44,5U (1,5)
738240050	RAZ44,5U (1,6)
735970100	RAZ44,5U (1,8)
735970200	RAZ44,5U (2,1)
735970300	RAZ44,5U (2,5)
738240060	RAZ55U (1,2)
735980000	RAZ55U (1,5)
738240070	RAZ55U (1,6)
735980100	RAZ55U (1,8)
735980200	RAZ55U (2,1)
735980300	RAZ55U (2,5)
738240080	RAZ65U (1,2)
738240090	RAZ65U (1,5)
738240100	RAZ65U (1,6)
738240110	RAZ65U (1,8)
738240120	RAZ65U (2,1)
738240130	RAZ65U (2,5)
735990000	RAZ70U (1,5)
735990100	RAZ70U (1,8)
735990200	RAZ70U (2,1)
735990300	RAZ70U (2,5)
736000000	RAZ95U (1,5)
736000100	RAZ95U (1,8)
736000200	RAZ95U (2,1)
736000300	RAZ95U (2,5)
738240000	RAZ115U (1,5)
738240010	RAZ115U (1,8)
738240020	RAZ115U (2,1)
738240030	RAZ115U (2,5)
736010000	RAZ125U (1,5)
736010100	RAZ125U (1,8)
736010200	RAZ125U (2,1)

736010300	RAZ125U (2,5)
736020000	RAZ150U (1,5)
736020100	RAZ150U (1,8)
736020200	RAZ150U (2,1)
736020300	RAZ150U (2,5)
736030000	RAZ180U (1,5)
736030100	RAZ180U (1,8)
736030200	RAZ180U (2,1)
736030300	RAZ180U (2,5)
738650320	RAZ44,5Q (1,2)
738650000	RAZ44,5Q (1,5)
738650330	RAZ44,5Q (1,6)
738650010	RAZ44,5Q (1,8)
738650020	RAZ44,5Q (2,1)
738650030	RAZ44,5Q (2,5)
738650340	RAZ55Q (1,2)
738650040	RAZ55Q (1,5)
738650350	RAZ55Q (1,6)
738650050	RAZ55Q (1,8)
738650060	RAZ55Q (2,1)
738650070	RAZ55Q (2,5)
738650360	RAZ65Q (1,2)
738650370	RAZ65Q (1,5)
738650380	RAZ65Q (1,6)
738650390	RAZ65Q (1,8)
738650400	RAZ65Q (2,1)
738650410	RAZ65Q (2,5)
738650080	RAZ70Q (1,5)
738650090	RAZ70Q (1,8)
738650100	RAZ70Q (2,1)
738650110	RAZ70Q (2,5)
738650120	RAZ95Q (1,5)
738650130	RAZ95Q (1,8)
738650140	RAZ95Q (2,1)
738650150	RAZ95Q (2,5)
738650160	RAZ115Q (1,5)
738650170	RAZ115Q (1,8)
738650180	RAZ115Q (2,1)
738650190	RAZ115Q (2,5)
738650200	RAZ125Q (1,5)

738650210	RAZ125Q (1,8)
738650220	RAZ125Q (2,1)
738650230	RAZ125Q (2,5)
738650240	RAZ150Q (1,5)
738650250	RAZ150Q (1,8)
738650260	RAZ150Q (2,1)
738650270	RAZ150Q (2,5)
738650280	RAZ180Q (1,5)
738650290	RAZ180Q (1,8)
738650300	RAZ180Q (2,1)
738650310	RAZ180Q (2,5)
738660320	RAZ44,5E (1,2)
738660000	RAZ44,5E (1,5)
738660330	RAZ44,5E (1,6)
738660010	RAZ44,5E (1,8)
738660020	RAZ44,5E (2,1)
738660030	RAZ44,5E (2,5)
738660340	RAZ55E (1,2)
738660040	RAZ55E (1,5)
738660350	RAZ55E (1,6)
738660050	RAZ55E (1,8)
738660060	RAZ55E (2,1)
738660070	RAZ55E (2,5)
738660360	RAZ65E (1,2)
738660370	RAZ65E (1,5)
738660380	RAZ65E (1,6)
738660390	RAZ65E (1,8)
738660400	RAZ65E (2,1)
738660410	RAZ65E (2,5)
738660080	RAZ70E (1,5)
738660090	RAZ70E (1,8)
738660100	RAZ70E (2,1)
738660110	RAZ70E (2,5)
738660120	RAZ95E (1,5)
738660130	RAZ95E (1,8)
738660140	RAZ95E (2,1)
738660150	RAZ95E (2,5)
738660160	RAZ115E (1,5)
738660170	RAZ115E (1,8)
738660180	RAZ115E (2,1)

738660190	RAZ115E (2,5)
738660200	RAZ125E (1,5)
738660210	RAZ125E (1,8)
738660220	RAZ125E (2,1)
738660230	RAZ125E (2,5)
738660240	RAZ150E (1,5)
738660250	RAZ150E (1,8)
738660260	RAZ150E (2,1)
738660270	RAZ150E (2,5)
738660280	RAZ180E (1,5)
738660290	RAZ180E (1,8)
738660300	RAZ180E (2,1)
738660310	RAZ180E (2,5)
738670320	RAZ44,5B (1,2)
738670000	RAZ44,5B (1,5)
738670330	RAZ44,5B (1,6)
738670010	RAZ44,5B (1,8)
738670020	RAZ44,5B (2,1)
738670030	RAZ44,5B (2,5)
738670340	RAZ55B (1,5)
738670040	RAZ55B (1,5)
738670350	RAZ55B (1,5)
738670050	RAZ55B (1,8)
738670060	RAZ55B (2,1)
738670070	RAZ55B (2,5)
738670360	RAZ65B (1,2)
738670370	RAZ65B (1,5)
738670380	RAZ65B (1,6)
738670390	RAZ65B (1,8)
738670400	RAZ65B (2,1)
738670410	RAZ65B (2,5)
738670080	RAZ70B (1,5)
738670090	RAZ70B (1,8)
738670100	RAZ70B (2,1)
738670110	RAZ70B (2,5)
738670120	RAZ95B (1,5)
738670130	RAZ95B (1,8)
738670140	RAZ95B (2,1)
738670150	RAZ95B (2,5)

738670160	RAZ115B (1,5)
738670170	RAZ115B (1,8)
738670180	RAZ115B (2,1)
738670190	RAZ115B (2,5)
738670200	RAZ125B (1,5)
738670210	RAZ125B (1,8)
738670220	RAZ125B (2,1)
738670230	RAZ125B (2,5)
738670240	RAZ150B (1,5)
738670250	RAZ150B (1,8)
738670260	RAZ150B (2,1)
738670270	RAZ150B (2,5)
738670280	RAZ180B (1,5)
738670290	RAZ180B (1,8)
738670300	RAZ180B (2,1)
738670310	RAZ180B (2,5)
738670320	RAZ44,5K (1,2)
738680000	RAZ44,5K (1,5)
738670330	RAZ44,5K (1,6)
738680010	RAZ44,5K (1,8)
738680020	RAZ44,5K (2,1)
738680030	RAZ44,5K (2,5)
738670340	RAZ55K (1,2)
738680040	RAZ55K (1,5)
738670350	RAZ55K (1,6)
738680050	RAZ55K (1,8)
738680060	RAZ55K (2,1)
738680070	RAZ55K (2,5)
738670360	RAZ65K (1,2)
738670370	RAZ65K (1,5)
738670380	RAZ65K (1,6)
738670390	RAZ65K (1,8)
738670400	RAZ65K (2,1)
738670410	RAZ65K (2,5)
738680080	RAZ70K (1,5)
738680090	RAZ70K (1,8)
738680100	RAZ70K (2,1)
738680110	RAZ70K (2,5)
738680120	RAZ95K (1,5)

738680130	RAZ95K (1,8)
738680140	RAZ95K (2,1)
738680150	RAZ95K (2,5)
738680160	RAZ115K (1,5)
738680170	RAZ115K (1,8)
738680180	RAZ115K (2,1)
738680190	RAZ115K (2,5)
738680200	RAZ125K (1,5)
738680210	RAZ125K (1,8)
738680220	RAZ125K (2,1)
738680230	RAZ125K (2,5)
738680240	RAZ150K (1,5)
738680250	RAZ150K (1,8)
738680260	RAZ150K (2,1)
738680270	RAZ150K (2,5)
738680280	RAZ180K (1,5)
738680290	RAZ180K (1,8)
738680300	RAZ180K (2,1)
738680310	RAZ180K (2,5)

▪ BP

Código	Modelos
738120000	BP44,5R (0,9)
738120010	BP44,5R (1,0)
738120020	BP44,5R (1,1)
738120030	BP44,5R (1,2)
738120040	BP44,5R (1,3)
738120050	BP44,5R (1,4)
738120060	BP44,5R (1,5)
738120070	BP44,5R (1,6)
738120080	BP44,5R (1,7)
738120090	BP44,5R (1,8)
738120100	BP44,5R (1,9)
738120110	BP44,5R (2,0)
738120120	BP44,5R (2,1)
738120130	BP44,5R (2,2)
738120140	BP44,5R (2,3)
738120150	BP44,5R (2,7)

738120160	BP44,5R (3,2)
738120170	BP44,5R (3,5)
738120180	BP55R (0,9)
738120190	BP55R (1,0)
738120200	BP55R (1,1)
738120210	BP55R (1,2)
738120220	BP55R (1,3)
738120230	BP55R (1,4)
738120240	BP55R (1,5)
738120250	BP55R (1,6)
738120260	BP55R (1,7)
738120270	BP55R (1,8)
738120280	BP55R (1,9)
738120290	BP55R (2,0)
738120300	BP55R (2,1)
738120310	BP55R (2,2)
738120320	BP55R (2,3)
738120330	BP55R (2,7)
738120340	BP55R (3,2)
738120350	BP55R (3,5)
738120360	BP70R (0,9)
738120370	BP70R (1,0)
738120380	BP70R (1,1)
738120390	BP70R (1,2)
738120400	BP70R (1,3)
738120410	BP70R (1,4)
738120420	BP70R (1,5)
738120430	BP70R (1,6)
738120440	BP70R (1,7)
738120450	BP70R (1,8)
738120460	BP70R (1,9)
738120470	BP70R (2,0)
738120480	BP70R (2,1)
738120490	BP70R (2,2)
738120500	BP70R (2,3)
738120510	BP70R (2,7)
738120520	BP70R (3,2)
738120530	BP70R (3,5)
736100000	BP95R (0,9)

736100100	BP95R (1,0)
736100200	BP95R (1,1)
736100300	BP95R (1,2)
736100400	BP95R (1,3)
736100500	BP95R (1,4)
736100600	BP95R (1,5)
736100700	BP95R (1,6)
736100800	BP95R (1,7)
736100900	BP95R (1,8)
736101000	BP95R (1,9)
736101100	BP95R (2,0)
736101200	BP95R (2,1)
736101300	BP95R (2,2)
736101400	BP95R (2,3)
736101500	BP95R (2,7)
736101600	BP95R (3,2)
736101700	BP95R (3,5)
732310000	BP110R (0,9)
732310001	BP110R (1,0)
732310002	BP110R (1,1)
732310003	BP110R (1,2)
732310004	BP110R (1,3)
732310005	BP110R (1,4)
732310006	BP110R (1,5)
736110000	BP110R (1,6)
736110100	BP110R (1,7)
736110200	BP110R (1,8)
736110300	BP110R (1,9)
736110400	BP110R (2,0)
736110500	BP110R (2,1)
736110600	BP110R (2,2)
736110700	BP110R (2,3)
736110800	BP110R (2,7)
736110900	BP110R (3,2)
736111000	BP110R (3,5)
736120000	BP115R (0,9)
736120100	BP115R (1,0)
736120200	BP115R (1,1)
736120300	BP115R (1,2)
736120400	BP115R (1,3)

736120500	BP115R (1,4)
732320000	BP115R (1,5)
732320001	BP115R (1,6)
732320002	BP115R (1,7)
732320003	BP115R (1,8)
732320004	BP115R (1,9)
732320005	BP115R (2,0)
736120600	BP115R (2,1)
736120700	BP115R (2,2)
736120800	BP115R (2,3)
732320006	BP115R (2,7)
732320007	BP115R (3,2)
732320008	BP115R (3,5)
736130000	BP120R (0,9)
736130100	BP120R (1,0)
736130200	BP120R (1,1)
736130300	BP120R (1,2)
736130400	BP120R (1,3)
736130500	BP120R (1,4)
736130600	BP120R (1,5)
736130700	BP120R (1,6)
736130800	BP120R (1,7)
736130900	BP120R (1,8)
736131000	BP120R (1,9)
736131100	BP120R (2,0)
732330000	BP120R (2,1)
732330001	BP120R (2,2)
732330002	BP120R (2,3)
736131200	BP120R (2,7)
736131300	BP120R (3,2)
736131400	BP120R (3,5)
738120540	BP125R (0,9)
738120550	BP125R (1,0)
738120560	BP125R (1,1)
738120570	BP125R (1,2)
738120580	BP125R (1,3)
738120590	BP125R (1,4)
738120600	BP125R (1,5)
738120610	BP125R (1,6)
738120620	BP125R (1,7)

738120630	BP125R (1,8)
738120640	BP125R (1,9)
738120650	BP125R (2,0)
738120660	BP125R (2,1)
738120670	BP125R (2,2)
738120680	BP125R (2,3)
738120690	BP125R (2,7)
738120700	BP125R (3,2)
738120710	BP125R (3,5)
736140000	BP150R (0,9)
736140100	BP150R (1,0)
736140200	BP150R (1,1)
736140300	BP150R (1,2)
736140400	BP150R (1,3)
736140500	BP150R (1,4)
736140600	BP150R (1,5)
736140700	BP150R (1,6)
736140800	BP150R (1,7)
736140900	BP150R (1,8)
736141000	BP150R (1,9)
736141100	BP150R (2,0)
736141200	BP150R (2,1)
736141300	BP150R (2,2)
736141400	BP150R (2,3)
732340000	BP150R (2,7)
732340001	BP150R (3,2)
732340002	BP150R (3,5)
736150000	BP155R (0,9)
736150100	BP155R (1,0)
736150200	BP155R (1,1)
736150300	BP155R (1,2)
736150400	BP155R (1,3)
736150500	BP155R (1,4)
736150600	BP155R (1,5)
732350000	BP155R (1,6)
736150700	BP155R (1,7)
736150800	BP155R (1,8)
732350001	BP155R (1,9)
736150900	BP155R (2,0)
736151000	BP155R (2,1)

736151100	BP155R (2,2)
736151200	BP155R (2,3)
736151300	BP155R (2,7)
736151400	BP155R (3,2)
736151500	BP155R (3,5)
736160000	BP180R (0,9)
736160100	BP180R (1,0)
736160200	BP180R (1,1)
736160300	BP180R (1,2)
736160400	BP180R (1,3)
736160500	BP180R (1,4)
736160600	BP180R (1,5)
736160700	BP180R (1,6)
736160800	BP180R (1,7)
736160900	BP180R (1,8)
736161000	BP180R (1,9)
736161100	BP180R (2,0)
736161200	BP180R (2,1)
736161300	BP180R (2,2)
736161400	BP180R (2,3)
732360000	BP180R (2,7)
732360001	BP180R (3,2)
732360002	BP180R (3,5)
738110000	BP44,5H (0,9)
738110010	BP44,5H (1,0)
738110020	BP44,5H (1,1)
738110030	BP44,5H (1,2)
738110040	BP44,5H (1,3)
738110050	BP44,5H (1,4)
738110060	BP44,5H (1,5)
738110070	BP44,5H (1,6)
738110080	BP44,5H (1,7)
738110090	BP44,5H (1,8)
738110100	BP44,5H (1,9)
738110110	BP44,5H (2,0)
738110120	BP44,5H (2,1)
738110130	BP44,5H (2,2)
738110140	BP44,5H (2,3)
738110150	BP44,5H (2,7)
738110160	BP44,5H (3,2)

738110170	BP44,5H (3,5)
738110180	BP55H (0,9)
738110190	BP55H (1,0)
738110200	BP55H (1,1)
738110210	BP55H (1,2)
738110220	BP55H (1,3)
738110230	BP55H (1,4)
738110240	BP55H (1,5)
738110250	BP55H (1,6)
738110260	BP55H (1,7)
738110270	BP55H (1,8)
738110280	BP55H (1,9)
738110290	BP55H (2,0)
738110300	BP55H (2,1)
738110310	BP55H (2,2)
738110320	BP55H (2,3)
738110330	BP55H (2,7)
738110340	BP55H (3,2)
738110350	BP55H (3,5)
738110360	BP70H (0,9)
738110370	BP70H (1,0)
738110380	BP70H (1,1)
738110390	BP70H (1,2)
738110400	BP70H (1,3)
738110410	BP70H (1,4)
738110420	BP70H (1,5)
738110430	BP70H (1,6)
738110440	BP70H (1,7)
738110450	BP70H (1,8)
738110460	BP70H (1,9)
738110470	BP70H (2,0)
738110480	BP70H (2,1)
738110490	BP70H (2,2)
738110500	BP70H (2,3)
738110510	BP70H (2,7)
738110520	BP70H (3,2)
738110530	BP70H (3,5)
736170000	BP95H (0,9)
736170100	BP95H (1,0)
736170200	BP95H (1,1)

736170300	BP95H (1,2)
736170400	BP95H (1,3)
736170500	BP95H (1,4)
736170600	BP95H (1,5)
736170700	BP95H (1,6)
736170800	BP95H (1,7)
736170900	BP95H (1,8)
736171000	BP95H (1,9)
736171100	BP95H (2,0)
736171200	BP95H (2,1)
736171300	BP95H (2,2)
736171400	BP95H (2,3)
736171500	BP95H (2,7)
736171600	BP95H (3,2)
736171700	BP95H (3,5)
732370000	BP110H (0,9)
732370001	BP110H (1,0)
732370002	BP110H (1,1)
732370003	BP110H (1,2)
732370004	BP110H (1,3)
732370005	BP110H (1,4)
732370006	BP110H (1,5)
736180000	BP110H (1,6)
736180100	BP110H (1,7)
736180200	BP110H (1,8)
736180300	BP110H (1,9)
736180400	BP110H (2,0)
736180500	BP110H (2,1)
736180600	BP110H (2,2)
736180700	BP110H (2,3)
736180800	BP110H (2,7)
736180900	BP110H (3,2)
736181000	BP110H (3,5)
736190000	BP115H (0,9)
736190100	BP115H (1,0)
736190200	BP115H (1,1)
736190300	BP115H (1,2)
736190400	BP115H (1,3)
736190500	BP115H (1,4)
732380000	BP115H (1,5)

732380001	BP115H (1,6)
732380002	BP115H (1,7)
732380003	BP115H (1,8)
732380004	BP115H (1,9)
732380005	BP115H (2,0)
736190600	BP115H (2,1)
736190700	BP115H (2,2)
736190800	BP115H (2,3)
732380006	BP115H (2,7)
732380007	BP115H (3,2)
732380008	BP115H (3,5)
736200000	BP120H (0,9)
736200100	BP120H (1,0)
736200200	BP120H (1,1)
736200300	BP120H (1,2)
736200400	BP120H (1,3)
736200500	BP120H (1,4)
736200600	BP120H (1,5)
736200700	BP120H (1,6)
736200800	BP120H (1,7)
736200900	BP120H (1,8)
736201000	BP120H (1,9)
736201100	BP120H (2,0)
732390000	BP120H (2,1)
732390001	BP120H (2,2)
732390002	BP120H (2,3)
736201200	BP120H (2,7)
736201300	BP120H (3,2)
736201400	BP120H (3,5)
738110540	BP125H (0,9)
738110550	BP125H (1,0)
738110560	BP125H (1,1)
738110570	BP125H (1,2)
738110580	BP125H (1,3)
738110590	BP125H (1,4)
738110600	BP125H (1,5)
738110610	BP125H (1,6)
738110620	BP125H (1,7)
738110630	BP125H (1,8)
738110640	BP125H (1,9)

738110650	BP125H (2,0)
738110660	BP125H (2,1)
738110670	BP125H (2,2)
738110680	BP125H (2,3)
738110690	BP125H (2,7)
738110700	BP125H (3,2)
738110710	BP125H (3,5)
736210000	BP150H (0,9)
736210100	BP150H (1,0)
736210200	BP150H (1,1)
736210300	BP150H (1,2)
736210400	BP150H (1,3)
736210500	BP150H (1,4)
736210600	BP150H (1,5)
736210700	BP150H (1,6)
736210800	BP150H (1,7)
736210900	BP150H (1,8)
736211000	BP150H (1,9)
736211100	BP150H (2,0)
736211200	BP150H (2,1)
736211300	BP150H (2,2)
736211400	BP150H (2,3)
732400000	BP150H (2,7)
732400001	BP150H (3,2)
732400002	BP150H (3,5)
736220000	BP155H (0,9)
736220100	BP155H (1,0)
736220200	BP155H (1,1)
736220300	BP155H (1,2)
736220400	BP155H (1,3)
736220500	BP155H (1,4)
736220600	BP155H (1,5)
732410000	BP155H (1,6)
736220700	BP155H (1,7)
736220800	BP155H (1,8)
732410001	BP155H (1,9)
736220900	BP155H (2,0)
736221000	BP155H (2,1)
736221100	BP155H (2,2)
736221200	BP155H (2,3)

736221300	BP155H (2,7)
736221400	BP155H (3,2)
736221500	BP155H (3,5)
736230000	BP180H (0,9)
736230100	BP180H (1,0)
736230200	BP180H (1,1)
736230300	BP180H (1,2)
736230400	BP180H (1,3)
736230500	BP180H (1,4)
736230600	BP180H (1,5)
736230700	BP180H (1,6)
736230800	BP180H (1,7)
736230900	BP180H (1,8)
736231000	BP180H (1,9)
736231100	BP180H (2,0)
736231200	BP180H (2,1)
736231300	BP180H (2,2)
736231400	BP180H (2,3)
732420000	BP180H (2,7)
732420001	BP180H (3,2)
732420002	BP180H (3,5)
738130000	BP44,5J (0,9)
738130010	BP44,5J (1,0)
738130020	BP44,5J (1,1)
738130030	BP44,5J (1,2)
738130040	BP44,5J (1,3)
738130050	BP44,5J (1,4)
738130060	BP44,5J (1,5)
738130070	BP44,5J (1,6)
738130080	BP44,5J (1,7)
738130090	BP44,5J (1,8)
738130100	BP44,5J (1,9)
738130110	BP44,5J (2,0)
738130120	BP44,5J (2,1)
738130130	BP44,5J (2,2)
738130140	BP44,5J (2,3)
738130150	BP44,5J (2,7)
738130160	BP44,5J (3,2)
738130170	BP44,5J (3,5)
738130180	BP55J (0,9)

738130190	BP55J (1,0)
738130200	BP55J (1,1)
738130210	BP55J (1,2)
738130220	BP55J (1,3)
738130230	BP55J (1,4)
738130240	BP55J (1,5)
738130250	BP55J (1,6)
738130260	BP55J (1,7)
738130270	BP55J (1,8)
738130280	BP55J (1,9)
738130290	BP55J (2,0)
738130300	BP55J (2,1)
738130310	BP55J (2,2)
738130320	BP55J (2,3)
738130330	BP55J (2,7)
738130340	BP55J (3,2)
738130350	BP55J (3,5)
738130360	BP70J (0,9)
738130370	BP70J (1,0)
738130380	BP70J (1,1)
738130390	BP70J (1,2)
738130400	BP70J (1,3)
738130410	BP70J (1,4)
738130420	BP70J (1,5)
738130430	BP70J (1,6)
738130440	BP70J (1,7)
738130450	BP70J (1,8)
738130460	BP70J (1,9)
738130470	BP70J (2,0)
738130480	BP70J (2,1)
738130490	BP70J (2,2)
738130500	BP70J (2,3)
738130510	BP70J (2,7)
738130520	BP70J (3,2)
738130530	BP70J (3,5)
736240000	BP95J (1,6)
736240100	BP95J (1,7)
736240200	BP95J (1,8)
736240300	BP95J (1,9)
736240400	BP95J (2,0)

736240500	BP95J (2,1)
736240600	BP95J (2,2)
736240700	BP95J (2,3)
736240800	BP95J (2,7)
736240900	BP95J (3,2)
736241000	BP95J (3,5)
736241100	BP95J (0,9)
736241200	BP95J (1,0)
736241300	BP95J (1,1)
736241400	BP95J (1,2)
736241500	BP95J (1,3)
736241600	BP95J (1,4)
736241700	BP95J (1,5)
732430000	BP110J (0,9)
732430001	BP110J (1,0)
732430002	BP110J (1,1)
732430003	BP110J (1,2)
732430004	BP110J (1,3)
732430005	BP110J (1,4)
732430006	BP110J (1,5)
736250000	BP110J (1,6)
736250100	BP110J (1,7)
736250200	BP110J (1,8)
736250300	BP110J (1,9)
736250400	BP110J (2,0)
736250500	BP110J (2,1)
736250600	BP110J (2,2)
736250700	BP110J (2,3)
736250800	BP110J (2,7)
736250900	BP110J (3,2)
736251000	BP110J (3,5)
736260000	BP115J (0,9)
736260100	BP115J (1,0)
736260200	BP115J (1,1)
736260300	BP115J (1,2)
736260400	BP115J (1,3)
736260500	BP115J (1,4)
732440000	BP115J (1,5)
732440001	BP115J (1,6)
732440002	BP115J (1,7)

732440003	BP115J (1,8)
732440004	BP115J (1,9)
732440005	BP115J (2,0)
736260600	BP115J (2,1)
736260700	BP115J (2,2)
736260800	BP115J (2,3)
732440006	BP115J (2,7)
732440007	BP115J (3,2)
732440008	BP115J (3,5)
736270000	BP120J (0,9)
736270100	BP120J (1,0)
736270200	BP120J (1,1)
736270300	BP120J (1,2)
736270400	BP120J (1,3)
736270500	BP120J (1,4)
736270600	BP120J (1,5)
736270700	BP120J (1,6)
736270800	BP120J (1,7)
736270900	BP120J (1,8)
736271000	BP120J (1,9)
736271100	BP120J (2,0)
732450000	BP120J (2,1)
732450001	BP120J (2,2)
732450002	BP120J (2,3)
736271200	BP120J (2,7)
736271300	BP120J (3,2)
736271400	BP120J (3,5)
738130540	BP125J (0,9)
738130550	BP125J (1,0)
738130560	BP125J (1,1)
738130570	BP125J (1,2)
738130580	BP125J (1,3)
738130590	BP125J (1,4)
738130600	BP125J (1,5)
738130610	BP125J (1,6)
738130620	BP125J (1,7)
738130630	BP125J (1,8)
738130640	BP125J (1,9)
738130650	BP125J (2,0)
738130660	BP125J (2,1)

738130670	BP125J (2,2)
738130680	BP125J (2,3)
738130690	BP125J (2,7)
738130700	BP125J (3,2)
738130710	BP125J (3,5)
736280000	BP150J (0,9)
736280100	BP150J (1,0)
736280200	BP150J (1,1)
736280300	BP150J (1,2)
736280400	BP150J (1,3)
736280500	BP150J (1,4)
736280600	BP150J (1,5)
736280700	BP150J (1,6)
736280800	BP150J (1,7)
736280900	BP150J (1,8)
736281000	BP150J (1,9)
736281100	BP150J (2,0)
736281200	BP150J (2,1)
736281300	BP150J (2,2)
736281400	BP150J (2,3)
732460000	BP150J (2,7)
732460001	BP150J (3,2)
732460002	BP150J (3,5)
736290000	BP155J (0,9)
736290100	BP155J (1,0)
736290200	BP155J (1,1)
736290300	BP155J (1,2)
736290400	BP155J (1,3)
736290500	BP155J (1,4)
736290600	BP155J (1,5)
732470000	BP155J (1,6)
736290700	BP155J (1,7)
736290800	BP155J (1,8)
732470001	BP155J (1,9)
736290900	BP155J (2,0)
736291000	BP155J (2,1)
736291100	BP155J (2,2)
736291200	BP155J (2,3)
736291300	BP155J (2,7)
736291400	BP155J (3,2)

736291500	BP155J (3,5)
736300000	BP180J (0,9)
736300100	BP180J (1,0)
736300200	BP180J (1,1)
736300300	BP180J (1,2)
736300400	BP180J (1,3)
736300500	BP180J (1,4)
736300600	BP180J (1,5)
736300700	BP180J (1,6)
736300800	BP180J (1,7)
736300900	BP180J (1,8)
736301000	BP180J (1,9)
736301100	BP180J (2,0)
736301200	BP180J (2,1)
736301300	BP180J (2,2)
736301400	BP180J (2,3)
736301500	BP180J (2,7)
736301600	BP180J (3,2)
736301700	BP180J (3,5)
738140000	BP44,5T (0,9)
738140010	BP44,5T (1,0)
738140020	BP44,5T (1,1)
738140030	BP44,5T (1,2)
738140040	BP44,5T (1,3)
738140050	BP44,5T (1,4)
738140060	BP44,5T (1,5)
738140070	BP44,5T (1,6)
738140080	BP44,5T (1,7)
738140090	BP44,5T (1,8)
738140100	BP44,5T (1,9)
738140110	BP44,5T (2,0)
738140120	BP44,5T (2,1)
738140130	BP44,5T (2,2)
738140140	BP44,5T (2,3)
738140150	BP44,5T (2,7)
738140160	BP44,5T (3,2)
738140170	BP44,5T (3,5)
738140180	BP55T (0,9)
738140190	BP55T (1,0)
738140200	BP55T (1,1)

738140210	BP55T (1,2)
738140220	BP55T (1,3)
738140230	BP55T (1,4)
738140240	BP55T (1,5)
738140250	BP55T (1,6)
738140260	BP55T (1,7)
738140270	BP55T (1,8)
738140280	BP55T (1,9)
738140290	BP55T (2,0)
738140300	BP55T (2,1)
738140310	BP55T (2,2)
738140320	BP55T (2,3)
738140330	BP55T (2,7)
738140340	BP55T (3,2)
738140350	BP55T (3,5)
738140360	BP70T (0,9)
738140370	BP70T (1,0)
738140380	BP70T (1,1)
738140390	BP70T (1,2)
738140400	BP70T (1,3)
738140410	BP70T (1,4)
738140420	BP70T (1,5)
738140430	BP70T (1,6)
738140440	BP70T (1,7)
738140450	BP70T (1,8)
738140460	BP70T (1,9)
738140470	BP70T (2,0)
738140480	BP70T (2,1)
738140490	BP70T (2,2)
738140500	BP70T (2,3)
738140510	BP70T (2,7)
738140520	BP70T (3,2)
738140530	BP70T (3,5)
736310000	BP95T (0,9)
736310100	BP95T (1,0)
736310200	BP95T (1,1)
736310300	BP95T (1,2)
736310400	BP95T (1,3)
736310500	BP95T (1,4)
736310600	BP95T (1,5)

736310700	BP95T (1,6)
736310800	BP95T (1,7)
736310900	BP95T (1,8)
736311000	BP95T (1,9)
736311100	BP95T (2,0)
736311200	BP95T (2,1)
736311300	BP95T (2,2)
736311400	BP95T (2,3)
736311500	BP95T (2,7)
736311600	BP95T (3,2)
736311700	BP95T (3,5)
732490000	BP110T (0,9)
732490001	BP110T (1,0)
732490002	BP110T (1,1)
732490003	BP110T (1,2)
732490004	BP110T (1,3)
732490005	BP110T (1,4)
732490006	BP110T (1,5)
736320000	BP110T (1,6)
736320100	BP110T (1,7)
736320200	BP110T (1,8)
736320300	BP110T (1,9)
736320400	BP110T (2,0)
736320500	BP110T (2,1)
736320600	BP110T (2,2)
736320700	BP110T (2,3)
736320800	BP110T (2,7)
736320900	BP110T (3,2)
736321000	BP110T (3,5)
736330000	BP115T (0,9)
736330100	BP115T (1,0)
736330200	BP115T (1,1)
736330300	BP115T (1,2)
736330400	BP115T (1,3)
736330500	BP115T (1,4)
732500000	BP115T (1,5)
732500001	BP115T (1,6)
732500002	BP115T (1,7)
732500003	BP115T (1,8)
732500004	BP115T (1,9)

732500005	BP115T (2,0)
736330600	BP115T (2,1)
736330700	BP115T (2,2)
736330800	BP115T (2,3)
732500006	BP115T (2,7)
732500007	BP115T (3,2)
732500008	BP115T (3,5)
736340000	BP120T (0,9)
736340100	BP120T (1,0)
736340200	BP120T (1,1)
736340300	BP120T (1,2)
736340400	BP120T (1,3)
736340500	BP120T (1,4)
736340600	BP120T (1,5)
736340700	BP120T (1,6)
736340800	BP120T (1,7)
736340900	BP120T (1,8)
736341000	BP120T (1,9)
736341100	BP120T (2,0)
732510000	BP120T (2,1)
732510001	BP120T (2,2)
732510002	BP120T (2,3)
736341200	BP120T (2,7)
736341300	BP120T (3,2)
736341400	BP120T (3,5)
738140540	BP125T (0,9)
738140550	BP125T (1,0)
738140560	BP125T (1,1)
738140570	BP125T (1,2)
738140580	BP125T (1,3)
738140590	BP125T (1,4)
738140600	BP125T (1,5)
738140610	BP125T (1,6)
738140620	BP125T (1,7)
738140630	BP125T (1,8)
738140640	BP125T (1,9)
738140650	BP125T (2,0)
738140660	BP125T (2,1)
738140670	BP125T (2,2)
738140680	BP125T (2,3)

738140690	BP125T (2,7)
738140700	BP125T (3,2)
738140710	BP125T (3,5)
736350000	BP150T (0,9)
736350100	BP150T (1,0)
736350200	BP150T (1,1)
736350300	BP150T (1,2)
736350400	BP150T (1,3)
736350500	BP150T (1,4)
736350600	BP150T (1,5)
736350700	BP150T (1,6)
736350800	BP150T (1,7)
736350900	BP150T (1,8)
736351000	BP150T (1,9)
736351100	BP150T (2,0)
736351200	BP150T (2,1)
736351300	BP150T (2,2)
736351400	BP150T (2,3)
732520000	BP150T (2,7)
732520001	BP150T (3,2)
732520002	BP150T (3,5)
736360000	BP155T (0,9)
736360100	BP155T (1,0)
736360200	BP155T (1,1)
736360300	BP155T (1,2)
736360400	BP155T (1,3)
736360500	BP155T (1,4)
736360600	BP155T (1,5)
732530000	BP155T (1,6)
736360700	BP155T (1,7)
736360800	BP155T (1,8)
732530001	BP155T (1,9)
736360900	BP155T (2,0)
736361000	BP155T (2,1)
736361100	BP155T (2,2)
736361200	BP155T (2,3)
736361300	BP155T (2,7)
736361400	BP155T (3,2)
736361500	BP155T (3,5)
736370000	BP180T (0,9)

736370100	BP180T (1,0)
736370200	BP180T (1,1)
736370300	BP180T (1,2)
736370400	BP180T (1,3)
736370500	BP180T (1,4)
736370600	BP180T (1,5)
736370700	BP180T (1,6)
736370800	BP180T (1,7)
736370900	BP180T (1,8)
736371000	BP180T (1,9)
736371100	BP180T (2,0)
736371200	BP180T (2,1)
736371300	BP180T (2,2)
736371400	BP180T (2,3)
732540000	BP180T (2,7)
732540001	BP180T (3,2)
732540002	BP180T (3,5)
738150000	BP44,5O (0,9)
738150010	BP44,5O (1,0)
738150020	BP44,5O (1,1)
738150030	BP44,5O (1,2)
738150040	BP44,5O (1,3)
738150050	BP44,5O (1,4)
738150060	BP44,5O (1,5)
738150070	BP44,5O (1,6)
738150080	BP44,5O (1,7)
738150090	BP44,5O (1,8)
738150100	BP44,5O (1,9)
738150110	BP44,5O (2,0)
738150120	BP44,5O (2,1)
738150130	BP44,5O (2,2)
738150140	BP44,5O (2,3)
738150150	BP44,5O (2,7)
738150160	BP44,5O (3,2)
738150170	BP44,5O (3,5)
738150180	BP55O (0,9)
738150190	BP55O (1,0)
738150200	BP55O (1,1)
738150210	BP55O (1,2)
738150220	BP55O (1,3)

738150230	BP55O (1,4)
738150240	BP55O (1,5)
738150250	BP55O (1,6)
738150260	BP55O (1,7)
738150270	BP55O (1,8)
738150280	BP55O (1,9)
738150290	BP55O (2,0)
738150300	BP55O (2,1)
738150310	BP55O (2,2)
738150320	BP55O (2,3)
738150330	BP55O (2,7)
738150340	BP55O (3,2)
738150350	BP55O (3,5)
738150360	BP70O (0,9)
738150370	BP70O (1,0)
738150380	BP70O (1,1)
738150390	BP70O (1,2)
738150400	BP70O (1,3)
738150410	BP70O (1,4)
738150420	BP70O (1,5)
738150430	BP70O (1,6)
738150440	BP70O (1,7)
738150450	BP70O (1,8)
738150460	BP70O (1,9)
738150470	BP70O (2,0)
738150480	BP70O (2,1)
738150490	BP70O (2,2)
738150500	BP70O (2,3)
738150510	BP70O (2,7)
738150520	BP70O (3,2)
738150530	BP70O (3,5)
736380000	BP95O (0,9)
736380100	BP95O (1,0)
736380200	BP95O (1,1)
736380300	BP95O (1,2)
736380400	BP95O (1,3)
736380500	BP95O (1,4)
736380600	BP95O (1,5)
736380700	BP95O (1,6)
736380800	BP95O (1,7)

736380900	BP950 (1,8)
736381000	BP950 (1,9)
736381100	BP950 (2,0)
736381200	BP950 (2,1)
736381300	BP950 (2,2)
736381400	BP950 (2,3)
736381500	BP950 (2,7)
736381600	BP950 (3,2)
736381700	BP950 (3,5)
732550000	BP1100 (0,9)
732550001	BP1100 (1,0)
732550002	BP1100 (1,1)
732550003	BP1100 (1,2)
732550004	BP1100 (1,3)
732550005	BP1100 (1,4)
732550006	BP1100 (1,5)
736390000	BP1100 (1,6)
736390100	BP1100 (1,7)
736390200	BP1100 (1,8)
736390300	BP1100 (1,9)
736390400	BP1100 (2,0)
736390500	BP1100 (2,1)
736390600	BP1100 (2,2)
736390700	BP1100 (2,3)
736390800	BP1100 (2,7)
736390900	BP1100 (3,2)
736391000	BP1100 (3,5)
736400000	BP1150 (0,9)
736400100	BP1150 (1,0)
736400200	BP1150 (1,1)
736400300	BP1150 (1,2)
736400400	BP1150 (1,3)
736400500	BP1150 (1,4)
732560000	BP1150 (1,5)
732560001	BP1150 (1,6)
732560002	BP1150 (1,7)
732560003	BP1150 (1,8)
732560004	BP1150 (1,9)
732560005	BP1150 (2,0)
736400600	BP1150 (2,1)

736400700	BP1150 (2,2)
736400800	BP1150 (2,3)
732560006	BP1150 (2,7)
732560007	BP1150 (3,2)
732560008	BP1150 (3,5)
736410000	BP1200 (0,9)
736410100	BP1200 (1,0)
736410200	BP1200 (1,1)
736410300	BP1200 (1,2)
736410400	BP1200 (1,3)
736410500	BP1200 (1,4)
736410600	BP1200 (1,5)
736410700	BP1200 (1,6)
736410800	BP1200 (1,7)
736410900	BP1200 (1,8)
736411000	BP1200 (1,9)
736411100	BP1200 (2,0)
732570000	BP1200 (2,1)
732570001	BP1200 (2,2)
732570002	BP1200 (2,3)
736411200	BP1200 (2,7)
736411300	BP1200 (3,2)
736411400	BP1200 (3,5)
738150540	BP1250 (0,9)
738150550	BP1250 (1,0)
738150560	BP1250 (1,1)
738150570	BP1250 (1,2)
738150580	BP1250 (1,3)
738150590	BP1250 (1,4)
738150600	BP1250 (1,5)
738150610	BP1250 (1,6)
738150620	BP1250 (1,7)
738150630	BP1250 (1,8)
738150640	BP1250 (1,9)
738150650	BP1250 (2,0)
738150660	BP1250 (2,1)
738150670	BP1250 (2,2)
738150680	BP1250 (2,3)
738150690	BP1250 (2,7)
738150700	BP1250 (3,2)

738150710	BP1250 (3,5)
736420000	BP1500 (0,9)
736420100	BP1500 (1,0)
736420200	BP1500 (1,1)
736420300	BP1500 (1,2)
736420400	BP1500 (1,3)
736420500	BP1500 (1,4)
736420600	BP1500 (1,5)
736420700	BP1500 (1,6)
736420800	BP1500 (1,7)
736420900	BP1500 (1,8)
736421000	BP1500 (1,9)
736421100	BP1500 (2,0)
736421200	BP1500 (2,1)
736421300	BP1500 (2,2)
736421400	BP1500 (2,3)
732580000	BP1500 (2,7)
732580001	BP1500 (3,2)
732580002	BP1500 (3,5)
736430000	BP1550 (0,9)
736430100	BP1550 (1,0)
736430200	BP1550 (1,1)
736430300	BP1550 (1,2)
736430400	BP1550 (1,3)
736430500	BP1550 (1,4)
736430600	BP1550 (1,5)
732590000	BP1550 (1,6)
736430700	BP1550 (1,7)
736430800	BP1550 (1,8)
732590001	BP1550 (1,9)
736430900	BP1550 (2,0)
736431000	BP1550 (2,1)
736431100	BP1550 (2,2)
736431200	BP1550 (2,3)
736431300	BP1550 (2,7)
736431400	BP1550 (3,2)
736431500	BP1550 (3,5)
736440000	BP1800 (0,9)
736440100	BP1800 (1,0)
736440200	BP1800 (1,1)

736440300	BP1800 (1,2)
736440400	BP1800 (1,3)
736440500	BP1800 (1,4)
736440600	BP1800 (1,5)
736440700	BP1800 (1,6)
736440800	BP1800 (1,7)
736440900	BP1800 (1,8)
736441000	BP1800 (1,9)
736441100	BP1800 (2,0)
736441200	BP1800 (2,1)
736441300	BP1800 (2,2)
736441400	BP1800 (2,3)
732600000	BP1800 (2,7)
732600001	BP1800 (3,2)
732600002	BP1800 (3,5)
738160000	BP44,5S (0,9)
738160010	BP44,5S (1,0)
738160020	BP44,5S (1,1)
738160030	BP44,5S (1,2)
738160040	BP44,5S (1,3)
738160050	BP44,5S (1,4)
738160060	BP44,5S (1,5)
738160070	BP44,5S (1,6)
738160080	BP44,5S (1,7)
738160090	BP44,5S (1,8)
738160100	BP44,5S (1,9)
738160110	BP44,5S (2,0)
738160120	BP44,5S (2,1)
738160130	BP44,5S (2,2)
738160140	BP44,5S (2,3)
738160150	BP44,5S (2,7)
738160160	BP44,5S (3,2)
738160170	BP44,5S (3,5)
738160180	BP55S (0,9)
738160190	BP55S (1,0)
738160200	BP55S (1,1)
738160210	BP55S (1,2)
738160220	BP55S (1,3)
738160230	BP55S (1,4)
738160240	BP55S (1,5)

738160250	BP55S (1,6)
738160260	BP55S (1,7)
738160270	BP55S (1,8)
738160280	BP55S (1,9)
738160290	BP55S (2,0)
738160300	BP55S (2,1)
738160310	BP55S (2,2)
738160320	BP55S (2,3)
738160330	BP55S (2,7)
738160340	BP55S (3,2)
738160350	BP55S (3,5)
738160360	BP70S (0,9)
738160370	BP70S (1,0)
738160380	BP70S (1,1)
738160390	BP70S (1,2)
738160400	BP70S (1,3)
738160410	BP70S (1,4)
738160420	BP70S (1,5)
738160430	BP70S (1,6)
738160440	BP70S (1,7)
738160450	BP70S (1,8)
738160460	BP70S (1,9)
738160470	BP70S (2,0)
738160480	BP70S (2,1)
738160490	BP70S (2,2)
738160500	BP70S (2,3)
738160510	BP70S (2,7)
738160520	BP70S (3,2)
738160530	BP70S (3,5)
736450000	BP95S (0,9)
736450100	BP95S (1,0)
736450200	BP95S (1,1)
736450300	BP95S (1,2)
736450400	BP95S (1,3)
736450500	BP95S (1,4)
736450600	BP95S (1,5)
736450700	BP95S (1,6)
736450800	BP95S (1,7)
736450900	BP95S (1,8)
736451000	BP95S (1,9)

736451100	BP95S (2,0)
736451200	BP95S (2,1)
736451300	BP95S (2,2)
736451400	BP95S (2,3)
736451500	BP95S (2,7)
736451600	BP95S (3,2)
736451700	BP95S (3,5)
732610000	BP110S (0,9)
732610001	BP110S (1,0)
732610002	BP110S (1,1)
732610003	BP110S (1,2)
732610004	BP110S (1,3)
732610005	BP110S (1,4)
732610006	BP110S (1,5)
736460000	BP110S (1,6)
736460100	BP110S (1,7)
736460200	BP110S (1,8)
736460300	BP110S (1,9)
736460400	BP110S (2,0)
736460500	BP110S (2,1)
736460600	BP110S (2,2)
736460700	BP110S (2,3)
736460800	BP110S (2,7)
736460900	BP110S (3,2)
736461000	BP110S (3,5)
736470000	BP115S (0,9)
736470100	BP115S (1,0)
736470200	BP115S (1,1)
736470300	BP115S (1,2)
736470400	BP115S (1,3)
736470500	BP115S (1,4)
732620000	BP115S (1,5)
732620001	BP115S (1,6)
732620002	BP115S (1,7)
732620003	BP115S (1,8)
732620004	BP115S (1,9)
732620005	BP115S (2,0)
736470600	BP115S (2,1)
736470700	BP115S (2,2)
736470800	BP115S (2,3)

732620006	BP115S (2,7)
732620007	BP115S (3,2)
732620008	BP115S (3,5)
736480000	BP120S (0,9)
736480100	BP120S (1,0)
736480200	BP120S (1,1)
736480300	BP120S (1,2)
736480400	BP120S (1,3)
736480500	BP120S (1,4)
736480600	BP120S (1,5)
736480700	BP120S (1,6)
736480800	BP120S (1,7)
736480900	BP120S (1,8)
736481000	BP120S (1,9)
736481100	BP120S (2,0)
732630000	BP120S (2,1)
732630001	BP120S (2,2)
732630002	BP120S (2,3)
736481200	BP120S (2,7)
736481300	BP120S (3,2)
736481400	BP120S (3,5)
738160540	BP125S (0,9)
738160550	BP125S (1,0)
738160560	BP125S (1,1)
738160570	BP125S (1,2)
738160580	BP125S (1,3)
738160590	BP125S (1,4)
738160600	BP125S (1,5)
738160610	BP125S (1,6)
738160620	BP125S (1,7)
738160630	BP125S (1,8)
738160640	BP125S (1,9)
738160650	BP125S (2,0)
738160660	BP125S (2,1)
738160670	BP125S (2,2)
738160680	BP125S (2,3)
738160690	BP125S (2,7)
738160700	BP125S (3,2)
738160710	BP125S (3,5)
736490000	BP150S (0,9)

736490100	BP150S (1,0)
736490200	BP150S (1,1)
736490300	BP150S (1,2)
736490400	BP150S (1,3)
736490500	BP150S (1,4)
736490600	BP150S (1,5)
736490700	BP150S (1,6)
736490800	BP150S (1,7)
736490900	BP150S (1,8)
736491000	BP150S (1,9)
736491100	BP150S (2,0)
736491200	BP150S (2,1)
736491300	BP150S (2,2)
736491400	BP150S (2,3)
732640000	BP150S (2,7)
732640001	BP150S (3,2)
732640002	BP150S (3,5)
736500000	BP155S (0,9)
736500100	BP155S (1,0)
736500200	BP155S (1,1)
736500300	BP155S (1,2)
736500400	BP155S (1,3)
736500500	BP155S (1,4)
736500600	BP155S (1,5)
732650000	BP155S (1,6)
736500700	BP155S (1,7)
736500800	BP155S (1,8)
732650001	BP155S (1,9)
736500900	BP155S (2,0)
736501000	BP155S (2,1)
736501100	BP155S (2,2)
736501200	BP155S (2,3)
736501300	BP155S (2,7)
736501400	BP155S (3,2)
736501500	BP155S (3,5)
736510000	BP180S (0,9)
736510100	BP180S (1,0)
736510200	BP180S (1,1)
736510300	BP180S (1,2)
736510400	BP180S (1,3)

736510500	BP180S (1,4)
736510600	BP180S (1,5)
736510700	BP180S (1,6)
736510800	BP180S (1,7)
736510900	BP180S (1,8)
736511000	BP180S (1,9)
736511100	BP180S (2,0)
736511200	BP180S (2,1)
736511300	BP180S (2,2)
736511400	BP180S (2,3)
732660000	BP180S (2,7)
732660001	BP180S (3,2)
732660002	BP180S (3,5)
738170000	BP44,5X (0,9)
738170010	BP44,5X (1,0)
738170020	BP44,5X (1,1)
738170030	BP44,5X (1,2)
738170040	BP44,5X (1,3)
738170050	BP44,5X (1,4)
738170060	BP44,5X (1,5)
738170070	BP44,5X (1,6)
738170080	BP44,5X (1,7)
738170090	BP44,5X (1,8)
738170100	BP44,5X (1,9)
738170110	BP44,5X (2,0)
738170120	BP44,5X (2,1)
738170130	BP44,5X (2,2)
738170140	BP44,5X (2,3)
738170150	BP44,5X (2,7)
738170160	BP44,5X (3,2)
738170170	BP44,5X (3,5)
738170180	BP55X (0,9)
738170190	BP55X (1,0)
738170200	BP55X (1,1)
738170210	BP55X (1,2)
738170220	BP55X (1,3)
738170230	BP55X (1,4)
738170240	BP55X (1,5)
738170250	BP55X (1,6)
738170260	BP55X (1,7)

738170270	BP55X (1,8)
738170280	BP55X (1,9)
738170290	BP55X (2,0)
738170300	BP55X (2,1)
738170310	BP55X (2,2)
738170320	BP55X (2,3)
738170330	BP55X (2,7)
738170340	BP55X (3,2)
738170350	BP55X (3,5)
738170360	BP70X (0,9)
738170370	BP70X (1,0)
738170380	BP70X (1,1)
738170390	BP70X (1,2)
738170400	BP70X (1,3)
738170410	BP70X (1,4)
738170420	BP70X (1,5)
738170430	BP70X (1,6)
738170440	BP70X (1,7)
738170450	BP70X (1,8)
738170460	BP70X (1,9)
738170470	BP70X (2,0)
738170480	BP70X (2,1)
738170490	BP70X (2,2)
738170500	BP70X (2,3)
738170510	BP70X (2,7)
738170520	BP70X (3,2)
738170530	BP70X (3,5)
736520000	BP95X (0,9)
736520100	BP95X (1,0)
736520200	BP95X (1,1)
736520300	BP95X (1,2)
736520400	BP95X (1,3)
736520500	BP95X (1,4)
736520600	BP95X (1,5)
736520700	BP95X (1,6)
736520800	BP95X (1,7)
736520900	BP95X (1,8)
736521000	BP95X (1,9)
736521100	BP95X (2,0)
736521200	BP95X (2,1)

736521300	BP95X (2,2)
736521400	BP95X (2,3)
736521500	BP95X (2,7)
736521600	BP95X (3,2)
736521700	BP95X (3,5)
736530000	BP110X (0,9)
736530100	BP110X (1,0)
736530200	BP110X (1,1)
736530300	BP110X (1,2)
736530400	BP110X (1,3)
736530500	BP110X (1,4)
736530600	BP110X (1,5)
736530700	BP110X (1,6)
736530800	BP110X (1,7)
736530900	BP110X (1,8)
736531000	BP110X (1,9)
736531100	BP110X (2,0)
736531200	BP110X (2,1)
736531300	BP110X (2,2)
736531400	BP110X (2,3)
736531500	BP110X (2,7)
736531600	BP110X (3,2)
736531700	BP110X (3,5)
736540000	BP115X (0,9)
736540100	BP115X (1,0)
736540200	BP115X (1,1)
736540300	BP115X (1,2)
736540400	BP115X (1,3)
736540500	BP115X (1,4)
736540600	BP115X (1,5)
736540700	BP115X (1,6)
736540800	BP115X (1,7)
736540900	BP115X (1,8)
736541000	BP115X (1,9)
736541100	BP115X (2,0)
736541200	BP115X (2,1)
736541300	BP115X (2,2)
736541400	BP115X (2,3)
736541500	BP115X (2,7)
736541600	BP115X (3,2)

736541700	BP115X (3,5)
736550000	BP120X (0,9)
736550100	BP120X (1,0)
736550200	BP120X (1,1)
736550300	BP120X (1,2)
736550400	BP120X (1,3)
736550500	BP120X (1,4)
736550600	BP120X (1,5)
736550700	BP120X (1,6)
736550800	BP120X (1,7)
736550900	BP120X (1,8)
736551000	BP120X (1,9)
736551100	BP120X (2,0)
736551200	BP120X (2,1)
736551300	BP120X (2,2)
736551400	BP120X (2,3)
736551500	BP120X (2,7)
736551600	BP120X (3,2)
736551700	BP120X (3,5)
738170540	BP125X (0,9)
738170550	BP125X (1,0)
738170560	BP125X (1,1)
738170570	BP125X (1,2)
738170580	BP125X (1,3)
738170590	BP125X (1,4)
738170600	BP125X (1,5)
738170610	BP125X (1,6)
738170620	BP125X (1,7)
738170630	BP125X (1,8)
738170640	BP125X (1,9)
738170650	BP125X (2,0)
738170660	BP125X (2,1)
738170670	BP125X (2,2)
738170680	BP125X (2,3)
738170690	BP125X (2,7)
738170700	BP125X (3,2)
738170710	BP125X (3,5)
736560000	BP150X (0,9)
736560100	BP150X (1,0)
736560200	BP150X (1,1)

736560300	BP150X (1,2)
736560400	BP150X (1,3)
736560500	BP150X (1,4)
736560600	BP150X (1,5)
736560700	BP150X (1,6)
736560800	BP150X (1,8)
736560900	BP150X (1,9)
736561000	BP150X (2,0)
736561100	BP150X (2,1)
736561200	BP150X (2,2)
736561300	BP150X (2,3)
736561400	BP150X (2,7)
736561500	BP150X (3,2)
736561600	BP150X (3,5)
736561700	BP150X (1,7)
736570000	BP155X (0,9)
736570100	BP155X (1,0)
736570200	BP155X (1,1)
736570300	BP155X (1,2)
736570400	BP155X (1,3)
736570500	BP155X (1,4)
736570600	BP155X (1,5)
736570700	BP155X (1,6)
736570800	BP155X (1,7)
736570900	BP155X (1,8)
736571000	BP155X (1,9)
736571100	BP155X (2,0)
736571200	BP155X (2,1)
736571300	BP155X (2,2)
736571400	BP155X (2,3)
736571500	BP155X (2,7)
736571600	BP155X (3,2)
736571700	BP155X (3,5)
736580000	BP180X (0,9)
736580100	BP180X (1,0)
736580200	BP180X (1,1)
736580300	BP180X (1,2)
736580400	BP180X (1,3)
736580500	BP180X (1,4)
736580600	BP180X (1,5)

736580700	BP180X (1,6)
736580800	BP180X (1,7)
736580900	BP180X (1,8)
736581000	BP180X (1,9)
736581100	BP180X (2,0)
736581200	BP180X (2,1)
736581300	BP180X (2,2)
736581400	BP180X (2,3)
736581500	BP180X (2,7)
736581600	BP180X (3,2)
736581700	BP180X (3,5)
738180000	BP44,5A (0,9)
738180010	BP44,5A (1,0)
738180020	BP44,5A (1,1)
738180030	BP44,5A (1,2)
738180040	BP44,5A (1,3)
738180050	BP44,5A (1,4)
738180060	BP44,5A (1,5)
738180070	BP44,5A (1,6)
738180080	BP44,5A (1,7)
738180090	BP44,5A (1,8)
738180100	BP44,5A (1,9)
738180110	BP44,5A (2,0)
738180120	BP44,5A (2,1)
738180130	BP44,5A (2,2)
738180140	BP44,5A (2,3)
738180150	BP44,5A (2,7)
738180160	BP44,5A (3,2)
738180170	BP44,5A (3,5)
738180180	BP55A (0,9)
738180190	BP55A (1,0)
738180200	BP55A (1,1)
738180210	BP55A (1,2)
738180220	BP55A (1,3)
738180230	BP55A (1,4)
738180240	BP55A (1,5)
738180250	BP55A (1,6)
738180260	BP55A (1,7)
738180270	BP55A (1,8)
738180280	BP55A (1,9)

738180290	BP55A (2,0)
738180300	BP55A (2,1)
738180310	BP55A (2,2)
738180320	BP55A (2,3)
738180330	BP55A (2,7)
738180340	BP55A (3,2)
738180350	BP55A (3,5)
738180360	BP70A (0,9)
738180370	BP70A (1,0)
738180380	BP70A (1,1)
738180390	BP70A (1,2)
738180400	BP70A (1,3)
738180410	BP70A (1,4)
738180420	BP70A (1,5)
738180430	BP70A (1,6)
738180440	BP70A (1,7)
738180450	BP70A (1,8)
738180460	BP70A (1,9)
738180470	BP70A (2,0)
738180480	BP70A (2,1)
738180490	BP70A (2,2)
738180500	BP70A (2,3)
738180510	BP70A (2,7)
738180520	BP70A (3,2)
738180530	BP70A (3,5)
736590000	BP95A (0,9)
736590100	BP95A (1,0)
736590200	BP95A (1,1)
736590300	BP95A (1,2)
736590400	BP95A (1,3)
736590500	BP95A (1,4)
736590600	BP95A (1,5)
736590700	BP95A (1,6)
736590800	BP95A (1,7)
736590900	BP95A (1,8)
736591000	BP95A (1,9)
736591100	BP95A (2,0)
736591200	BP95A (2,1)
736591300	BP95A (2,2)
736591400	BP95A (2,3)

736591500	BP95A (2,7)
736591600	BP95A (3,2)
736591700	BP95A (3,5)
736600000	BP110A (0,9)
736600100	BP110A (1,0)
736600200	BP110A (1,1)
736600300	BP110A (1,2)
736600400	BP110A (1,3)
736600500	BP110A (1,4)
736600600	BP110A (1,5)
736600700	BP110A (1,6)
736600800	BP110A (1,7)
736600900	BP110A (1,8)
736601000	BP110A (1,9)
736601100	BP110A (2,0)
736601200	BP110A (2,1)
736601300	BP110A (2,2)
736601400	BP110A (2,3)
736601500	BP110A (2,7)
736601600	BP110A (3,2)
736601700	BP110A (3,5)
736610000	BP115A (0,9)
736610100	BP115A (1,0)
736610200	BP115A (1,1)
736610300	BP115A (1,2)
736610400	BP115A (1,3)
736610500	BP115A (1,4)
736610600	BP115A (1,5)
736610700	BP115A (1,6)
736610800	BP115A (1,7)
736610900	BP115A (1,8)
736611000	BP115A (1,9)
736611100	BP115A (2,0)
736611200	BP115A (2,1)
736611300	BP115A (2,2)
736611400	BP115A (2,3)
736611500	BP115A (2,7)
736611600	BP115A (3,2)
736611700	BP115A (3,5)
736620000	BP120A (0,9)

736620100	BP120A (1,0)
736620200	BP120A (1,1)
736620300	BP120A (1,2)
736620400	BP120A (1,3)
736620500	BP120A (1,4)
736620600	BP120A (1,5)
736620700	BP120A (1,6)
736620800	BP120A (1,7)
736620900	BP120A (1,8)
736621000	BP120A (1,9)
736621100	BP120A (2,0)
736621200	BP120A (2,1)
736621300	BP120A (2,2)
736621400	BP120A (2,3)
736621500	BP120A (2,7)
736621600	BP120A (3,2)
736621700	BP120A (3,5)
738180540	BP125A (0,9)
738180550	BP125A (1,0)
738180560	BP125A (1,1)
738180570	BP125A (1,2)
738180580	BP125A (1,3)
738180590	BP125A (1,4)
738180600	BP125A (1,5)
738180610	BP125A (1,6)
738180620	BP125A (1,7)
738180630	BP125A (1,8)
738180640	BP125A (1,9)
738180650	BP125A (2,0)
738180660	BP125A (2,1)
738180670	BP125A (2,2)
738180680	BP125A (2,3)
738180690	BP125A (2,7)
738180700	BP125A (3,2)
738180710	BP125A (3,5)
736630000	BP150A (0,9)
736630100	BP150A (1,0)
736630200	BP150A (1,1)
736630300	BP150A (1,2)
736630400	BP150A (1,3)

736630500	BP150A (1,4)
736630600	BP150A (1,5)
736630700	BP150A (1,6)
736630800	BP150A (1,7)
736630900	BP150A (1,8)
736631000	BP150A (1,9)
736631100	BP150A (2,0)
736631200	BP150A (2,1)
736631300	BP150A (2,2)
736631400	BP150A (2,3)
736631500	BP150A (2,7)
736631600	BP150A (3,2)
736631700	BP150A (3,5)
736640000	BP155A (0,9)
736640100	BP155A (1,0)
736640200	BP155A (1,1)
736640300	BP155A (1,2)
736640400	BP155A (1,3)
736640500	BP155A (1,4)
736640600	BP155A (1,5)
736640700	BP155A (1,6)
736640800	BP155A (1,7)
736640900	BP155A (1,8)
736641000	BP155A (1,9)
736641100	BP155A (2,0)
736641200	BP155A (2,1)
736641300	BP155A (2,2)
736641400	BP155A (2,3)
736641500	BP155A (2,7)
736641600	BP155A (3,2)
736641700	BP155A (3,5)
736650000	BP180A (0,9)
736650100	BP180A (1,0)
736650200	BP180A (1,1)
736650300	BP180A (1,2)
736650400	BP180A (1,3)
736650500	BP180A (1,4)
736650600	BP180A (1,5)
736650700	BP180A (1,6)
736650800	BP180A (1,7)

736650900	BP180A (1,8)
736651000	BP180A (1,9)
736651100	BP180A (2,0)
736651200	BP180A (2,1)
736651300	BP180A (2,2)
736651400	BP180A (2,3)
736651500	BP180A (2,7)
736651600	BP180A (3,2)
736651700	BP180A (3,5)
738190000	BP44,5D (0,9)
738190010	BP44,5D (1,0)
738190020	BP44,5D (1,1)
738190030	BP44,5D (1,2)
738190040	BP44,5D (1,3)
738190050	BP44,5D (1,4)
738190060	BP44,5D (1,5)
738190070	BP44,5D (1,6)
738190080	BP44,5D (1,7)
738190090	BP44,5D (1,8)
738190100	BP44,5D (1,9)
738190110	BP44,5D (2,0)
738190120	BP44,5D (2,1)
738190130	BP44,5D (2,2)
738190140	BP44,5D (2,3)
738190150	BP44,5D (2,7)
738190160	BP44,5D (3,2)
738190170	BP44,5D (3,5)
738190180	BP55D (0,9)
738190190	BP55D (1,0)
738190200	BP55D (1,1)
738190210	BP55D (1,2)
738190220	BP55D (1,3)
738190230	BP55D (1,4)
738190240	BP55D (1,5)
738190250	BP55D (1,6)
738190260	BP55D (1,7)
738190270	BP55D (1,8)
738190280	BP55D (1,9)
738190290	BP55D (2,0)
738190300	BP55D (2,1)

738190310	BP55D (2,2)
738190320	BP55D (2,3)
738190330	BP55D (2,7)
738190340	BP55D (3,2)
738190350	BP55D (3,5)
738190360	BP70D (0,9)
738190370	BP70D (1,0)
738190380	BP70D (1,1)
738190390	BP70D (1,2)
738190400	BP70D (1,3)
738190410	BP70D (1,4)
738190420	BP70D (1,5)
738190430	BP70D (1,6)
738190440	BP70D (1,7)
738190450	BP70D (1,8)
738190460	BP70D (1,9)
738190470	BP70D (2,0)
738190480	BP70D (2,1)
738190490	BP70D (2,2)
738190500	BP70D (2,3)
738190510	BP70D (2,7)
738190520	BP70D (3,2)
738190530	BP70D (3,5)
736660000	BP95D (0,9)
736660100	BP95D (1,0)
736660200	BP95D (1,1)
736660300	BP95D (1,2)
736660400	BP95D (1,3)
736660500	BP95D (1,4)
736660600	BP95D (1,5)
736660700	BP95D (1,6)
736660800	BP95D (1,7)
736660900	BP95D (1,8)
736661000	BP95D (1,9)
736661100	BP95D (2,0)
736661200	BP95D (2,1)
736661300	BP95D (2,2)
736661400	BP95D (2,3)
736661500	BP95D (2,7)
736661600	BP95D (3,2)

736661700	BP95D (3,5)
736670000	BP110D (0,9)
736670100	BP110D (1,0)
736670200	BP110D (1,1)
736670300	BP110D (1,2)
736670400	BP110D (1,3)
736670500	BP110D (1,4)
736670600	BP110D (1,5)
736670700	BP110D (1,6)
736670800	BP110D (1,7)
736670900	BP110D (1,8)
736671000	BP110D (1,9)
736671100	BP110D (2,0)
736671200	BP110D (2,1)
736671300	BP110D (2,2)
736671400	BP110D (2,3)
736671500	BP110D (2,7)
736671600	BP110D (3,2)
736671700	BP110D (3,5)
736680000	BP115D (0,9)
736680100	BP115D (1,0)
736680200	BP115D (1,1)
736680300	BP115D (1,2)
736680400	BP115D (1,3)
736680500	BP115D (1,4)
736680600	BP115D (1,5)
736680700	BP115D (1,6)
736680800	BP115D (1,7)
736680900	BP115D (1,8)
736681000	BP115D (1,9)
736681100	BP115D (2,0)
736681200	BP115D (2,1)
736681300	BP115D (2,2)
736681400	BP115D (2,3)
736681500	BP115D (2,7)
736681600	BP115D (3,2)
736681700	BP115D (3,5)
736690000	BP120D (0,9)
736690100	BP120D (1,0)
736690200	BP120D (1,1)

736690300	BP120D (1,2)
736690400	BP120D (1,3)
736690500	BP120D (1,4)
736690600	BP120D (1,5)
736690700	BP120D (1,6)
736690800	BP120D (1,7)
736690900	BP120D (1,8)
736691000	BP120D (1,9)
736691100	BP120D (2,0)
736691200	BP120D (2,1)
736691300	BP120D (2,2)
736691400	BP120D (2,3)
736691500	BP120D (2,7)
736691600	BP120D (3,2)
736691700	BP120D (3,5)
738190540	BP125D (0,9)
738190550	BP125D (1,0)
738190560	BP125D (1,1)
738190570	BP125D (1,2)
738190580	BP125D (1,3)
738190590	BP125D (1,4)
738190600	BP125D (1,5)
738190610	BP125D (1,6)
738190620	BP125D (1,7)
738190630	BP125D (1,8)
738190640	BP125D (1,9)
738190650	BP125D (2,0)
738190660	BP125D (2,1)
738190670	BP125D (2,2)
738190680	BP125D (2,3)
738190690	BP125D (2,7)
738190700	BP125D (3,2)
738190710	BP125D (3,5)
736700000	BP150D (0,9)
736700100	BP150D (1,0)
736700200	BP150D (1,1)
736700300	BP150D (1,2)
736700400	BP150D (1,3)
736700500	BP150D (1,4)
736700600	BP150D (1,5)

736700700	BP150D (1,6)
736700800	BP150D (1,7)
736700900	BP150D (1,8)
736701000	BP150D (1,9)
736701100	BP150D (2,0)
736701200	BP150D (2,1)
736701300	BP150D (2,2)
736701400	BP150D (2,3)
736701500	BP150D (2,7)
736701600	BP150D (3,2)
736701700	BP150D (3,5)
736710000	BP155D (0,9)
736710100	BP155D (1,0)
736710200	BP155D (1,1)
736710300	BP155D (1,2)
736710400	BP155D (1,3)
736710500	BP155D (1,4)
736710600	BP155D (1,5)
736710700	BP155D (1,6)
736710800	BP155D (1,7)
736710900	BP155D (1,8)
736711000	BP155D (1,9)
736711100	BP155D (2,0)
736711200	BP155D (2,1)
736711300	BP155D (2,2)
736711400	BP155D (2,3)
736711500	BP155D (2,7)
736711600	BP155D (3,2)
736711700	BP155D (3,5)
736720000	BP180D (0,9)
736720100	BP180D (1,0)
736720200	BP180D (1,1)
736720300	BP180D (1,2)
736720400	BP180D (1,3)
736720500	BP180D (1,4)
736720600	BP180D (1,5)
736720700	BP180D (1,6)
736720800	BP180D (1,7)
736720900	BP180D (1,8)
736721000	BP180D (1,9)

736721100	BP180D (2,0)
736721200	BP180D (2,1)
736721300	BP180D (2,2)
736721400	BP180D (2,3)
736721500	BP180D (2,7)
736721600	BP180D (3,2)
736721700	BP180D (3,5)
738200000	BP44,5L (0,9)
738200010	BP44,5L (1,0)
738200020	BP44,5L (1,1)
738200030	BP44,5L (1,2)
738200040	BP44,5L (1,3)
738200050	BP44,5L (1,4)
738200060	BP44,5L (1,5)
738200070	BP44,5L (1,6)
738200080	BP44,5L (1,7)
738200090	BP44,5L (1,8)
738200100	BP44,5L (1,9)
738200110	BP44,5L (2,0)
738200120	BP44,5L (2,1)
738200130	BP44,5L (2,2)
738200140	BP44,5L (2,3)
738200150	BP44,5L (2,7)
738200160	BP44,5L (3,2)
738200170	BP44,5L (3,5)
738200180	BP55L (0,9)
738200190	BP55L (1,0)
738200200	BP55L (1,1)
738200210	BP55L (1,2)
738200220	BP55L (1,3)
738200230	BP55L (1,4)
738200240	BP55L (1,5)
738200250	BP55L (1,6)
738200260	BP55L (1,7)
738200270	BP55L (1,8)
738200280	BP55L (1,9)
738200290	BP55L (2,0)
738200300	BP55L (2,1)
738200310	BP55L (2,2)
738200320	BP55L (2,3)

738200330	BP55L (2,7)
738200340	BP55L (3,2)
738200350	BP55L (3,5)
738200360	BP70L (0,9)
738200370	BP70L (1,0)
738200380	BP70L (1,1)
738200390	BP70L (1,2)
738200400	BP70L (1,3)
738200410	BP70L (1,4)
738200420	BP70L (1,5)
738200430	BP70L (1,6)
738200440	BP70L (1,7)
738200450	BP70L (1,8)
738200460	BP70L (1,9)
738200470	BP70L (2,0)
738200480	BP70L (2,1)
738200490	BP70L (2,2)
738200500	BP70L (2,3)
738200510	BP70L (2,7)
738200520	BP70L (3,2)
738200530	BP70L (3,5)
736730000	BP95L (0,9)
736730100	BP95L (1,0)
736730200	BP95L (1,1)
736730300	BP95L (1,2)
736730400	BP95L (1,3)
736730500	BP95L (1,4)
736730600	BP95L (1,5)
736730700	BP95L (1,6)
736730800	BP95L (1,7)
736730900	BP95L (1,8)
736731000	BP95L (1,9)
736731100	BP95L (2,0)
736731200	BP95L (2,1)
736731300	BP95L (2,2)
736731400	BP95L (2,3)
736731500	BP95L (2,7)
736731600	BP95L (3,2)
736731700	BP95L (3,5)
736740000	BP110L (0,9)

736740100	BP110L (1,0)
736740200	BP110L (1,1)
736740300	BP110L (1,2)
736740400	BP110L (1,3)
736740500	BP110L (1,4)
736740600	BP110L (1,5)
736740700	BP110L (1,6)
736740800	BP110L (1,7)
736740900	BP110L (1,8)
736741000	BP110L (1,9)
736741100	BP110L (2,0)
736741200	BP110L (2,1)
736741300	BP110L (2,2)
736741400	BP110L (2,3)
736741500	BP110L (2,7)
736741600	BP110L (3,2)
736741700	BP110L (3,5)
736750000	BP115L (0,9)
736750100	BP115L (1,0)
736750200	BP115L (1,1)
736750300	BP115L (1,2)
736750400	BP115L (1,3)
736750500	BP115L (1,4)
736750600	BP115L (1,5)
736750700	BP115L (1,6)
736750800	BP115L (1,7)
736750900	BP115L (1,8)
736751000	BP115L (1,9)
736751100	BP115L (2,0)
736751200	BP115L (2,1)
736751300	BP115L (2,2)
736751400	BP115L (2,3)
736751500	BP115L (2,7)
736751600	BP115L (3,2)
736751700	BP115L (3,5)
736760000	BP120L (0,9)
736760100	BP120L (1,0)
736760200	BP120L (1,1)
736760300	BP120L (1,2)
736760400	BP120L (1,3)

736760500	BP120L (1,4)
736760600	BP120L (1,5)
736760700	BP120L (1,6)
736760800	BP120L (1,7)
736760900	BP120L (1,8)
736761000	BP120L (1,9)
736761100	BP120L (2,0)
736761200	BP120L (2,1)
736761300	BP120L (2,2)
736761400	BP120L (2,3)
736761500	BP120L (2,7)
736761600	BP120L (3,2)
736761700	BP120L (3,5)
738200540	BP125L (0,9)
738200550	BP125L (1,0)
738200560	BP125L (1,1)
738200570	BP125L (1,2)
738200580	BP125L (1,3)
738200590	BP125L (1,4)
738200600	BP125L (1,5)
738200610	BP125L (1,6)
738200620	BP125L (1,7)
738200630	BP125L (1,8)
738200640	BP125L (1,9)
738200650	BP125L (2,0)
738200660	BP125L (2,1)
738200670	BP125L (2,2)
738200680	BP125L (2,3)
738200690	BP125L (2,7)
738200700	BP125L (3,2)
738200710	BP125L (3,5)
736770000	BP150L (0,9)
736770100	BP150L (1,0)
736770200	BP150L (1,1)
736770300	BP150L (1,2)
736770400	BP150L (1,3)
736770500	BP150L (1,4)
736770600	BP150L (1,5)
736770700	BP150L (1,6)
736770800	BP150L (1,7)

736770900	BP150L (1,8)
736771000	BP150L (1,9)
736771100	BP150L (2,0)
736771200	BP150L (2,1)
736771300	BP150L (2,2)
736771400	BP150L (2,3)
736771500	BP150L (2,7)
736771600	BP150L (3,2)
736771700	BP150L (3,5)
736780000	BP155L (0,9)
736780100	BP155L (1,0)
736780200	BP155L (1,1)
736780300	BP155L (1,2)
736780400	BP155L (1,3)
736780500	BP155L (1,4)
736780600	BP155L (1,5)
736780700	BP155L (1,6)
736780800	BP155L (1,7)
736780900	BP155L (1,8)
736781000	BP155L (1,9)
736781100	BP155L (2,0)
736781200	BP155L (2,1)
736781300	BP155L (2,2)
736781400	BP155L (2,3)
736781500	BP155L (2,7)
736781600	BP155L (3,2)
736781700	BP155L (3,5)
736790000	BP180L (0,9)
736790100	BP180L (1,0)
736790200	BP180L (1,1)
736790300	BP180L (1,2)
736790400	BP180L (1,3)
736790500	BP180L (1,4)
736790600	BP180L (1,5)
736790700	BP180L (1,6)
736790800	BP180L (1,7)
736790900	BP180L (1,8)
736791000	BP180L (1,9)
736791100	BP180L (2,0)
736791200	BP180L (2,1)

736791300	BP180L (2,2)
736791400	BP180L (2,3)
736791500	BP180L (2,7)
736791600	BP180L (3,2)
736791700	BP180L (3,5)
738210000	BP44,5U (0,9)
738210010	BP44,5U (1,0)
738210020	BP44,5U (1,1)
738210030	BP44,5U (1,2)
738210040	BP44,5U (1,3)
738210050	BP44,5U (1,4)
738210060	BP44,5U (1,5)
738210070	BP44,5U (1,6)
738210080	BP44,5U (1,7)
738210090	BP44,5U (1,8)
738210100	BP44,5U (1,9)
738210110	BP44,5U (2,0)
738210120	BP44,5U (2,1)
738210130	BP44,5U (2,2)
738210140	BP44,5U (2,3)
738210150	BP44,5U (2,7)
738210160	BP44,5U (3,2)
738210170	BP44,5U (3,5)
738210180	BP55U (0,9)
738210190	BP55U (1,0)
738210200	BP55U (1,1)
738210210	BP55U (1,2)
738210220	BP55U (1,3)
738210230	BP55U (1,4)
738210240	BP55U (1,5)
738210250	BP55U (1,6)
738210260	BP55U (1,7)
738210270	BP55U (1,8)
738210280	BP55U (1,9)
738210290	BP55U (2,0)
738210300	BP55U (2,1)
738210310	BP55U (2,2)
738210320	BP55U (2,3)
738210330	BP55U (2,7)
738210340	BP55U (3,2)

738210350	BP55U (3,5)
738210360	BP70U (0,9)
738210370	BP70U (1,0)
738210380	BP70U (1,1)
738210390	BP70U (1,2)
738210400	BP70U (1,3)
738210410	BP70U (1,4)
738210420	BP70U (1,5)
738210430	BP70U (1,6)
738210440	BP70U (1,7)
738210450	BP70U (1,8)
738210460	BP70U (1,9)
738210470	BP70U (2,0)
738210480	BP70U (2,1)
738210490	BP70U (2,2)
738210500	BP70U (2,3)
738210510	BP70U (2,7)
738210520	BP70U (3,2)
738210530	BP70U (3,5)
736800000	BP95U (0,9)
736800100	BP95U (1,0)
736800200	BP95U (1,1)
736800300	BP95U (1,2)
736800400	BP95U (1,3)
736800500	BP95U (1,4)
736800600	BP95U (1,5)
736800700	BP95U (1,6)
736800800	BP95U (1,7)
736800900	BP95U (1,8)
736801000	BP95U (1,9)
736801100	BP95U (2,0)
736801200	BP95U (2,1)
736801300	BP95U (2,2)
736801400	BP95U (2,3)
736801500	BP95U (2,7)
736801600	BP95U (3,2)
736801700	BP95U (3,5)
736810000	BP110U (0,9)
736810100	BP110U (1,0)
736810200	BP110U (1,1)

736810300	BP110U (1,2)
736810400	BP110U (1,3)
736810500	BP110U (1,4)
736810600	BP110U (1,5)
736810700	BP110U (1,6)
736810800	BP110U (1,7)
736810900	BP110U (1,8)
736811000	BP110U (1,9)
736811100	BP110U (2,0)
736811200	BP110U (2,1)
736811300	BP110U (2,2)
736811400	BP110U (2,3)
736811500	BP110U (2,7)
736811600	BP110U (3,2)
736811700	BP110U (3,5)
736820000	BP115U (0,9)
736820100	BP115U (1,0)
736820200	BP115U (1,1)
736820300	BP115U (1,2)
736820400	BP115U (1,3)
736820500	BP115U (1,4)
736820600	BP115U (1,5)
736820700	BP115U (1,6)
736820800	BP115U (1,7)
736820900	BP115U (1,8)
736821000	BP115U (1,9)
736821100	BP115U (2,0)
736821200	BP115U (2,1)
736821300	BP115U (2,2)
736821400	BP115U (2,3)
736821500	BP115U (2,7)
736821600	BP115U (3,2)
736821700	BP115U (3,5)
736830000	BP120U (0,9)
736830100	BP120U (1,0)
736830200	BP120U (1,1)
736830300	BP120U (1,2)
736830400	BP120U (1,3)
736830500	BP120U (1,4)
736830600	BP120U (1,5)

736830700	BP120U (1,6)
736830800	BP120U (1,7)
736830900	BP120U (1,8)
736831000	BP120U (1,9)
736831100	BP120U (2,0)
736831200	BP120U (2,1)
736831300	BP120U (2,2)
736831400	BP120U (2,3)
736831500	BP120U (2,7)
736831600	BP120U (3,2)
736831700	BP120U (3,5)
738210540	BP125U (0,9)
738210550	BP125U (1,0)
738210560	BP125U (1,1)
738210570	BP125U (1,2)
738210580	BP125U (1,3)
738210590	BP125U (1,4)
738210600	BP125U (1,5)
738210610	BP125U (1,6)
738210620	BP125U (1,7)
738210630	BP125U (1,8)
738210640	BP125U (1,9)
738210650	BP125U (2,0)
738210660	BP125U (2,1)
738210670	BP125U (2,2)
738210680	BP125U (2,3)
738210690	BP125U (2,7)
738210700	BP125U (3,2)
738210710	BP125U (3,5)
736840000	BP150U (0,9)
736840100	BP150U (1,0)
736840200	BP150U (1,1)
736840300	BP150U (1,2)
736840400	BP150U (1,3)
736840500	BP150U (1,4)
736840600	BP150U (1,5)
736840700	BP150U (1,6)
736840800	BP150U (1,7)
736840900	BP150U (1,8)
736841000	BP150U (1,9)

736841100	BP150U (2,0)
736841200	BP150U (2,1)
736841300	BP150U (2,2)
736841400	BP150U (2,3)
736841500	BP150U (2,7)
736841600	BP150U (3,2)
736841700	BP150U (3,5)
736850000	BP155U (0,9)
736850100	BP155U (1,0)
736850200	BP155U (1,1)
736850300	BP155U (1,2)
736850400	BP155U (1,3)
736850500	BP155U (1,4)
736850600	BP155U (1,5)
736850700	BP155U (1,6)
736850800	BP155U (1,7)
736850900	BP155U (1,8)
736851000	BP155U (1,9)
736851100	BP155U (2,0)
736851200	BP155U (2,1)
736851300	BP155U (2,2)
736851400	BP155U (2,3)
736851500	BP155U (2,7)
736851600	BP155U (3,2)
736851700	BP155U (3,5)
736860000	BP180U (0,9)
736860100	BP180U (1,0)
736860200	BP180U (1,1)
736860300	BP180U (1,2)
736860400	BP180U (1,3)
736860500	BP180U (1,4)
736860600	BP180U (1,5)
736860700	BP180U (1,6)
736860800	BP180U (1,7)
736860900	BP180U (1,8)
736861000	BP180U (1,9)
736861100	BP180U (2,0)
736861200	BP180U (2,1)
736861300	BP180U (2,2)
736861400	BP180U (2,3)

736861500	BP180U (2,7)
736861600	BP180U (3,2)
736861700	BP180U (3,5)
738700000	BP44,5Q (0,9)
738700010	BP44,5Q (1,0)
738700020	BP44,5Q (1,1)
738700030	BP44,5Q (1,2)
738700040	BP44,5Q (1,3)
738700050	BP44,5Q (1,4)
738700060	BP44,5Q (1,5)
738700070	BP44,5Q (1,6)
738700080	BP44,5Q (1,7)
738700090	BP44,5Q (1,8)
738700100	BP44,5Q (1,9)
738700110	BP44,5Q (2,0)
738700120	BP44,5Q (2,1)
738700130	BP44,5Q (2,2)
738700140	BP44,5Q (2,3)
738700150	BP44,5Q (2,7)
738700160	BP44,5Q (3,2)
738700170	BP44,5Q (3,5)
738700180	BP55Q (0,9)
738700190	BP55Q (1,0)
738700200	BP55Q (1,1)
738700210	BP55Q (1,2)
738700220	BP55Q (1,3)
738700230	BP55Q (1,4)
738700240	BP55Q (1,5)
738700250	BP55Q (1,6)
738700260	BP55Q (1,7)
738700270	BP55Q (1,8)
738700280	BP55Q (1,9)
738700290	BP55Q (2,0)
738700300	BP55Q (2,1)
738700310	BP55Q (2,2)
738700320	BP55Q (2,3)
738700330	BP55Q (2,7)
738700340	BP55Q (3,2)
738700350	BP55Q (3,5)
738700360	BP70Q (0,9)

738700370	BP70Q (1,0)
738700380	BP70Q (1,1)
738700390	BP70Q (1,2)
738700400	BP70Q (1,3)
738700410	BP70Q (1,4)
738700420	BP70Q (1,5)
738700430	BP70Q (1,6)
738700440	BP70Q (1,7)
738700450	BP70Q (1,8)
738700460	BP70Q (1,9)
738700470	BP70Q (2,0)
738700480	BP70Q (2,1)
738700490	BP70Q (2,2)
738700500	BP70Q (2,3)
738700510	BP70Q (2,7)
738700520	BP70Q (3,2)
738700530	BP70Q (3,5)
738700540	BP95Q (0,9)
738700550	BP95Q (1,0)
738700560	BP95Q (1,1)
738700570	BP95Q (1,2)
738700580	BP95Q (1,3)
738700590	BP95Q (1,4)
738700600	BP95Q (1,5)
738700610	BP95Q (1,6)
738700620	BP95Q (1,7)
738700630	BP95Q (1,8)
738700640	BP95Q (1,9)
738700650	BP95Q (2,0)
738700660	BP95Q (2,1)
738700670	BP95Q (2,2)
738700680	BP95Q (2,3)
738700690	BP95Q (2,7)
738700700	BP95Q (3,2)
738700710	BP95Q (3,5)
738700720	BP110Q (0,9)
738700730	BP110Q (1,0)
738700740	BP110Q (1,1)
738700750	BP110Q (1,2)
738700760	BP110Q (1,3)

738700770	BP110Q (1,4)
738700780	BP110Q (1,5)
738700790	BP110Q (1,6)
738700800	BP110Q (1,7)
738700810	BP110Q (1,8)
738700820	BP110Q (1,9)
738700830	BP110Q (2,0)
738700840	BP110Q (2,1)
738700850	BP110Q (2,2)
738700860	BP110Q (2,3)
738700870	BP110Q (2,7)
738700880	BP110Q (3,2)
738700890	BP110Q (3,5)
738700900	BP115Q (0,9)
738700910	BP115Q (1,0)
738700920	BP115Q (1,1)
738700930	BP115Q (1,2)
738700940	BP115Q (1,3)
738700950	BP115Q (1,4)
738700960	BP115Q (1,5)
738700970	BP115Q (1,6)
738700980	BP115Q (1,7)
738700990	BP115Q (1,8)
738701000	BP115Q (1,9)
738701010	BP115Q (2,0)
738701020	BP115Q (2,1)
738701030	BP115Q (2,2)
738701040	BP115Q (2,3)
738701050	BP115Q (2,7)
738701060	BP115Q (3,2)
738701070	BP115Q (3,5)
738701080	BP120Q (0,9)
738701090	BP120Q (1,0)
738701100	BP120Q (1,1)
738701110	BP120Q (1,2)
738701120	BP120Q (1,3)
738701130	BP120Q (1,4)
738701140	BP120Q (1,5)
738701150	BP120Q (1,6)
738701160	BP120Q (1,7)

738701170	BP120Q (1,8)
738701180	BP120Q (1,9)
738701190	BP120Q (2,0)
738701200	BP120Q (2,1)
738701210	BP120Q (2,2)
738701220	BP120Q (2,3)
738701230	BP120Q (2,7)
738701240	BP120Q (3,2)
738701250	BP120Q (3,5)
738701260	BP125Q (0,9)
738701270	BP125Q (1,0)
738701280	BP125Q (1,1)
738701290	BP125Q (1,2)
738701300	BP125Q (1,3)
738701310	BP125Q (1,4)
738701320	BP125Q (1,5)
738701330	BP125Q (1,6)
738701340	BP125Q (1,7)
738701350	BP125Q (1,8)
738701360	BP125Q (1,9)
738701370	BP125Q (2,0)
738701380	BP125Q (2,1)
738701390	BP125Q (2,2)
738701400	BP125Q (2,3)
738701410	BP125Q (2,7)
738701420	BP125Q (3,2)
738701430	BP125Q (3,5)
738701440	BP150Q (0,9)
738701450	BP150Q (1,0)
738701460	BP150Q (1,1)
738701470	BP150Q (1,2)
738701480	BP150Q (1,3)
738701490	BP150Q (1,4)
738701500	BP150Q (1,5)
738701510	BP150Q (1,6)
738701520	BP150Q (1,7)
738701530	BP150Q (1,8)
738701540	BP150Q (1,9)
738701550	BP150Q (2,0)
738701560	BP150Q (2,1)

738701570	BP150Q (2,2)
738701580	BP150Q (2,3)
738701590	BP150Q (2,7)
738701600	BP150Q (3,2)
738701610	BP150Q (3,5)
738701620	BP155Q (0,9)
738701630	BP155Q (1,0)
738701640	BP155Q (1,1)
738701650	BP155Q (1,2)
738701660	BP155Q (1,3)
738701670	BP155Q (1,4)
738701680	BP155Q (1,5)
738701690	BP155Q (1,6)
738701700	BP155Q (1,7)
738701710	BP155Q (1,8)
738701720	BP155Q (1,9)
738701730	BP155Q (2,0)
738701740	BP155Q (2,1)
738701750	BP155Q (2,2)
738701760	BP155Q (2,3)
738701770	BP155Q (2,7)
738701780	BP155Q (3,2)
738701790	BP155Q (3,5)
738701800	BP180Q (0,9)
738701810	BP180Q (1,0)
738701820	BP180Q (1,1)
738701830	BP180Q (1,2)
738701840	BP180Q (1,3)
738701850	BP180Q (1,4)
738701860	BP180Q (1,5)
738701870	BP180Q (1,6)
738701880	BP180Q (1,7)
738701890	BP180Q (1,8)
738701900	BP180Q (1,9)
738701910	BP180Q (2,0)
738701920	BP180Q (2,1)
738701930	BP180Q (2,2)
738701940	BP180Q (2,3)
738701950	BP180Q (2,7)
738701960	BP180Q (3,2)

738701970	BP180Q (3,5)
738710000	BP44,5E (0,9)
738710010	BP44,5E (1,0)
738710020	BP44,5E (1,1)
738710030	BP44,5E (1,2)
738710040	BP44,5E (1,3)
738710050	BP44,5E (1,4)
738710060	BP44,5E (1,5)
738710070	BP44,5E (1,6)
738710080	BP44,5E (1,7)
738710090	BP44,5E (1,8)
738710100	BP44,5E (1,9)
738710110	BP44,5E (2,0)
738710120	BP44,5E (2,1)
738710130	BP44,5E (2,2)
738710140	BP44,5E (2,3)
738710150	BP44,5E (2,7)
738710160	BP44,5E (3,2)
738710170	BP44,5E (3,5)
738710180	BP55E (0,9)
738710190	BP55E (1,0)
738710200	BP55E (1,1)
738710210	BP55E (1,2)
738710220	BP55E (1,3)
738710230	BP55E (1,4)
738710240	BP55E (1,5)
738710250	BP55E (1,6)
738710260	BP55E (1,7)
738710270	BP55E (1,8)
738710280	BP55E (1,9)
738710290	BP55E (2,0)
738710300	BP55E (2,1)
738710310	BP55E (2,2)
738710320	BP55E (2,3)
738710330	BP55E (2,7)
738710340	BP55E (3,2)
738710350	BP55E (3,5)
738710360	BP70E (0,9)
738710370	BP70E (1,0)
738710380	BP70E (1,1)

738710390	BP70E (1,2)
738710400	BP70E (1,3)
738710410	BP70E (1,4)
738710420	BP70E (1,5)
738710430	BP70E (1,6)
738710440	BP70E (1,7)
738710450	BP70E (1,8)
738710460	BP70E (1,9)
738710470	BP70E (2,0)
738710480	BP70E (2,1)
738710490	BP70E (2,2)
738710500	BP70E (2,3)
738710510	BP70E (2,7)
738710520	BP70E (3,2)
738710530	BP70E (3,5)
738710540	BP95E (0,9)
738710550	BP95E (1,0)
738710560	BP95E (1,1)
738710570	BP95E (1,2)
738710580	BP95E (1,3)
738710590	BP95E (1,4)
738710600	BP95E (1,5)
738710610	BP95E (1,6)
738710620	BP95E (1,7)
738710630	BP95E (1,8)
738710640	BP95E (1,9)
738710650	BP95E (2,0)
738710660	BP95E (2,1)
738710670	BP95E (2,2)
738710680	BP95E (2,3)
738710690	BP95E (2,7)
738710700	BP95E (3,2)
738710710	BP95E (3,5)
738710720	BP110E (0,9)
738710730	BP110E (1,0)
738710740	BP110E (1,1)
738710750	BP110E (1,2)
738710760	BP110E (1,3)
738710770	BP110E (1,4)
738710780	BP110E (1,5)

738710790	BP110E (1,6)
738710800	BP110E (1,7)
738710810	BP110E (1,8)
738710820	BP110E (1,9)
738710830	BP110E (2,0)
738710840	BP110E (2,1)
738710850	BP110E (2,2)
738710860	BP110E (2,3)
738710870	BP110E (2,7)
738710880	BP110E (3,2)
738710890	BP110E (3,5)
738710900	BP115E (0,9)
738710910	BP115E (1,0)
738710920	BP115E (1,1)
738710930	BP115E (1,2)
738710940	BP115E (1,3)
738710950	BP115E (1,4)
738710960	BP115E (1,5)
738710970	BP115E (1,6)
738710980	BP115E (1,7)
738710990	BP115E (1,8)
738711000	BP115E (1,9)
738711010	BP115E (2,0)
738711020	BP115E (2,1)
738711030	BP115E (2,2)
738711040	BP115E (2,3)
738711050	BP115E (2,7)
738711060	BP115E (3,2)
738711070	BP115E (3,5)
738711080	BP120E (0,9)
738711090	BP120E (1,0)
738711100	BP120E (1,1)
738711110	BP120E (1,2)
738711120	BP120E (1,3)
738711130	BP120E (1,4)
738711140	BP120E (1,5)
738711150	BP120E (1,6)
738711160	BP120E (1,7)
738711170	BP120E (1,8)
738711180	BP120E (1,9)

738711190	BP120E (2,0)
738711200	BP120E (2,1)
738711210	BP120E (2,2)
738711220	BP120E (2,3)
738711230	BP120E (2,7)
738711240	BP120E (3,2)
738711250	BP120E (3,5)
738711260	BP125E (0,9)
738711270	BP125E (1,0)
738711280	BP125E (1,1)
738711290	BP125E (1,2)
738711300	BP125E (1,3)
738711310	BP125E (1,4)
738711320	BP125E (1,5)
738711330	BP125E (1,6)
738711340	BP125E (1,7)
738711350	BP125E (1,8)
738711360	BP125E (1,9)
738711370	BP125E (2,0)
738711380	BP125E (2,1)
738711390	BP125E (2,2)
738711400	BP125E (2,3)
738711410	BP125E (2,7)
738711420	BP125E (3,2)
738711430	BP125E (3,5)
738711440	BP150E (0,9)
738711450	BP150E (1,0)
738711460	BP150E (1,1)
738711470	BP150E (1,2)
738711480	BP150E (1,3)
738711490	BP150E (1,4)
738711500	BP150E (1,5)
738711510	BP150E (1,6)
738711520	BP150E (1,7)
738711530	BP150E (1,8)
738711540	BP150E (1,9)
738711550	BP150E (2,0)
738711560	BP150E (2,1)
738711570	BP150E (2,2)
738711580	BP150E (2,3)

738711590	BP150E (2,7)
738711600	BP150E (3,2)
738711610	BP150E (3,5)
738711620	BP155E (0,9)
738711630	BP155E (1,0)
738711640	BP155E (1,1)
738711650	BP155E (1,2)
738711660	BP155E (1,3)
738711670	BP155E (1,4)
738711680	BP155E (1,5)
738711690	BP155E (1,6)
738711700	BP155E (1,7)
738711710	BP155E (1,8)
738711720	BP155E (1,9)
738711730	BP155E (2,0)
738711740	BP155E (2,1)
738711750	BP155E (2,2)
738711760	BP155E (2,3)
738711770	BP155E (2,7)
738711780	BP155E (3,2)
738711790	BP155E (3,5)
738711800	BP180E (0,9)
738711810	BP180E (1,0)
738711820	BP180E (1,1)
738711830	BP180E (1,2)
738711840	BP180E (1,3)
738711850	BP180E (1,4)
738711860	BP180E (1,5)
738711870	BP180E (1,6)
738711880	BP180E (1,7)
738711890	BP180E (1,8)
738711900	BP180E (1,9)
738711910	BP180E (2,0)
738711920	BP180E (2,1)
738711930	BP180E (2,2)
738711940	BP180E (2,3)
738711950	BP180E (2,7)
738711960	BP180E (3,2)
738711970	BP180E (3,5)
738720000	BP44,5B (0,9)

738720010	BP44,5B (1,0)
738720020	BP44,5B (1,1)
738720030	BP44,5B (1,2)
738720040	BP44,5B (1,3)
738720050	BP44,5B (1,4)
738720060	BP44,5B (1,5)
738720070	BP44,5B (1,6)
738720080	BP44,5B (1,7)
738720090	BP44,5B (1,8)
738720100	BP44,5B (1,9)
738720110	BP44,5B (2,0)
738720120	BP44,5B (2,1)
738720130	BP44,5B (2,2)
738720140	BP44,5B (2,3)
738720150	BP44,5B (2,7)
738720160	BP44,5B (3,2)
738720170	BP44,5B (3,5)
738720180	BP55B (0,9)
738720190	BP55B (1,0)
738720200	BP55B (1,1)
738720210	BP55B (1,2)
738720220	BP55B (1,3)
738720230	BP55B (1,4)
738720240	BP55B (1,5)
738720250	BP55B (1,6)
738720260	BP55B (1,7)
738720270	BP55B (1,8)
738720280	BP55B (1,9)
738720290	BP55B (2,0)
738720300	BP55B (2,1)
738720310	BP55B (2,2)
738720320	BP55B (2,3)
738720330	BP55B (2,7)
738720340	BP55B (3,2)
738720350	BP55B (3,5)
738720360	BP70B (0,9)
738720370	BP70B (1,0)
738720380	BP70B (1,1)
738720390	BP70B (1,2)
738720400	BP70B (1,3)

738720410	BP70B (1,4)
738720420	BP70B (1,5)
738720430	BP70B (1,6)
738720440	BP70B (1,7)
738720450	BP70B (1,8)
738720460	BP70B (1,9)
738720470	BP70B (2,0)
738720480	BP70B (2,1)
738720490	BP70B (2,2)
738720500	BP70B (2,3)
738720510	BP70B (2,7)
738720520	BP70B (3,2)
738720530	BP70B (3,5)
738720540	BP95B (0,9)
738720550	BP95B (1,0)
738720560	BP95B (1,1)
738720570	BP95B (1,2)
738720580	BP95B (1,3)
738720590	BP95B (1,4)
738720600	BP95B (1,5)
738720610	BP95B (1,6)
738720620	BP95B (1,7)
738720630	BP95B (1,8)
738720640	BP95B (1,9)
738720650	BP95B (2,0)
738720660	BP95B (2,1)
738720670	BP95B (2,2)
738720680	BP95B (2,3)
738720690	BP95B (2,7)
738720700	BP95B (3,2)
738720710	BP95B (3,5)
738720720	BP110B (0,9)
738720730	BP110B (1,0)
738720740	BP110B (1,1)
738720750	BP110B (1,2)
738720760	BP110B (1,3)
738720770	BP110B (1,4)
738720780	BP110B (1,5)
738720790	BP110B (1,6)
738720800	BP110B (1,7)

738720810	BP110B (1,8)
738720820	BP110B (1,9)
738720830	BP110B (2,0)
738720840	BP110B (2,1)
738720850	BP110B (2,2)
738720860	BP110B (2,3)
738720870	BP110B (2,7)
738720880	BP110B (3,2)
738720890	BP110B (3,5)
738720900	BP115B (0,9)
738720910	BP115B (1,0)
738720920	BP115B (1,1)
738720930	BP115B (1,2)
738720940	BP115B (1,3)
738720950	BP115B (1,4)
738720960	BP115B (1,5)
738720970	BP115B (1,6)
738720980	BP115B (1,7)
738720990	BP115B (1,8)
738721000	BP115B (1,9)
738721010	BP115B (2,0)
738721020	BP115B (2,1)
738721030	BP115B (2,2)
738721040	BP115B (2,3)
738721050	BP115B (2,7)
738721060	BP115B (3,2)
738721070	BP115B (3,5)
738721080	BP120B (0,9)
738721090	BP120B (1,0)
738721100	BP120B (1,1)
738721110	BP120B (1,2)
738721120	BP120B (1,3)
738721130	BP120B (1,4)
738721140	BP120B (1,5)
738721150	BP120B (1,6)
738721160	BP120B (1,7)
738721170	BP120B (1,8)
738721180	BP120B (1,9)
738721190	BP120B (2,0)
738721200	BP120B (2,1)

738721210	BP120B (2,2)
738721220	BP120B (2,3)
738721230	BP120B (2,7)
738721240	BP120B (3,2)
738721250	BP120B (3,5)
738721260	BP125B (0,9)
738721270	BP125B (1,0)
738721280	BP125B (1,1)
738721290	BP125B (1,2)
738721300	BP125B (1,3)
738721310	BP125B (1,4)
738721320	BP125B (1,5)
738721330	BP125B (1,6)
738721340	BP125B (1,7)
738721350	BP125B (1,8)
738721360	BP125B (1,9)
738721370	BP125B (2,0)
738721380	BP125B (2,1)
738721390	BP125B (2,2)
738721400	BP125B (2,3)
738721410	BP125B (2,7)
738721420	BP125B (3,2)
738721430	BP125B (3,5)
738721440	BP150B (0,9)
738721450	BP150B (1,0)
738721460	BP150B (1,1)
738721470	BP150B (1,2)
738721480	BP150B (1,3)
738721490	BP150B (1,4)
738721500	BP150B (1,5)
738721510	BP150B (1,6)
738721520	BP150B (1,7)
738721530	BP150B (1,8)
738721540	BP150B (1,9)
738721550	BP150B (2,0)
738721560	BP150B (2,1)
738721570	BP150B (2,2)
738721580	BP150B (2,3)
738721590	BP150B (2,7)
738721600	BP150B (3,2)

738721610	BP150B (3,5)
738721620	BP155B (0,9)
738721630	BP155B (1,0)
738721640	BP155B (1,1)
738721650	BP155B (1,2)
738721660	BP155B (1,3)
738721670	BP155B (1,4)
738721680	BP155B (1,5)
738721690	BP155B (1,6)
738721700	BP155B (1,7)
738721710	BP155B (1,8)
738721720	BP155B (1,9)
738721730	BP155B (2,0)
738721740	BP155B (2,1)
738721750	BP155B (2,2)
738721760	BP155B (2,3)
738721770	BP155B (2,7)
738721780	BP155B (3,2)
738721790	BP155B (3,5)
738721800	BP180B (0,9)
738721810	BP180B (1,0)
738721820	BP180B (1,1)
738721830	BP180B (1,2)
738721840	BP180B (1,3)
738721850	BP180B (1,4)
738721860	BP180B (1,5)
738721870	BP180B (1,6)
738721880	BP180B (1,7)
738721890	BP180B (1,8)
738721900	BP180B (1,9)
738721910	BP180B (2,0)
738721920	BP180B (2,1)
738721930	BP180B (2,2)
738721940	BP180B (2,3)
738721950	BP180B (2,7)
738721960	BP180B (3,2)
738721970	BP180B (3,5)
738730000	BP44,5K (0,9)
738730010	BP44,5K (1,0)
738730020	BP44,5K (1,1)

738730030	BP44,5K (1,2)
738730040	BP44,5K (1,3)
738730050	BP44,5K (1,4)
738730060	BP44,5K (1,5)
738730070	BP44,5K (1,6)
738730080	BP44,5K (1,7)
738730090	BP44,5K (1,8)
738730100	BP44,5K (1,9)
738730110	BP44,5K (2,0)
738730120	BP44,5K (2,1)
738730130	BP44,5K (2,2)
738730140	BP44,5K (2,3)
738730150	BP44,5K (2,7)
738730160	BP44,5K (3,2)
738730170	BP44,5K (3,5)
738730180	BP55K (0,9)
738730190	BP55K (1,0)
738730200	BP55K (1,1)
738730210	BP55K (1,2)
738730220	BP55K (1,3)
738730230	BP55K (1,4)
738730240	BP55K (1,5)
738730250	BP55K (1,6)
738730260	BP55K (1,7)
738730270	BP55K (1,8)
738730280	BP55K (1,9)
738730290	BP55K (2,0)
738730300	BP55K (2,1)
738730310	BP55K (2,2)
738730320	BP55K (2,3)
738730330	BP55K (2,7)
738730340	BP55K (3,2)
738730350	BP55K (3,5)
738730360	BP70K (0,9)
738730370	BP70K (1,0)
738730380	BP70K (1,1)
738730390	BP70K (1,2)
738730400	BP70K (1,3)
738730410	BP70K (1,4)
738730420	BP70K (1,5)

738730430	BP70K (1,6)
738730440	BP70K (1,7)
738730450	BP70K (1,8)
738730460	BP70K (1,9)
738730470	BP70K (2,0)
738730480	BP70K (2,1)
738730490	BP70K (2,2)
738730500	BP70K (2,3)
738730510	BP70K (2,7)
738730520	BP70K (3,2)
738730530	BP70K (3,5)
738730540	BP95K (0,9)
738730550	BP95K (1,0)
738730560	BP95K (1,1)
738730570	BP95K (1,2)
738730580	BP95K (1,3)
738730590	BP95K (1,4)
738730600	BP95K (1,5)
738730610	BP95K (1,6)
738730620	BP95K (1,7)
738730630	BP95K (1,8)
738730640	BP95K (1,9)
738730650	BP95K (2,0)
738730660	BP95K (2,1)
738730670	BP95K (2,2)
738730680	BP95K (2,3)
738730690	BP95K (2,7)
738730700	BP95K (3,2)
738730710	BP95K (3,5)
738730720	BP110K (0,9)
738730730	BP110K (1,0)
738730740	BP110K (1,1)
738730750	BP110K (1,2)
738730760	BP110K (1,3)
738730770	BP110K (1,4)
738730780	BP110K (1,5)
738730790	BP110K (1,6)
738730800	BP110K (1,7)
738730810	BP110K (1,8)
738730820	BP110K (1,9)

738730830	BP110K (2,0)
738730840	BP110K (2,1)
738730850	BP110K (2,2)
738730860	BP110K (2,3)
738730870	BP110K (2,7)
738730880	BP110K (3,2)
738730890	BP110K (3,5)
738730900	BP115K (0,9)
738730910	BP115K (1,0)
738730920	BP115K (1,1)
738730930	BP115K (1,2)
738730940	BP115K (1,3)
738730950	BP115K (1,4)
738730960	BP115K (1,5)
738730970	BP115K (1,6)
738730980	BP115K (1,7)
738730990	BP115K (1,8)
738731000	BP115K (1,9)
738731010	BP115K (2,0)
738731020	BP115K (2,1)
738731030	BP115K (2,2)
738731040	BP115K (2,3)
738731050	BP115K (2,7)
738731060	BP115K (3,2)
738731070	BP115K (3,5)
738731080	BP120K (0,9)
738731090	BP120K (1,0)
738731100	BP120K (1,1)
738731110	BP120K (1,2)
738731120	BP120K (1,3)
738731130	BP120K (1,4)
738731140	BP120K (1,5)
738731150	BP120K (1,6)
738731160	BP120K (1,7)
738731170	BP120K (1,8)
738731180	BP120K (1,9)
738731190	BP120K (2,0)
738731200	BP120K (2,1)
738731210	BP120K (2,2)
738731220	BP120K (2,3)

738731230	BP120K (2,7)
738731240	BP120K (3,2)
738731250	BP120K (3,5)
738731260	BP125K (0,9)
738731270	BP125K (1,0)
738731280	BP125K (1,1)
738731290	BP125K (1,2)
738731300	BP125K (1,3)
738731310	BP125K (1,4)
738731320	BP125K (1,5)
738731330	BP125K (1,6)
738731340	BP125K (1,7)
738731350	BP125K (1,8)
738731360	BP125K (1,9)
738731370	BP125K (2,0)
738731380	BP125K (2,1)
738731390	BP125K (2,2)
738731400	BP125K (2,3)
738731410	BP125K (2,7)
738731420	BP125K (3,2)
738731430	BP125K (3,5)
738731440	BP150K (0,9)
738731450	BP150K (1,0)
738731460	BP150K (1,1)
738731470	BP150K (1,2)
738731480	BP150K (1,3)
738731490	BP150K (1,4)
738731500	BP150K (1,5)
738731510	BP150K (1,6)
738731520	BP150K (1,7)
738731530	BP150K (1,8)
738731540	BP150K (1,9)
738731550	BP150K (2,0)
738731560	BP150K (2,1)
738731570	BP150K (2,2)
738731580	BP150K (2,3)
738731590	BP150K (2,7)
738731600	BP150K (3,2)
738731610	BP150K (3,5)
738731620	BP155K (0,9)

738731630	BP155K (1,0)
738731640	BP155K (1,1)
738731650	BP155K (1,2)
738731660	BP155K (1,3)
738731670	BP155K (1,4)
738731680	BP155K (1,5)
738731690	BP155K (1,6)
738731700	BP155K (1,7)
738731710	BP155K (1,8)
738731720	BP155K (1,9)
738731730	BP155K (2,0)
738731740	BP155K (2,1)
738731750	BP155K (2,2)
738731760	BP155K (2,3)
738731770	BP155K (2,7)
738731780	BP155K (3,2)
738731790	BP155K (3,5)
738731800	BP180K (0,9)
738731810	BP180K (1,0)
738731820	BP180K (1,1)
738731830	BP180K (1,2)
738731840	BP180K (1,3)
738731850	BP180K (1,4)
738731860	BP180K (1,5)
738731870	BP180K (1,6)
738731880	BP180K (1,7)
738731890	BP180K (1,8)
738731900	BP180K (1,9)
738731910	BP180K (2,0)
738731920	BP180K (2,1)
738731930	BP180K (2,2)
738731940	BP180K (2,3)
738731950	BP180K (2,7)
738731960	BP180K (3,2)
738731970	BP180K (3,5)
738740000	BP44,5Y (0,9)
738740010	BP44,5Y (1,0)
738740020	BP44,5Y (1,1)
738740030	BP44,5Y (1,2)
738740040	BP44,5Y (1,3)

738740050	BP44,5Y (1,4)
738740060	BP44,5Y (1,5)
738740070	BP44,5Y (1,6)
738740080	BP44,5Y (1,7)
738740090	BP44,5Y (1,8)
738740100	BP44,5Y (1,9)
738740110	BP44,5Y (2,0)
738740120	BP44,5Y (2,1)
738740130	BP44,5Y (2,2)
738740140	BP44,5Y (2,3)
738740150	BP44,5Y (2,7)
738740160	BP44,5Y (3,2)
738740170	BP44,5Y (3,5)
738740180	BP55Y (0,9)
738740190	BP55Y (1,0)
738740200	BP55Y (1,1)
738740210	BP55Y (1,2)
738740220	BP55Y (1,3)
738740230	BP55Y (1,4)
738740240	BP55Y (1,5)
738740250	BP55Y (1,6)
738740260	BP55Y (1,7)
738740270	BP55Y (1,8)
738740280	BP55Y (1,9)
738740290	BP55Y (2,0)
738740300	BP55Y (2,1)
738740310	BP55Y (2,2)
738740320	BP55Y (2,3)
738740330	BP55Y (2,7)
738740340	BP55Y (3,2)
738740350	BP55Y (3,5)
738740360	BP70Y (0,9)
738740370	BP70Y (1,0)
738740380	BP70Y (1,1)
738740390	BP70Y (1,2)
738740400	BP70Y (1,3)
738740410	BP70Y (1,4)
738740420	BP70Y (1,5)
738740430	BP70Y (1,6)
738740440	BP70Y (1,7)

738740450	BP70Y (1,8)
738740460	BP70Y (1,9)
738740470	BP70Y (2,0)
738740480	BP70Y (2,1)
738740490	BP70Y (2,2)
738740500	BP70Y (2,3)
738740510	BP70Y (2,7)
738740520	BP70Y (3,2)
738740530	BP70Y (3,5)
738740540	BP95Y (0,9)
738740550	BP95Y (1,0)
738740560	BP95Y (1,1)
738740570	BP95Y (1,2)
738740580	BP95Y (1,3)
738740590	BP95Y (1,4)
738740600	BP95Y (1,5)
738740610	BP95Y (1,6)
738740620	BP95Y (1,7)
738740630	BP95Y (1,8)
738740640	BP95Y (1,9)
738740650	BP95Y (2,0)
738740660	BP95Y (2,1)
738740670	BP95Y (2,2)
738740680	BP95Y (2,3)
738740690	BP95Y (2,7)
738740700	BP95Y (3,2)
738740710	BP95Y (3,5)
738740720	BP110Y (0,9)
738740730	BP110Y (1,0)
738740740	BP110Y (1,1)
738740750	BP110Y (1,2)
738740760	BP110Y (1,3)
738740770	BP110Y (1,4)
738740780	BP110Y (1,5)
738740790	BP110Y (1,6)
738740800	BP110Y (1,7)
738740810	BP110Y (1,8)
738740820	BP110Y (1,9)
738740830	BP110Y (2,0)
738740840	BP110Y (2,1)

738740850	BP110Y (2,2)
738740860	BP110Y (2,3)
738740870	BP110Y (2,7)
738740880	BP110Y (3,2)
738740890	BP110Y (3,5)
738740900	BP115Y (0,9)
738740910	BP115Y (1,0)
738740920	BP115Y (1,1)
738740930	BP115Y (1,2)
738740940	BP115Y (1,3)
738740950	BP115Y (1,4)
738740960	BP115Y (1,5)
738740970	BP115Y (1,6)
738740980	BP115Y (1,7)
738740990	BP115Y (1,8)
738741000	BP115Y (1,9)
738741010	BP115Y (2,0)
738741020	BP115Y (2,1)
738741030	BP115Y (2,2)
738741040	BP115Y (2,3)
738741050	BP115Y (2,7)
738741060	BP115Y (3,2)
738741070	BP115Y (3,5)
738741080	BP120Y (0,9)
738741090	BP120Y (1,0)
738741100	BP120Y (1,1)
738741110	BP120Y (1,2)
738741120	BP120Y (1,3)
738741130	BP120Y (1,4)
738741140	BP120Y (1,5)
738741150	BP120Y (1,6)
738741160	BP120Y (1,7)
738741170	BP120Y (1,8)
738741180	BP120Y (1,9)
738741190	BP120Y (2,0)
738741200	BP120Y (2,1)
738741210	BP120Y (2,2)
738741220	BP120Y (2,3)
738741230	BP120Y (2,7)
738741240	BP120Y (3,2)

738741250	BP120Y (3,5)
738741260	BP125Y (0,9)
738741270	BP125Y (1,0)
738741280	BP125Y (1,1)
738741290	BP125Y (1,2)
738741300	BP125Y (1,3)
738741310	BP125Y (1,4)
738741320	BP125Y (1,5)
738741330	BP125Y (1,6)
738741340	BP125Y (1,7)
738741350	BP125Y (1,8)
738741360	BP125Y (1,9)
738741370	BP125Y (2,0)
738741380	BP125Y (2,1)
738741390	BP125Y (2,2)
738741400	BP125Y (2,3)
738741410	BP125Y (2,7)
738741420	BP125Y (3,2)
738741430	BP125Y (3,5)
738741440	BP150Y (0,9)
738741450	BP150Y (1,0)
738741460	BP150Y (1,1)
738741470	BP150Y (1,2)
738741480	BP150Y (1,3)
738741490	BP150Y (1,4)
738741500	BP150Y (1,5)
738741510	BP150Y (1,6)
738741520	BP150Y (1,7)
738741530	BP150Y (1,8)
738741540	BP150Y (1,9)
738741550	BP150Y (2,0)
738741560	BP150Y (2,1)
738741570	BP150Y (2,2)
738741580	BP150Y (2,3)
738741590	BP150Y (2,7)
738741600	BP150Y (3,2)
738741610	BP150Y (3,5)
738741620	BP155Y (0,9)
738741630	BP155Y (1,0)
738741640	BP155Y (1,1)

738741650	BP155Y (1,2)
738741660	BP155Y (1,3)
738741670	BP155Y (1,4)
738741680	BP155Y (1,5)
738741690	BP155Y (1,6)
738741700	BP155Y (1,7)
738741710	BP155Y (1,8)
738741720	BP155Y (1,9)
738741730	BP155Y (2,0)
738741740	BP155Y (2,1)
738741750	BP155Y (2,2)
738741760	BP155Y (2,3)
738741770	BP155Y (2,7)
738741780	BP155Y (3,2)
738741790	BP155Y (3,5)
738741800	BP180Y (0,9)
738741810	BP180Y (1,0)
738741820	BP180Y (1,1)
738741830	BP180Y (1,2)
738741840	BP180Y (1,3)
738741850	BP180Y (1,4)
738741860	BP180Y (1,5)
738741870	BP180Y (1,6)
738741880	BP180Y (1,7)
738741890	BP180Y (1,8)
738741900	BP180Y (1,9)
738741910	BP180Y (2,0)
738741920	BP180Y (2,1)
738741930	BP180Y (2,2)
738741940	BP180Y (2,3)
738741950	BP180Y (2,7)
738741960	BP180Y (3,2)
738741970	BP180Y (3,5)
738940000	BP44,5W (0,9)
738940010	BP44,5W (1,0)
738940020	BP44,5W (1,1)
738940030	BP44,5W (1,2)
738940040	BP44,5W (1,3)
738940050	BP44,5W (1,4)
738940060	BP44,5W (1,5)

738940070	BP44,5W (1,6)
738940080	BP44,5W (1,7)
738940090	BP44,5W (1,8)
738940100	BP44,5W (1,9)
738940110	BP44,5W (2,0)
738940120	BP44,5W (2,1)
738940130	BP44,5W (2,2)
738940140	BP44,5W (2,3)
738940150	BP44,5W (2,7)
738940160	BP44,5W (3,2)
738940170	BP44,5W (3,5)
738940180	BP55W (0,9)
738940190	BP55W (1,0)
738940200	BP55W (1,1)
738940210	BP55W (1,2)
738940220	BP55W (1,3)
738940230	BP55W (1,4)
738940240	BP55W (1,5)
738940250	BP55W (1,6)
738940260	BP55W (1,7)
738940270	BP55W (1,8)
738940280	BP55W (1,9)
738940290	BP55W (2,0)
738940300	BP55W (2,1)
738940310	BP55W (2,2)
738940320	BP55W (2,3)
738940330	BP55W (2,7)
738940340	BP55W (3,2)
738940350	BP55W (3,5)
738940360	BP70W (0,9)
738940370	BP70W (1,0)
738940380	BP70W (1,1)
738940390	BP70W (1,2)
738940400	BP70W (1,3)
738940410	BP70W (1,4)
738940420	BP70W (1,5)
738940430	BP70W (1,6)
738940440	BP70W (1,7)
738940450	BP70W (1,8)
738940460	BP70W (1,9)

738940470	BP70W (2,0)
738940480	BP70W (2,1)
738940490	BP70W (2,2)
738940500	BP70W (2,3)
738940510	BP70W (2,7)
738940520	BP70W (3,2)
738940530	BP70W (3,5)
738940540	BP95W (0,9)
738940550	BP95W (1,0)
738940560	BP95W (1,1)
738940570	BP95W (1,2)
738940580	BP95W (1,3)
738940590	BP95W (1,4)
738940600	BP95W (1,5)
738940610	BP95W (1,6)
738940620	BP95W (1,7)
738940630	BP95W (1,8)
738940640	BP95W (1,9)
738940650	BP95W (2,0)
738940660	BP95W (2,1)
738940670	BP95W (2,2)
738940680	BP95W (2,3)
738940690	BP95W (2,7)
738940700	BP95W (3,2)
738940710	BP95W (3,5)
738940720	BP110W (0,9)
738940730	BP110W (1,0)
738940740	BP110W (1,1)
738940750	BP110W (1,2)
738940760	BP110W (1,3)
738940770	BP110W (1,4)
738940780	BP110W (1,5)
738940790	BP110W (1,6)
738940800	BP110W (1,7)
738940810	BP110W (1,8)
738940820	BP110W (1,9)
738940830	BP110W (2,0)
738940840	BP110W (2,1)
738940850	BP110W (2,2)
738940860	BP110W (2,3)

738940870	BP110W (2,7)
738940880	BP110W (3,2)
738940890	BP110W (3,5)
738940900	BP115W (0,9)
738940910	BP115W (1,0)
738940920	BP115W (1,1)
738940930	BP115W (1,2)
738940940	BP115W (1,3)
738940950	BP115W (1,4)
738940960	BP115W (1,5)
738940970	BP115W (1,6)
738940980	BP115W (1,7)
738940990	BP115W (1,8)
738941000	BP115W (1,9)
738941010	BP115W (2,0)
738941020	BP115W (2,1)
738941030	BP115W (2,2)
738941040	BP115W (2,3)
738941050	BP115W (2,7)
738941060	BP115W (3,2)
738941070	BP115W (3,5)
738941080	BP120W (0,9)
738941090	BP120W (1,0)
738941100	BP120W (1,1)
738941110	BP120W (1,2)
738941120	BP120W (1,3)
738941130	BP120W (1,4)
738941140	BP120W (1,5)
738941150	BP120W (1,6)
738941160	BP120W (1,7)
738941170	BP120W (1,8)
738941180	BP120W (1,9)
738941190	BP120W (2,0)
738941200	BP120W (2,1)
738941210	BP120W (2,2)
738941220	BP120W (2,3)
738941230	BP120W (2,7)
738941240	BP120W (3,2)
738941250	BP120W (3,5)
738941260	BP125W (0,9)

738941270	BP125W (1,0)
738941280	BP125W (1,1)
738941290	BP125W (1,2)
738941300	BP125W (1,3)
738941310	BP125W (1,4)
738941320	BP125W (1,5)
738941330	BP125W (1,6)
738941340	BP125W (1,7)
738941350	BP125W (1,8)
738941360	BP125W (1,9)
738941370	BP125W (2,0)
738941380	BP125W (2,1)
738941390	BP125W (2,2)
738941400	BP125W (2,3)
738941410	BP125W (2,7)
738941420	BP125W (3,2)
738941430	BP125W (3,5)
738941440	BP150W (0,9)
738941450	BP150W (1,0)
738941460	BP150W (1,1)
738941470	BP150W (1,2)
738941480	BP150W (1,3)
738941490	BP150W (1,4)
738941500	BP150W (1,5)
738941510	BP150W (1,6)
738941520	BP150W (1,7)
738941530	BP150W (1,8)
738941540	BP150W (1,9)
738941550	BP150W (2,0)
738941560	BP150W (2,1)
738941570	BP150W (2,2)
738941580	BP150W (2,3)
738941590	BP150W (2,7)
738941600	BP150W (3,2)
738941610	BP150W (3,5)
738941620	BP155W (0,9)
738941630	BP155W (1,0)
738941640	BP155W (1,1)
738941650	BP155W (1,2)
738941660	BP155W (1,3)

738941670	BP155W (1,4)
738941680	BP155W (1,5)
738941690	BP155W (1,6)
738941700	BP155W (1,7)
738941710	BP155W (1,8)
738941720	BP155W (1,9)
738941730	BP155W (2,0)
738941740	BP155W (2,1)
738941750	BP155W (2,2)
738941760	BP155W (2,3)
738941770	BP155W (2,7)
738941780	BP155W (3,2)
738941790	BP155W (3,5)
738941800	BP180W (0,9)
738941810	BP180W (1,0)
738941820	BP180W (1,1)
738941830	BP180W (1,2)
738941840	BP180W (1,3)
738941850	BP180W (1,4)
738941860	BP180W (1,5)
738941870	BP180W (1,6)
738941880	BP180W (1,7)
738941890	BP180W (1,8)
738941900	BP180W (1,9)
738941910	BP180W (2,0)
738941920	BP180W (2,1)
738941930	BP180W (2,2)
738941940	BP180W (2,3)
738941950	BP180W (2,7)
738941960	BP180W (3,2)
738941970	BP180W (3,5)

▪ BCC

Código	Modelo
732260000	BCC77C (5,0)
736040000	BCC77M (5,0)
736060000	BCC77P (5,0)
736080000	BCC80C (5,0)
732240000	BCC80M (5,0)

736070000	BCC80P (5,0)
736090000	BCC85C (5,0)
736050000	BCC85M (5,0)
732250000	BCC85P (5,0)

▪ BCCR

Código	Modelo
732270000	BCCR44R (2,3)

▪ BCCS

Código	Modelo
732280000	BCCS44R (2,3)
732280010	BCCS67NS (2,3)
732280020	BCCS84Q (3,1)
732280030	BCCS85A (3,1)
732280040	BCCS89L (2,3)
732280050	BCCS102SU (2,3)
732280060	BCCS112SU (2,3)
732280070	BCCS90SM (2,8)
732280080	BCCS94SM (2,8)
732280090	BCCS103SM (2,8)
732280100	BCCS65S (2,3)
732280110	BCCS74S (2,3)
732280250	BCCS85S (3,1)
732280120	BCCS95S (2,3)
732280130	BCCS77S (3,1)
732280140	BCCS80S (3,1)
732280150	BCCS85S (3,1)
732280160	BCCS101S (3,1)
732280170	BCCS95X (2,3)
732280180	BCCS65SU (2,3)
732280190	BCCS85Y (2,3)
732280200	BCCS67Y (1,5)
732280210	BCCS61S (2,6)
732280220	BCCS64SU (2,3)
732280230	BCCS67Y (1,1)
732280240	BCCS67Y (1,2)

▪ **BCCC**

Código	Modelo
738750010	BCCC82Y (1,9)
738750020	BCCC85Y (2,2)
738750030	BCCC96Y (2,9)
738750040	BCCC51E (2,3)
738750050	BCCC96S (2,9)
738750060	BCCC89L (2,2)
738750070	BCCC84L (1,9)
738750080	BCCC65S (2,2)
738750090	BCCC101S (2,7)
738750100	BCCC94SM (2,7)
738750110	BCCC112SU (2,7)
738750120	BCCC94SS (2,2)
738750130	BCCC108L (2,2)
738750140	BCCC84Q (3,1)
738750150	BCCC102S (3,1)

▪ **BCCQ**

Código	Modelo
738760000	BCCQ67H (2,3)



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

n.º ANVISA: 80356130025 - Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-18R Rev.: 08