



CATÁLOGO

Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ



Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ

O Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ foi desenvolvido para procedimentos de trauma, osteotomia e artrode-se nas diversas regiões do pé. As placas possuem geometria anatômica e perfil baixo, o que elimina a necessi-

dade de conformação, facilita o procedi-mento cirúrgico, minimiza proeminências e confere maior conforto ao paciente. Além disso, estão presentes em diversos tamanhos e diferentes orientações, a fim de se adaptar as diversas anatomias dos

pacientes. Seus furos bloqueados e de compressão são posicionados de mane-ira estratégica, proporcionando máxima estabilidade de fixação, mesmo em casos complexos.

CARACTERÍSTICAS DAS PLACAS

- Fabricadas em liga de titânio ASTM F136 e anodizadas;
- Contorno anatômico e baixo perfil, redu-zindo proeminências e minimizando a irri-tação dos tecidos moles;
- Compatíveis com todos os modelos de pa-rafusos blocantes e não-blocantes;
- Possuem três orientações (direita, esquerda e única), identificadas através de color-coding:

Direita - Anodizadas na cor dourada.
Esquerda - Anodizadas na cor rosa.
Universal - Anodizadas na cor verde.

- As placas de Osteotomia são anodizadas na cor verde água.

Parafusos Blocantes e Não-Blocantes

Todos os parafusos são indistintamente compatíveis com as placas que compõem este sistema. Suas extremidades possuem encaixe do tipo Hexalobular.

PARAFUSOS BLOCANTES

Projetados para serem utilizados nos furos bloqueados. Possuem rosca especialmente desenhadas para fixação na porção cortical do osso.

Diâmetro da Rosca Distal	Diâmetro da Rosca Proximal	Comprimento
		mín. → máx.
Ø 2,7 mm	Ø 5,1 mm	8 mm → 30 mm
Ø 3,5 mm	Ø 5,1 mm	8 mm → 50 mm

PARAFUSOS NÃO-BLOCANTES

Projetados para serem utilizados nos furos de compressão ou bloqueados. Possuem rosca especialmente desenhadas para fixação na porção esponjosa do osso.

Diâmetro da Rosca Distal	Diâmetro da Rosca Proximal	Comprimento
		mín. → máx.
Ø 2,7 mm	Ø 5,0 mm	8 mm → 30 mm
Ø 3,5 mm	Ø 5,0 mm	8 mm → 50 mm
Ø 4,0 mm	Ø 5,0 mm	8 mm → 60 mm

ANGULAÇÃO DE 15°
Flexibilidade na inserção do parafuso na estrutura óssea.

Implantes identificados por Color Coding

Ø2,7	Ø3,5	Ø4,0
------	------	------

Rosca Distal

Rosca Proximal

Encaixe Hexalobular

Parafuso Não Blocante - Ø 2.7 mm


Parafuso Blocante - Ø 2.7 mm

Parafuso Não Blocante - Ø 3.5 mm

Parafuso Blocante - Ø 3.5 mm

Parafuso Não Blocante - Ø 4.0 mm

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

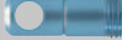

FASTPIN

*O FastPin é um acessório compatível com os orifícios bloqueados do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ. O FastPin permite a interconexão do Sistema de Placas de Fixação Rígida Feet RZ a um parafuso de compressão canulado PG Razek (modelos D3.0), proporcionando compressão adicional na artrode-se.



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Placa para Osteotomia de Cotton e Evans – OTC

Utilizada em procedimentos para correção do pé chato, através de osteotomias em cunha no calcâneo (Evans) e no cuneiforme medial (Cotton).

- Coloração: verde água
- Espessura: 1,5 mm
- Variações do espaçamento da cunha: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 (mm)

MODELOS

- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 23 x 2 mm - OTC 00-A-02-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 25 x 4 mm - OTC 00-A-04-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 26 x 5 mm - OTC 00-A-05-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 27 x 6 mm - OTC 00-A-06-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 28 x 7 mm - OTC 00-A-07-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 29 x 8 mm - OTC 00-A-08-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 31 x 10 mm - OTC 00-A-10-U
- OSTEOTOMIA DE COTTON E EVANS**
2 Furos - 33 x 12 mm - OTC 00-A-12-U



Placa para Osteotomia de Bunion – OTB

Utilizada em procedimentos para correção do Halux Valgus, através de osteotomia em cunha na base do primeiro metatarso.

- Coloração: verde água
- Espessura: 1,5 mm
- Variações do espaçamento da cunha: 2, 3, 4, 5 e 6 (mm)

MODELOS

- OSTEOTOMIA DE BUNION**
4 Furos 32 x 2 mm - OTB 00-A-02-U
- OSTEOTOMIA DE BUNION**
4 Furos 33 x 3 mm - OTB 00-A-03-U
- OSTEOTOMIA DE BUNION**
4 Furos 34 x 4 mm - OTB 00-A-04-U
- OSTEOTOMIA DE BUNION**
4 Furos 35 x 5 mm - OTB 00-A-05-U
- OSTEOTOMIA DE BUNION**
4 Furos 36 x 6 mm - OTB 00-A-06-U



Placa para Osteotomia de Calcanhar – OIC

Utilizada em procedimentos para correção do valgismo do retropé, através de osteotomia de deslizamento no calcâneo.

- Coloração: verde água
- Espessura: 1,8 mm
- Variações da altura para osteotomia: 6, 8 e 10 (mm)

MODELOS

- **OSTEOTOMIA DE CALCANHAR**
5 FUROS 24 X 6 MM - OIC 00-A-06-U
- **OSTEOTOMIA DE CALCANHAR**
5 FUROS 24 X 8 MM - OIC 00-A-08-U
- **OSTEOTOMIA DE CALCANHAR**
5 FUROS 24 X 10 MM - OIC 00-A-10-U




Placa para Osteotomia Calcanhar Intraóssea Angular – OCI

Utilizada em procedimentos para correção do valgismo do retropé, através de osteotomia de deslizamento no calcâneo.

- Coloração: verde água
- Espessura: 2,3 mm

MODELO

- **OSTEOTOMIA DE CALCANHAR INTRAÓSSEA ANGULAR**
5 FUROS 22 MM - OCI 50-A-05-U

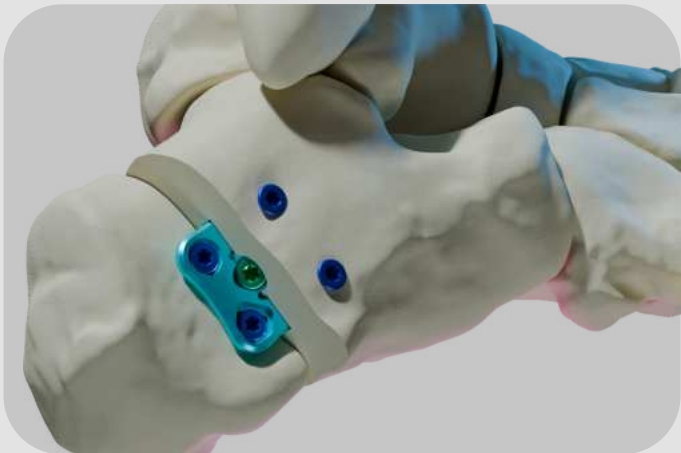

Placa em Gancho para o Quinto Metatarso – GQM


A Placa de Gancho do Quinto Metatarso (GQM) é usada em procedimentos para tratar fraturas proximais do quinto metatarso.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,3 mm
- Direção: direita e esquerda

*Compatível com Parafuso de Compressão Canulado PG Razek (modelo D3,0 com cabeça)

MODELOS

- **GANCHO PARA O QUINTO METATARSO**
6 Furos Angular Direita 56mm (GQM 50-D-06-U)
- **GANCHO PARA O QUINTO METATARSO**
6 Furos Angular Esquerda 56mm (GQM 50-E-06-U)
- **GANCHO PARA O QUINTO METATARSO**
5 Furos Angular Direita 42mm (GQM 50-D-05-U)
- **GANCHO PARA O QUINTO METATARSO**
5 Furos Angular Esquerda 42mm (GQM 50-E-05-U)

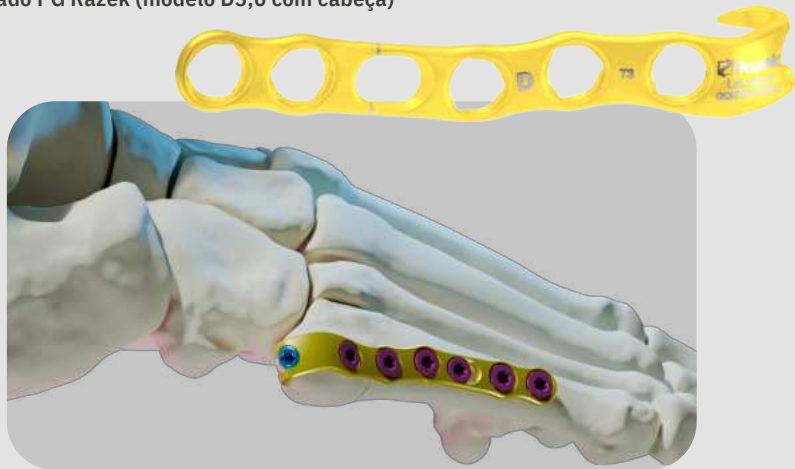


Placa para Fusão de Lapidus Angular – LPD

A Placa de Fusão de Lapidus (LPD) é usada em procedimentos para corrigir o Hallux Valgus por meio da fusão da primeira articulação metatarsocuneiforme usando a técnica de Lapidus.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,4 mm – 1,6 mm
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
5 Furos Angular Direita 40 x 3mm (LPD 50-D-03-S)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
5 Furos Angular Esquerda 40 x 3mm (LPD 50-E-03-S)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
5 Furos Angular Direita 40 x 2mm (LPD 50-D-02-S)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
5 Furos Angular Esquerda 40 x 2mm (LPD 50-E-02-S)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
5 Furos Angular Direita 40 x 0mm (LPD 50-D-00-S)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
5 Furos Angular Esquerda 40 x 0mm (LPD 50-E-00-S)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
7 Furos Angular Direita 45mm (LPD 50-D-00-C)
- **FUSÃO DE LAPIDUS ANGULAR**
7 Furos Angular Esquerda 45mm (LPD 50-E-00-C)

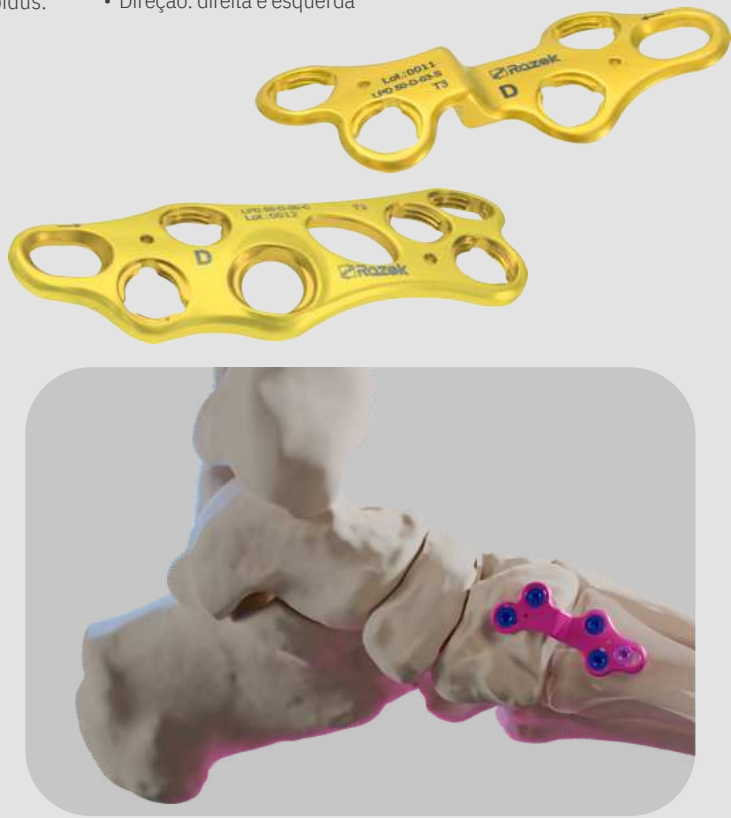


Placa de Fíbula Distal Angular – FDL

A Placa de Fíbula Distal (FDL) é usada em procedimentos para tratar fraturas de tornozelo na região distal da fíbula.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,5 mm – 2,0 mm
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **FÍBULA DISTAL ANGULAR**
10 Furos Angular Direita 113mm (FDL 50-D-10-U)
- **FÍBULA DISTAL ANGULAR**
10 Furos Angular Esquerda 113mm (FDL 50-E-10-U)
- **FÍBULA DISTAL ANGULAR**
9 Furos Angular Direita 100mm (FDL 50-D-09-U)
- **FÍBULA DISTAL ANGULAR**
9 Furos Angular Esquerda 100mm (FDL 50-E-09-U)
- **FÍBULA DISTAL ANGULAR**
8 Furos Angular Direita 87mm (FDL 50-D-08-U)
- **FÍBULA DISTAL ANGULAR**
8 Furos Angular Esquerda 87mm (FDL 50-E-08-U)

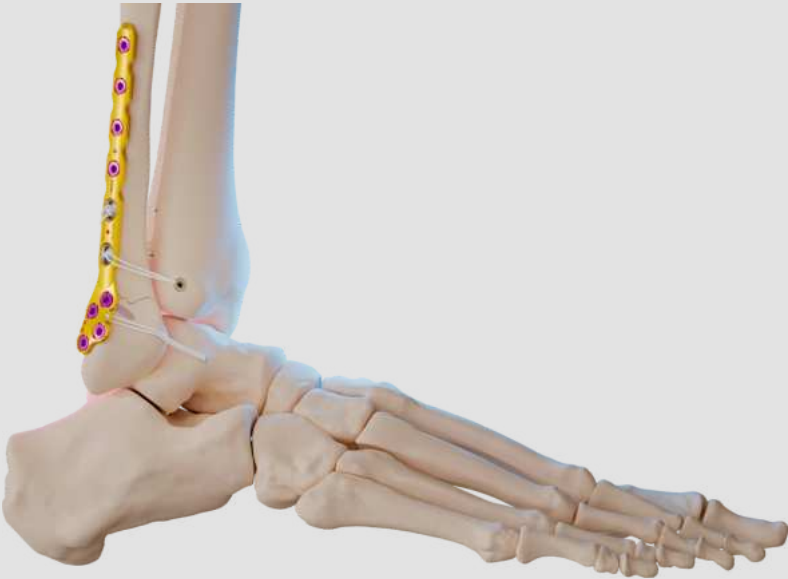

Placa para Fusão Metatarsofalangeal – MTP

Utilizada em procedimentos para tratamen- to do Hallux Rigidus, através da fusão da pri- meira articulação metatarsofalangeal.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,4 mm
- Tamanho da placa: P e M
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **FUSÃO METATARSOFALANGEAL**
6 Furos Direita 45 mm - MTP 05-D-00-U
- **FUSÃO METATARSOFALANGEAL**
6 Furos Esquerda 45 mm - MTP 05-E-00-U
- **FUSÃO METATARSOFALANGEAL**
6 Furos Direita 50 mm - MTP 50-D-00-U
- **FUSÃO METATARSOFALANGEAL**
6 Furos Esquerda 50 mm - MTP 50-E-00-U



Placa para Fusão de Metatarso Cuneiforme – MTC

Utilizada em procedimentos de fusão dos os- sos cuneiforme medial e primeiro metatarso.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,4 mm
- Tamanho da placa: P e M
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **FUSÃO DE METATARSO CUNEIFORME**
5 Furos Direita 39 mm - MTC 05-D-00-U
- **FUSÃO DE METATARSO CUNEIFORME**
5 Furos Esquerda 39 mm - MTC 05-E-00-U
- **FUSÃO DE METATARSO CUNEIFORME**
5 Furos Direita 42 mm - MTC 50-D-00-U
- **FUSÃO DE METATARSO CUNEIFORME**
5 Furos Esquerda 42 mm - MTC 50-E-00-U



Placa para Fusão Colunar Medial – MCF

Utilizada em procedimentos para tratamento do pé de Charcot, através da fusão dos ossos navi- cular, cuneiforme medial e primeiro metatarso.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,4 mm
- Tamanho da placa: P e M
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **FUSÃO COLUNAR MEDIAL**
9 Furos Direita 61 mm - MCF 05-D-00-U
- **FUSÃO COLUNAR MEDIAL**
9 Furos Esquerda 61 mm - MCF 05-E-00-U
- **FUSÃO COLUNAR MEDIAL**
9 Furos Direita 66 mm - MCF 50-D-00-U
- **FUSÃO COLUNAR MEDIAL**
9 Furos Esquerda 66 mm - MCF 50-E-00-U



Placa para Fusão Tarsometatarsal – TMT

Utilizada em procedimentos de tratamento da Fratura de Lisfranc, através de fusões dos ossos do tarso e do metatarso.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,4 mm
- Tamanho da placa: P e M
- Direção: direita e esquerda
- Inserção nos metatarsos: 1º e 2º - 2º e 3º
- Geometria: curva e plana

MODELOS

- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Curva 4 Furos Esquerda 36 mm - TMT 05-E-12-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Curva 4 Furos Direita 36 mm - TMT 05-D-12-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Curva 4 Furos Esquerda 41 mm - TMT 50-E-12-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Curva 4 Furos Direita 41 mm - TMT 50-D-12-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Plana 4 Furos Esquerda 36 mm - TMT 05-E-12-P
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Plana 4 Furos Direita 36 mm - TMT 05-D-12-P
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Plana 4 Furos Esquerda 41 mm - TMT 50-E-12-P
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
12 Plana 4 Furos Direita 41 mm - TMT 50-D-12-P

Obs: Placas para Fusão Tarsometatarsal 1ºe 2º

- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Curva 4 Furos Esquerda 35 mm - TMT 05-E-23-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Curva 4 Furos Direita 35 mm - TMT 05-D-23-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Curva 4 Furos Esquerda 38 mm - TMT 50-E-23-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Curva 4 Furos Direita 38 mm - TMT 50-D-23-C
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Plana 4 Furos Esquerda 35 mm - TMT 05-E-23-P
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Plana 4 Furos Direita 35 mm - TMT 05-D-23-P
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Plana 4 Furos Esquerda 38 mm - TMT 50-E-23-P
- **FUSÃO TAROMETATARSAL**
23 Plana 4 Furos Direita 38 mm - TMT 50-D-23-P

Obs: Placas para Fusão Tarsometatarsal 2ºe 3º



Nº ANVISA: 80356130162 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Placa Universal Simples Compressão – PSU

Utilizada nos mais diversos procedimentos de fraturas e fusões dos ossos do pé.

- Coloração: verde (única)
- Espessura: 1,4 mm
- Tamanho da placa: P, M e G
- Quantidade de furos: 2 e 3
- Forma de estabilização: compressão e fixação

MODELOS

- **UNIVERSAL SIMPLES COMPRESSÃO**
2 Furos 21 mm - PSU 05-A-02-C
- **UNIVERSAL SIMPLES COMPRESSÃO**
2 Furos 29 mm - PSU 50-A-02-C
- **UNIVERSAL SIMPLES COMPRESSÃO**
3 Furos 36 mm - PSU 95-A-03-C
- **UNIVERSAL SIMPLES COMPRESSÃO**
2 Furos 37 mm - PSU 95-A-02-C
- **UNIVERSAL SIMPLES FIXAÇÃO**
2 Furos 27 mm - PSU 50-A-02-F



Placa Universal em Y – PCY

Utilizada nos mais diversos procedimentos de fraturas e fusões dos ossos do pé.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: 1,4 mm
- Tamanho da placa: P e M
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **UNIVERSAL EM Y**
4 Furos Direita 37 mm - PCY 05-D-00-U
- **UNIVERSAL EM Y**
4 Furos Esquerda 37 mm - PCY 05-E-00-U
- **UNIVERSAL EM Y**
6 Furos Direita 53 mm - PCY 50-D-00-U
- **UNIVERSAL EM Y**
6 Furos Esquerda 53 mm - PCY 50-E-00-U



Nº ANVISA: 80356130162 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Placa Universal Dupla – PCU

Utilizada nos mais diversos procedimentos de fraturas e fusões dos ossos do pé.

- Coloração: verde (única), dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: PCU 00-A-14-U / PCU 00-A-11-U
PCU 00-A-08-U 1,8 mm (abas) e 2,3 mm (corpo)
- Demais placas: 1,8 mm
- Quantidade de furos: 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 14

MODELOS

- **UNIVERSAL DUPLA**
4 Furos Direita 29 mm - PCU 00-D-04-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
4 Furos Esquerda 29 mm - PCU 00-E-04-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
5 Furos Direita 35 mm - PCU 00-D-05-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
5 Furos Esquerda 35 mm - PCU 00-E-05-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
6 Furos Direita 48 mm - PCU 00-D-06-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
6 Furos Esquerda 48 mm - PCU 00-E-06-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
7 Furos 60 mm - PCU 00-A-07-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
8 Furos 66 mm - PCU 00-A-08-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
11 Furos 94 mm - PCU 00-A-11-U
- **UNIVERSAL DUPLA**
14 Furos 122 mm - PCU 00-A-14-U



Nº ANVISA: 80356130162 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Placa Posterior de Calcânhar – PPC

Utilizada em procedimentos para tratamento de fraturas no calcâneo.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: mínima 1,4 mm e máxima: 2,3 mm
- Tamanho da placa: P, M e G
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **POSTERIOR DE CALCANHAR**
13 Furos Esquerda 59 mm - PPC 05-E-00-U
- **POSTERIOR DE CALCANHAR**
13 Furos Direita 59 mm - PPC 05-D-00-U
- **POSTERIOR DE CALCANHAR**
13 Furos Esquerda 70 mm - PPC 50-E-00-U
- **POSTERIOR DE CALCANHAR**
13 Furos Direita 70 mm - PPC 50-D-00-U
- **POSTERIOR DE CALCANHAR**
14 Furos Esquerda 80 mm - PPC 95-E-00-U
- **POSTERIOR DE CALCANHAR**
14 Furos Direita 80 mm - PPC 95-D-00-U



Nº ANVISA: 80356130162 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Placa Simples Posterior de Calcânhar – PSC

Utilizada em procedimentos para tratamen- to de fraturas no calcâneo, através de abor- dagem percutânea.

- Coloração: dourada (direita) e rosa (esquerda)
- Espessura: mínima 1,4 mm e máxima: 2,3 mm
- Tamanho da placa: P, M e G
- Direção: direita e esquerda

MODELOS

- **SIMPLES POSTERIOR DE CALCANHAR**
8 Furos Esquerda 59 mm - PSC 05-E-00-U
- **SIMPLES POSTERIOR DE CALCANHAR**
8 Furos Direita 59 mm - PSC 05-D-00-U
- **SIMPLES POSTERIOR DE CALCANHAR**
8 Furos Esquerda 70 mm - PSC 50-E-00-U
- **SIMPLES POSTERIOR DE CALCANHAR**
8 Furos Direita 70 mm - PSC 50-D-00-U
- **SIMPLES POSTERIOR DE CALCANHAR**
9 Furos Esquerda 80 mm - PSC 95-E-00-U
- **SIMPLES POSTERIOR DE CALCANHAR**
9 Furos Direita 80 mm - PSC 95-D-00-U



Nº ANVISA: 80356130162 IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS



ESCANEE O
QR CODE PARA
SABER MAIS.

 www.razek.com.br

 +55 16 2107 2345

 +55 16 2107 2346