


# Sistema de Placas de Fixação Rígida Upper Treat RZ

PT-BR N.º ANVISA: 80356130215

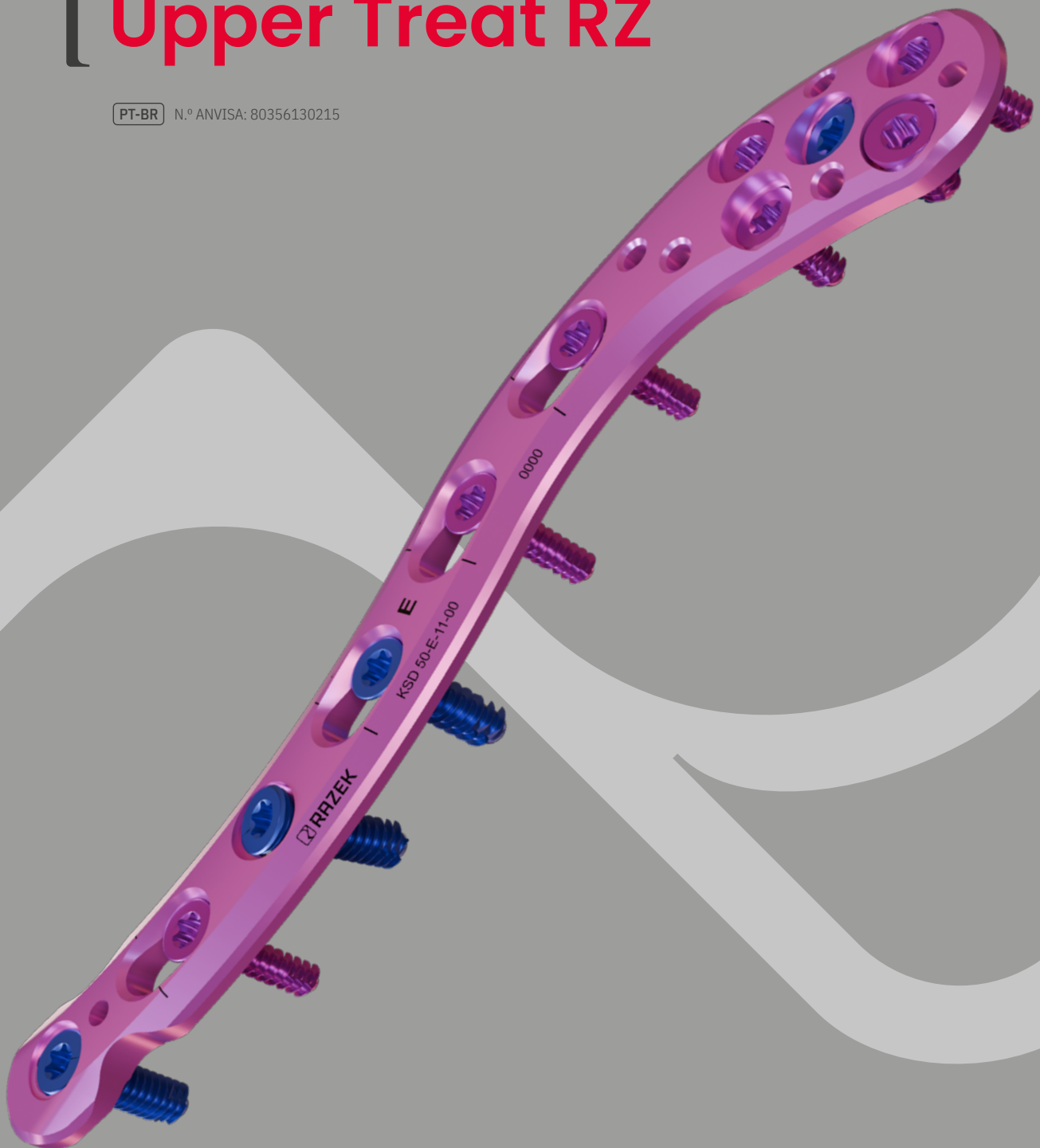

## FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Sistema de Placas de Fixação Rígida Upper Treat RZ foi desenvolvido para osteossíntese dos membros superiores. É um sistema de fixação rígida, composto por placas de titânio fixadas por parafusos, proporcionando estabilização e fixação estável dos fragmentos ósseos, inclusive em casos de ossos osteopênicos.

As placas do subsistema KlavFix foram desenvolvidas para o tratamento de fraturas da clavícula, possuem geometria anatômica e baixo perfil. São Subdivididas em três classes: Placa Anterior, Placa Superior Medial e Placa Superior Distal.

Esse produto é apresentado em vários tipos e tamanhos de placas e parafusos, compatíveis entre si, para que o cirurgião faça sua escolha de acordo com as diferentes estruturas anatômicas do paciente.

## Características das Placas KlavFix

- Fabricados em liga de titânio ASTM F136 e anodizadas;
- Contorno anatômico e baixo perfil, reduzindo proeminências e minimizando a irritação dos tecidos moles;
- Compatíveis com todos os modelos de parafusos blocantes UT e não-blocantes UT.

POSSUEM TRÊS ORIENTAÇÕES IDENTIFICADAS POR COLOR-CODING

DIREITA: Anodizadas na cor dourada

ESQUERDA: Anodizadas na cor rosa

ÚNICA: Anodizadas na cor verde

 **RAZEK**

## Parafusos Blocantes UT e Não-Blocantes UT

### PARAFUSOS BLOCANTES UT


Bloqueio proximal e/ou distal da placa, podendo ou não fornecer estabilidade angular, dependendo de como é realizada a inserção.

Diâmetro da Rosca Distal	Diâmetro da Rosca Proximal	Comprimento	
		min.	máx.
Ø 2,7 mm	Ø 5,1 mm	8 mm	24 mm
Ø 3,5 mm	Ø 5,1 mm	8 mm	24 mm

### PARAFUSOS NÃO-BLOCANTES UT

Utilizar para realizar compressão através do furo de compressão da placa com o intuito de facilitar a consolidação da fratura ou fusão. Pode ser utilizado também para fixação neutra através dos furos de bloqueio.

Diâmetro da Rosca Distal	Diâmetro da Rosca Proximal	Comprimento	
		min.	máx.
Ø 2,7 mm	Ø 5,0 mm	8 mm	24 mm
Ø 3,5 mm	Ø 5,0 mm	8 mm	24 mm

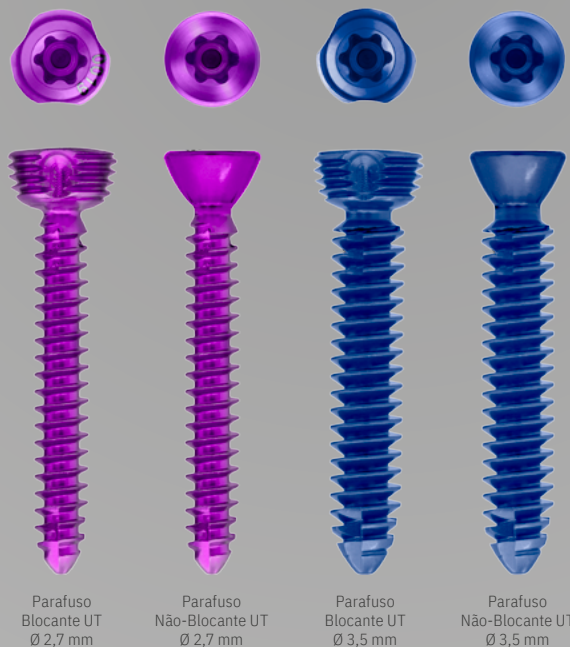


IMPLANTES IDENTIFICADOS POR COLOR CODING

Ø 2,7

Ø 3,5

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

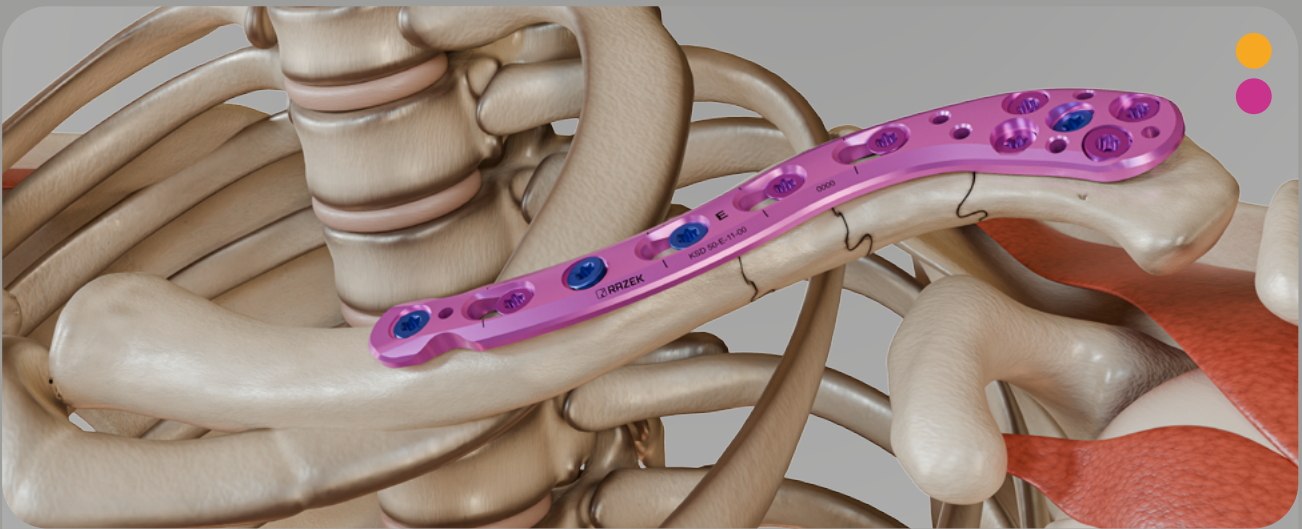


## Placa KlavFix Superior Distal – KSD

### INDICAÇÃO

Utilizadas para fraturas do terço distal, incluindo fraturas do tipo I (sem rompimento de ligamentos) e fraturas do tipo II (com rompimento do coracoclavicular).

### MODELOS

- **KLAVFIX SUPERIOR DISTAL**  
Placa KlavFix Superior Distal 5+6 Furos Direita 100 mm (KSD 50-D-11-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR DISTAL**  
Placa KlavFix Superior Distal 5+6 Furos Esquerda 100 mm (KSD 50-E-11-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR DISTAL**  
Placa KlavFix Superior Distal 5+5 Furos Direita 84 mm (KSD 50-D-10-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR DISTAL**  
Placa KlavFix Superior Distal 5+5 Furos Esquerda 84 mm (KSD 50-E-10-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR DISTAL**  
Placa KlavFix Superior Distal 5+3 Furos Direita 64 mm (KSD 50-D-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR DISTAL**  
Placa KlavFix Superior Distal 5+3 Furos Esquerda 64 mm (KSD 50-E-08-00)

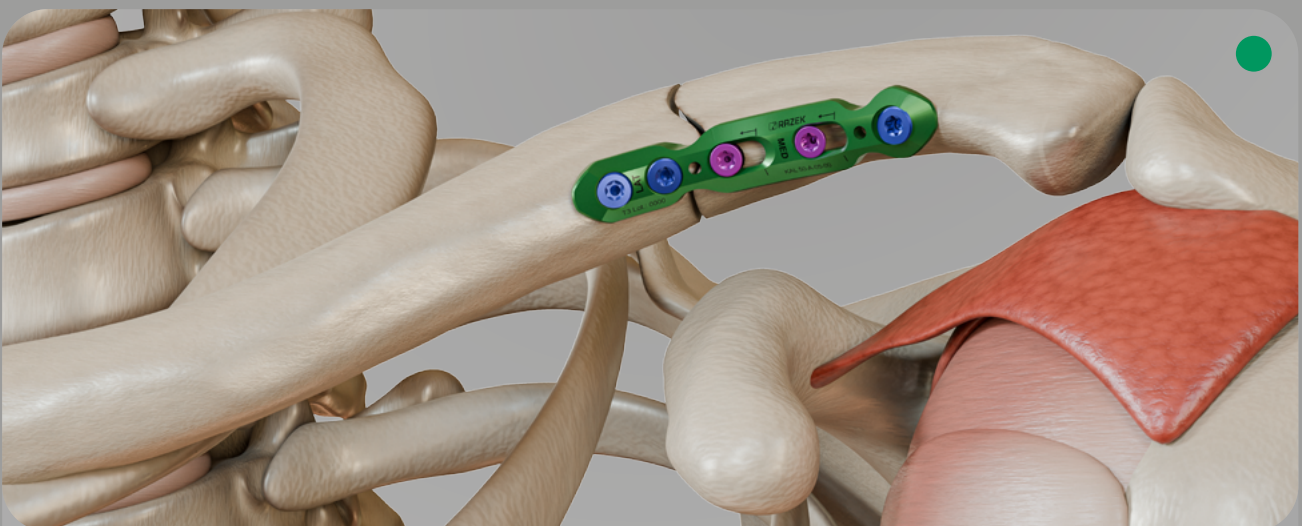


## Placa KlavFix Anterior Lateral – KAL

### INDICAÇÃO

Utilizadas para fraturas extra-articulares do terço distal.

### MODELOS

- **KLAVFIX ANTERIOR LATERAL**  
Placa KlavFix Anterior Lateral 07 Furos 77 mm (KAL 50-A-07-00)
- **KLAVFIX ANTERIOR LATERAL**  
Placa KlavFix Anterior Lateral 05 Furos 57 mm (KAL 50-A-05-00)

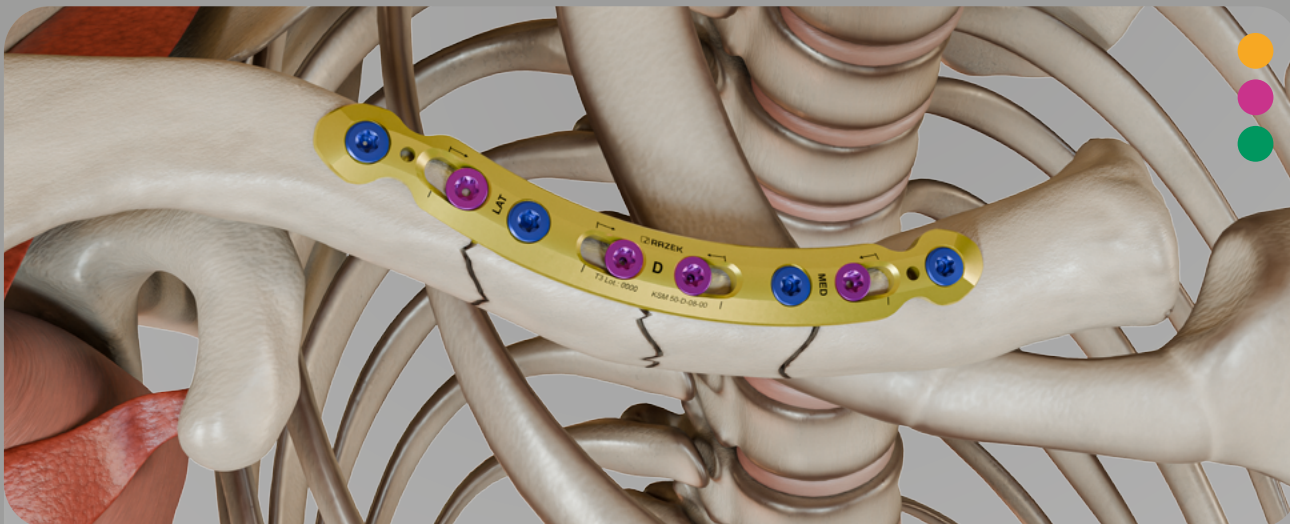

## Placa KlavFix Superior Medial – KSM

### INDICAÇÃO

Utilizada para fraturas do terço médio em geral.

### MODELOS

- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 08 Furos Direita 88 mm (KSM 05-D-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 08 Furos Esquerda 88 mm (KSM 05-E-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 08 Furos Direita 95 mm (KSM 50-D-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 08 Furos Esquerda 95 mm (KSM 50-E-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 08 Furos Direita 99 mm (KSM 95-D-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 08 Furos Esquerda 99 mm (KSM 95-E-08-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 06 Furos Curva 75 mm (KSM 50-C-06-00)
- **KLAVFIX SUPERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Superior Medial 06 Furos Reta 76 mm (KSM 50-R-06-00)




## Placa KlavFix Anterior Medial – KAM

### INDICAÇÃO

Utilizada para fraturas do terço médio em geral.

### MODELOS

- **KLAVFIX ANTERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Anterior Medial 08 Furos 97 mm (KAM 50-A-08-00)
- **KLAVFIX ANTERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Anterior Medial 06 Furos 78 mm (KAM 50-A-06-00)
- **KLAVFIX ANTERIOR MEDIAL**  
Placa KlavFix Anterior Medial 06 Furos 67 mm (KAM 05-A-06-00)

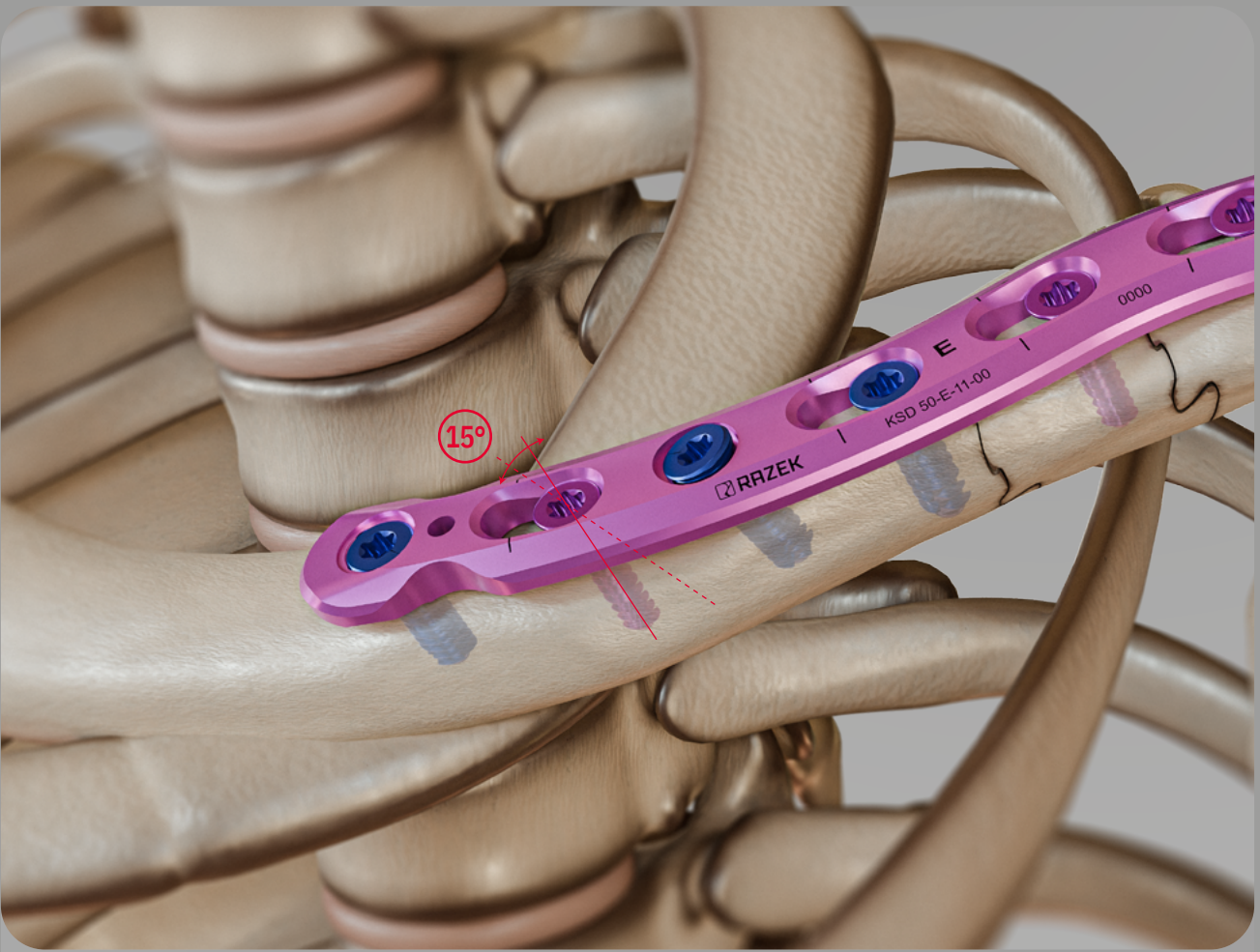


**Parafusos UT oferecem maior flexibilidade, permitindo inserção com até 15° de angulação.**


As **Placas KlavFix** apresentam orifícios blocantes e não blocantes, oferecendo versatilidade no momento da fixação. **Os parafusos Blocantes e Não-Blocantes UT podem ser inseridos com uma angulação de até 15°**, permitindo alcançar fragmentos ósseos e fixá-los à placa com precisão.

O **Sistema de Placas de Fixação Rígida Upper Treat RZ** contempla ambos os tipos de parafusos — Blocantes UT e Não-Blocantes UT — os quais são compatíveis com todas as placas KlavFix do Sistema, garantindo estabilidade e adaptabilidade ao procedimento cirúrgico.

 **RAZEK**

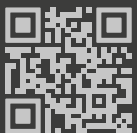

ESCANEE O  
QR CODE PARA  
SABER MAIS.

 [www.razek.com.br](http://www.razek.com.br)

 +55 16 2107 2345

 +55 16 2107 2346