



[Suturas Razek

PT-BR N.º ANVISA: 80356130214 e 80356130217

Rev. 00.0


FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O FastFit Suture Razek é indicado para a sutura, a aproximação e a ligação de tecidos moles, em cirurgias ortopédicas. Os fios de sutura da família FastFit Suture Razek são fornecidos trançados e em comprimento pré-cortados. Estão presentes na forma de fios e de laço.


MODELOS:

- Modelos com 2 agulhas possuem fios de sutura USP 5 em diferentes cores para utilizações combinadas, carregados com uma agulha distinta em cada extremidade, proporcionando maior versatilidade e abrangência de aplicações durante os procedimentos cirúrgicos. São disponibilizadas a **Agulha Ponta Cilíndrica** e a **Agulha Corte Reverso**.
- A **Agulha Ponta Cilíndrica** é indicada para procedimentos que requerem delicadeza, precisão e reduzido trauma tecidual, enquanto a **Agulha Corte Reverso** é indicada para perfuração de tecidos moles mais robustos, como tendões, ligamentos e pequenos fragmentos ósseos.
- Os modelos em laço reduzem os danos causados por múltiplas passagens da agulha e são carregados com uma agulha.
- Modelo USP 2 possui **Agulha Ponta Cilíndrica Reta**, com penetração atraumática que preserva as fibras teciduais, indicado para captura e tração de tecidos moles, especialmente enxertos tendíneos.
- Modelo USP 5 possui **Agulha Tapercut**, que tem ponta com arestas afiadas e corpo cônico, proporcionando facilidade de penetração em tecidos de maior resistência, com menor efeito traumático ao longo do corpo da agulha.

[FastFit Suture Razek

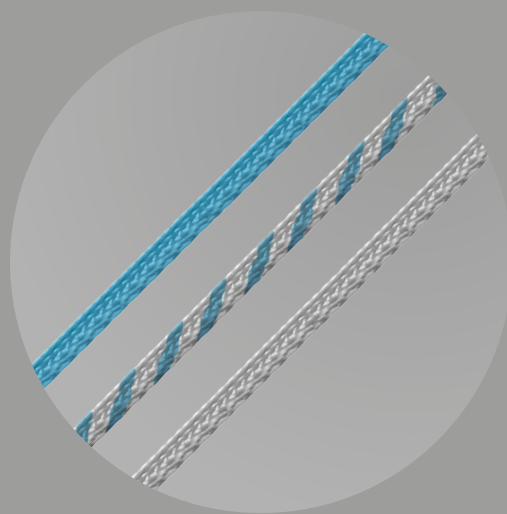


Modelos de fios com diferentes cores de suturas para utilizações combinadas.

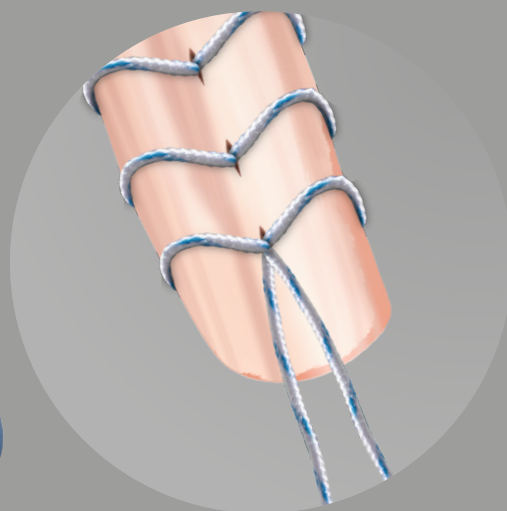

MODELOS EM LAÇO

Reduzem os danos causados por múltiplas passagens da agulha.

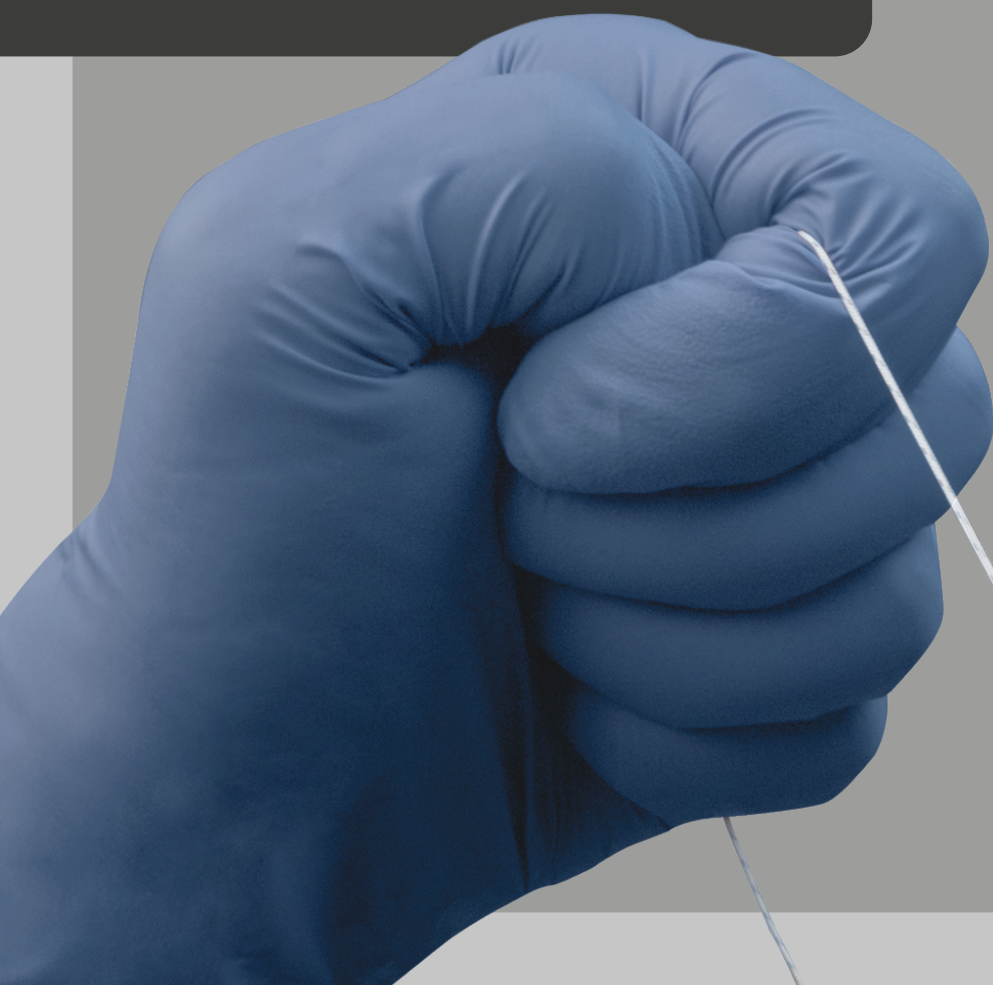



[FastFit Suture II Razeq

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O FastFit Suture II Razeq é indicado para a sutura, a aproximação e a ligação de tecidos moles, incluindo tecidos de autoenxerto e aloenxerto, em cirurgias ortopédicas. Os fios e fitas de sutura da família FastFit Suture II Razeq são fornecidos trançados e em comprimento pré-cortados, cumprindo ou excedendo os requisitos USP (United States Pharmacopeia) e da norma ABNT NBR 13904. Os fios estão disponíveis nos modelos **USP 2-0, USP 0, USP 1, USP 2 e USP 5**, enquanto as fitas estão disponíveis nas larguras de **1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm e 5,0 mm**. Essa variedade permite a seleção do produto de acordo com as características do tecido, a resistência requerida e a técnica cirúrgica empregada.




[FITAS

Fitas de Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular (UHMWPE)

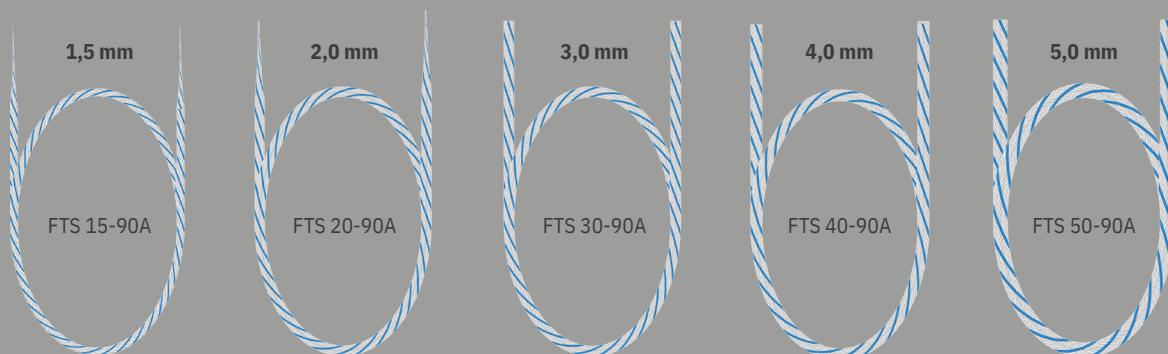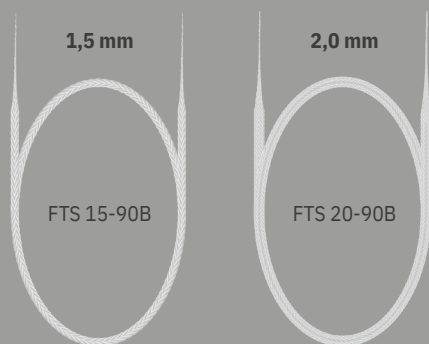

[FIOS


Fios de Polietileno de Ultra-Alto Peso Molecular (UHMWPE)

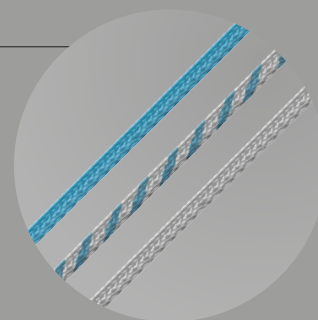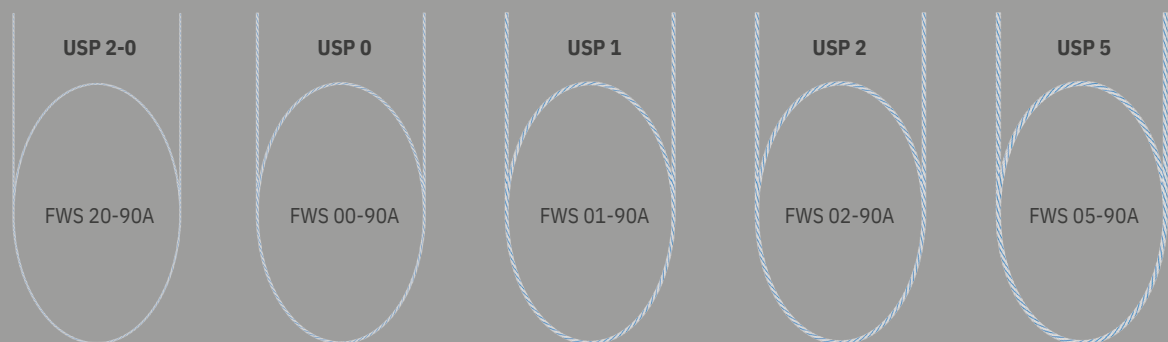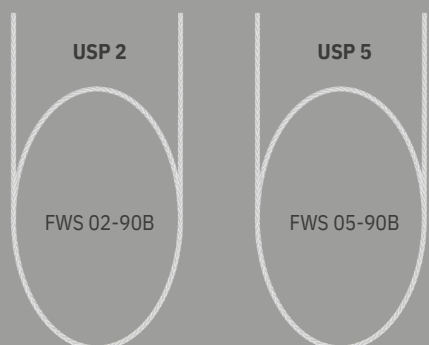

Modelos de fios e fitas com diferentes cores de suturas para utilizações combinadas.




REPARO DA RUPTURA DO
TENDÃO DE AQUILES -
RESTORELINK

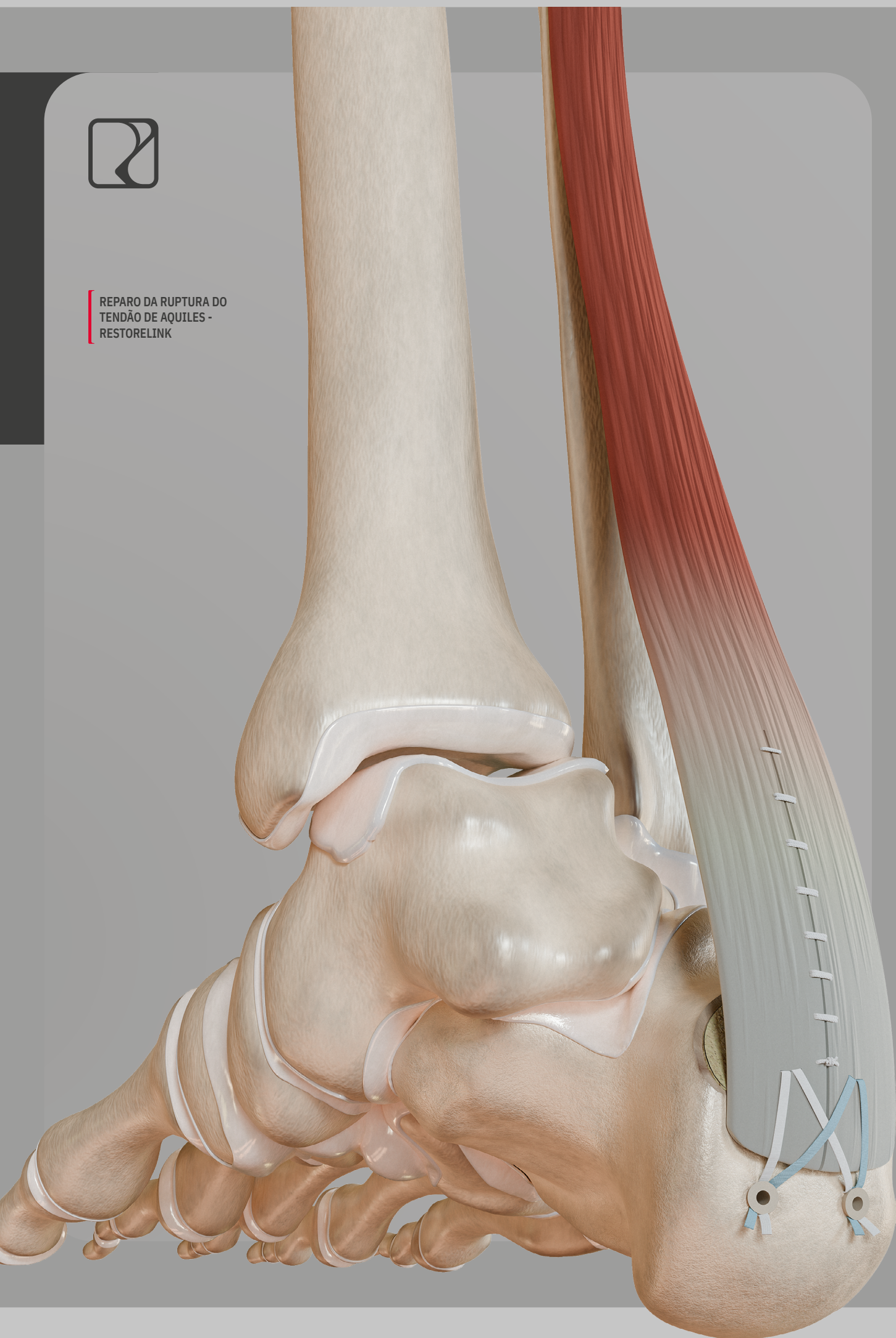


REPARO LCA + LIGAMENTO
COLATERAL LATERAL



REPARO DA RUPTURA
DO MANGUITO ROTADOR

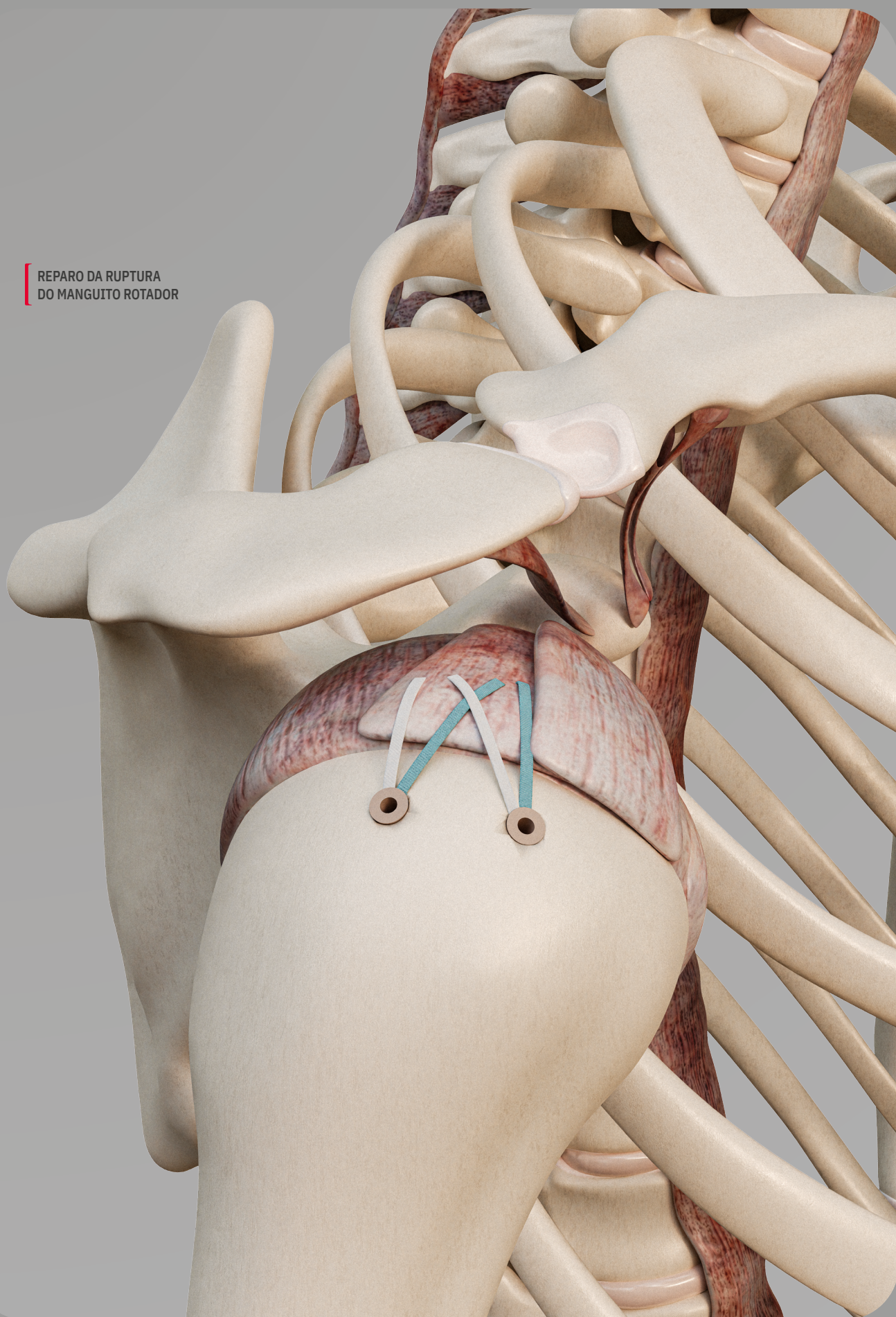

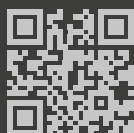

ESCANEIE O
QR CODE PARA
SABER MAIS.

 www.razek.com.br

 +55 16 2107 2345

 +55 16 2107 2346